


Ball Head Technology®

Pioneers in Angulation




**CATÁLOGO DE PRODUCTO
PRÓTESIS CONVENCIONAL**

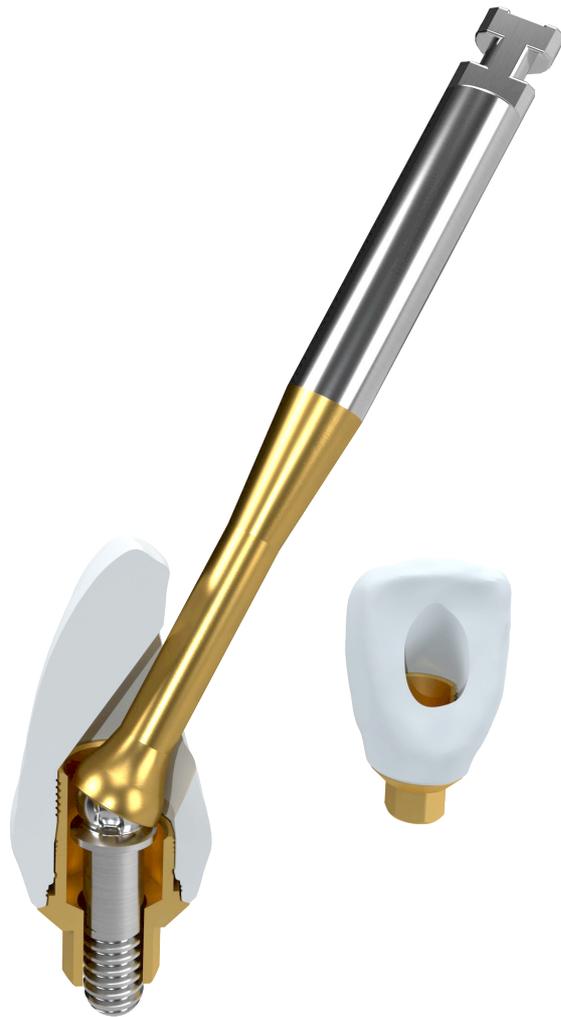

30° DE LIBERTAD




La evolución hacia la personalización en el diseño de prótesis dentales requiere cada vez más el uso de pilares angulados para proporcionar versatilidad, simplicidad y facilidad de uso. Nuestras soluciones son pioneras en cubrir estas necesidades.

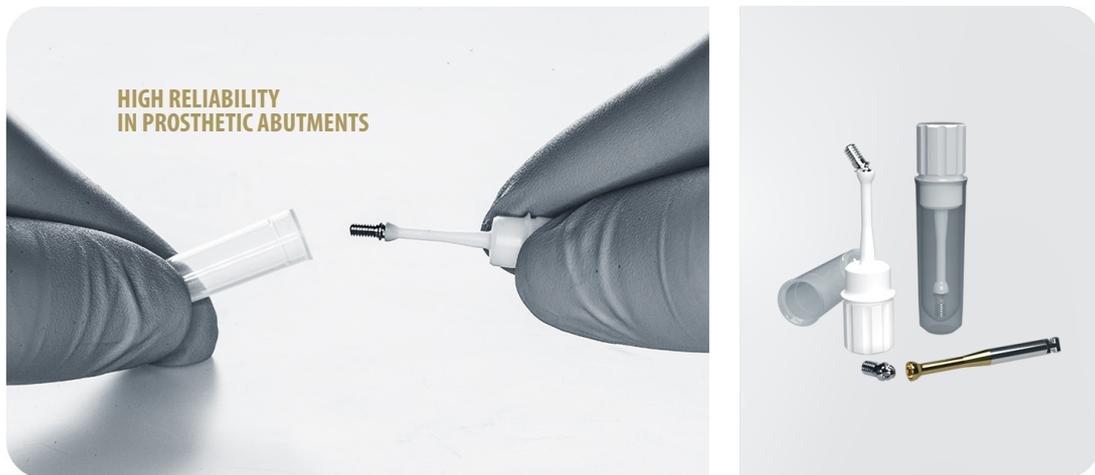

**HIGH RELIABILITY
IN PROSTHETIC ABUTMENTS**

Nuestro objetivo principal es lograr la excelencia para generar seguridad, confiabilidad y comodidad al usar nuestros productos, tanto para el laboratorio dental como para los profesionales clínicos, responsables del tratamiento del paciente.

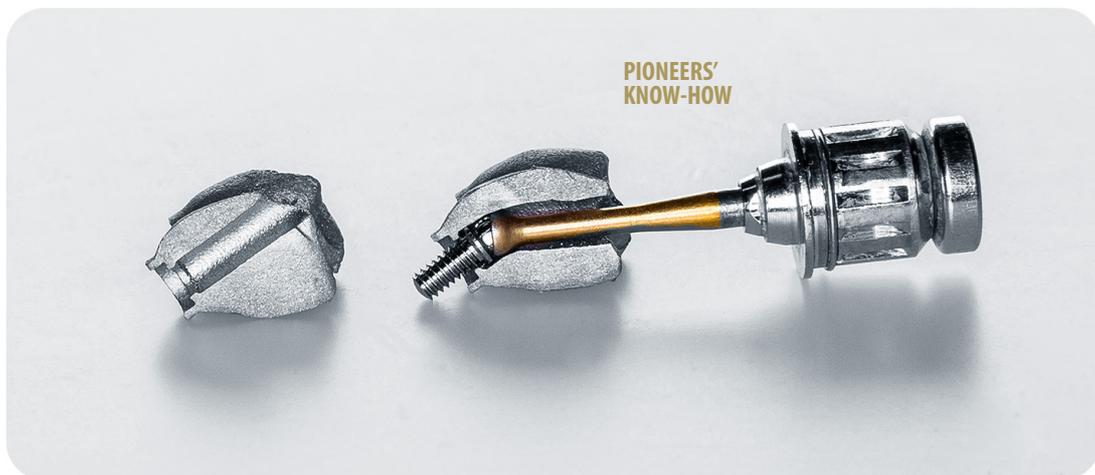

**PIONEERS'
KNOW-HOW**

Desde nuestra primera patente en 2008, hemos desarrollado las soluciones angulares más eficientes e innovadoras basadas en la visión y experiencia de los profesionales de restauración y cirugía oral más calificados.

ÍNDICE

1.0 PRÓTESIS CONVENCIONAL	
1.1 COLADO DIRECTO	5
1.2 SOBRECOLDADO A BASE CrCo	6
1.3 CEMENTADO A BASE Ti	7/32
2.0 DESTORNILLADOR BHS30	33
3.0 PROTOCOLOS	34/41
4.0 TABLA DE COMPATIBILIDADES	42

Av. de Les Garrigues 17
25001 Lleida · Spain
(+34) 973 831 391
info@ballheadtechnology.com
www.ballheadtechnology.com

All names and trademarks used in this catalogue have been registered and are property of their respective companies.
Images published are merely intended for commercial purposes and have no contractual nature.
The information contained in this catalogue is aimed exclusively to professionals in the dental sector.
Ball Head Technology® reserves the right to make changes to this document without prior notice.
The guarantee conditions of Ball Head Technology® will apply as long as the instructions for each reference are respected.



1.1 COLADO DIRECTO



SIMPLICIDAD ES EFICIENCIA

Rotatorio y no-rotatorio para todos los principales sistemas de implantes.

Superficie continua para un fácil encerado y fundición.

Diseño de canal de tornillo optimizado.

Corrección de ángulo de 10, 20 y 30°.

Perfil de emergencia óptimo.

Cuidado de tejidos blandos.

1.2 SOBRECOLIDADO BASE CrCo




PRECISIÓN Y SEGURIDAD PARA SUS RESTAURACIONES

- Superficie continua para un fácil encerado, fundición y sobremoldeo.
- Diseño cónico para restauraciones múltiples y pared plana atractiva para piezas individuales.
- Perfil de emergencia óptimo. Cuidado de tejidos blandos.
- Diseño de canal de tornillo de acceso optimizado.
- Corrección de ángulo de 10, 20 y 30°.
- Altura óptima que permite una angulación de 30° para un destornillador BHS.
- Empuñadura de guía para retención axial moldeable BHS y movimiento de rotación libre.
- Pasadores de retención y empuñadura de guía que permite la retención axial.
- Diseño rotatorio y no rotatorio para restauraciones múltiples y únicas.

AB IMPLANTS COMPATIBLE

I SERIES INTERNAL HEX	PLATAFORMA Ø	∠	CALCINABLE		CHIMENEA	BASE CrCo		TORNILLO + TRANSP	TORNILLO BHS	RÉPLICA IMPLANTE
			⬡	○		⬡	○			
	NARROW Ø 3 - 3,75	30°	BHS07230	BHS07231	BHS04056	BHS03200	BHS03201	BHS02041	BHS02042	BHS08951A
		20°	BHS07232	BHS07233	BHS04057					
		10°	BHS07234	BHS07235	BHS04058					
	STANDARD Ø 3,5 - 6,0	30°	BHS07073	BHS07074	BHS04056	BHS03050	BHS03051	BHS02021	BHS02022	BHS08321A
		20°	BHS07075	BHS07076	BHS04057					
		10°	BHS07077	BHS07078	BHS04058					
10C CONUS 	RP Ø 4,2	30°	BHS07067	BHS07068	BHS04104	BHS03046	BHS03047	BHS02023	BHS02024	BHS08312A
		20°	BHS07069	BHS07070	BHS04105					
		10°	BHS07071	BHS07072	BHS04106					

ACE COMPATIBLE

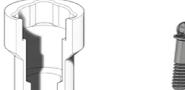INFINITY EXTERNAL HEX	PLATAFORMA Ø	∠	CALCINABLE		CHIMENEA	BASE CrCo		TORNILLO + TRANSP	TORNILLO BHS	RÉPLICA IMPLANTE
			⬡	○		⬡	○			
	NP Ø 3,3 / 3,75	30°	BHS07010	BHS07011				BHS02005	BHS02006	BHS08611A
		20°	BHS07012	BHS07013						
		10°	BHS07014	BHS07015						
	RP Ø 4,0	30°	BHS07001	BHS07002	BHS04001	BHS03003	BHS03004	BHS02001	BHS02002	BHS08612A
		20°	BHS07004	BHS07005	BHS04005					
		10°	BHS07007	BHS07008	BHS04009					
	WP Ø 5,0	30°	BHS07061	BHS07062				BHS02001	BHS02002	BHS08613A
		20°	BHS07063	BHS07064						
		10°	BHS07065	BHS07066						
INFINITY TRI-CAM 	NP Ø 3,5	30°	BHS07091	BHS07092				BHS02027	BHS02028	BHS08111A
		20°	BHS07093	BHS07094						
		10°	BHS07095	BHS07096						
	RP Ø 4,3	30°	BHS07016	BHS07017				BHS02009	BHS02010	BHS08112A
		20°	BHS07031	BHS07032						
		10°	BHS07046	BHS07047						
	WP Ø 5,0	30°	BHS07115	BHS07116				BHS02009	BHS02010	BHS08113A
		20°	BHS07117	BHS07118						
		10°	BHS07119	BHS07120						
INFINITY INTERNAL HEX 	NP Ø 3,7 / 4,1	30°	BHS07073	BHS07074	BHS04056	BHS03050	BHS03051	BHS02021	BHS02022	BHS08321A
		20°	BHS07075	BHS07076	BHS04057					
		10°	BHS07077	BHS07078	BHS04058					
	RP Ø 4,7 / 5,1	30°	BHS07024	BHS07025	BHS04026	BHS03033	BHS03034	BHS02021	BHS02022	BHS08322A
		20°	BHS07039	BHS07040	BHS04039					
		10°	BHS07054	BHS07055	BHS04053					

ADIN COMPATIBLE

SWELL	PLATAFORMA Ø	∠	CALCINABLE		CHIMENEA	BASE CrCo		TORNILLO + TRANSP	TORNILLO BHS	RÉPLICA IMPLANTE
			⬡	○		⬡	○			
	Ø 3,5 - 6	30°	BHS07073	BHS07074	BHS04056	BHS03050	BHS03051	BHS02021	BHS02022	BHS08321A
		20°	BHS07075	BHS07076	BHS04057					
		10°	BHS07077	BHS07078	BHS04058					
TOUAREG S/OS 	Ø 3,5 - 6	30°	BHS07073	BHS07074	BHS04056	BHS03050	BHS03051	BHS02021	BHS02022	BHS08321A
		20°	BHS07075	BHS07076	BHS04057					
		10°	BHS07077	BHS07078	BHS04058					

TOUAREG CLOSEFIT		PLATAFORMA Ø	∠	CALCINABLE		CHIMENEA	BASE CrCo		TORNILLO + TRANSP	TORNILLO BHS	RÉPLICA IMPLANTE
	Ø 3,5	30°		BHS07079	BHS07080	BHS04068					
		20°		BHS07081	BHS07082	BHS04069	BHS03058	BHS03059	BHS02025	BHS02026	BHS08311A
		10°		BHS07083	BHS07084	BHS04070					
	Ø 4,3 / 5	30°		BHS07067	BHS07068	BHS04104					
		20°		BHS07069	BHS07070	BHS04105	BHS03046	BHS03047	BHS02023	BHS02024	BHS08312A
		10°		BHS07071	BHS07072	BHS04106					

ALPHABIO COMPATIBLE

EXTERNAL ALPHABIO		PLATAFORMA Ø	∠	CALCINABLE		CHIMENEA	BASE CrCo		TORNILLO + TRANSP	TORNILLO BHS	RÉPLICA IMPLANTE
	NP Ø 3,5	30°		BHS07010	BHS07011						
		20°		BHS07012	BHS07013				BHS02005	BHS02006	BHS08611A
		10°		BHS07014	BHS07015						
	RP Ø 4,1	30°		BHS07001	BHS07002	BHS04001					
		20°		BHS07004	BHS07005	BHS04005	BHS03003	BHS03004	BHS02001	BHS02002	BHS08612A
		10°		BHS07007	BHS07008	BHS04009					
	WF Ø 5,1	30°		BHS07218	BHS07219						
		20°		BHS07220	BHS07221				BHS02039	BHS02040	BHS08213A
		10°		BHS07222	BHS07223						
INTERNAL ALPHABIO		Ø 3,3 - 6	30°	BHS07073	BHS07074	BHS04056					
20°	BHS07075		BHS07076	BHS04057	BHS03050	BHS03051	BHS02021	BHS02022	BHS08321A		
10°	BHS07077		BHS07078	BHS04058							

ALPHA DENT COMPATIBLE

ACTIVE		PLATAFORMA Ø	∠	CALCINABLE		CHIMENEA	BASE CrCo		TORNILLO + TRANSP	TORNILLO BHS	RÉPLICA IMPLANTE
	Ø 3,75 / 4,2 / 5,0	30°		BHS07073	BHS07074	BHS04056					
		20°		BHS07075	BHS07076	BHS04057	BHS03050	BHS03051	BHS02021	BHS02022	BHS08321A
		10°		BHS07077	BHS07078	BHS04058					
ACTIVE PLUS		Ø 4,2 / 5,0	30°	BHS07073	BHS07074	BHS04056					
20°	BHS07075		BHS07076	BHS04057	BHS03050	BHS03051	BHS02021	BHS02022	BHS07073		
10°	BHS07077		BHS07078	BHS04058							
CLASSIC		Ø 3,3 / 3,75 / 4,2 / 5,0	30°	BHS07073	BHS07074	BHS04056					
20°	BHS07075		BHS07076	BHS04057	BHS03050	BHS03051	BHS02021	BHS02022	BHS08321A		
10°	BHS07077		BHS07078	BHS04058							

ANCLADEN COMPATIBLE

ANCLALOCK		PLATAFORMA Ø	∠	CALCINABLE		CHIMENEA	BASE CrCo		TORNILLO + TRANSP	TORNILLO BHS	RÉPLICA IMPLANTE
	Ø 3,75 - 5	30°		BHS07073	BHS07074	BHS04056					
		20°		BHS07075	BHS07076	BHS04057	BHS03050	BHS03051	BHS02021	BHS02022	BHS08321A
		10°		BHS07077	BHS07078	BHS04058					

ANTHOGYR COMPATIBLE

ANTHOFIT HE		PLATAFORMA Ø	∠	CALCINABLE		CHIMENEA	BASE CrCo		TORNILLO + TRANSP	TORNILLO BHS	REPLICA IMPLANTE
		RP Ø 4,1	30°	BHS07001	BHS07002	BHS04001 BHS04005 BHS04009	BHS03003	BHS03004	BHS02001	BHS02002	BHS08612A
			20°	BHS07004	BHS07005						
			10°	BHS07007	BHS07008						
		WP Ø 5,0	30°	BHS07061	BHS07062				BHS02001	BHS02002	BHS08613A
			20°	BHS07063	BHS07064						
			10°	BHS07065	BHS07066						
		RP Ø 4,8	30°	BHS07020	BHS07021				BHS02011	BHS02012	BHS08712A
			20°	BHS07035	BHS07036						
			10°	BHS07050	BHS07051						
		SYN_RP Ø 4,8	30°	BHS07022	BHS07023				BHS02013	BHS02014	BHS08713A
			20°	BHS07037	BHS07038						
			10°	BHS07052	BHS07053						

ARDS COMPATIBLE

SMART		PLATAFORMA Ø	∠	CALCINABLE		CHIMENEA	BASE CrCo		TORNILLO + TRANSP	TORNILLO BHS	REPLICA IMPLANTE
		Ø 3,75 - 4,5	30°	BHS07073	BHS07074	BHS04056 BHS04057 BHS04058	BHS03050	BHS03051	BHS02021	BHS02022	BHS08321A
			20°	BHS07075	BHS07076						
			10°	BHS07077	BHS07078						
		Ø 3,3 - 6	30°	BHS07073	BHS07074	BHS04056 BHS04057 BHS04058	BHS03050	BHS03051	BHS02021	BHS02022	BHS08321A
			20°	BHS07075	BHS07076						
			10°	BHS07077	BHS07078						
		Ø 3,3 - 6	30°	BHS07073	BHS07074	BHS04056 BHS04057 BHS04058	BHS03050	BHS03051	BHS02021	BHS02022	BHS08321A
			20°	BHS07075	BHS07076						
			10°	BHS07077	BHS07078						

ASTRA COMPATIBLE

AQUA		PLATAFORMA Ø	∠	CALCINABLE		CHIMENEA	BASE CrCo		TORNILLO + TRANSP	TORNILLO BHS	REPLICA IMPLANTE
		RP Ø 3.5 / 4.0	30°	BHS07097	BHS07098	BHS04086 BHS04087 BHS04088	BHS03070	BHS03071	BHS02025	BHS02026	BHS08122A
			20°	BHS07099	BHS07100						
			10°	BHS07101	BHS07102						
		WP Ø 4.5 / 5.0	30°	BHS07130	BHS07131				BHS02009	BHS02010	BHS08123A
			20°	BHS07132	BHS07133						
			10°	BHS07134	BHS07135						
		Ø 3,5	30°		BHS07103				BHS02003	BHS02004	BHS08124A
			20°		BHS07104						
			10°		BHS07105						
		Ø 3,5	30°		BHS07106				BHS02003	BHS02004	BHS08125A
			20°		BHS07107						
			10°		BHS07108						

EV	PLATAFORMA Ø	∠	CALCINABLE		CHIMENEA	BASE CrCo		TORNILLO +TRANSP	TORNILLO BHS	REPÚBLICA IMPLANTE
	Ø 3,6	30°	BHS07269	BHS07270	BHS04056	BHS03154	BHS03155	BHS02053	BHS02054	BHS08152A
		20°	BHS07271	BHS07272	BHS04057					
		10°	BHS07273	BHS07274	BHS04058					
	Ø 4,2	30°	BHS07263	BHS07264	BHS04056	BHS03158	BHS03159	BHS02055	BHS02056	BHS08153A
		20°	BHS07265	BHS07266	BHS04057					
		10°	BHS07267	BHS07268	BHS04058					


AVINENT COMPATIBLE

HE	PLATAFORMA Ø	∠	CALCINABLE		CHIMENEA	BASE CrCo		TORNILLO +TRANSP	TORNILLO BHS	REPÚBLICA IMPLANTE
	NP Ø 3,5	30°	BHS07010	BHS07011				BHS02031	BHS02032	BHS08611A
		20°	BHS07012	BHS07013						
		10°	BHS07014	BHS07015						
	RP Ø 4,1	30°	BHS07001	BHS07002	BHS04001	BHS03003	BHS03004	BHS02001	BHS02002	BHS08612A
		20°	BHS07004	BHS07005	BHS04005					
		10°	BHS07007	BHS07008	BHS04009					
	WP Ø 5,1	30°	BHS07218	BHS07219				BHS02039	BHS02040	BHS08213A
		20°	BHS07220	BHS07221						
		10°	BHS07222	BHS07223						
IH	Ø 3,5 / 4,1	30°	BHS07073	BHS07074	BHS04056	BHS03050	BHS03051	BHS02021	BHS02022	BHS08321A
		20°	BHS07075	BHS07076	BHS04057					
		10°	BHS07077	BHS07078	BHS04058					
MULTIUNIT	Ø 3,5	30°		BHS07003	BHS04002		BHS03008	BHS02003	BHS02004	BHS08411A
		20°		BHS07006	BHS04006					
		10°		BHS07009	BHS04010					
OCEAN CONICAL (C.C)	Ø 3,5 Implant Ø 3,5 / Ø 4,0	30°	BHS07079	BHS07080	BHS04068	BHS03058	BHS03059	BHS02025	BHS02026	BHS08311A
		20°	BHS07081	BHS07082	BHS04069					
		10°	BHS07083	BHS07084	BHS04070					
	Ø 4,1 Implant Ø 4,5 / Ø 5,0	30°	BHS07067	BHS07068	BHS04104	BHS03046	BHS03047	BHS02023	BHS02024	BHS08312A
		20°	BHS07069	BHS07070	BHS04105					
		10°	BHS07071	BHS07072	BHS04106					

BEGO COMPATIBLE

EH	PLATAFORMA Ø	∠	CALCINABLE		CHIMENEA	BASE CrCo		TORNILLO +TRANSP	TORNILLO BHS	REPÚBLICA IMPLANTE
	NP Ø 2,7 / 3,1	30°	BHS07148	BHS07149				BHS02013	BHS02014	BHS08421A
		20°	BHS07150	BHS07151						
		10°	BHS07152	BHS07153						
IH	Ø 3,75 / Ø 4,1	30°	BHS07073	BHS07074	BHS04056	BHS03050	BHS03051	BHS02021	BHS02022	BHS08321A
		20°	BHS07075	BHS07076	BHS04057					
		10°	BHS07077	BHS07078	BHS04058					

BIOGENESIS COMPATIBLE

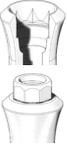3ICON	PLATAFORMA Ø	∠	CALCINABLE		CHIMENEA	BASE CrCo		TORNILLO +TRANSP	TORNILLO BHS	RÉPLICA IMPLANTE	
	NP Ø 3,5	30°	BHS07194	BHS07195				BHS02001	BHS02002	BHS08611A	
		20°	BHS07196	BHS07197							
		10°	BHS07198	BHS07199							
	RP Ø 4,1	30°	BHS07001	BHS07002	BHS04001	BHS03003	BHS03004	BHS02001	BHS02002	BHS08612A	
		20°	BHS07004	BHS07005	BHS04005						
		10°	BHS07007	BHS07008	BHS04009						
	WP Ø 5,0	30°	BHS07061	BHS07062				BHS02001	BHS02002	BHS08613A	
		20°	BHS07063	BHS07064							
		10°	BHS07065	BHS07066							
ITICON 	RP Ø 4,8	30°	BHS07020	BHS07021				BHS02011	BHS02012	BHS08712A	
		20°	BHS07035	BHS07036							
		10°	BHS07050	BHS07051							
	RP Ø 4,8	30°	BHS07022	BHS07023				BHS02013	BHS02014	BHS08713A	
		20°	BHS07037	BHS07038							
		10°	BHS07052	BHS07053							
ATICON 	RP Ø 3,5 / 4,0	30°	BHS07097	BHS07098	BHS04086	BHS03070	BHS03071	BHS02025	BHS02026	BHS08122A	
		20°	BHS07099	BHS07100	BHS04087						
		10°	BHS07101	BHS07102	BHS04088						
	WP Ø 4.5 / 5.0	30°	BHS07130	BHS07131				BHS02009	BHS02010	BHS08123A	
		20°	BHS07132	BHS07133							
		10°	BHS07134	BHS07135							
	KISSES 	RP Ø 3,5 / 4,0	30°	BHS07097	BHS07098	BHS04086	BHS03070	BHS03071	BHS02025	BHS02026	BHS08122A
			20°	BHS07099	BHS07100	BHS04087					
			10°	BHS07101	BHS07102	BHS04088					
WP Ø 4.5/ 5.0 / 5,5		30°	BHS07130	BHS07131				BHS02009	BHS02010	BHS08123A	
		20°	BHS07132	BHS07133							
		10°	BHS07134	BHS07135							
CONO 20° 		RP / WP	30°		BHS07103				BHS02003	BHS02004	BHS08124A
			20°		BHS07104						
			10°		BHS07105						
CONO 45° 	RP / WP	30°		BHS07106				BHS02003	BHS02004	BHS08125A	
		20°		BHS07107							
		10°		BHS07108							

BIOHORIZONS COMPATIBLE

EXTERNAL		PLATAFORMA Ø	∠	CALCINABLE		CHIMENEA	BASE CrCo		TORNILLO + TRANSP	TORNILLO BHS	RÉPLICA IMPLANTE
				⬡	◯		⬡	◯			
	NP Ø 3,7	30°	BHS07236	BHS07237					BHS02031	BHS02032	
		20°	BHS07238	BHS07239							
		10°	BHS07240	BHS07241							
	NP Ø 3,5	30°	BHS07073	BHS07074	BHS04056	BHS03050	BHS03051	BHS02021	BHS02022	BHS08321A	
		20°	BHS07075	BHS07076	BHS04057						
		10°	BHS07077	BHS07078	BHS04058						
	RP Ø 4,5	30°	BHS07024	BHS07025	BHS04026	BHS03033	BHS03034	BHS02021	BHS02022	BHS08322A	
		20°	BHS07039	BHS07040	BHS04039						
		10°	BHS07054	BHS07055	BHS04053						
	WP Ø 5,7	30°	BHS07166	BHS07167				BHS02021	BHS02022	BHS08323A	
		20°	BHS07168	BHS07169							
		10°	BHS07170	BHS07171							

BIOMET 3i COMPATIBLE


EH OSSEOTITE		PLATAFORMA Ø	∠	CALCINABLE		CHIMENEA	BASE CrCo		TORNILLO + TRANSP	TORNILLO BHS	RÉPLICA IMPLANTE
				⬡	◯		⬡	◯			
	NP Ø 3,5	30°	BHS07194	BHS07195					BHS02001	BHS02002	BHS08611A
		20°	BHS07196	BHS07197							
		10°	BHS07198	BHS07199							
	RP Ø 4,1	30°	BHS07001	BHS07002	BHS04001	BHS03003	BHS03004	BHS02001	BHS02002	BHS08612A	
		20°	BHS07004	BHS07005	BHS04005						
		10°	BHS07007	BHS07008	BHS04009						
	WP Ø 5,0	30°	BHS07061	BHS07062				BHS02001	BHS02002	BHS08613A	
		20°	BHS07063	BHS07064							
		10°	BHS07065	BHS07066							
	NP Ø 3,4	30°	BHS07029	BHS07030				BHS02007	BHS02008	BHS08511A	
		20°	BHS07044	BHS07045							
		10°	BHS07059	BHS07060							
	RP Ø 4,1	30°	BHS07018	BHS07019				BHS02007	BHS02008	BHS08512A	
		20°	BHS07033	BHS07034							
		10°	BHS07048	BHS07049							
	WP Ø 5,0	30°	BHS07121	BHS07122				BHS02007	BHS02008	BHS08513A	
		20°	BHS07123	BHS07124							
		10°	BHS07125	BHS07126							

BIONER COMPATIBLE

IKELT / BIKELT		PLATAFORMA Ø	∠	CALCINABLE		CHIMENEA	BASE CrCo		TORNILLO + TRANSP	TORNILLO BHS	RÉPLICA IMPLANTE
				⬡	◯		⬡	◯			
	RP Ø 4,1	30°	BHS07001	BHS07002	BHS04001	BHS03003	BHS03004	BHS02001	BHS02002	BHS08612A	
		20°	BHS07004	BHS07005	BHS04005						
		10°	BHS07007	BHS07008	BHS04009						
	WP Ø 5,0	30°	BHS07061	BHS07062				BHS02001	BHS02002	BHS08613A	
		20°	BHS07063	BHS07064							
		10°	BHS07065	BHS07066							
	WP Ø 5,1	30°	BHS07218	BHS07219				BHS02039	BHS02040	BHS08213A	
		20°	BHS07220	BHS07221							
		10°	BHS07222	BHS07223							

HIKELT	PLATAFORMA Ø	∠	CALCINABLE		CHIMENEA	BASE CrCo		TORNILLO + TRANSP	TORNILLO BHS	REPLICA IMPLANTE
	NP Ø 3,8	30°	BHS07073	BHS07074	BHS04056	BHS03050	BHS03051	BHS02021	BHS02022	BHS08321A
		20°	BHS07075	BHS07076	BHS04057					
		10°	BHS07077	BHS07078	BHS04058					
	RP Ø 4,7	30°	BHS07024	BHS07025	BHS04026	BHS03033	BHS03034	BHS02021	BHS02022	BHS08322A
		20°	BHS07039	BHS07040	BHS04039					
		10°	BHS07054	BHS07055	BHS04053					
TOP DM 	Ø 3,5/4,0/5,0	30°	BHS07079	BHS07080	BHS04068	BHS03058	BHS03059	BHS02025	BHS02026	BHS08311A
		20°	BHS07081	BHS07082	BHS04069					
		10°	BHS07083	BHS07084	BHS04070					
MULTIUNIT 	RP Ø 4,8	30°		BHS07003	BHS04002		BHS03008	BHS02003	BHS02004	BHS08411A
		20°		BHS07006	BHS04006					
		10°		BHS07009	BHS04010					

BTI COMPATIBLE

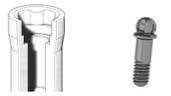HE	PLATAFORMA Ø	∠	CALCINABLE		CHIMENEA	BASE CrCo		TORNILLO + TRANSP	TORNILLO BHS	REPLICA IMPLANTE
  	NP Tiny Ø 3,5	30°	BHS07148	BHS07149				BHS02013	BHS02014	BHS08421A
		20°	BHS07150	BHS07151						
		10°	BHS07152	BHS07153						
	RP Ø 4,1	30°	BHS07001	BHS07002	BHS04001	BHS03003	BHS03004	BHS02001	BHS02002	BHS08612A
		20°	BHS07004	BHS07005	BHS04005					
		10°	BHS07007	BHS07008	BHS04009					
	WP Ø 5,5	30°	BHS07154	BHS07155				BHS02013	BHS02014	BHS08423A
		20°	BHS07156	BHS07157						
		10°	BHS07158	BHS07159						
CUATRILOBULAR 	RP Ø 4,1	30°	BHS07160	BHS07161				BHS02021	BHS02022	BHS08231A
		20°	BHS07162	BHS07163						
		10°	BHS07164	BHS07165						

BTK COMPATIBLE

8NECK INT	PLATAFORMA Ø	∠	CALCINABLE		CHIMENEA	BASE CrCo		TORNILLO + TRANSP	TORNILLO BHS	REPLICA IMPLANTE
	SR Ø 4,8	30°	BHS07020	BHS07021				BHS02011	BHS02012	BHS08712A
		20°	BHS07035	BHS07036						
		10°	BHS07050	BHS07051						
EVO DL EXT   	NP Ø 3,4/ Ø 3,7	30°	BHS07194	BHS07195				BHS02035	BHS02036	BHS08611A
		20°	BHS07196	BHS07197						
		10°	BHS07198	BHS07199						
	RP Ø 4,1/ Ø 4,6	30°	BHS07001	BHS07002	BHS04001	BHS03003	BHS03004	BHS02001	BHS02002	BHS08612A
		20°	BHS07004	BHS07005	BHS04005					
		10°	BHS07007	BHS07008	BHS04009					
	WP Ø 5,0-5,6	30°	BHS07061	BHS07062				BHS02001	BHS02002	BHS08613A
		20°	BHS07063	BHS07064						
		10°	BHS07065	BHS07066						

EVO DL INT		PLATAFORMA Ø	∠	CALCINABLE		CHIMENEA	BASE CrCo		TORNILLO + TRANSP	TORNILLO BHS	REPÚBLICA IMPLANTE
		Ø3,5 / Ø3,7 / Ø4,6 / Ø5,0 / Ø5,6	30°	BHS07073	BHS07074	BHS04056	BHS03050	BHS03051	BHS02021	BHS02022	BHS08321A
			20°	BHS07075	BHS07076	BHS04057					
			10°	BHS07077	BHS07078	BHS04058					
KLASSIC EXT		NP Ø 3,4	30°	BHS07194	BHS07195				BHS02035	BHS02036	BHS08611A
			20°	BHS07196	BHS07197						
			10°	BHS07198	BHS07199						
		RP Ø 4,1	30°	BHS07001	BHS07002	BHS04001	BHS03003	BHS03004	BHS02001	BHS02002	BHS08612A
			20°	BHS07004	BHS07005	BHS04005					
			10°	BHS07007	BHS07008	BHS04009					
		WP Ø 5,0	30°	BHS07061	BHS07062				BHS02001	BHS02002	BHS08613A
			20°	BHS07063	BHS07064						
			10°	BHS07065	BHS07066						
KLASSIC INT		Ø3,5 / Ø4,5 / Ø5,0	30°	BHS07073	BHS07074	BHS04056	BHS03050	BHS03051	BHS02021	BHS02022	BHS08321A
			20°	BHS07075	BHS07076	BHS04057					
			10°	BHS07077	BHS07078	BHS04058					
KONIC EXT		NP Ø 3,4	30°	BHS07194	BHS07195				BHS02035	BHS02036	BHS08611A
			20°	BHS07196	BHS07197						
			10°	BHS07198	BHS07199						
		RP Ø 4,1	30°	BHS07001	BHS07002	BHS04001	BHS03003	BHS03004	BHS02001	BHS02002	BHS08612A
			20°	BHS07004	BHS07005	BHS04005					
			10°	BHS07007	BHS07008	BHS04009					
		WP Ø 5,0	30°	BHS07061	BHS07062				BHS02001	BHS02002	BHS08613A
			20°	BHS07063	BHS07064						
			10°	BHS07065	BHS07066						
KONIC INT		Ø 3,5 / 5,0	30°	BHS07073	BHS07074	BHS04056	BHS03050	BHS03051	BHS02021	BHS02022	BHS08321A
			20°	BHS07075	BHS07076	BHS04057					
			10°	BHS07077	BHS07078	BHS04058					
SAFE TL INT		SR Ø 4,8	30°	BHS07020	BHS07021				BHS02011	BHS02012	BHS08712A
			20°	BHS07035	BHS07036						
			10°	BHS07050	BHS07051						

B&W COMPATIBLE

HEXAGONO EXT		PLATAFORMA Ø	∠	CALCINABLE		CHIMENEA	BASE CrCo		TORNILLO + TRANSP	TORNILLO BHS	REPÚBLICA IMPLANTE
		NP Ø 3,3	30°	BHS07136	BHS07137				BHS02035	BHS02036	BHS08741A
			20°	BHS07138	BHS07139						
			10°	BHS07140	BHS07141						
	RP Ø 4,1	30°	BHS07001	BHS07002	BHS04001	BHS03003	BHS03004	BHS02001	BHS02002	BHS08612A	
		20°	BHS07004	BHS07005	BHS04005						
		10°	BHS07007	BHS07008	BHS04009						
	WP Ø 5,0	30°	BHS07061	BHS07062				BHS02001	BHS02002	BHS08613A	
		20°	BHS07063	BHS07064							
		10°	BHS07065	BHS07066							
HEXAGONO INT		NP Ø 3,3	30°	BHS07073	BHS07074	BHS04056	BHS03050	BHS03051	BHS02021	BHS02022	BHS08321A
			20°	BHS07075	BHS07076	BHS04057					
			10°	BHS07077	BHS07078	BHS04058					
		RP Ø 4,0	30°	BHS07073	BHS07074	BHS04056	BHS03050	BHS03051	BHS02021	BHS02022	BHS08321A
			20°	BHS07075	BHS07076	BHS04057					
			10°	BHS07077	BHS07078	BHS04058					
		WP Ø 5,0	30°	BHS07073	BHS07074	BHS04056	BHS03050	BHS03051	BHS02021	BHS02022	BHS08321A
			20°	BHS07075	BHS07076	BHS04057					
			10°	BHS07077	BHS07078	BHS04058					

CAMLOG COMPATIBLE

CAMLOG	PLATAFORMA Ø	∠	CALCINABLE		CHIMENEA	BASE CrCo		TORNILLO +TRANSP	TORNILLO BHS	RÉPLICA IMPLANTE
			⬡	○		⬡	○			
	Ø 3,3	30°	BHS07275	BHS07276	BHS04056	BHS03130	BHS03131	BHS02049	BHS02050	BHS08721A
		20°	BHS07277	BHS07278	BHS04057					
		10°	BHS07279	BHS07280	BHS04058					
	Ø 3,8	30°	BHS07281	BHS07282	BHS04056	BHS03134	BHS03135	BHS02049	BHS02050	BHS08722A
		20°	BHS07283	BHS07284	BHS04057					
		10°	BHS07285	BHS07286	BHS04058					
	Ø 4,3	30°	BHS07287	BHS07288	BHS04026	BHS03138	BHS03139	BHS02049	BHS02050	BHS08723A
		20°	BHS07289	BHS07290	BHS04039					
		10°	BHS07291	BHS07292	BHS04053					
	Ø 5,0	30°	BHS07293	BHS07294	BHS04065	BHS03142	BHS03143	BHS02051	BHS02052	BHS08724A
		20°	BHS07295	BHS07296	BHS04066					
		10°	BHS07297	BHS07298	BHS04067					

CONEXÃO SIST. PROTESE COMPATIBLE

MORSE INDEXADO	PLATAFORMA Ø	∠	CALCINABLE		CHIMENEA	BASE CrCo		TORNILLO +TRANSP	TORNILLO BHS	RÉPLICA IMPLANTE
			⬡	○		⬡	○			
	Ø3,5 / 3,75 / 4,0 / 5,0	30°	BHS07079	BHS07080	BHS04068	BHS03058	BHS03059	BHS02025	BHS02026	BHS08311A
		20°	BHS07081	BHS07082	BHS04069					
		10°	BHS07083	BHS07084	BHS04070					
HEXAGONO EXT	Ø 3,3	30°	BHS07136	BHS07137				BHS02035	BHS02036	BHS08741A
		20°	BHS07138	BHS07139						
		10°	BHS07140	BHS07141						
	Ø 3,75/4,0	30°	BHS07001	BHS07002	BHS04001	BHS03003	BHS03004	BHS02001	BHS02002	BHS08612A
		20°	BHS07004	BHS07005	BHS04005					
		10°	BHS07007	BHS07008	BHS04009					
	Ø 5,0	30°	BHS07061	BHS07062				BHS02001	BHS02002	BHS08613A
		20°	BHS07063	BHS07064						
		10°	BHS07065	BHS07066						
HEXAGONO INT	Ø3,7 / 4,0/5,0	30°	BHS07024	BHS07025	BHS04026	BHS03033	BHS03034	BHS02021	BHS02022	BHS08322A
		20°	BHS07039	BHS07040	BHS04039					
		10°	BHS07054	BHS07055	BHS04053					

CORTEZ COMPATIBLE

DYNAMIX	PLATAFORMA Ø	∠	CALCINABLE		CHIMENEA	BASE CrCo		TORNILLO +TRANSP	TORNILLO BHS	RÉPLICA IMPLANTE
			⬡	○		⬡	○			
	Ø 3,3 / 3,8 / 4,2 / 5	30°	BHS07073	BHS07074	BHS04056	BHS03050	BHS03051	BHS02021	BHS02022	BHS08321A
		20°	BHS07075	BHS07076	BHS04057					
		10°	BHS07077	BHS07078	BHS04058					
CLASSIX	Ø 3,3 / 3,8 / 4,2 / 5	30°	BHS07073	BHS07074	BHS04056	BHS03050	BHS03051	BHS02021	BHS02022	BHS08321A
		20°	BHS07075	BHS07076	BHS04057					
		10°	BHS07077	BHS07078	BHS04058					
SATURN	Ø 3,8 / 4,2	30°	BHS07073	BHS07074	BHS04056	BHS03050	BHS03051	BHS02021	BHS02022	BHS08321A
		20°	BHS07075	BHS07076	BHS04057					
		10°	BHS07077	BHS07078	BHS04058					

COWELLMEDI COMPATIBLE

EXTERNAL	PLATAFORMA Ø	∠	CALCINABLE		CHIMENEA	BASE CrCo		TORNILLO + TRANSP	TORNILLO BHS	RÉPLICA IMPLANTE
	RP Ø 4,1	30°	BHS07001	BHS07002	BHS04001	BHS03003	BHS03004	BHS02001	BHS02002	BHS08612A
		20°	BHS07004	BHS07005	BHS04005					
		10°	BHS07007	BHS07008	BHS04009					
	WP Ø 5,1	30°	BHS07218	BHS07219				BHS02039	BHS02040	BHS08213A
		20°	BHS07220	BHS07221						
		10°	BHS07222	BHS07223						
INTERNAL	RN Ø 4,8	30°	BHS07020	BHS07021			BHS02011	BHS02012	BHS08712A	
	Ø 3,5 / 4 / 4,5 / 5 / 6	30°	BHS07142	BHS07143	BHS04056	BHS03102	BHS03103	BHS02009	BHS02010	BHS08432A
		20°	BHS07144	BHS07145	BHS04057					
		10°	BHS07146	BHS07147	BHS04058					
SUBMERGED (INT)										
	Ø 3,5 / 4 / 4,5 / 5 / 6	30°	BHS07142	BHS07143	BHS04056	BHS03102	BHS03103	BHS02009	BHS02010	BHS08432A
		20°	BHS07144	BHS07145	BHS04057					
		10°	BHS07146	BHS07147	BHS04058					

DENTALTECH COMPATIBLE

IMPLIC GII	PLATAFORMA Ø	∠	CALCINABLE		CHIMENEA	BASE CrCo		TORNILLO + TRANSP	TORNILLO BHS	RÉPLICA IMPLANTE
	RP Ø 4,5	30°	BHS07024	BHS07025	BHS04026	BHS03033	BHS03034	BHS02021	BHS02022	BHS08322A
		20°	BHS07039	BHS07040	BHS04039					
		10°	BHS07054	BHS07055	BHS04053					
IMPLASSIC HX2	RP Ø 4,1	30°	BHS07001	BHS07002	BHS04001	BHS03003	BHS03004	BHS02001	BHS02002	BHS08612A
	20°	BHS07004	BHS07005	BHS04005						
	10°	BHS07007	BHS07008	BHS04009						

DENTIS COMPATIBLE

S-CLEAN	PLATAFORMA Ø	∠	CALCINABLE		CHIMENEA	BASE CrCo		TORNILLO + TRANSP	TORNILLO BHS	RÉPLICA IMPLANTE
	RP Ø 3,4	30°	BHS07142	BHS07143	BHS04056	BHS03102	BHS03103	BHS02009	BHS02010	BHS08432A
		20°	BHS07144	BHS07145	BHS04057					
		10°	BHS07146	BHS07147	BHS04058					
I-CLEAN	RP Ø 4,8	30°	BHS07020	BHS07021			BHS02011	BHS02012	BHS08712A	
	Ø 3,6 / 4 / 4,4 / 4,9 / 6 / 7	30°	BHS07142	BHS07143	BHS04056	BHS03102	BHS03103	BHS02009	BHS02010	BHS08432A
		20°	BHS07144	BHS07145	BHS04057					
		10°	BHS07146	BHS07147	BHS04058					

DENTIUM COMPATIBLE

SIMPLE LINE II	PLATAFORMA Ø	∠	CALCINABLE		CHIMENEA	BASE CrCo		TORNILLO + TRANSP	TORNILLO BHS	RÉPLICA IMPLANTE
	RN Ø 4,8	30°	BHS07020	BHS07021				BHS02011	BHS02012	BHS08712A
		20°	BHS07035	BHS07036						
		10°	BHS07050	BHS07051						
IMPLANTUM	Ø 3,6 / 4 / 4,4 / 4,9 / 6 / 7	30°	BHS07142	BHS07143	BHS04056	BHS03102	BHS03103	BHS02009	BHS02010	BHS08432A
	20°	BHS07144	BHS07145	BHS04057						
	10°	BHS07146	BHS07147	BHS04058						

SUPER LINE	PLATAFORMA Ø	∠	CALCINABLE	CHIMENEA	BASE CrCo	TORNILLO +TRANSP	TORNILLO BHS	RÉPLICA IMPLANTE		
	Ø 3,6 / 4 / 4,5 / 5 / 6	30°	BHS07142	BHS07143	BHS04056	BHS03102	BHS03103	BHS02009	BHS02010	BHS08432A
		20°	BHS07144	BHS07145	BHS04057					
		10°	BHS07146	BHS07147	BHS04058					

DENTSPLY SIRONA COMPATIBLE

XIVE S	PLATAFORMA Ø	∠	CALCINABLE	CHIMENEA	BASE CrCo	TORNILLO +TRANSP	TORNILLO BHS	RÉPLICA IMPLANTE		
	D 3.4	30°	BHS07308	BHS07309	BHS04056	BHS03118	BHS03119	BHS02047	BHS02048	BHS08221
		20°	BHS07310	BHS07311	BHS04057					
		10°	BHS07312	BHS07313	BHS04058					
	D 3.8	30°	BHS07314	BHS07315	BHS04056	BHS03122	BHS03123	BHS02047	BHS02048	BHS08222A
		20°	BHS07316	BHS07317	BHS04057					
		10°	BHS07318	BHS07319	BHS04058					
	D 4.5	30°	BHS07320	BHS07321	BHS04056	BHS03126	BHS03127	BHS02047	BHS02048	BHS08223A
		20°	BHS07322	BHS07323	BHS04057					
		10°	BHS07324	BHS07325	BHS04058					

DIO IMPLANTS COMPATIBLE

EXTERNAL	PLATAFORMA Ø	∠	CALCINABLE	CHIMENEA	BASE CrCo	TORNILLO +TRANSP	TORNILLO BHS	RÉPLICA IMPLANTE		
	NP Ø 3,5	30°	BHS07010	BHS07011			BHS02005	BHS02006	BHS08611A	
		20°	BHS07012	BHS07013						
		10°	BHS07014	BHS07015						
	RPº Ø 4,1	30°	BHS07001	BHS07002	BHS04001	BHS03003	BHS03004	BHS02001	BHS02002	BHS08612A
		20°	BHS07004	BHS07005	BHS04005					
		10°	BHS07007	BHS07008	BHS04009					
	WP Ø 5,1	30°	BHS07218	BHS07219			BHS02039	BHS02040	BHS08213A	
		20°	BHS07220	BHS07221						
		10°	BHS07222	BHS07223						
UF II	Ø 3,8 / 4 / 4,5 / 5 / 5,5	30°	BHS07142	BHS07143	BHS04056	BHS03102	BHS03103	BHS02009	BHS02010	BHS08432A
		20°	BHS07144	BHS07145	BHS04057					
		10°	BHS07146	BHS07147	BHS04058					

EDISON MEDICAL COMPATIBLE

LAMINA (IH)II	PLATAFORMA Ø	∠	CALCINABLE	CHIMENEA	BASE CrCo	TORNILLO +TRANSP	TORNILLO BHS	RÉPLICA IMPLANTE		
	Ø 3,3/3,75/4,2/5,0/6,0	30°	BHS07073	BHS07074	BHS04056	BHS03050	BHS03051	BHS02021	BHS02022	BHS08321A
		20°	BHS07075	BHS07076	BHS04057					
		10°	BHS07077	BHS07078	BHS04058					
FORTIS (IH)	Ø 3,3/3,750 4,2/5,0/6,0	30°	BHS07073	BHS07074	BHS04056	BHS03050	BHS03051	BHS02021	BHS02022	BHS08321A
		20°	BHS07075	BHS07076	BHS04057					
		10°	BHS07077	BHS07078	BHS04058					

ELITE MEDICA COMPATIBLE

EXTERNAL CONNECT	PLATAFORMA Ø	∠	CALCINABLE		CHIMENEA	BASE CrCo		TORNILLO + TRANSP	TORNILLO BHS	RÉPLICA IMPLANTE	
			⬡	◯		⬡	◯				
	NP Ø 3,5	30°	BHS07010	BHS07011							
		20°	BHS07012	BHS07013					BHS02005	BHS02006	BHS08611A
		10°	BHS07014	BHS07015							
	RP ^o Ø 4,1	30°	BHS07001	BHS07002	BHS04001						
		20°	BHS07004	BHS07005	BHS04005	BHS03003	BHS03004	BHS02001	BHS02002	BHS08612A	
		10°	BHS07007	BHS07008	BHS04009						
	WP Ø 5,1	30°	BHS07218	BHS07219							
		20°	BHS07220	BHS07221					BHS02039	BHS02040	BHS08213A
		10°	BHS07222	BHS07223							

EUROTEKNIKA COMPATIBLE

UNEVA	PLATAFORMA Ø	∠	CALCINABLE		CHIMENEA	BASE CrCo		TORNILLO + TRANSP	TORNILLO BHS	RÉPLICA IMPLANTE	
			⬡	◯		⬡	◯				
	Ø 3,6/4,1/4,8	30°	BHS07001	BHS07002	BHS04001						
		20°	BHS07004	BHS07005	BHS04005	BHS03003	BHS03004	BHS02001	BHS02002	BHS08612A	
		10°	BHS07007	BHS07008	BHS04009						
NATURACTICS	Ø 3,5/4/4,5/5	30°	BHS07097	BHS07098	BHS04086						
		20°	BHS07099	BHS07100	BHS04087	BHS03070	BHS03071	BHS02025	BHS02026	BHS08122A	
		10°	BHS07101	BHS07102	BHS04088						
NATURALL+	Ø 3,5/4/4,5/5	30°	BHS07097	BHS07098	BHS04086						
		20°	BHS07099	BHS07100	BHS04087	BHS03070	BHS03071	BHS02025	BHS02026	BHS08122A	
		10°	BHS07101	BHS07102	BHS04088						
NATEA	NP Ø 3,6/4,1	30°	BHS07097	BHS07098	BHS04086						
		20°	BHS07099	BHS07100	BHS04087	BHS03070	BHS03071	BHS02025	BHS02026	BHS08122A	
		10°	BHS07101	BHS07102	BHS04088						
	RP Ø 4,8/6	30°	BHS07097	BHS07098	BHS04086						
		20°	BHS07099	BHS07100	BHS04087	BHS03070	BHS03071	BHS02025	BHS02026	BHS08122A	
		10°	BHS07101	BHS07102	BHS04088						
AESTHETICA	Ø 3,6/4,1/4,8	30°	BHS07020	BHS07021							
		20°	BHS07035	BHS07036					BHS02011	BHS02012	BHS08712A
		10°	BHS07050	BHS07051							

GALIMPLANT COMPATIBLE


IPXE - EXTERNA	PLATAFORMA Ø	∠	CALCINABLE		CHIMENEA	BASE CrCo		TORNILLO + TRANSP	TORNILLO BHS	RÉPLICA IMPLANTE
			⬡	◯		⬡	◯			
	RP Ø 3,5/4/5	30°	BHS07001	BHS07002	BHS04001					
		20°	BHS07004	BHS07005	BHS04005	BHS03003	BHS03004	BHS02001	BHS02002	BHS08612A
		10°	BHS07007	BHS07008	BHS04009					
ICI - INTERNA	RP Ø 3,2/3,5/4/5	30°	BHS07097	BHS07098	BHS04086					
		20°	BHS07099	BHS07100	BHS04087	BHS03070	BHS03071	BHS02025	BHS02026	BHS08122A
		10°	BHS07101	BHS07102	BHS04088					
IPX - INTERNA	RP Ø 3,5/4/4,5/5	30°	BHS07097	BHS07098	BHS04086					
		20°	BHS07099	BHS07100	BHS04087	BHS03070	BHS03071	BHS02025	BHS02026	BHS08122A
		10°	BHS07101	BHS07102	BHS04088					

GMI COMPATIBLE


FRONTIER (IH)	PLATAFORMA Ø	∠	CALCINABLE ○	CHIMENEA	BASE CrCo ○	TORNILLO + TRANSP	TORNILLO BHS	RÉPLICA IMPLANTE		
	RP Standard Ø 3,3	30°	BHS07073	BHS07074	BHS04056	BHS03050	BHS03051	BHS02021	BHS02022	BHS08321A
		20°	BHS07075	BHS07076	BHS04057					
		10°	BHS07077	BHS07078	BHS04058					
	WP Wide Ø 4,3	30°	BHS07024	BHS07025	BHS04026	BHS03033	BHS03034	BHS02021	BHS02022	BHS08322A
		20°	BHS07039	BHS07040	BHS04039					
		10°	BHS07054	BHS07055	BHS04053					
FRONTIER multi-aesthetic	RP Ø 4,8	30°	BHS07003	BHS04002	BHS03008	BHS02003	BHS02004	BHS08411A		
		20°	BHS07006	BHS04006						
		10°	BHS07009	BHS04010						
	WP Ø 6,0	30°	BHS07248		BHS02031	BHS02032				
		20°	BHS07249							
		10°	BHS07250							
PHOENIX (EH)	Narrow Ø 3,3	30°	BHS07236	BHS07237	BHS03003	BHS03004	BHS02031	BHS02032		
		20°	BHS07238	BHS07239						
		10°	BHS07240	BHS07241						
	Standard Ø 4,1	30°	BHS07001	BHS07002	BHS04001	BHS03003	BHS03004	BHS02001	BHS02002	BHS08612A
		20°	BHS07004	BHS07005	BHS04005					
		10°	BHS07007	BHS07008	BHS04009					
	Wide (Hex. 2,7) Ø 5,1	30°	BHS07061	BHS07062	BHS02001	BHS02002	BHS08613A			
		20°	BHS07063	BHS07064						
		10°	BHS07065	BHS07066						
	Wide (Hex. 3,4) Ø 5,1	30°	BHS07218	BHS07219	BHS02039	BHS02040	BHS08213A			
		20°	BHS07220	BHS07221						
		10°	BHS07222	BHS07223						
	Extra-Wide Ø 6,0	30°	BHS07242	BHS07243	BHS02039	BHS02040				
		20°	BHS07244	BHS07245						
		10°	BHS07246	BHS07247						
FRONTIER multi-aesthetic	RP Ø 4,8	30°	BHS07003	BHS04002	BHS03008	BHS02003	BHS02004	BHS08411A		
		20°	BHS07006	BHS04006						
		10°	BHS07009	BHS04010						
	WP Ø 6,0	30°	BHS07248		BHS02031	BHS02032				
		20°	BHS07249							
		10°	BHS07250							

GT MEDICAL COMPATIBLE


BEST FIT HXE	PLATAFORMA Ø	∠	CALCINABLE ○	CHIMENEA	BASE CrCo ○	TORNILLO + TRANSP	TORNILLO BHS	RÉPLICA IMPLANTE		
	NP Ø 3,5	30°	BHS07010	BHS07011	BHS03003	BHS03004	BHS02005	BHS02006	BHS08611A	
		20°	BHS07012	BHS07013						
		10°	BHS07014	BHS07015						
	RP ^o Ø 4,1	30°	BHS07001	BHS07002	BHS04001	BHS03003	BHS03004	BHS02001	BHS02002	BHS08612A
		20°	BHS07004	BHS07005	BHS04005					
		10°	BHS07007	BHS07008	BHS04009					
WP Ø 5,1	30°	BHS07218	BHS07219	BHS02039	BHS02040	BHS08213A				
	20°	BHS07220	BHS07221							
	10°	BHS07222	BHS07223							
BEST FIT HXI	WP Ø 4,5 / 5,0	30°	BHS07130	BHS07131	BHS02009	BHS02010	BHS08123A			
		20°	BHS07132	BHS07133						
		10°	BHS07134	BHS07135						

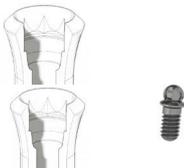
BEST FIT 002		PLATAFORMA Ø	∠	CALCINABLE		CHIMENEA	BASE CrCo		TORNILLO +TRANSP	TORNILLO BHS	RÉPLICA IMPLANTE
	NP Ø 3,5	30°		BHS07073	BHS07074	BHS04056	BHS03050	BHS03051	BHS02021	BHS02022	BHS08321A
		20°		BHS07075	BHS07076	BHS04057					
		10°		BHS07077	BHS07078	BHS04058					
	RN Ø 4,8	30°		BHS07020	BHS07021				BHS02011	BHS02012	BHS08712A
		20°		BHS07035	BHS07036						
		10°		BHS07050	BHS07051						
	SYN_RN Ø 4,8	30°		BHS07022	BHS07023				BHS02013	BHS02014	BHS08713A
		20°		BHS07037	BHS07038						
		10°		BHS07052	BHS07053						

HI TECH COMPATIBLE

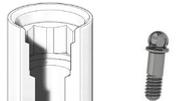SELF THREAD		PLATAFORMA Ø	∠	CALCINABLE		CHIMENEA	BASE CrCo		TORNILLO +TRANSP	TORNILLO BHS	RÉPLICA IMPLANTE
	SLT Ø,3 / 3,75	30°		BHS07073	BHS07074	BHS04056	BHS03050	BHS03051	BHS02021	BHS02022	BHS08321A
		20°		BHS07075	BHS07076	BHS04057					
		10°		BHS07077	BHS07078	BHS04058					
	GTI Ø 4,2 / 5	30°		BHS07024	BHS07025	BHS04026	BHS03033	BHS03034	BHS02021	BHS02022	BHS08322A
		20°		BHS07039	BHS07040	BHS04039					
		10°		BHS07054	BHS07055	BHS04053					
	Ø 3,5 / 4,3 / 5 / 6	30°		BHS07073	BHS07074	BHS04056	BHS03050	BHS03051	BHS02021	BHS02022	BHS08321A
		20°		BHS07075	BHS07076	BHS04057					
		10°		BHS07077	BHS07078	BHS04058					

IMPLANT DIRECT COMPATIBLE

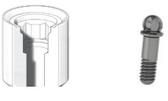
INTERACTIVE		PLATAFORMA Ø	∠	CALCINABLE		CHIMENEA	BASE CrCo		TORNILLO +TRANSP	TORNILLO BHS	RÉPLICA IMPLANTE
	NP Ø 3,5	30°		BHS07079	BHS07080	BHS04068	BHS03058	BHS03059	BHS02025	BHS02026	BHS08311A
		20°		BHS07081	BHS07082	BHS04069					
		10°		BHS07083	BHS07084	BHS04070					
	RP Ø 4,3	30°		BHS07067	BHS07068	BHS04104	BHS03046	BHS03047	BHS02023	BHS02024	BHS08312A
		20°		BHS07069	BHS07070	BHS04105					
		10°		BHS07071	BHS07072	BHS04106					
	NP Ø 3,5	30°		BHS07073	BHS07074	BHS04056	BHS03050	BHS03051	BHS02021	BHS02022	BHS08321A
		20°		BHS07075	BHS07076	BHS04057					
		10°		BHS07077	BHS07078	BHS04058					
	RP Ø 4,5	30°		BHS07024	BHS07025	BHS04026	BHS03033	BHS03034	BHS02021	BHS02022	BHS08322A
		20°		BHS07039	BHS07040	BHS04039					
		10°		BHS07054	BHS07055	BHS04053					
	WP Ø 5,7	30°		BHS07166	BHS07167				BHS02021	BHS02022	BHS08323A
		20°		BHS07168	BHS07169						
		10°		BHS07170	BHS07171						

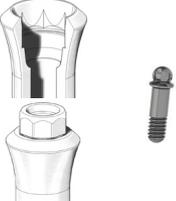REPLUS / REPLANT	PLATAFORMA Ø	∠	CALCINABLE	CHIMENEA	BASE CrCo	TORNILLO + TRANSP	TORNILLO BHS	RÉPLICA IMPLANTE	
	NP Ø 3,5	30°	BHS07091	BHS07092					
		20°	BHS07093	BHS07094			BHS02027	BHS02028	BHS08111A
		10°	BHS07095	BHS07096					
	RP Ø 4,3	30°	BHS07016	BHS07017					
		20°	BHS07031	BHS07032			BHS02009	BHS02010	BHS08112A
		10°	BHS07046	BHS07047					
	WP Ø 5,0	30°	BHS07115	BHS07116					
		20°	BHS07117	BHS07118			BHS02009	BHS02010	BHS08113A
		10°	BHS07119	BHS07120					
SWISHPLUS / SWISHPLANT									
	RN Ø 4,8	30°	BHS07020	BHS07021					
		20°	BHS07035	BHS07036			BHS02011	BHS02012	BHS08712A
		10°	BHS07050	BHS07051					
	SYN_RN Ø 4,8	30°	BHS07022	BHS07023					
		20°	BHS07037	BHS07038			BHS02013	BHS02014	BHS08713A
		10°	BHS07052	BHS07053					

DENTALCARE COMPATIBLE

JDEVOLUTION	PLATAFORMA Ø	∠	CALCINABLE	CHIMENEA	BASE CrCo	TORNILLO + TRANSP	TORNILLO BHS	RÉPLICA IMPLANTE		
	Ø 3,7 / 4,3 / 5 / 6	30°	BHS07073	BHS07074	BHS04056					
		20°	BHS07075	BHS07076	BHS04057	BHS03050	BHS03051	BHS02021	BHS02022	BHS08321A
		10°	BHS07077	BHS07078	BHS04058					

KEYSTONE DENTAL COMPATIBLE

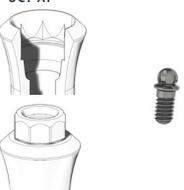RESTORE	PLATAFORMA Ø	∠	CALCINABLE	CHIMENEA	BASE CrCo	TORNILLO + TRANSP	TORNILLO BHS	RÉPLICA IMPLANTE		
	NP Ø 3,3	30°	BHS07136	BHS07137						
		20°	BHS07138	BHS07139			BHS02035	BHS02036	BHS08741A	
		10°	BHS07140	BHS07141						
	RP Ø 4,1	30°	BHS07001	BHS07002	BHS04001					
		20°	BHS07004	BHS07005	BHS04005	BHS03003	BHS03004	BHS02001	BHS02002	BHS08612A
		10°	BHS07007	BHS07008	BHS04009					
OCT-XT										
	RN Ø 4,8	30°	BHS07020	BHS07021						
		20°	BHS07035	BHS07036			BHS02011	BHS02012	BHS08712A	
		10°	BHS07050	BHS07051						
	SYN_RN Ø 4,8	30°	BHS07022	BHS07023						
		20°	BHS07037	BHS07038			BHS02013	BHS02014	BHS08713A	
		10°	BHS07052	BHS07053						
RENOVA										
	NP Ø 3,75	30°	BHS07073	BHS07074	BHS04056					
		20°	BHS07075	BHS07076	BHS04057	BHS03050	BHS03051	BHS02021	BHS02022	BHS08321A
		10°	BHS07077	BHS07078	BHS04058					
	RP Ø 4,5 / 4,75	30°	BHS07024	BHS07025	BHS04026					
		20°	BHS07039	BHS07040	BHS04039	BHS03033	BHS03034	BHS02021	BHS02022	BHS08322A
		10°	BHS07054	BHS07055	BHS04053					

KLOCKNER COMPATIBLE

SK2 (EH)	PLATAFORMA Ø	∠	CALCINABLE ○	CHIMENEA	BASE CrCo ○	TORNILLO + TRANSP	TORNILLO BHS	REPÚBLICA IMPLANTE		
	RP Ø 4,2	30° 20° 10°	BHS07109 BHS07111 BHS07113	BHS07110 BHS07112 BHS07114		BHS02031	BHS02032	BHS08521A		
KL (EH)	NP Ø 3,5	30°	BHS07010	BHS07011						
		20°	BHS07012	BHS07013			BHS02005	BHS02006	BHS08611A	
		10°	BHS07014	BHS07015						
	RP Ø 4,1	30°	BHS07001	BHS07002	BHS04001					
		20°	BHS07004	BHS07005	BHS04005	BHS03003	BHS03004	BHS02001	BHS02002	BHS08612A
		10°	BHS07007	BHS07008	BHS04009					
	WP Ø 5,1	30°	BHS07218	BHS07219						
		20°	BHS07220	BHS07221			BHS02039	BHS02040	BHS08213A	
		10°	BHS07222	BHS07223						

LEADER COMPATIBLE

TIXOS INTERNAL HEX	PLATAFORMA Ø	∠	CALCINABLE ○	CHIMENEA	BASE CrCo ○	TORNILLO + TRANSP	TORNILLO BHS	REPÚBLICA IMPLANTE		
	NP Ø 3,5 / 4,0	30° 20° 10°	BHS07073 BHS07075 BHS07077	BHS07074 BHS07076 BHS07078	BHS04056 BHS04057 BHS04058	BHS03050	BHS03051	BHS02021 BHS02022	BHS08321A	
TIXOS EXTERNAL HEX	RP Ø 4,1	30°	BHS07001	BHS07002	BHS04001					
		20°	BHS07004	BHS07005	BHS04005	BHS03003	BHS03004	BHS02001	BHS02002	BHS08612A
		10°	BHS07007	BHS07008	BHS04009					
	WP Ø 5,0	30°	BHS07061	BHS07062						
		20°	BHS07063	BHS07064			BHS02001	BHS02002	BHS08613A	
		10°	BHS07065	BHS07066						

MEDENTIS COMPATIBLE

iCX	PLATAFORMA Ø	∠	CALCINABLE ○	CHIMENEA	BASE CrCo ○	TORNILLO + TRANSP	TORNILLO BHS	REPÚBLICA IMPLANTE	
	Ø 3,45 / 3,7 4,1 / 4,8	30° 20° 10°	BHS07257 BHS07259 BHS07261	BHS07258 BHS07260 BHS07262	BHS04056 BHS04057 BHS04058	BHS03180	BHS03181	BHS02015 BHS02016	BHS08751A

MEGAGEN COMPATIBLE

ANYONE INTERNAL		PLATAFORMA Ø	∠	CALCINABLE		CHIMENEA	BASE CrCo		TORNILLO + TRANSP	TORNILLO BHS	REPLICA IMPLANTE
				⬡	◯		⬡	◯			
	NP		30°	BHS07142	BHS07143	BHS04056	BHS03102	BHS03103	BHS02009	BHS02010	BHS08432A
			20°	BHS07144	BHS07145	BHS04057					
			10°	BHS07146	BHS07147	BHS04058					
	RP		30°	BHS07142	BHS07143	BHS04056	BHS03102	BHS03103	BHS02009	BHS02010	BHS08432A
			20°	BHS07144	BHS07145	BHS04057					
			10°	BHS07146	BHS07147	BHS04058					
	WP		30°	BHS07142	BHS07143	BHS04056	BHS03102	BHS03103	BHS02009	BHS02010	BHS08432A
			20°	BHS07144	BHS07145	BHS04057					
			10°	BHS07146	BHS07147	BHS04058					
ANYONE EXTERNAL											
	NP		30°	BHS07010	BHS07011				BHS02005	BHS02006	BHS08611A
			20°	BHS07012	BHS07013						
			10°	BHS07014	BHS07015						
	RP		30°	BHS07001	BHS07002	BHS04001	BHS03003	BHS03004	BHS02001	BHS02002	BHS08612A
			20°	BHS07004	BHS07005	BHS04005					
			10°	BHS07007	BHS07008	BHS04009					
	WP		30°	BHS07061	BHS07062				BHS02001	BHS02002	BHS08613A
			20°	BHS07063	BHS07064						
			10°	BHS07065	BHS07066						
OCTA Abutment											
	SYN_RN Ø 4,8		30°	BHS07022	BHS07023	BHS04001	BHS03003	BHS03004	BHS02013	BHS02014	BHS08713A
			20°	BHS07037	BHS07038	BHS04005					
			10°	BHS07052	BHS07053	BHS04009					
ANYRIDGE											
	Small Ø 3,5		30°	BHS07251	BHS07252	BHS04056	BHS03166	BHS03167	BHS02027	BHS02028	BHS08991A
			20°	BHS07253	BHS07254	BHS04057					
			10°	BHS07255	BHS07256	BHS04058					
	Regular Ø4,0/4,5		30°	BHS07251	BHS07252	BHS04056	BHS03166	BHS03167	BHS02027	BHS02028	BHS08991A
			20°	BHS07253	BHS07254	BHS04057					
			10°	BHS07255	BHS07256	BHS04058					
	Wide Ø5,0/5,5		30°	BHS07251	BHS07252	BHS04056	BHS03166	BHS03167	BHS02027	BHS02028	BHS08991A
			20°	BHS07253	BHS07254	BHS04057					
			10°	BHS07255	BHS07256	BHS04058					

MICRODENT COMPATIBLE

EKTOS (IH)		PLATAFORMA Ø	∠	CALCINABLE		CHIMENEA	BASE CrCo		TORNILLO + TRANSP	TORNILLO BHS	REPLICA IMPLANTE
				⬡	◯		⬡	◯			
	NP Ø 3,5		30°	BHS07073	BHS07074	BHS04056	BHS03050	BHS03051	BHS02021	BHS02022	BHS08321A
			20°	BHS07075	BHS07076	BHS04057					
			10°	BHS07077	BHS07078	BHS04058					
	RP Ø4,5		30°	BHS07024	BHS07025	BHS04026	BHS03033	BHS03034	BHS02021	BHS02022	BHS08322A
			20°	BHS07039	BHS07040	BHS04039					
			10°	BHS07054	BHS07055	BHS04053					
	WP Ø5,7		30°	BHS07166	BHS07167				BHS02021	BHS02022	BHS08323A
			20°	BHS07168	BHS07169						
			10°	BHS07170	BHS07171						
MINI (EH)											
	NP Ø3,5		30°	BHS07194	BHS07195				BHS02031	BHS02032	BHS08611A
			20°	BHS07196	BHS07197						
			10°	BHS07198	BHS07199						

SUV (EH)	PLATAFORMA Ø	∠	CALCINABLE		CHIMENEA	BASE CrCo		TORNILLO + TRANSP	TORNILLO BHS	REPLICA IMPLANTE
	SUV Ø4,1	30°	BHS07001	BHS07002	BHS04001	BHS03003	BHS03004	BHS02001	BHS02002	BHS08612A
		20°	BHS07004	BHS07005	BHS04005					
		10°	BHS07007	BHS07008	BHS04009					
	SUV Ø5,1	30°	BHS07061	BHS07062						
		20°	BHS07063	BHS07064						
		10°	BHS07065	BHS07066						
	MST Ø3,5	30°	BHS07194	BHS07195				BHS02031	BHS02032	BHS08611A
		20°	BHS07196	BHS07197						
		10°	BHS07198	BHS07199						
	MS Ø3,5	30°	BHS07194	BHS07195				BHS02031	BHS02032	BHS08611A
		20°	BHS07196	BHS07197						
		10°	BHS07198	BHS07199						
	M/MV Ø4,2	30°	BHS07332	BHS07333				BHS02013	BHS02014	EM048014
		20°	BHS07334	BHS07335						
		10°	BHS07336	BHS07337						
	MK Ø5,6	30°	BHS07242	BHS07243				BHS02039	BHS02040	
		20°	BHS07244	BHS07245						
		10°	BHS07246	BHS07247						
	MST Ø3,5	30°	BHS07194	BHS07195				BHS02031	BHS02032	BHS08611A
		20°	BHS07196	BHS07197						
		10°	BHS07198	BHS07199						
	MS Ø3,5	30°	BHS07194	BHS07195				BHS02031	BHS02032	BHS08611A
		20°	BHS07196	BHS07197						
		10°	BHS07198	BHS07199						
	SU Ø4,1	30°	BHS07001	BHS07002	BHS04001	BHS03003	BHS03004	BHS02001	BHS02002	BHS08612A
		20°	BHS07004	BHS07005	BHS04005					
		10°	BHS07007	BHS07008	BHS04009					
	SU Ø5,1	30°	BHS07061	BHS07062						
		20°	BHS07063	BHS07064						
		10°	BHS07065	BHS07066						
	MK Ø5,6	30°	BHS07242	BHS07243				BHS02039	BHS02040	
		20°	BHS07244	BHS07245						
		10°	BHS07246	BHS07247						

MIS COMPATIBLE



LANCE	PLATAFORMA Ø	∠	CALCINABLE		CHIMENEA	BASE CrCo		TORNILLO + TRANSP	TORNILLO BHS	REPLICA IMPLANTE					
	STD Ø 4,1	30°	BHS07001	BHS07002	BHS04001	BHS03003	BHS03004	BHS02001	BHS02002	BHS08612A					
		20°	BHS07004	BHS07005	BHS04005										
		10°	BHS07007	BHS07008	BHS04009										
	WP Ø 5,0	30°	BHS07061	BHS07062											
		20°	BHS07063	BHS07064											
		10°	BHS07065	BHS07066											
	NARROW Ø 3,30	30°	BHS07230	BHS07231	BHS04056	BHS03200	BHS03201	BHS02041	BHS02042	BHS08951A					
		20°	BHS07232	BHS07233	BHS04057										
		10°	BHS07234	BHS07235	BHS04058										
	STANDARD Ø 3,75 / 4,2	30°	BHS07073	BHS07074	BHS04056						BHS03050	BHS03051	BHS02021	BHS02022	BHS08321A
		20°	BHS07075	BHS07076	BHS04057										
		10°	BHS07077	BHS07078	BHS04058										
	WIDE Ø 5,0 / 6,0	30°	BHS07024	BHS07025	BHS04026	BHS03033	BHS03034	BHS02021	BHS02022	BHS08322A					
		20°	BHS07039	BHS07040	BHS04039										
		10°	BHS07054	BHS07055	BHS04053										

MULTIUNIT MIS	PLATAFORMA Ø	∠	CALCINABLE		CHIMENEA	BASE CrCo		TORNILLO + TRANSP	TORNILLO BHS	REPLICA IMPLANTE
	RP Ø 4,8	30° 20° 10°						BHS02037	BHS02038	BHS08411A
				BHS07127 BHS07128 BHS07129						

MOZO GRAU COMPATIBLE

INHEX	PLATAFORMA Ø	∠	CALCINABLE		CHIMENEA	BASE CrCo		TORNILLO + TRANSP	TORNILLO BHS	REPLICA IMPLANTE
	RP Ø 3,75 / 4,25	30° 20° 10°			BHS04086 BHS04087 BHS04088			BHS02025	BHS02026	BHS08122A
				BHS07097 BHS07099 BHS07101		BHS03070	BHS03071			
	WP Ø 5,0	30° 20° 10°		BHS07130 BHS07132 BHS07134				BHS02009	BHS02010	BHS08123A
	CONO 20	30° 20° 10°		BHS07103 BHS07104 BHS07105				BHS02003	BHS02004	BHS08124A
	CONO 45	30° 20° 10°		BHS07106 BHS07107 BHS07108				BHS02003	BHS02004	BHS08125A
OSSEUS										
	NP Ø 3,4	30° 20° 10°		BHS07194 BHS07196 BHS07198				BHS02001	BHS02002	BHS08611A
				BHS07001 BHS07004 BHS07007	BHS04001 BHS04005 BHS04009	BHS03003	BHS03004	BHS02001	BHS02002	BHS08612A
	RP Ø 4,1	30° 20° 10°		BHS07002 BHS07005 BHS07008				BHS02001	BHS02002	BHS08612A
				BHS07218 BHS07220 BHS07222	BHS07219 BHS07221 BHS07223			BHS02039	BHS02040	BHS08213A
	WP Ø 5,0	30° 20° 10°								

MPI COMPATIBLE

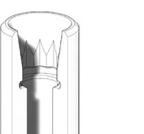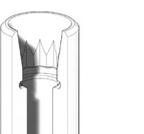EXTERNA EH	PLATAFORMA Ø	∠	CALCINABLE		CHIMENEA	BASE CrCo		TORNILLO + TRANSP	TORNILLO BHS	REPLICA IMPLANTE
	NP Ø 3,5	30° 20° 10°						BHS02001	BHS02002	BHS08421A
				BHS07148 BHS07150 BHS07152						
	RP Ø 4,1	30° 20° 10°		BHS07001 BHS07004 BHS07007	BHS04001 BHS04005 BHS04009	BHS03003	BHS03004	BHS02001	BHS02002	BHS08612A
	WP Ø 5,0	30° 20° 10°		BHS07061 BHS07063 BHS07065				BHS02001	BHS02002	BHS08613A
				BHS07062 BHS07064 BHS07066						
INTERNA CM										
	RP Ø 4,0	30° 20° 10°		BHS07097 BHS07099 BHS07101	BHS04086 BHS04087 BHS04088	BHS03070	BHS03071	BHS02025	BHS02026	BHS08122A
				BHS07130 BHS07132 BHS07134						
	WP Ø 5,0	30° 20° 10°		BHS07130 BHS07132 BHS07134				BHS02009	BHS02010	BHS08123A
				BHS07133 BHS07135						

NEOBIOTECH COMPATIBLE


EB EXTERNAL SYSTEM		PLATAFORMA Ø	∠	CALCINABLE		CHIMENEA	BASE CrCo		TORNILLO + TRANSP	TORNILLO BHS	RÉPLICA IMPLANTE	
				⬡	◯		⬡	◯				
	NP Ø 3,5	30°	BHS07010	BHS07011					BHS02005	BHS02006	BHS08611A	
		20°	BHS07012	BHS07013								
		10°	BHS07014	BHS07015								
	RP Ø 4,1	30°	BHS07001	BHS07002	BHS04001			BHS03003	BHS03004	BHS02001	BHS02002	BHS08612A
		20°	BHS07004	BHS07005	BHS04005							
		10°	BHS07007	BHS07008	BHS04009							
	WP Ø 5,1	30°	BHS07218	BHS07219						BHS02039	BHS02040	BHS08213A
		20°	BHS07220	BHS07221								
		10°	BHS07222	BHS07223								
IS INTERNAL SYSTEM												
	Ø 3,5 / 4 / 4,5 / 5	30°	BHS07142	BHS07143	BHS04056			BHS03102	BHS03103	BHS02009	BHS02010	BHS08432A
		20°	BHS07144	BHS07145	BHS04057							
		10°	BHS07146	BHS07147	BHS04058							

NEODENT COMPATIBLE

TITAMAX HE SMART		PLATAFORMA Ø	∠	CALCINABLE		CHIMENEA	BASE CrCo		TORNILLO + TRANSP	TORNILLO BHS	RÉPLICA IMPLANTE	
				⬡	◯		⬡	◯				
	RP Ø 4,1	30°	BHS07001	BHS07002	BHS04001			BHS03003	BHS03004	BHS02001	BHS02002	BHS08612A
		20°	BHS07004	BHS07005	BHS04005							
		10°	BHS07007	BHS07008	BHS04009							
	WP Ø 5,0	30°	BHS07061	BHS07062						BHS02001	BHS02002	BHS08613A
		20°	BHS07063	BHS07064								
		10°	BHS07065	BHS07066								
MINI PILAR CM												
	RP Ø 4,8	30°		BHS07003	BHS04002			BHS03008	BHS02003	BHS02004	BHS08411A	
		20°		BHS07006	BHS04006							
		10°		BHS07009	BHS04010							

NOBEL COMPATIBLE

BRÄNEMARK		PLATAFORMA Ø	∠	CALCINABLE		CHIMENEA	BASE CrCo		TORNILLO + TRANSP	TORNILLO BHS	RÉPLICA IMPLANTE	
				⬡	◯		⬡	◯				
	NP Ø 3,5	30°	BHS07010	BHS07011					BHS02005	BHS02006	BHS08611A	
		20°	BHS07012	BHS07013								
		10°	BHS07014	BHS07015								
	RP Ø 4,1	30°	BHS07001	BHS07002	BHS04001			BHS03003	BHS03004	BHS02001	BHS02002	BHS08612A
		20°	BHS07004	BHS07005	BHS04005							
		10°	BHS07007	BHS07008	BHS04009							
	WP Ø 5,1	30°	BHS07218	BHS07219						BHS02039	BHS02040	BHS08213A
		20°	BHS07220	BHS07221								
		10°	BHS07222	BHS07223								

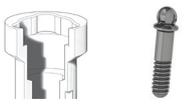REPLACE	PLATAFORMA Ø	∠	○ CALCINABLE	○ CHIMENEA	○ BASE CrCo	TORNILLO + TRANSP	TORNILLO BHS	REPLICA IMPLANTE		
	NP Ø 3,5	30°	BHS07091	BHS07092						
		20°	BHS07093	BHS07094			BHS02027	BHS02028	BHS08111A	
		10°	BHS07095	BHS07096						
	RP Ø 4,3	30°	BHS07016	BHS07017						
		20°	BHS07031	BHS07032			BHS02009	BHS02010	BHS08112A	
		10°	BHS07046	BHS07047						
	WP Ø 5,0	30°	BHS07115	BHS07116						
		20°	BHS07117	BHS07118			BHS02009	BHS02010	BHS08113A	
		10°	BHS07119	BHS07120						
ACTIVE										
	NP Ø 3,5	30°	BHS07079	BHS07080	BHS04068	BHS03058	BHS03059	BHS02025	BHS02026	BHS08311A
		20°	BHS07081	BHS07082	BHS04069					
		10°	BHS07083	BHS07084	BHS04070					
	RP Ø 4,3 / Ø 5,0	30°	BHS07067	BHS07068	BHS04104					
		20°	BHS07069	BHS07070	BHS04105	BHS03046	BHS03047	BHS02023	BHS02024	BHS08312A
		10°	BHS07071	BHS07072	BHS04106					
MULTIUNIT										
	RP Ø 4,8	30°		BHS07003	BHS04002					
		20°		BHS07006	BHS04006		BHS03008	BHS02003	BHS02004	BHS08411A
		10°		BHS07009	BHS04010					

NT TRADING COMPATIBLE

2-CONnect	PLATAFORMA Ø	∠	○ CALCINABLE	○ CHIMENEA	○ BASE CrCo	TORNILLO + TRANSP	TORNILLO BHS	REPLICA IMPLANTE	
	M 1,4 Ø 5,0	30°		BHS07305	BHS04002				
		20°		BHS07306	BHS04006	BHS03177	BHS02063	BHS02064	BHS08771A
		10°		BHS07307	BHS04010				
	M 1,6 Ø 5,0	30°		BHS07305	BHS04002				
		20°		BHS07306	BHS04006	BHS03177	BHS02065	BHS02066	BHS08771A
		10°		BHS07307	BHS04010				
	M 1,8 Ø 5,0	30°		BHS07305	BHS04002				
		20°		BHS07306	BHS04006	BHS03177	BHS02067	BHS02068	BHS08771A
		10°		BHS07307	BHS04010				

OSSTEM IMPLANT COMPATIBLE

OSSTEM TS	PLATAFORMA Ø	∠	○ CALCINABLE	○ CHIMENEA	○ BASE CrCo	TORNILLO + TRANSP	TORNILLO BHS	REPLICA IMPLANTE		
	Ø 4,0 / 4,5 / 5,0 / 6,0	30°	BHS07142	BHS07143	BHS04056					
		20°	BHS07144	BHS07145	BHS04057	BHS03102	BHS03103	BHS02009	BHS02010	BHS08432A
		10°	BHS07146	BHS07147	BHS04058					
OSSTEM US										
	MINI Ø 3,5	30°	BHS07010	BHS07011						
		20°	BHS07012	BHS07013			BHS02005	BHS02006	BHS08611A	
		10°	BHS07014	BHS07015						
	RP Ø 4,1	30°	BHS07001	BHS07002	BHS04001					
		20°	BHS07004	BHS07005	BHS04005	BHS03003	BHS03004	BHS02001	BHS02002	BHS08612A
		10°	BHS07007	BHS07008	BHS04009					
	WP Ø 5,1	30°	BHS07218	BHS07219						
		20°	BHS07220	BHS07221			BHS02039	BHS02040	BHS08213A	
		10°	BHS07222	BHS07223						

OSTEOPLUS COMPATIBLE

ARGENTIUM		PLATAFORMA Ø	∠	CALCINABLE		CHIMENEA	BASE CrCo		TORNILLO + TRANSP	TORNILLO BHS	REPLICA IMPLANTE		
				⬡	○		⬡	○					
	RP Ø 4,2	30°	BHS07109	BHS07110					BHS02031	BHS02032	BHS08521A		
		20°	BHS07111	BHS07112									
		10°	BHS07113	BHS07114									
	RP Ø 4,1	30°	BHS07001	BHS07002	BHS04001			BHS03003	BHS03004	BHS02001	BHS02002	BHS08612A	
		20°	BHS07004	BHS07005	BHS04005								
		10°	BHS07007	BHS07008	BHS04009								
	WP Ø 5,0	30°	BHS07061	BHS07062				BHS02001	BHS02002	BHS02001	BHS02002	BHS08613A	
		20°	BHS07063	BHS07064									
		10°	BHS07065	BHS07066									
	RP Ø 3,5	30°	BHS07073	BHS07074	BHS04056			BHS03050	BHS03051	BHS02021	BHS02022	BHS08321A	
		20°	BHS07075	BHS07076	BHS04057								
		10°	BHS07077	BHS07078	BHS04058								
	WP Ø 4,5	30°	BHS07024	BHS07025	BHS04026			BHS03033	BHS03034	BHS02021	BHS02022	BHS08322A	
		20°	BHS07039	BHS07040	BHS04039								
		10°	BHS07054	BHS07055	BHS04053								

OXTEIN COMPATIBLE

HEX EXTERNA		PLATAFO RMA Ø	∠	CALCINABLE		CHIMENEA	BASE CrCo		TORNILLO + TRANSP	TORNILLO BHS	REPLICA IMPLANTE		
				⬡	○		⬡	○					
	MINI Ø 3,3	30°	BHS07136	BHS07137					BHS02035	BHS02036	BHS08741A		
		20°	BHS07138	BHS07139									
		10°	BHS07140	BHS07141									
	RP Ø 4,1	30°	BHS07001	BHS07002	BHS04001			BHS03003	BHS03004	BHS02001	BHS02002	BHS08612A	
		20°	BHS07004	BHS07005	BHS04005								
		10°	BHS07007	BHS07008	BHS04009								
	WP Ø 5,0	30°	BHS07061	BHS07062				BHS02001	BHS02002	BHS02001	BHS02002	BHS08613A	
		20°	BHS07063	BHS07064									
		10°	BHS07065	BHS07066									
	NP Ø 3,5	30°	BHS07073	BHS07074	BHS04056			BHS03050	BHS03051	BHS02021	BHS02022	BHS08321A	
		20°	BHS07075	BHS07076	BHS04057								
		10°	BHS07077	BHS07078	BHS04058								
	RP Ø 4,5	30°	BHS07024	BHS07025	BHS04026			BHS03033	BHS03034	BHS02021	BHS02022	BHS08322A	
		20°	BHS07039	BHS07040	BHS04039								
		10°	BHS07054	BHS07055	BHS04053								
	RN Ø 4,8	30°	BHS07020	BHS07021				BHS02011	BHS02012	BHS02011	BHS02012	BHS08712A	
		20°	BHS07035	BHS07036									
		10°	BHS07050	BHS07051									
	RN Ø 4,8	30°	BHS07022	BHS07023				BHS02013	BHS02014	BHS02013	BHS02014	BHS08713A	
		20°	BHS07037	BHS07038									
		10°	BHS07052	BHS07053									

PALTOP COMPATIBLE

INTERNAL HEX CONNECTION	PLATAFORMA Ø	∠	CALCINABLE		CHIMENEA	BASE CrCo		TORNILLO + TRANSP	TORNILLO BHS	REPÚBLICA IMPLANTE
			⬡	◯		⬡	◯			
	NARROW Ø 3,25	30°	BHS07230	BHS07231	BHS04056	BHS03200	BHS03201	BHS02041	BHS02042	BHS08951A
		20°	BHS07232	BHS07233	BHS04057					
		10°	BHS07234	BHS07235	BHS04058					
	STANDARD Ø 3,75 / 4,2 / 5,0	30°	BHS07073	BHS07074	BHS04056	BHS03050	BHS03051	BHS02021	BHS02022	BHS08321A
		20°	BHS07075	BHS07076	BHS04057					
		10°	BHS07077	BHS07078	BHS04058					
	WIDE Ø 6,0	30°	BHS07024	BHS07025	BHS04026	BHS03033	BHS03034	BHS02021	BHS02022	BHS08322A
		20°	BHS07039	BHS07040	BHS04039					
		10°	BHS07054	BHS07055	BHS04053					
PCA Implant System (Paltop Conical Active)										
	NARROW Ø 3,25	30°	BHS07097	BHS07098	BHS04086	BHS03070	BHS03071	BHS02025	BHS02026	BHS08122A
		20°	BHS07099	BHS07100	BHS04087					
		10°	BHS07101	BHS07102	BHS04088					
	STANDARD Ø 3,75/ 4,2 / 5,0	30°	BHS07097	BHS07098	BHS04086	BHS03070	BHS03071	BHS02025	BHS02026	BHS08122A
		20°	BHS07099	BHS07100	BHS04087					
		10°	BHS07101	BHS07102	BHS04088					
MULTI UNIT										
	Ø 5,00	30°		BHS07326				BHS02031	BHS02032	BHS08271A
		20°		BHS07327						
		10°		BHS07328						
SINGLE UNIT										
	Ø 4,50	30°	BHS07329					BHS02031	BHS02032	BHS08251A
		20°	BHS07330							
		10°	BHS07331							

PHIBO COMPATIBLE

TSH	PLATAFORMA Ø	∠	CALCINABLE		CHIMENEA	BASE CrCo		TORNILLO + TRANSP	TORNILLO BHS	REPÚBLICA IMPLANTE
			⬡	◯		⬡	◯			
	S2 Ø 3,3	30°	BHS07136	BHS07137				BHS02035	BHS02036	BHS08741A
		20°	BHS07138	BHS07139						
		10°	BHS07140	BHS07141						
	S3 / S4 Ø 4,1	30°	BHS07001	BHS07002	BHS04001	BHS03003	BHS03004	BHS02001	BHS02002	BHS08612A
		20°	BHS07004	BHS07005	BHS04005					
		10°	BHS07007	BHS07008	BHS04009					
AUREA EVO										
	NP Ø 3,5	30°	BHS07178	BHS07179	BHS04056	BHS03106	BHS03107	BHS02041	BHS02042	
		20°	BHS07180	BHS07181	BHS04057					
		10°	BHS07182	BHS07183	BHS04058					
		0°			BHS04055					
	RP Ø 4,3	30°	BHS07186	BHS07187	BHS04056	BHS03110	BHS03111	BHS02021	BHS02022	
		20°	BHS07188	BHS07189	BHS04057					
		10°	BHS07190	BHS07191	BHS04058					
					BHS04055					
		0°								

RADHEX IMPLANTS COMPATIBLE

PHE / PHEA	PLATAFORMA Ø	∠	CALCINABLE		CHIMENEA	BASE CrCo		TORNILLO + TRANSP	TORNILLO BHS	RÉPLICA IMPLANTE
			⬡	◯		⬡	◯			
	NP Ø 3,5	30°	BHS07010	BHS07011				BHS02005	BHS02006	BHS08611A
		20°	BHS07012	BHS07013						
		10°	BHS07014	BHS07015						
	RP Ø 4,1	30°	BHS07001	BHS07002	BHS04001	BHS03003	BHS03004	BHS02001	BHS02002	BHS08612A
		20°	BHS07004	BHS07005	BHS04005					
		10°	BHS07007	BHS07008	BHS04009					
PHI / PHIA	NP Ø 3,5	30°	BHS07073	BHS07074	BHS04056	BHS03050	BHS03051	BHS02021	BHS02022	BHS08321A
		20°	BHS07075	BHS07076	BHS04057					
		10°	BHS07077	BHS07078	BHS04058					
	RP Ø 4,5	30°	BHS07024	BHS07025	BHS04026	BHS03033	BHS03034	BHS02021	BHS02022	BHS08322A
		20°	BHS07039	BHS07040	BHS04039					
		10°	BHS07054	BHS07055	BHS04053					
PCI	280	30°	BHS07097	BHS07098	BHS04086	BHS03070	BHS03071	BHS02025	BHS02026	BHS08122A
		20°	BHS07099	BHS07100	BHS04087					
		10°	BHS07101	BHS07102	BHS04088					
	350	30°	BHS07130	BHS07131				BHS02009	BHS02010	BHS08123A
		20°	BHS07132	BHS07133						
		10°	BHS07134	BHS07135						

SGS COMPATIBLE

P1 / P7	PLATAFORMA Ø	∠	CALCINABLE		CHIMENEA	BASE CrCo		TORNILLO + TRANSP	TORNILLO BHS	RÉPLICA IMPLANTE
			⬡	◯		⬡	◯			
	RP Ø 3,75	30°	BHS07073	BHS07074	BHS04056	BHS03050	BHS03051	BHS02021	BHS02022	BHS08321A
		20°	BHS07075	BHS07076	BHS04057					
		10°	BHS07077	BHS07078	BHS04058					

SIGNO VINCES COMPATIBLE

DUO / INTEGRA	PLATAFORMA Ø	∠	CALCINABLE		CHIMENEA	BASE CrCo		TORNILLO + TRANSP	TORNILLO BHS	RÉPLICA IMPLANTE
			⬡	◯		⬡	◯			
	RP Ø 4,1	30°	BHS07001	BHS07002	BHS04001	BHS03003	BHS03004	BHS02001	BHS02002	BHS08612A
		20°	BHS07004	BHS07005	BHS04005					
		10°	BHS07007	BHS07008	BHS04009					
DUOCON / CM	WP_4.5/ 5.0	30°	BHS07130	BHS07131				BHS02009	BHS02010	BHS08123A
		20°	BHS07132	BHS07133						
		10°	BHS07134	BHS07135						

STRAUMANN COMPATIBLE

OCTA INTERN	PLATAFORMA Ø	∠	CALCINABLE		CHIMENEA	BASE CrCo		TORNILLO + TRANSP	TORNILLO BHS	RÉPLICA IMPLANTE
			⬡	◯		⬡	◯			
	RN Ø 4,8	30°	BHS07020	BHS07021				BHS02011	BHS02012	BHS08712A
		20°	BHS07035	BHS07036						
		10°	BHS07050	BHS07051						
	SYN_RN Ø 4,8	30°	BHS07022	BHS07023				BHS02013	BHS02014	BHS08713A
		20°	BHS07037	BHS07038						
		10°	BHS07052	BHS07053						

BONE LEVEL		PLATAFORMA Ø	∠	CALCINABLE		CHIMENEA	BASE CrCo		TORNILLO +TRANSP	TORNILLO BHS	RÉPLICA IMPLANTE
	NC Ø 3,3	30°		BHS07085	BHS07086				BHS02015	BHS02016	BHS08811A
		20°		BHS07087	BHS07088						
		10°		BHS07089	BHS07090						
	RC Ø 4,1 / 4,8	30°		BHS07027	BHS07028				BHS02015	BHS02016	BHS08812A
		20°		BHS07042	BHS07043						
		10°		BHS07057	BHS07058						
BL MULTI BASE		RC Ø 4,8	30°		BHS07026				BHS02017	BHS02018	
			20°		BHS07041						
			10°		BHS07056						

SWEDEN & MARTINA COMPATIBLE

PREMIUM KOHNO		PLATAFORMA Ø	∠	CALCINABLE		CHIMENEA	BASE CrCo		TORNILLO +TRANSP	TORNILLO BHS	RÉPLICA IMPLANTE
	NP Ø 3,3	30°		BHS07200	BHS07201				BHS02021	BHS02022	BHS08961A
		20°		BHS07202	BHS07203						
		10°		BHS07204	BHS07205						
	RP Ø 3,8	30°		BHS07206	BHS07207				BHS02021	BHS02022	BHS08962A
		20°		BHS07208	BHS07209						
		10°		BHS07210	BHS07211						
	WP Ø 4,25	30°		BHS07212	BHS07213				BHS02011	BHS02012	BHS08963A
		20°		BHS07214	BHS07215						
		10°		BHS07216	BHS07217						
SYRA (EH)		Ø 4,10 / 4,25	30°	BHS07001	BHS07002	BHS04001	BHS03003	BHS03004	BHS02001	BHS02002	BHS08612A
			20°	BHS07004	BHS07005	BHS04005					
			10°	BHS07007	BHS07008	BHS04009					
		Ø 5,0	30°	BHS07061	BHS07062				BHS02001	BHS02002	BHS08613A
			20°	BHS07063	BHS07064						
			10°	BHS07065	BHS07066						
SYRA SHORT (EH)		Ø 4,10	30°	BHS07001	BHS07002	BHS04001	BHS03003	BHS03004	BHS02001	BHS02002	BHS08612A
			20°	BHS07004	BHS07005	BHS04005					
			10°	BHS07007	BHS07008	BHS04009					
		Ø 5,0	30°	BHS07061	BHS07062				BHS02001	BHS02002	BHS08613A
			20°	BHS07063	BHS07064						
			10°	BHS07065	BHS07066						

TRI DENTAL IMPLANTS COMPATIBLE

TRI-VENT		PLATAFORMA Ø	∠	CALCINABLE		CHIMENEA	BASE CrCo		TORNILLO +TRANSP	TORNILLO BHS	RÉPLICA IMPLANTE
	Ø 3,75 / 4,1 / 4,7	30°		BHS07073	BHS07074	BHS04056	BHS03050	BHS03051	BHS02021	BHS02022	BHS08321A
		20°		BHS07075	BHS07076	BHS04057					
		10°		BHS07077	BHS07078	BHS04058					

TRINON COMPATIBLE

TRINON - Q2		PLATAFORMA Ø	∠	CALCINABLE		CHIMENEA	BASE CrCo		TORNILLO +TRANSP	TORNILLO BHS	RÉPLICA IMPLANTE
	RP Ø 4,1	30°		BHS07001	BHS07002	BHS04001	BHS03003	BHS03004	BHS02001	BHS02002	BHS08612A
		20°		BHS07004	BHS07005	BHS04005					
		10°		BHS07007	BHS07008	BHS04009					

TRINON - QK		PLATAFORMA Ø	∠	CALCINABLE		CHIMENEA	BASE CrCo		TORNILLO + TRANSP	TORNILLO BHS	REPLICA IMPLANTE
	RN Ø 4,8	30°		BHS07020	BHS07021				BHS02011	BHS02012	BHS08712A
		20°		BHS07035	BHS07036						
		10°		BHS07050	BHS07051						
	NC Ø 3,3	30°		BHS07022	BHS07023			BHS02013	BHS02014	BHS08713A	
		20°		BHS07037	BHS07038						
		10°		BHS07052	BHS07053						

ZIACOM COMPATIBLE

ZINIC - IH		PLATAFORMA Ø	∠	CALCINABLE		CHIMENEA	BASE CrCo		TORNILLO + TRANSP	TORNILLO BHS	REPLICA IMPLANTE
	NP Ø 3,2	30°		BHS07230	BHS07231	BHS04056			BHS02041	BHS02042	BHS08951A
		20°		BHS07232	BHS07233	BHS04057	BHS03200	BHS03201			
		10°		BHS07234	BHS07235	BHS04058					
	RP Ø 3,5	30°		BHS07073	BHS07074	BHS04056			BHS02021	BHS02022	BHS08321A
		20°		BHS07075	BHS07076	BHS04057	BHS03050	BHS03051			
		10°		BHS07077	BHS07078	BHS04058					
	WP Ø 4,5	30°		BHS07024	BHS07025	BHS04026			BHS02021	BHS02022	BHS08322A
		20°		BHS07039	BHS07040	BHS04039	BHS03033	BHS03034			
		10°		BHS07054	BHS07055	BHS04053					
OEX - EH	NP Ø 3,3	30°		BHS07136	BHS07137				BHS02035	BHS02036	BHS08741A
		20°		BHS07138	BHS07139						
		10°		BHS07140	BHS07141						
	RP Ø 4,1	30°		BHS07001	BHS07002	BHS04001			BHS02001	BHS02002	BHS08612A
		20°		BHS07004	BHS07005	BHS04005	BHS03003	BHS03004			
		10°		BHS07007	BHS07008	BHS04009					
OIN - IH (M2)	RP Ø 4,0	30°		BHS07338	BHS07339	BHS04056			BHS02011	BHS02012	BHS08321A
		20°		BHS07340	BHS07341	BHS04057	BHS03050	BHS03051			
		10°		BHS07342	BHS07343	BHS04058					
	WP Ø 5,0	30°		BHS07338	BHS07339	BHS04026			BHS02011	BHS02012	BHS08322A
		20°		BHS07340	BHS07341	BHS04039	BHS03033	BHS03034			
		10°		BHS07342	BHS07343	BHS04053					
XDrive (Multi-unit)	RP Ø 4,8	30°		BHS07003	BHS04002			BHS03008	BHS02003	BHS02004	BHS08411A
		20°		BHS07006	BHS04006						
		10°		BHS07009	BHS04010						

ZIMMER COMPATIBLE

INTERNAL HEX		PLATAFORMA Ø	∠	CALCINABLE		CHIMENEA	BASE CrCo		TORNILLO BHS + TRANSP	TORNILLO BHS	REPLICA IMPLANTE
	NP Ø 3,5	30°		BHS07073	BHS07074	BHS04056			BHS02021	BHS02022	BHS08321A
		20°		BHS07075	BHS07076	BHS04057	BHS03050	BHS03051			
		10°		BHS07077	BHS07078	BHS04058					
	RP Ø 4,5	30°		BHS07024	BHS07025	BHS04026			BHS02021	BHS02022	BHS08322A
		20°		BHS07039	BHS07040	BHS04039	BHS03033	BHS03034			
		10°		BHS07054	BHS07055	BHS04053					
	WP Ø 5,7	30°		BHS07166	BHS07167				BHS02021	BHS02022	BHS08323A
		20°		BHS07168	BHS07169						
		10°		BHS07170	BHS07171						
SWISS-PLUS	RP Ø 4,8	30°		BHS07020	BHS07021				BHS02011	BHS02012	EM45144
		20°		BHS07035	BHS07036						
		10°		BHS07050	BHS07051						
	RP Ø 4,8	30°		BHS07022	BHS07023				BHS02013	BHS02014	EM46375
		20°		BHS07037	BHS07038						
		10°		BHS07052	BHS07053						

2.0 DESTORNILLADOR BHS30



EXCELENTES PROPIEDADES MECÁNICAS Y PROTECCIÓN DE LA CABEZA DE TORNILLO

Conexión compatible con contraángulo universal (ISO1797).

Acero endurecido que ofrece una excelente resistencia a la torsión (90 N-cm).

Acoplamiento óptimo que garantiza la integridad de la cabeza del tornillo.

Recubrimiento de Ti: tratamiento superficial que aumenta la vida útil del conductor.

Diseñado para corregir desviaciones de ángulo de 30° con una transmisión de torque 100% eficiente.

DESTORNILLADOR BHS



BHS01001 - L25mm
BHS01004 - L20mm
BHS01005 - L32mm

MANGO DESTORNILLADOR



BHS01110 - Nob Ø 8mm / CA
BHS01111 - Str Ø 7mm / CA

3.0 PROTOCOLOS


COLADO DIRECTO

Productos Requeridos:


Tornillo BHS30
Destornillador BHS30
Cilindro Calcinable Angulado 10|20|30°

Materiales:


Colado en CrCo, CrNi, Ti, Pd, Au,...

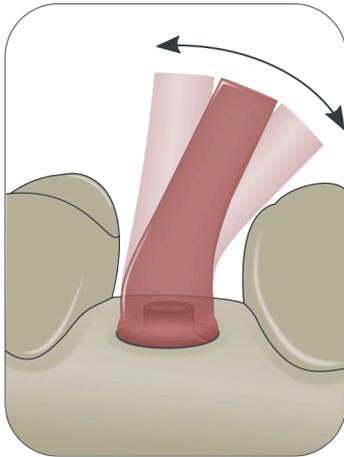


1. LABORATORIO_ Verifique la posición análoga del implante y la selección del Cilindro Fundible Angulado apropiado de acuerdo con la emergencia no deseada en la restauración.

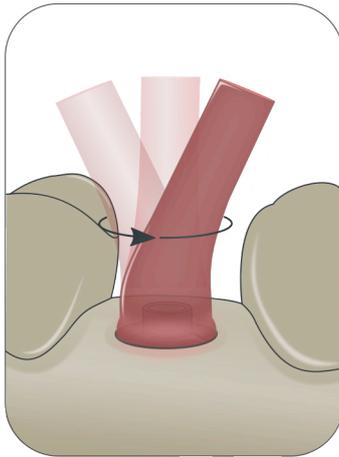


2. LABORATORIO_ Inserción y orientación del Cilindro Fundible Angulado en el análogo para obtener un canal de acceso en ángulo con un diseño y perfil de emergencia óptimos. Fijación del pilar con tornillo BHS30.

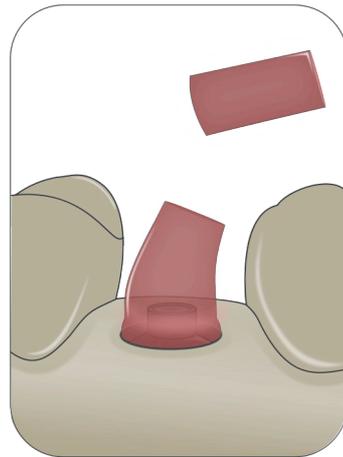


3. LABORATORIO_ Corte y ajuste del Cilindro Fundible Angulado de acuerdo con la anatomía de la prótesis y su antagonista.

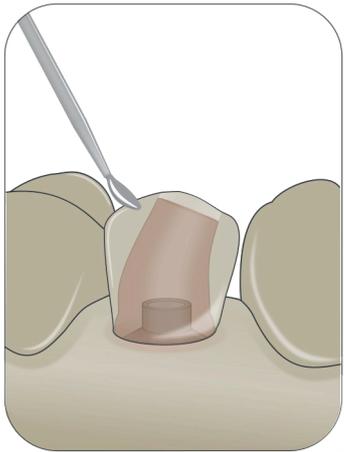

4. LABORATORIO_ Encerado y modelado de la estructura en el Cilindro Fundible Angulado.

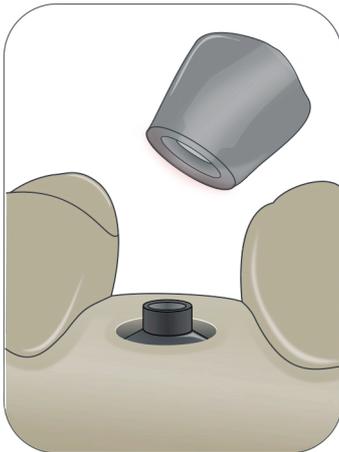


5. LABORATORIO_ Encerado y modelado de la estructura en el Cilindro Fundible Angulado.

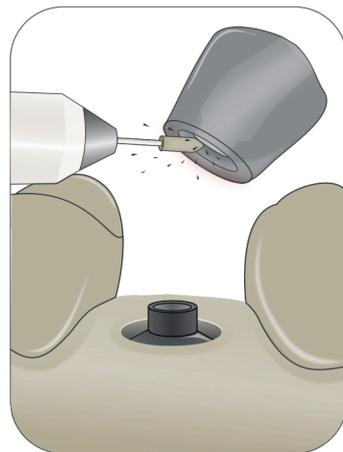


6. LABORATORIO_ Fundición de metal de la estructura y acabado manual de la conexión del implante para mejorar el ajuste del análogo del implante.

3.0 PROTOCOLOS


COLADO DIRECTO

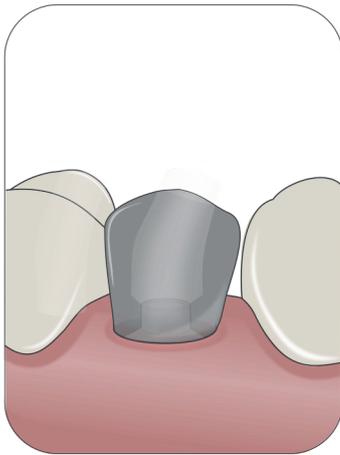

7.
CLÍNICA_ Prueba de metal, especialmente en el caso de estructuras múltiples, para confirmar el ajuste de los implantes del paciente y su posición en la boca.

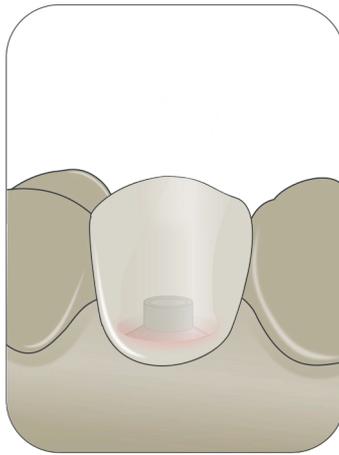

8.
LABORATORIO_ Ajustes finales en la estructura, en su caso, restauración estética, pulido y acabado.

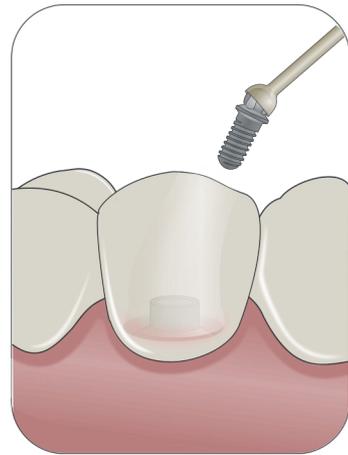

9.
CLÍNICA_ Colocación de la prótesis al paciente.

3.0 PROTOCOLOS


SOBRECOLADO A BASE CrCo

Productos Requeridos:


Tornillo BHS30
Destornillador BHS30
Base CrCo BHS30
Chimenea Calcinable Angulada 10|20|30°

Materiales:


Sobrecolado en CrCo

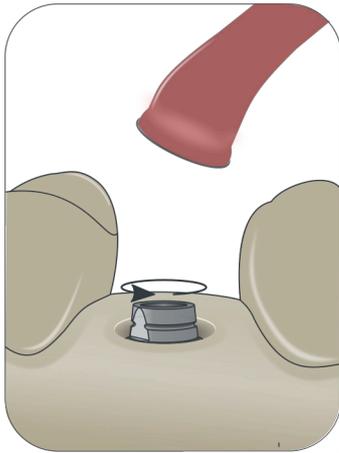


1.
LABORATORIO_ Verifique la posición análoga del implante y la selección del Cilindro Calcinable Angulado apropiado de acuerdo con la emergencia no deseada en la restauración. Acoplamiento de la chimenea a la guía de retención axial en la base BHS30 CrCo.

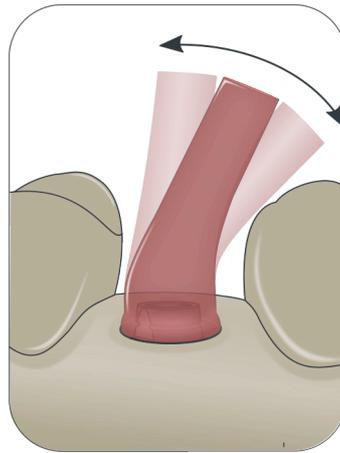


2.
LABORATORIO_ Inserción de la Base BHS30 CrCo + Chimenea en el análogo del implante para obtener un canal de acceso en ángulo con un diseño óptimo. Atornillado de la base BHS30 CrCo y ajuste final de la orientación de la chimenea según la posición deseada para el acceso del tornillo.

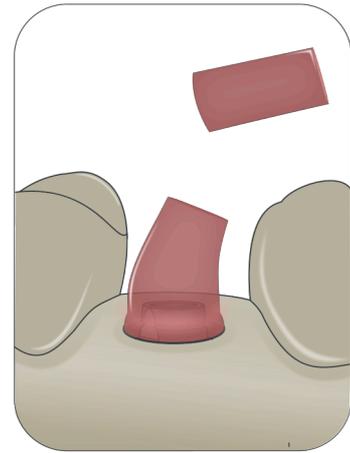


3.
LABORATORIO_ Corte y ajuste de la chimenea angular angulada de acuerdo con la anatomía de la prótesis y su antagonista.

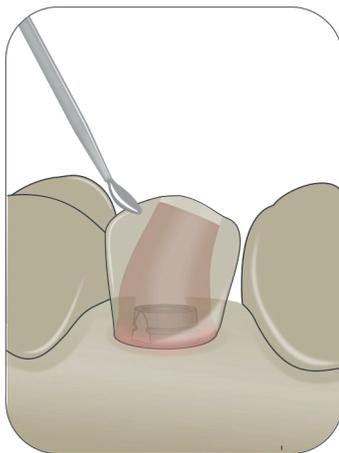

4.
LABORATORIO_ Encerado y modelado de la estructura en la chimenea BHS30 CrCo BASE + Chimenea Calcinable Angulada.

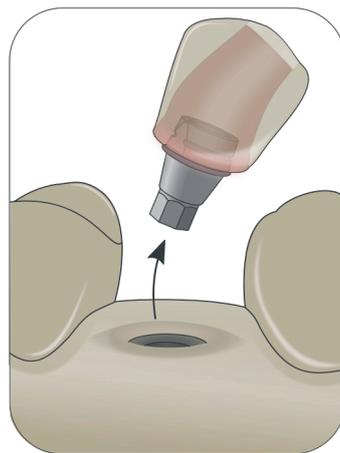


5.
LABORATORIO_ Revestimiento metálico de la estructura.

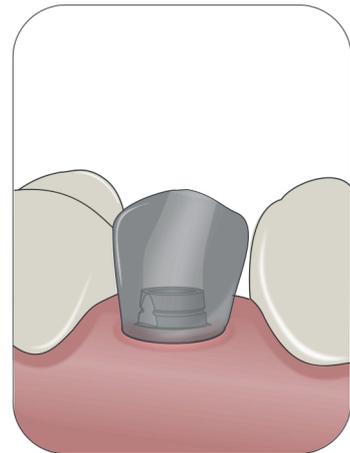


6.
CLÍNICA_ Prueba de metal, especialmente en el caso de estructuras múltiples, para confirmar el ajuste de los implantes del paciente y su posición en la boca.

3.0 PROTOCOLOS


SOBRECOLADO A BASE CrCo

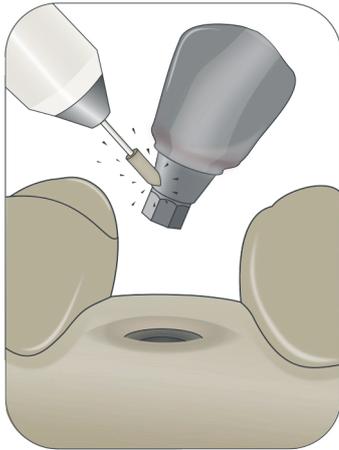

7.
LABORATORIO_ Ajustes finales en la estructura, en su caso, restauración estética, pulido y acabado.

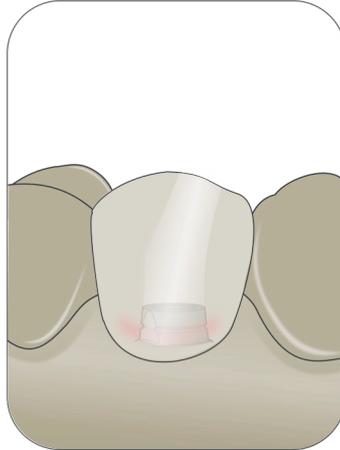

8.
LABORATORIO_ Ajustes finales en la estructura, en su caso, restauración estética, pulido y acabado.

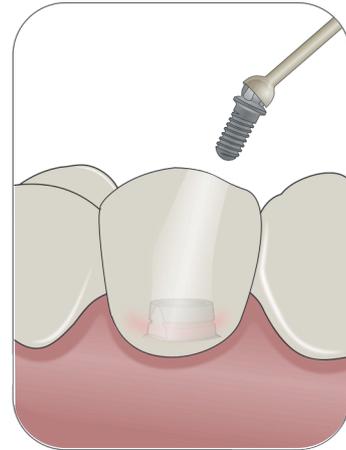

9.
CLÍNICA_ Colocación de la prótesis al paciente.

3.0 PROTOCOLOS


COLADO Y SOLDADURA A BASE CrCo

Productos Requeridos:


Tornillo BHS30 Screw
Destornillador BHS30 Screwdriver
Base CrCo BHS30
Chimenea Calcinable Angulada10|20|30°

Materials:


Colado en CrCo

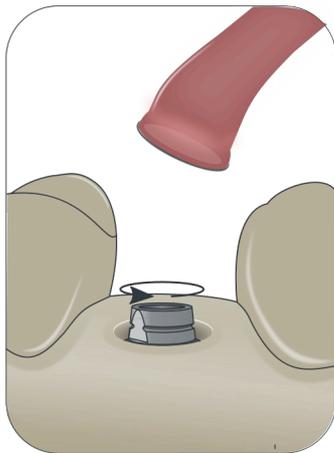


1. LABORATORIO_ Verificación de la posición analógica del implante y la selección del Cilindro Fundible Angulado apropiado de acuerdo con la emergencia no deseada en la restauración. Acomodamiento de la chimenea a la guía de retención axial en la base BHS30 CrCo.

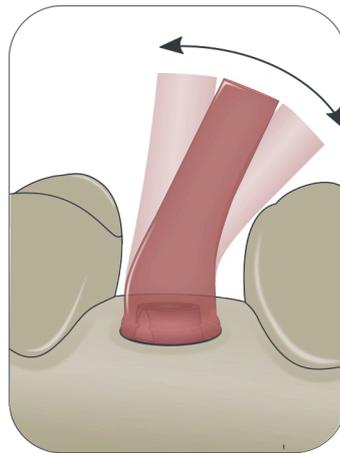


2. LABORATORIO_ Inserción de la Base BHS30 CrCo + Chimney en el análogo del implante para obtener un canal de acceso en ángulo con un diseño óptimo. Atornillado de la base BHS30 CrCo y ajuste final de la orientación de la chimenea según la posición deseada para el acceso del tornillo.

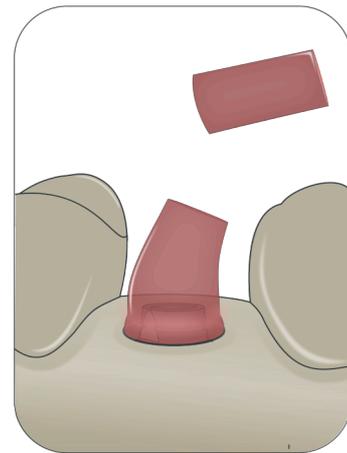


3. LABORATORIO_ Corte y ajuste de la chimenea angular angulada de acuerdo con la anatomía de la prótesis y su antagonista.

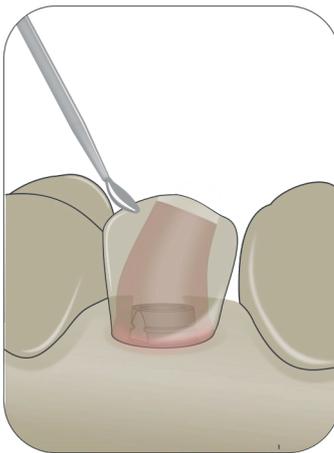

4. LABORATORIO_ Encerado y modelado de la estructura en la chimenea angular angulada.

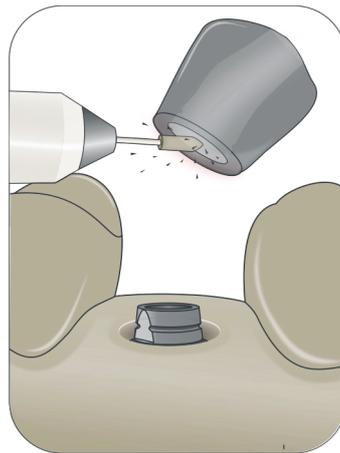


5. LABORATORIO_ Retirada de la chimenea angular en ángulo con el modelado de la estructura para fundición de metal, dejando la base BHS30 CrCo atornillada al modelo.

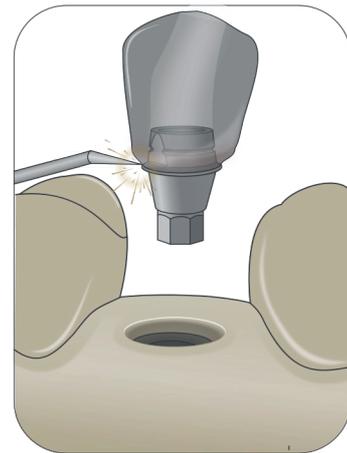


6. LABORATORIO_ Ajuste de la estructura de metal fundido en la Base BHS30 CrCo hasta obtener un ajuste pasivo en el modelo y la soldadura láser perimetral de ambas partes y enviar la Base y la estructura a la Clínica por separado para pruebas de metal de acuerdo con la relación real en la boca.

3.0 PROTOCOLOS


COLADO Y SOLDADURA A BASE CrCo

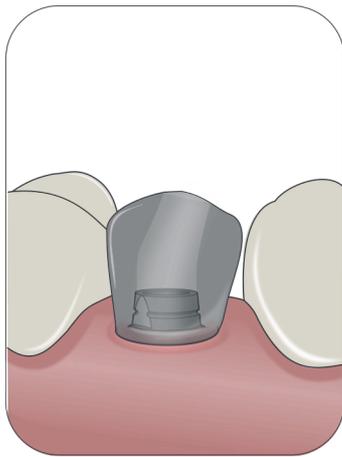

7.
CLÍNICA_ Prueba de metal, especialmente en el caso de estructuras múltiples, para confirmar el ajuste de los implantes del paciente y su posición en la boca.
Fijación provisional con ajuste pasivo en la boca y entrega al laboratorio.

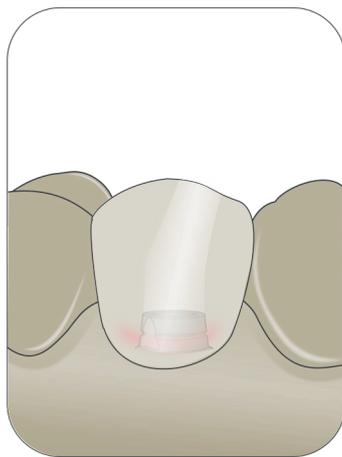

8.
LABORATORIO_ Ajustes finales en la estructura, en su caso, restauración estética, pulido y acabado.
Reensamblaje de las réplicas de acuerdo con la relación real en la boca y la soldadura perimetral con láser de ambas partes. Restauración estética, pulido y acabado.

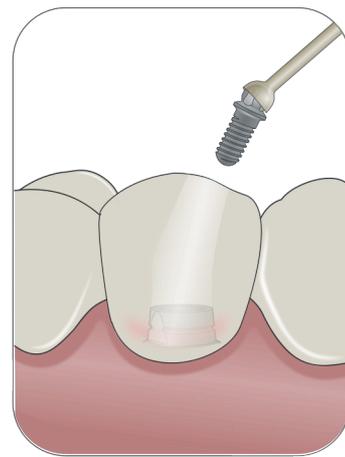

9.
CLÍNICA_ Colocación de la prótesis al paciente.

3.0 PROTOCOLOS


COLADO + CEMENTADO EN BASE BHS30 Ti

Productos Requeridos:


Tornillo BHS30
Destornillador BHS30
Base BHS30 Ti
Chimenea Calcinable Calcinada 10|20|30°

Materials:


Colado en metal (Ti, CrCo, CrNi, noble...)

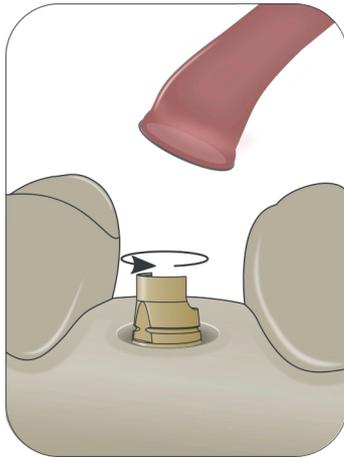


1. LABORATORIO_ Verifique la posición análoga del implante y la selección del Cilindro Fundible Angulado apropiado de acuerdo con la emergencia no deseada en la restauración. Acoplamiento de la chimenea a la guía de retención axial en la base BHS30 Ti.

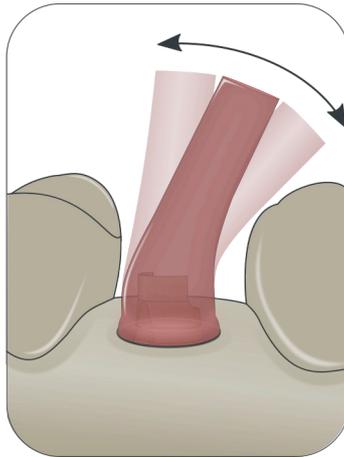


2. LABORATORIO_ Inserción y orientación de la BHS30 Ti Base + Chimney en el análogo del implante para obtener un canal de acceso en ángulo con un diseño y perfil de emergencia óptimos. Atornillado de la base BHS30 Ti.

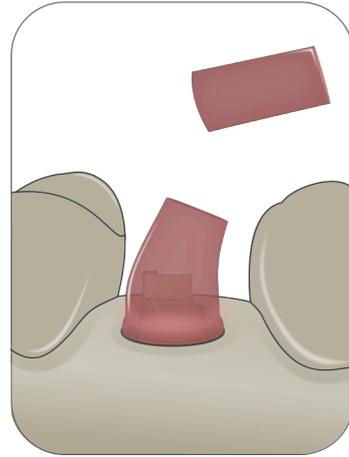


3. LABORATORIO_ Corte y ajuste de la chimenea angular angulada según la anatomía de la prótesis y su antagonista.

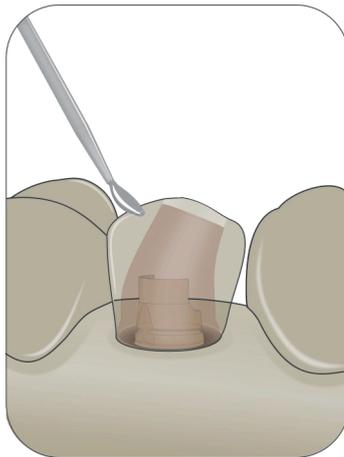

4. LABORATORIO_ Encerado y modelado de la estructura en la chimenea angular angulada.

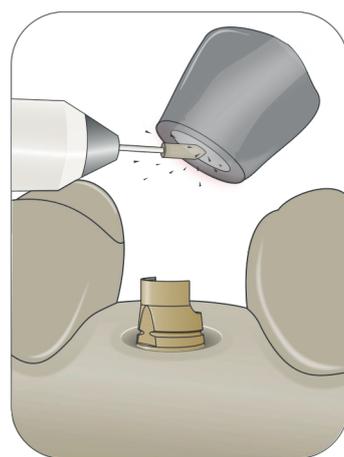


5. LABORATORIO_ Retirada de la chimenea angular en ángulo con el modelado de la estructura para fundición de metal, dejando la base BHS30 Ti atornillada al modelo.

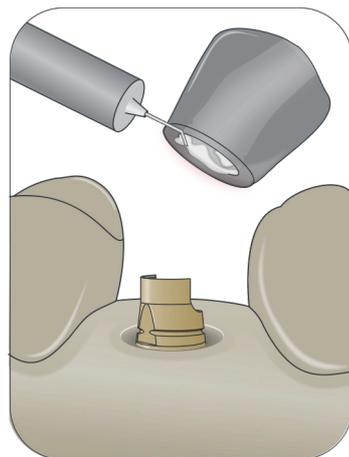


6. LABORATORIO_ Ajuste de la estructura de fundición de metal en la base BHS30 Ti hasta obtener un ajuste pasivo en el modelo y cementar ambas partes, expulsando el exceso de cemento a través de los agujeros de revestimiento en la chimenea y enviando la base y la estructura a la clínica por separado para obtener metal prueba de acuerdo con la relación real en la boca.

3.0 PROTOCOLOS


COLADO + CEMENTADO EN BASE BHS30 Ti

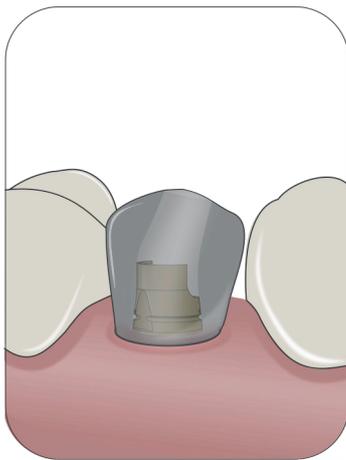

7.
CLÍNICA_ Prueba de metal, especialmente en el caso de estructuras múltiples, para confirmar el ajuste de los implantes del paciente y su posición en la boca.
Fijación provisional con ajuste pasivo en la boca y entrega al laboratorio.

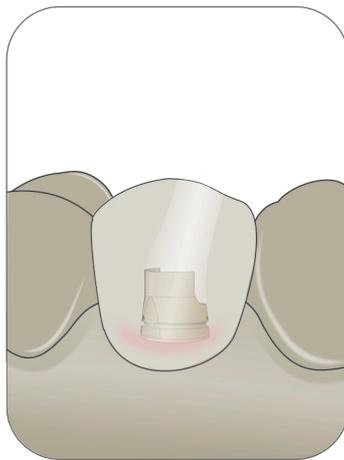

8.
LABORATORIO_ Ajustes finales en la estructura, en su caso, restauración estética, pulido y acabado.
El reensamblaje de las réplicas de acuerdo con la relación real en la boca y la cementación de ambas partes, expulsando el exceso de cemento a través de los orificios de revestimiento en la chimenea.
Restauración estética, pulido y acabado.

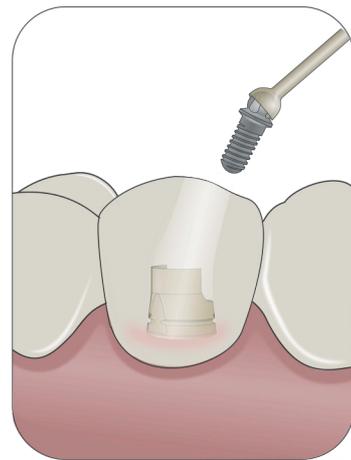

9.
CLÍNICA_ Colocación de la prótesis al paciente.

4.0 TABLA DE COMPATIBILIDADES

TRADEMARK	PAGES	TRADEMARK	PAGES
AB IMPLANTS	7	IMPLANT DIRECT	20
ACE	7	JDENTAL CARE	21
ADIN	7	KEYSTONE DENTAL	21
ALPHABIO	8	KLOCKNER	22
ALPHADENT	8	LEADER	22
ANCLADEN	8	MEDENTIS	22
ANTHOGRYR	9	MEGAGEN	23
ARDS	9	MICRODENT	23
ASTRA	9	MIS	24
AVINENT	10	MOZO GRAU	25
BEGO	10	MPI	25
BIOGENESIS	11	NEOBIOTECH	26
BIOHORIZONS	12	NEODENT	26
BIOMET 3i	12	NOBEL	26
BIONER	12	NT TRADING	27
BTI	13	OSSTEM IMPLANT	27
BTK	13	OSTEOPLUS	28
B&W	14	OXTEIN	28
CAMLOG	15	PALTOP	29
CON. SISTEMA PROTESE	15	PHIBO	29
CORTEX	15	RADHEX IMPLANTS	30
COWELLMEDI	16	SGS	30
DENTALTECH	16	SIGNO VINCES	30
DENTIS	16	STRAUMANN	30
DENTIUM	16	SWEDEN & MARTINA	31
DENTSPLY SIRONA	17	TRI DENTAL IMPLANTS	31
DIO IMPLANTS	17	TRINON	31
EDISON MEDICAL	17	ZIACOM	32
ELITE MEDICA	18	ZIMMER	32
EUROTEKNIKA	18		
GALIMPLANT	18		
GMI	19		
GT MEDICAL	19		
HI TECH	20		



www.ballheadtechnology.com

(+34) 973 831 391 · info@ballheadtechnology.com