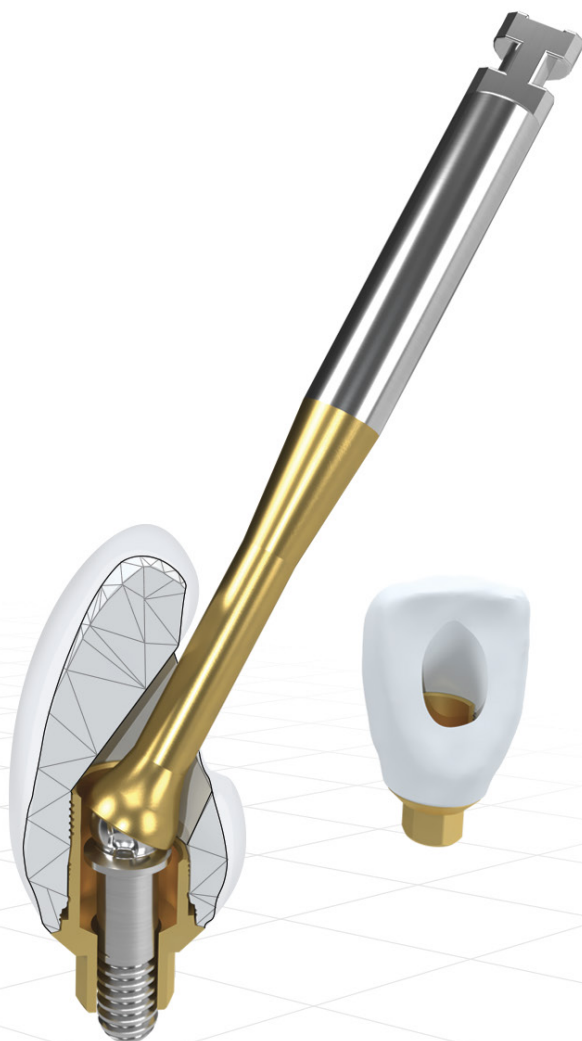


Ball Head Technology®

Pioneers in Angulation



CATÁLOGO DE PRODUCTO
PRÓTESIS CAD/CAM



30° DE LIBERTAD



La evolución hacia la personalización en el diseño de prótesis dentales requiere cada vez más el uso de pilares angulados para proporcionar versatilidad, simplicidad y facilidad de uso. Nuestras soluciones son pioneras en cubrir estas necesidades.



Nuestro objetivo principal es lograr la excelencia para generar seguridad, confiabilidad y comodidad al usar nuestros productos, tanto para el laboratorio dental como para los profesionales clínicos, responsables del tratamiento del paciente.



Desde nuestra primera patente en 2008, hemos desarrollado las soluciones angulares más eficientes e innovadoras basadas en la visión y experiencia de los profesionales de restauración y cirugía oral más calificados.

ÍNDICE

1.0 PRÓTESIS CAD/CAM	5/88
1.1 CAD/CAM DIRECTO A IMPLANTE	5/32
1.2 CAD/CAM SOLDADURA BASE CrCo	33/60
1.3 CAD/CAM CEMENTADO BASE Ti	61/88
2.0 DESTORNILLADOR BHS30	89
3.0 PROTOCOLOS	90/95
4.0 TABLA DE COMPATIBILIDADES	96

Av. de Les Garrigues 17
25001 Lleida · Spain
(+34) 973 831 391
info@ballheadtechnology.com
www.ballheadtechnology.com

All names and trademarks used in this catalogue have been registered and are property of their respective companies.
Images published are merely intended for commercial purposes and have no contractual nature.
The information contained in this catalogue is aimed exclusively to professionals in the dental sector.
Ball Head Technology® reserves the right to make changes to this document without prior notice.
The guarantee conditions of Ball Head Technology® will apply as long as the instructions for each reference are respected.



1.1 CAD/CAM DIRECTO A IMPLANTE



ABSOLUTA LIBERTAD Y ACCESIBILIDAD

Amplia pared plana para un óptimo ajuste óptimo (posición y orientación).

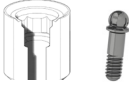
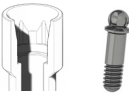
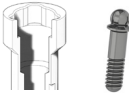
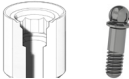
Fabricado en titanio grado 5 con tolerancias que no exceden $\pm 5 \mu\text{m}$.

Acabado de superficie óptimo para un escaneo confiable.


Conexiones exactas para todos los principales sistemas de implantes.

No hay necesidad de spray.




1.1 CAD/CAM DIRECTO A IMPLANTE

	PLATAFORMA Ø	SCANBODY	LIBRERÍA (PLATAFORMA)		BASE CrCo	BASE Ti	TORNILLO CLÍNICA	TORNILLO LAB	RÉPLICA IMPLANTE
AB IMPLANTS COMPATIBLE									
I SERIES INTERNAL HEX									
	Narrow Ø 3 - Ø 3,75	BHS08951	BHS30-9500 (NARROW)				BHS02041	BHS02042	
	STD Ø 3,5 - 6,0	BHS08321	BHS30-3200 (NP)				BHS02021	BHS02022	EM045130
I 10C CONUS									
	RP Ø 4,2	BHS08312	BHS30 - 3100 (RP)				BHS02023	BHS02024	EM048149
ACE COMPATIBLE									
INFINITY EXTERNAL HEX									
	NP Ø 3,3 / 3,75	BHS08611	BHS30 - 6100 (NP)				BHS02005	BHS02006	EM045222
	RP Ø 4,0	BHS08612	BHS30 - 6100 (RP)				BHS02001	BHS02002	EM045098
	WP Ø 5,0	BHS08613	BHS30 - 6100 (WP)				BHS02001	BHS02002	EM045082
INFINITY TRI - CAM									
	NP Ø 3,5	BHS08111	BHS30 - 1100 (NP)				BHS02027	BHS02028	EM046291
	RP Ø 4,3	BHS08112	BHS30 - 1100 (RP)				BHS02009	BHS02010	EM046292
	WP Ø 5,0	BHS08113	BHS30 - 1100 (WP)				BHS02009	BHS02010	EM046293
INFINITY INTERNAL HEX									
	NP Ø 3,7 / 4,1	BHS08321	BHS30 - 3200 (NP)				BHS02021	BHS02022	EM045130
	RP Ø 4,7 / 5,1	BHS08322	BHS30 - 3200 (RP)				BHS02021	BHS02022	EM046218
ADIN COMPATIBLE									
SWELL									
	Ø 3,5 - 6	BHS08321	BHS30 - 3200 (NP)				BHS02021	BHS02022	EM045130
TOUAREG S / OS									
	Ø 3,5 - 6	BHS08321	BHS30 - 3200 (NP)				BHS02021	BHS02022	EM045130

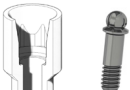
1.1 CAD/CAM DIRECTO A IMPLANTE

	PLATAFORMA Ø	SCANBODY	LIBRERÍA (PLATAFORMA)		BASE CrCo	BASE Ti	TORNILLO CLÍNICA	TORNILLO LAB	RÉPLICA IMPLANTE
TOUAREG CLOSEFIT									
	RP Ø 3,5	BHS08311	BHS30 - 3100 (NP)				BHS02025	BHS02026	EM048148
	WP Ø 4,3 / 5	BHS08312	BHS30 - 3100 (RP)				BHS02023	BHS02024	EM048149
ALPHABIO COMPATIBLE									
EXTERNAL ALPHABIO									
	NP Ø 3,5	BHS08211	BHS30 - 2100 (NP)				BHS02005	BHS02006	EM045222
	RP Ø 4,1	BHS08212	BHS30 - 2100 (RP)				BHS02001	BHS02002	EM045098
	WP Ø 5,1	BHS08213	BHS30 - 2100 (WP)				BHS02039	BHS02040	EM045070
INTERNAL ALPHABIO									
	Ø 3,3 - 6	BHS08321	BHS30 - 3200 (NP)				BHS02021	BHS02022	EM045130
ALPHA DENT COMPATIBLE									
ACTIVE									
	Ø 3,75 / 4,2 / 5,0	BHS08321	BHS30 - 3200 (NP)				BHS02021	BHS02022	EM045130
ACTIVE PLUS									
	Ø 4,2 / 5,0	BHS08321	BHS30 - 3200 (NP)				BHS02021	BHS02022	EM045130
CLASSIC									
	Ø 3,3 / 3,75 / 4,2 / 5,0	BHS08321	BHS30 - 3200 (NP)				BHS02021	BHS02022	EM045130
ANCLADEN COMPATIBLE									
ANCLALOCK									
	Ø 3,75 - 5	BHS08321	BHS30 - 3200 (NP)				BHS02021	BHS02022	EM045130

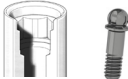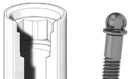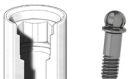1.1 CAD/CAM DIRECTO A IMPLANTE

	PLATAFORMA Ø	SCANBODY	LIBRERÍA (PLATAFORMA)		BASE CrCo	BASE Ti	TORNILLO CLÍNICA	TORNILLO LAB	REPÚBLICA IMPLANTE
ANTHOGRYR COMPATIBLE									
ANTHOFIT EH									
	RP Ø 4,1	BHS08612	BHS30 - 6100 (RP)				BHS02001	BHS02002	EM045098
	WP Ø 5,0	BHS08613	BHS30 - 6100 (WP)				BHS02001	BHS02002	EM045082
OSSFIT									
	RP Ø 4,8	BHS08712	BHS30 - 7100 (RN Ø 4,8)				BHS02011	BHS02012	EM045144
	SYN_RP Ø 4,8	BHS08713	BHS30 - 7100 (RN SYNOCTA Ø 4,8)				BHS02013	BHS02014	EM046375
ARDS COMPATIBLE									
SMART									
	Ø 3,75 - 4,5	BHS08321	BHS30 - 3200 (NP)				BHS02021	BHS02022	EM045130
CLASSIC									
	Ø 3,3 - 6	BHS08321	BHS30 - 3200 (NP)				BHS02021	BHS02022	EM045130
PREMIUM									
	Ø 3,3 - 6	BHS08321	BHS30 - 3200 (NP)				BHS02021	BHS02022	EM045130
ASTRA COMPATIBLE									
AQUA									
	RP_3.5 / 4.0	BHS08122	BHS30 - 1200 (RP Ø 3.5 / 4.0)				BHS02025	BHS02026	EM046371
LILAC									
	WP_4.5 / 5.0	BHS08123	BHS30 - 1200 (WP Ø 4.5 / 5.0)				BHS02009	BHS02010	EM046370
CONE 20°									
	Ø 3,5	BHS08124	BHS30 - 1200 (20°)				BHS02003	BHS02004	EM045638

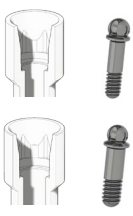
1.1 CAD/CAM DIRECTO A IMPLANTE

	PLATAFORMA Ø	SCANBODY	LIBRERÍA (PLATAFORMA)		BASE CrCo	BASE Ti	TORNILLO CLÍNICA	TORNILLO LAB	RÉPLICA IMPLANTE
CONE 45°									
	Ø 3,5	BHS08125	BHS30 - 1200 (45°)				BHS02003	BHS02004	EM047786
EV									
	Ø3,6	BHS08152	BHS30 - 1500 (Ø3,6)				BHS02053	BHS02054	
	Ø4,2	BHS08153	BHS30 - 1500 (Ø4,2)				BHS02055	BHS02056	
AVINENT COMPATIBLE									
EH									
	NP Ø 3,5	BHS08211	BHS30 - 2100 (NP)				BHS02031	BHS02032	EM045222
	RP Ø 4,1	BHS08212	BHS30 - 2100 (RP)				BHS02001	BHS02002	EM045098
	WP Ø 5,1	BHS08213	BHS30 - 2100 (WP)				BHS02039	BHS02040	EM045070
IH									
	Ø 3,5 / 4,1	BHS08321	BHS30 - 3200 (NP)				BHS02021	BHS02022	EM045130
MULTIUNIT									
	RP Ø 4,8	BHS08411	BHS30 - 4100 (RP)				BHS02003	BHS02004	EM045169
OCEAN CONICAL (C.C.)									
	Ø 3,5 (Implant Ø 3,5/Ø 4,0)	BHS08311	BHS30 - 3100 (NP)				BHS02025	BHS02026	EM048148
	Ø 4,1 (Implant Ø 4,5/Ø 5,0)	BHS08312	BHS30 - 3100 (RP)				BHS02023	BHS02024	EM048149
BEGO COMPATIBLE									
EH									
	NP_Ø 2,7 / 3,1	BHS08421	BHS30 - 4200 (NP)				BHS02013	BHS02014	EM047957


1.1 CAD/CAM DIRECTO A IMPLANTE

	PLATAFORMA Ø	SCANBODY	LIBRERÍA (PLATAFORMA)		BASE CrCo	BASE Ti	TORNILLO CLÍNICA	TORNILLO LAB	RÉPLICA IMPLANTE
IH									
	Ø 3,75 / 4,1	BHS08321	BHS30 - 3200 (NP)				BHS02021	BHS02022	EM045130
BIOGENESIS COMPATIBLE									
3ICON									
	NP Ø 3,5	BHS08611	BHS30 - 6100 (NP)				BHS02001	BHS02002	EM045468
	RP Ø 4,1	BHS08612	BHS30 - 6100 (RP)				BHS02001	BHS02002	EM045098
	WP Ø 5,0	BHS08613	BHS30 - 6100 (WP)				BHS02001	BHS02002	EM045082
ITICON									
	RP Ø 4,8	BHS08712	BHS30 - 7100 (RN Ø 4,8)				BHS02011	BHS02012	EM045144
	RP Ø 4,8	BHS08713	BHS30 - 7100 (RN SYNOCTA Ø 4,8)				BHS02013	BHS02014	EM046375
ATICON									
	RP Ø 3,5 / 4,0	BHS08122	BHS30 - 1200 (RP Ø 3.5 / 4.0)				BHS02025	BHS02026	EM046371
	WP Ø 4,5 / 5,0	BHS08123	BHS30 - 1200 (WP Ø 4.5 / 5.0)				BHS02009	BHS02010	EM046370
KISSES									
	RP Ø 3,5 / 4,0	BHS08122	BHS30 - 1200 (RP Ø 3.5 / 4.0)				BHS02025	BHS02026	EM046371
	WP Ø 4,5 / 5,0 / 5,5	BHS08123	BHS30 - 1200 (WP Ø 4.5 / 5.0)				BHS02009	BHS02010	EM046370
CONE 20°									
	RP / WP	BHS08124	BHS30 - 1200 (20°)				BHS02003	BHS02004	EM045638
CONE 45°									
	RP / WP	BHS08125	BHS30 - 1200 (45°)				BHS02003	BHS02004	EM047786

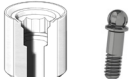
1.1 CAD/CAM DIRECTO A IMPLANTE

	PLATAFORMA Ø	SCANBODY	LIBRERÍA (PLATAFORMA)		BASE CrCo	BASE Ti	TORNILLO CLÍNICA	TORNILLO LAB	RÉPLICA IMPLANTE
BIOHORIZONS COMPATIBLE									
INTERNAL									
	NP Ø 3,5	BHS08321	BHS30 - 3200 (NP)				BHS02021	BHS02022	EM045130
	RP Ø 4,5	BHS08322	BHS30 - 3200 (RP)				BHS02021	BHS02022	EM046218
	WP Ø 5,7	BHS08323	BHS30 - 3200 (WP)				BHS02021	BHS02022	
BIOMET 3i COMPATIBLE									
EH OSSEOTITE									
	NP Ø 3,5	BHS08611	BHS30 - 6100 (NP)				BHS02001	BHS02002	EM045468
	RP Ø 4,1	BHS08612	BHS30 - 6100 (RP)				BHS02001	BHS02002	EM045098
	WP Ø 5,0	BHS08613	BHS30 - 6100 (WP)				BHS02001	BHS02002	EM045082
CERTAIN									
	NP Ø 3,4	BHS08511	BHS30 - 5100 (NP)				BHS02007	BHS02008	EM045166
	RP Ø 4,1	BHS08512	BHS30 - 5100 (RP)				BHS02007	BHS02008	EM045165
	WP Ø 5,0	BHS08513	BHS30 - 5100 (WP)				BHS02007	BHS02008	EM045161
BIONER COMPATIBLE									
IKELT / BIKELT									
	RP Ø 4,1	BHS08212	BHS30 - 2100 (RP)				BHS02001	BHS02002	EM045098
	WP Ø 5,0	BHS08613	BHS30 - 6100 (WP)				BHS02001	BHS02002	EM045082
	WP Ø 5,1	BHS08213	BHS30 - 2100 (WP)				BHS02039	BHS02040	EM045070
HIKELT									
	NP Ø 3,8	BHS08321	BHS30 - 3200 (NP)				BHS02021	BHS02022	EM045130
	RP Ø 4,7	BHS08322	BHS30 - 3200 (RP)				BHS02021	BHS02022	EM046218

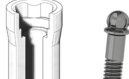
1.1 CAD/CAM DIRECTO A IMPLANTE

	PLATAFORMA Ø	SCANBODY	LIBRERÍA (PLATAFORMA)		BASE CrCo	BASE Ti	TORNILLO CLÍNICA	TORNILLO LAB	RÉPLICA IMPLANTE
TOP DM									
	Ø 3,5 / 4,0 / 5,0	BHS08311	BHS30 - 3100 (NP)				BHS02025	BHS02026	EM048148
MULTIUNIT									
	RP Ø 4,8	BHS08411	BHS30 - 4100 (RP)				BHS02003	BHS02004	EM045169
BTI COMPATIBLE									
EH									
	NP Tiny Ø 3,5	BHS08421	BHS30 - 4200 (NP)				BHS02013	BHS02014	EM047957
	RP Ø 4,1	BHS08422	BHS30 - 4200 (RP)				BHS02001	BHS02002	EM045098
	WP Ø 5,5	BHS08423	BHS30 - 4200 (WP)				BHS02013	BHS02014	EM047967
CUATRILOBULAR									
	RP Ø 4,1	BHS08231	BHS30 - 2300 (RP)				BHS02021	BHS02022	EM047743
	WP Ø 5,5	BHS08232	BHS30 - 2300 (WP)				BHS02021	BHS02022	
BTK COMPATIBLE									
8NECK INT									
	SR Ø 4,8	BHS08712	BHS30 - 7100 (RN Ø 4,8)				BHS02011	BHS02012	EM045144
EVO DL EXT									
	NP Ø 3,4 / 3,7	BHS08611	BHS30 - 6100 (NP)				BHS02035	BHS02036	
	RP Ø 4,1 / 4,6	BHS08612	BHS30 - 6100 (RP)				BHS02001	BHS02002	EM045098
	WP Ø 5,0 / 5,6	BHS08613	BHS30 - 6100 (WP)				BHS02001	BHS02002	EM045082
EVO DL INT									
	Ø 3,5 / 3,7 / 4,6 / 5,0 / 5,6	BHS08321	BHS30 - 3200 (NP)				BHS02021	BHS02022	EM045130

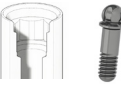1.1 CAD/CAM DIRECTO A IMPLANTE

	PLATAFORMA Ø	SCANBODY	LIBRERÍA (PLATAFORMA)		BASE CrCo	BASE Ti	TORNILLO CLÍNICA	TORNILLO LAB	RÉPLICA IMPLANTE
KLASSIC EXT									
	NP Ø 3,4	BHS08611	BHS30 - 6100 (NP)				BHS02035	BHS02036	
	RP Ø 4,1	BHS08612	BHS30 - 6100 (RP)				BHS02001	BHS02002	EM045098
	WP Ø 5,0	BHS08613	BHS30 - 6100 (WP)				BHS02001	BHS02002	EM045082
KLASSIC INT									
	Ø 3,5/ 4,5 / 5,0	BHS08321	BHS30 - 3200 (NP)				BHS02021	BHS02022	EM045130
KONIK EXT									
	NP Ø 3,4	BHS08611	BHS30 - 6100 (NP)				BHS02035	BHS02036	
	RP Ø 4,1	BHS08612	BHS30 - 6100 (RP)				BHS02001	BHS02002	EM045098
	WP Ø 5,0	BHS08613	BHS30 - 6100 (WP)				BHS02001	BHS02002	EM045082
KONIC INT									
	Ø 3,5/ 5,0	BHS08321	BHS30 - 3200 (NP)				BHS02021	BHS02022	EM045130
SAFETL INT									
	SR Ø 4,8	BHS08712	BHS30 - 7100 (RN Ø 4,8)				BHS02011	BHS02012	EM045144
B&W COMPATIBLE									
HEXAGONO EXT									
	NP Ø 3,3	BHS08741	BHS30 - 7400 (S2)				BHS02035	BHS02036	EM048022
	RP Ø 4,1	BHS08742	BHS30 - 7400 (S3 y S4)				BHS02001	BHS02002	EM045098
	WP Ø 5,0	BHS08613	BHS30 - 6100 (WP)				BHS02001	BHS02002	EM045082

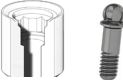1.1 CAD/CAM DIRECTO A IMPLANTE

	PLATAFORMA Ø	SCANBODY	LIBRERÍA (PLATAFORMA)		BASE CrCo	BASE Ti	TORNILLO CLÍNICA	TORNILLO LAB	RÉPLICA IMPLANTE
HEXAGONO INT									
	NP Ø 3,3	BHS08321	BHS30 - 3200 (NP)				BHS02021	BHS02022	EM045130
	RP Ø 4,0	BHS08321	BHS30 - 3200 (NP)				BHS02021	BHS02022	EM045130
	WP Ø 5,0	BHS08321	BHS30 - 3200 (NP)				BHS02021	BHS02022	EM045130
CAMLOG COMPATIBLE									
CAMLOG									
	Ø 3,3	BHS08721	BHS30-7200 (Ø3,3)				BHS02049	BHS02050	
	Ø 3,8	BHS08722	BHS30-7200 (Ø3,8)				BHS02049	BHS02050	
	Ø 4,3	BHS08723	BHS30-7200 (Ø4,3)				BHS02049	BHS02050	
	Ø 5,0	BHS08724	BHS30-7200 (Ø5,0)				BHS02051	BHS02052	
CONEXÃO SIST. PROTESE COMPATIBLE									
MORSE INDEXADO									
	Ø 3,5 / 3,75 / 4,0 / 5,0	BHS08311	BHS30 - 3100 (NP)				BHS02025	BHS02026	EM048148
HEXAGONO EXT									
	Ø 3,3	BHS08741	BHS30 - 7400 (S2)				BHS02035	BHS02036	EM048022
	Ø 3,75 / 4,0	BHS08742	BHS30 - 7400 (S3 y S4)				BHS02001	BHS02002	EM045098
	Ø 5,0	BHS08613	BHS30 - 6100 (WP)				BHS02001	BHS02002	EM045082
HEXAGONO INT									
	Ø 3,75 / 4,0 / 5,0	BHS08322	BHS30 - 3200 (RP)				BHS02021	BHS02022	EM046218



1.1 CAD/CAM DIRECTO A IMPLANTE

	PLATAFORMA Ø	SCANBODY	LIBRERÍA (PLATAFORMA)		BASE CrCo	BASE Ti	TORNILLO CLÍNICA	TORNILLO LAB	RÉPLICA IMPLANTE
CORTEX COMPATIBLE									
DYNAMIX									
 	Ø 3,3 / 3,8 / 4,2 / 5	BHS08321	BHS30 - 3200 (NP)				BHS02021	BHS02022	EM045130
CLASSIX									
 	Ø 3,3 / 3,8 / 4,2 / 5	BHS08321	BHS30 - 3200 (NP)				BHS02021	BHS02022	EM045130
SATURN									
 	Ø 3,8 / 4,2	BHS08321	BHS30 - 3200 (NP)				BHS02021	BHS02022	EM045130
COWELLMEDI COMPATIBLE									
EXTERNAL									
 	RP Ø 4,1	BHS08212	BHS30 - 2600 (RP)				BHS02001	BHS02002	EM045098
	WP Ø 5,1	BHS08213	BHS30 - 2600 (WP)				BHS02039	BHS02040	EM045070
INTERNAL									
 	RN Ø 4,8	BHS08712	BHS30 - 7600 (RN Ø 4,8)				BHS02011	BHS02012	EM045144
SUBMERGED (INT)									
 	Ø 3,5 / 4 / 4,5 / 5 / 6	BHS08432	BHS30 - 4600 (4.0)				BHS02009	BHS02010	
DENTALTECH COMPATIBLE									
IMPLOGIC GII									
 	RP Ø 4,5	BHS08322	BHS30 - 3200 (RP)				BHS02021	BHS02022	EM046218
IMPLASSIC HX2									
 	RP Ø 4,1	BHS08212	BHS30 - 2100 (RP)				BHS02001	BHS02002	EM045098



1.1 CAD/CAM DIRECTO A IMPLANTE

	PLATAFORMA Ø	SCANBODY	LIBRERÍA (PLATAFORMA)		BASE CrCo	BASE Ti	TORNILLO CLÍNICA	TORNILLO LAB	RÉPLICA IMPLANTE
DENTIS COMPATIBLE									
S-CLEAN									
 	RP Ø 3,4	BHS08432	BHS30 - 4600 (4.0)				BHS02009	BHS02010	
I-CLEAN									
 	RP Ø 4,8	BHS08712	BHS30 - 7100 (RN Ø 4,8)				BHS02011	BHS02012	EM045144
DENTIUM COMPATIBLE									
SIMPLE LINE II									
 	RN Ø 4,8	BHS08712	BHS30 - 7600 (RN Ø 4,8)				BHS02011	BHS02012	EM045144
IMPLANTUM									
 	Ø 3,6 / 4 / 4,4 / 4,9 / 6 / 7	BHS08432	BHS30 - 4600 (4.0)				BHS02009	BHS02010	
SUPER LINE									
 	Ø 3,6 / 4 / 4,5 / 5 / 6	BHS08432	BHS30 - 4600 (4.0)				BHS02009	BHS02010	
DENTSPLY SIRONA COMPATIBLE									
XIVE S									
	D 3.4	BHS08221	BHS30-2200 (D3.4)				BHS02047	BHS02048	
	D 3.8	BHS08222	BHS30-2200 (D3.8)				BHS02047	BHS02048	
	D 4.5	BHS08223	BHS30-2200 (D4.5)				BHS02047	BHS02048	

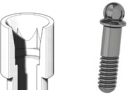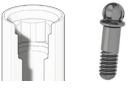
1.1 CAD/CAM DIRECTO A IMPLANTE

	PLATAFORMA Ø	SCANBODY	LIBRERÍA (PLATAFORMA)		BASE CrCo	BASE Ti	TORNILLO CLÍNICA	TORNILLO LAB	RÉPLICA IMPLANTE
DIO IMPLANTS COMPATIBLE									
EXTERNAL									
	NP Ø 3,5	BHS08211	BHS30 - 2100 (NP)				BHS02005	BHS02006	EM045222
	RP Ø 4,1	BHS08212	BHS30 - 2100 (RP)				BHS02001	BHS02002	EM045098
	WP Ø 5,1	BHS08213	BHS30 - 2100 (WP)				BHS02039	BHS02040	EM045070
UF II									
	Ø 3,8 / 4 / 4,5 / 5 / 5,5	BHS08432	BHS30 - 4600 (4.0)				BHS02009	BHS02010	
EDISON MEDICAL COMPATIBLE									
LAMINA (IH)									
	Ø 3,3 / 3,75 / 4,2 / 5,0 / 6,0	BHS08321	BHS30 - 3200 (NP)				BHS02021	BHS02022	EM045130
FORTIS (IH)									
	Ø 3,3 / 3,75 / 4,2 / 5,0 / 6,0	BHS08321	BHS30 - 3200 (NP)				BHS02021	BHS02022	EM045130
ELITE MEDICA COMPATIBLE									
EXTERNAL CONNECT									
	NP Ø 3,5	BHS08211	BHS30 - 2100 (NP)				BHS02005	BHS02006	EM045222
	RP Ø 4,1	BHS08212	BHS30 - 2100 (RP)				BHS02001	BHS02002	EM045098
	WP Ø 5,1	BHS08213	BHS30 - 2100 (WP)				BHS02039	BHS02040	EM045070
EUROTEKNIKA COMPATIBLE									
UNEVA									
	Ø 3,6 / 4,1 / 4,8	BHS08212	BH30 - 2100 (RP)				BHS02001	BHS02002	EM045098
NATURACTIS									
	Ø 3,5 / 4 / 4,5 / 5	BHS08122	BH30 - 1200 (RP Ø 3.5 / 4.0)				BHS02025	BHS02026	EM046371


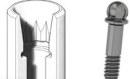
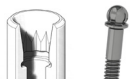
1.1 CAD/CAM DIRECTO A IMPLANTE

	PLATAFORMA Ø	SCANBODY	LIBRERÍA (PLATAFORMA)		BASE CrCo	BASE Ti	TORNILLO CLÍNICA	TORNILLO LAB	REPÚBLICA IMPLANTE
NATURALL +									
	Ø 3,5 / 4 / 4,5 / 5	BHS08122	BHS30 - 1200 (RP Ø 3.5 / 4.0)				BHS02025	BHS02026	EM046371
NATEA									
	NP Ø 3,6 / 4,1	BHS08122	BHS30 - 1200 (RP Ø 3.5 / 4.0)				BHS02025	BHS02026	EM046371
	RP Ø 4,8 / 6	BHS08122	BHS30 - 1200 (RP Ø 3.5 / 4.0)				BHS02025	BHS02026	EM046371
AESTHETICA									
	Ø 3,6 / 4,1 / 4,8	BHS08712	BHS30 - 7100 (RN Ø 4,8)				BHS02011	BHS02012	EM045144
GALIMPLANT COMPATIBLE									
IPXE - EXTERNA									
	RP Ø 3,5 / 4 / 5	BHS08212	BHS30 - 2100 (RP)				BHS02001	BHS02002	EM045098
ICI - INTERNA									
	RP Ø 3,2 / 3,5 / 4 / 5	BHS08122	BHS30 - 1200 (RP Ø 3.5 / 4.0)				BHS02025	BHS02026	EM046371
IPX - INTERNA									
	RP Ø 3,5 / 4 / 4,5 / 5	BHS08122	BHS30 - 1200 (RP Ø 3.5 / 4.0)				BHS02025	BHS02026	EM046371
GMI COMPATIBLE									
FRONTIER (IH)									
	RP Standard Ø 3,3	BHS08321	BHS30 - 3200 (NP)				BHS02021	BHS02022	EM045130
	WP Wide Ø 4,3	BHS08322	BHS30 - 3200 (RP)				BHS02021	BHS02022	EM046218
FRONTIER multi-aesthetic									
	RP Ø 4,8	BHS08411	BHS30 - 4100 (RP)				BHS02003	BHS02004	EM045169

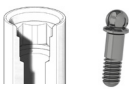1.1 CAD/CAM DIRECTO A IMPLANTE

	PLATAFORMA Ø	SCANBODY	LIBRERÍA (PLATAFORMA)		BASE CrCo	BASE Ti	TORNILLO CLÍNICA	TORNILLO LAB	RÉPLICA IMPLANTE
PHOENIX (EH)									
	Standard Ø 4,1	BHS08212	BHS30 - 2100 (RP)				BHS02001	BHS02002	EM045098
	Wide (Hex. 2,7) Ø 5,1	BHS08613	BHS30 - 6100 (WP)				BHS02001	BHS02002	EM045082
	Wide (Hex. 3,4) Ø 5,1	BHS08213	BHS30 - 2100 (WP)				BHS02039	BHS02040	EM045070
PHOENIX multi-aesthetic									
	RP Ø 4,8	BHS08411	BHS30 - 4100 (RP)				BHS02003	BHS02004	EM045169
GT MEDICAL COMPATIBLE									
BEST FIT HXE									
	NP Ø 3,5	BHS08211	BHS30 - 2100 (NP)				BHS02005	BHS02006	EM045222
	RP Ø 4,1	BHS08212	BHS30 - 2100 (RP)				BHS02001	BHS02002	EM045098
	WP Ø 5,1	BHS08213	BHS30 - 2100 (WP)				BHS02039	BHS02040	EM045070
BEST FIT HXI									
	WP 4,5 / 5,0	BHS08123	BHS30 - 1200 (WP Ø 4.5 / 5.0)				BHS02009	BHS02010	EM046370
BEST FIT 002									
	NP Ø 3,5	BHS08321	BHS30 - 3200 (NP)				BHS02021	BHS02022	EM045130
BEST FIT OCT									
	RN Ø 4,8	BHS08712	BHS30 - 7100 (RN Ø 4,8)				BHS02011	BHS02012	EM045144
	SYN_RN Ø 4,8	BHS08713	BHS30 - 7100 (RN SYNOCTA Ø 4,8)				BHS02013	BHS02014	EM046375
									
HI TECH COMPATIBLE									
SELF THREAD									
	SLT Ø 3,3 / 3,75	BHS08321	BHS30 - 3200 (NP)				BHS02021	BHS02022	EM045130
	GTI Ø 4,2 / 5	BHS08322	BHS30 - 3200 (RP)				BHS02021	BHS02022	EM046218

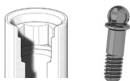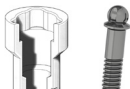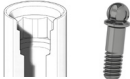1.1 CAD/CAM DIRECTO A IMPLANTE

	PLATAFORMA Ø	SCANBODY	LIBRERÍA (PLATAFORMA)		BASE CrCo	BASE Ti	TORNILLO CLÍNICA	TORNILLO LAB	RÉPLICA IMPLANTE
LGI PLUS									
	Ø 3,5 / 4,3 / 5 / 6	BHS08321	BHS30 - 3200 (NP)				BHS02021	BHS02022	EM045130
IMPLANT DIRECT COMPATIBLE									
INTERACTIVE									
	NP Ø 3,5	BHS08311	BHS30 - 3100 (NP)				BHS02025	BHS02026	EM048148
	RP Ø 4,3	BHS08312	BHS30 - 3100 (RP)				BHS02023	BHS02024	EM048149
LEGACY									
	NP Ø 3,5	BHS08321	BHS30 - 3200 (NP)				BHS02021	BHS02022	EM045130
	RP Ø 4,5	BHS08322	BHS30 - 3200 (RP)				BHS02021	BHS02022	EM046218
	WP Ø 5,7	BHS08323	BHS30 - 3200 (WP)				BHS02021	BHS02022	
REPLUS / REPLANT									
	NP Ø 3,5	BHS08111	BHS30 - 1100 (NP)				BHS02027	BHS02028	EM046291
	RP Ø 4,3	BHS08112	BHS30 - 1100 (RP)				BHS02009	BHS02010	EM046292
	WP Ø 5,0	BHS08113	BHS30 - 1100 (WP)				BHS02009	BHS02010	EM046293
SWISHPLUS / SWISHPLANT									
	RN Ø 4,8	BHS08712	BHS30 - 7100 (RN Ø 4,8)				BHS02011	BHS02012	EM045144
	SYN_RN Ø 4,8	BHS08713	BHS30 - 7100 (RN SYNOCTA Ø 4,8)				BHS02013	BHS02014	EM046375
JDENTALCARE COMPATIBLE									
JDEVOLUTION									
	Ø 3,7 / 4,3 / 5 / 6	BHS08321	BHS30 - 3200 (NP)				BHS02021	BHS02022	EM045130

1.1 CAD/CAM DIRECTO A IMPLANTE

	PLATAFORMA Ø	SCANBODY	LIBRERÍA (PLATAFORMA)		BASE CrCo	BASE Ti	TORNILLO CLÍNICA	TORNILLO LAB	RÉPLICA IMPLANTE
KEYSTONE DENTAL COMPATIBLE									
RESTORE									
	NP Ø 3,3	BHS08741	BHS30 - 7400 (S2)				BHS02035	BHS02036	EM048022
	RP Ø 4,1	BHS08742	BHS30 - 7400 (S3 y S4)				BHS02001	BHS02002	EM045098
OCT-XT									
	RN Ø 4,8	BHS08712	BHS30 - 7100 (RN Ø 4,8)				BHS02011	BHS02012	EM045144
	SYN_RN Ø 4,8	BHS08713	BHS30 - 7100 (RN SYNOCCTA Ø 4,8)				BHS02013	BHS02014	EM046375
RENOVA									
	NP Ø 3,75	BHS08321	BHS30 - 3200 (NP)				BHS02021	BHS02022	EM045130
	RP Ø 4,5 / 4,75	BHS08322	BHS30 - 3200 (RP)				BHS02021	BHS02022	EM046218
KLOCKNER COMPATIBLE									
SK2 (EH)									
	RP Ø 4,2	BHS08521	BHS30 - 5200 (RP)				BHS02031	BHS02032	EM046747
KL (EH)									
	NP Ø 3,5	BHS08211	BHS30 - 2100 (NP)				BHS02005	BHS02006	EM045222
	RP Ø 4,1	BHS08212	BHS30 - 2100 (RP)				BHS02001	BHS02002	EM045098
	WP Ø 5,1	BHS08213	BHS30 - 2100 (WP)				BHS02039	BHS02040	EM045070

1.1 CAD/CAM DIRECTO A IMPLANTE

	PLATAFORMA Ø	SCANBODY	LIBRERÍA (PLATAFORMA)		BASE CrCo	BASE Ti	TORNILLO CLÍNICA	TORNILLO LAB	RÉPLICA IMPLANTE
LEADER COMPATIBLE									
TIXOS INTERNAL HEX									
	NP Ø 3,5 / 4,0	BHS08321	BHS30 - 3200 (NP)				BHS02021	BHS02022	EM045130
TIXOS EXTERNAL HEX									
	RP Ø 4,1	BHS08612	BHS30 - 6100 (RP)				BHS02001	BHS02002	EM045098
	WP Ø 5,0	BHS08613	BHS30 - 6100 (WP)				BHS02001	BHS02002	EM045082
MEDENTIS COMPATIBLE									
ICX									
	Ø 3,45 / 3,7 - 4,1 / 4,8	BHS08751	BHS30-7700 (Ø 3,45 / 3,7 - 4,1 / 4,8)				BHS02015	BHS02016	
MEGAGEN COMPATIBLE									
ANYONE INTERNAL									
	NP	BHS08432	BHS30 - 4600 (4.0)				BHS02009	BHS02010	
	RP	BHS08432	BHS30 - 4600 (4.0)				BHS02009	BHS02010	
	WP	BHS08432	BHS30 - 4600 (4.0)				BHS02009	BHS02010	
ANYONE EXTERNAL									
	NP	BHS08211	BHS30 - 2100 (NP)				BHS02005	BHS02006	EM045222
	RP	BHS08212	BHS30 - 2100 (RP)				BHS02001	BHS02002	EM045098
	WP	BHS08613	BHS30 - 6100 (WP)				BHS02001	BHS02002	EM045082


CAD/CAM DIRECTO A IMPLANTE

	PLATAFORMA Ø	SCANBODY	LIBRERÍA (PLATAFORMA)		BASE CrCo	BASE Ti	TORNILLO CLÍNICA	TORNILLO LAB	RÉPLICA IMPLANTE
ANYRIDGE									
	Small	Ø3,5	BHS08991	BHS30-9900 (4,5/5,0)			BHS02027	BHS02028	
	Regular	Ø4,0/4,5	BHS08991	BHS30-9900 (4,5/5,0)			BHS02027	BHS02028	
	Wide	Ø5,0/5,5	BHS08991	BHS30-9900 (4,5/5,0)			BHS02027	BHS02028	
OCTA Abutment									
	SYN_RN	Ø4,8	BHS08713	BHS30-7100 (RN SYNOCTA Ø4,8)			BHS02013	BHS02014	EM046375
MICRODENT COMPATIBLE									
EKTOS (IH)									
	NP	Ø 3,5	BHS08321	BHS30 - 3200 (NP)			BHS02021	BHS02022	EM045130
	RP	Ø 4,5	BHS08322	BHS30 - 3200 (RP)			BHS02021	BHS02022	EM046218
	WP	Ø 5,7	BHS08323	BHS30 - 3200 (WP)			BHS02021	BHS02022	
MINI (EH)									
	NP	Ø 3,5	BHS08611	BHS30 - 6100 (NP)			BHS02031	BHS02032	
SUV (EH)									
	SUV	Ø 4,1	BHS08612	BHS30 - 6100 (RP)			BHS02001	BHS02002	EM045098
	SUV	Ø 5,1	BHS08613	BHS30 - 6100 (WP)			BHS02001	BHS02002	EM045082
SYSTEM (EH)									
	MST	Ø 3,5	BHS08611	BHS30 - 6100 (NP)			BHS02031	BHS02032	
	MS	Ø 3,5	BHS08611	BHS30 - 6100 (NP)			BHS02031	BHS02032	



1.1 CAD/CAM DIRECTO A IMPLANTE

	PLATAFORMA Ø	SCANBODY	LIBRERÍA (PLATAFORMA)		BASE CrCo	BASE Ti	TORNILLO CLÍNICA	TORNILLO LAB	RÉPLICA IMPLANTE
UNIVERSAL (EH)									
	MST Ø 3,5	BHS08611	BHS30 - 6100 (NP)				BHS02031	BHS02032	
	MS Ø 3,5	BHS08611	BHS30 - 6100 (NP)				BHS02031	BHS02032	
	SU Ø 4,1	BHS08612	BHS30 - 6100 (RP)				BHS02001	BHS02002	EM045098
	SU Ø 5,1	BHS08613	BHS30 - 6100 (WP)				BHS02001	BHS02002	EM045082
MIS COMPATIBLE									
LANCE									
	STD Ø 4,1	BHS08612	BHS30 - 6100 (RP)				BHS02001	BHS02002	EM045098
	WP Ø 5,0	BHS08613	BHS30 - 6100 (WP)				BHS02001	BHS02002	EM045082
SEVEN / M4									
	Narrow Ø 3,30	BHS08951	BHS30-9500 (NARROW)				BHS02041	BHS02042	
	Standard Ø 3,75 / 4,2	BHS08321	BHS30 - 3200 (NP)				BHS02021	BHS02022	EM045130
	Wide Ø 5,0 / 6,0	BHS08322	BHS30 - 3200 (RP)				BHS02021	BHS02022	EM046218
MULTIUNIT MIS									
	RP Ø 4,8	BHS08411	BHS30 - 4100 (RP)				BHS02037	BHS02038	
MOZO GRAU COMPATIBLE									
INHEX									
	RP Ø 3,75 / 4,25	BHS08122	BHS30 - 1200 (RP Ø 3.5 / 4.0)				BHS02025	BHS02026	EM046371
	WP Ø 5,0	BHS08123	BHS30 - 1200 (WP Ø 4.5 / 5.0)				BHS02009	BHS02010	EM046370
	CONO 20	BHS08124	BHS30 - 1200 (20°)				BHS02003	BHS02004	EM045638
	CONO 45	BHS08125	BHS30 - 1200 (45°)				BHS02003	BHS02004	EM047786

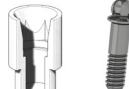1.1 CAD/CAM DIRECTO A IMPLANTE

	PLATAFORMA Ø	SCANBODY	LIBRERÍA (PLATAFORMA)		BASE CrCo	BASE Ti	TORNILLO CLÍNICA	TORNILLO LAB	RÉPLICA IMPLANTE
OSSEUS									
	NP Ø 3,4	BHS08611	BHS30 - 6100 (NP)				BHS02001	BHS02002	EM045468
	RP Ø 4,1	BHS08612	BHS30 - 6100 (RP)				BHS02001	BHS02002	EM045098
	WP Ø 5,0	BHS08213	BHS30 - 2100 (WP)				BHS02039	BHS02040	EM045070
MPI COMPATIBLE									
EXTERNA EH									
	NP Ø 3,5	BHS08421	BHS30 - 4200 (NP)				BHS02001	BHS02002	EM047957
	RP Ø 4,1	BHS08612	BHS30 - 6100 (RP)				BHS02001	BHS02002	EM045098
	WP Ø 5,0	BHS08613	BHS30 - 6100 (WP)				BHS02001	BHS02002	EM045082
INTERNA CM									
	RP Ø 4,0	BHS08122	BHS30 - 1200 (RP Ø 3.5 / 4.0)				BHS02025	BHS02026	EM046371
	WP Ø 5,0	BHS08123	BHS30 - 1200 (WP Ø 4.5 / 5.0)				BHS02009	BHS02010	EM046370
NEOBIOTECH COMPATIBLE									
EB EXTERNAL SYSTEM									
	NP Ø 3,5	BHS08211	BHS30 - 2100 (NP)				BHS02005	BHS02006	EM045222
	RP Ø 4,1	BHS08212	BHS30 - 2100 (RP)				BHS02001	BHS02002	EM045098
	WP Ø 5,1	BHS08213	BHS30 - 2100 (WP)				BHS02039	BHS02040	EM045070
IS INTERNAL SYSTEM									
	Ø 3,5 / 4 / 4,5 / 5	BHS08432	BHS30 - 4600 (4.0)				BHS02009	BHS02010	

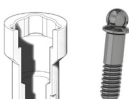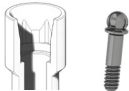
1.1 CAD/CAM DIRECTO A IMPLANTE

	PLATAFORMA Ø	SCANBODY	LIBRERÍA (PLATAFORMA)		BASE CrCo	BASE Ti	TORNILLO CLÍNICA	TORNILLO LAB	REPÚBLICA IMPLANTE
NEODENT COMPATIBLE									
TITAMAX HE SMART									
	RP Ø 4,1	BHS08612	BHS30 - 6100 (RP)				BHS02001	BHS02002	EM045098
	WP Ø 5,0	BHS08613	BHS30 - 6100 (WP)				BHS02001	BHS02002	EM045082
MINI PILAR CM									
	RP Ø 4,8	BHS08411	BHS30 - 4100 (RP)				BHS02003	BHS02004	EM045169
NOBEL COMPATIBLE									
BRÄNEMARK									
	NP Ø 3,5	BHS08211	BHS30 - 2100 (NP)				BHS02005	BHS02006	EM045222
	RP Ø 4,1	BHS08212	BHS30 - 2100 (RP)				BHS02001	BHS02002	EM045098
	WP Ø 5,1	BHS08213	BHS30 - 2100 (WP)				BHS02039	BHS02040	EM045070
REPLACE									
	NP Ø 3,5	BHS08111	BHS30 - 1100 (NP)				BHS02027	BHS02028	EM046291
	RP Ø 4,3	BHS08112	BHS30 - 1100 (RP)				BHS02009	BHS02010	EM046292
	WP Ø 5,0	BHS08113	BHS30 - 1100 (WP)				BHS02009	BHS02010	EM046293
ACTIVE									
	NP Ø 3,5	BHS08311	BHS30 - 3100 (NP)				BHS02025	BHS02026	EM048148
	RP Ø 4,3 / Ø 5,0	BHS08312	BHS30 - 3100 (RP)				BHS02023	BHS02024	EM048149
MULTIUNIT									
	RP Ø 4,8	BHS08411	BHS30 - 4100 (RP)				BHS02003	BHS02004	EM045169


1.1 CAD/CAM DIRECTO A IMPLANTE

	PLATAFORMA Ø	SCANBODY	LIBRERÍA (PLATAFORMA)		BASE CrCo	BASE Ti	TORNILLO CLÍNICA	TORNILLO LAB	RÉPLICA IMPLANTE
NT TRADING COMPATIBLE									
2-CONnect									
	M1,4	Ø5,0	BHS08771	BHS30-7700 (M1,4)			BHS02063	BHS02064	
	M1,6	Ø5,0	BHS08771	BHS30-7700 (M1,6)			BHS02065	BHS02066	
	M1,8	Ø5,0	BHS08771	BHS30-7700 (M1,8)			BHS02067	BHS02068	
OSSTEM IMPLANT COMPATIBLE									
OSSTEM TS									
	Ø 4 / 4,5 / 5 / 6		BHS08432	BHS30 - 4600 (4.0)			BHS02009	BHS02010	
OSSTEM US									
	MINI Ø 3,5		BHS08211	BHS30 - 2100 (NP)			BHS02005	BHS02006	EM045222
	RP Ø 4,1		BHS08212	BHS30 - 2100 (RP)			BHS02001	BHS02002	EM045098
	WP Ø 5,1		BHS08213	BHS30 - 2100 (WP)			BHS02039	BHS02040	EM045070
OSTEOPLUS COMPATIBLE									
ARGENTIUM									
	RP Ø 4,2		BHS08521	BHS30 - 5200 (RP)			BHS02031	BHS02032	EM046747
OSTEOPLUS - SHe									
	RP Ø 4,1		BHS08612	BHS30 - 6100 (RP)			BHS02001	BHS02002	EM045098
	WP Ø 5,0		BHS08613	BHS30 - 6100 (WP)			BHS02001	BHS02002	EM045082
OSTEOPLUS - SHi									
	RP Ø 3,5		BHS08321	BHS30 - 3200 (NP)			BHS02021	BHS02022	EM045130
	WP Ø 4,5		BHS08322	BHS30 - 3200 (RP)			BHS02021	BHS02022	EM046218

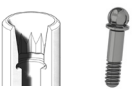1.1 CAD/CAM DIRECTO A IMPLANTE

	PLATAFORMA Ø	SCANBODY	LIBRERÍA (PLATAFORMA)		BASE CrCo	BASE Ti	TORNILLO CLÍNICA	TORNILLO LAB	REPÚBLICA IMPLANTE
OXTEIN COMPATIBLE									
HEX EXTERNA									
	MINI Ø 3,3	BHS08741	BHS30 - 7400 (S2)				BHS02035	BHS02036	EM048022
	RP Ø 4,1	BHS08742	BHS30 - 7400 (S3 y S4)				BHS02001	BHS02002	EM045098
	WP Ø 5,0	BHS08613	BHS30 - 6100 (WP)				BHS02001	BHS02002	EM045082
HEX INTERNA									
	NP Ø 3,5	BHS08321	BHS30 - 3200 (NP)				BHS02021	BHS02022	EM045130
	RP Ø 4,5	BHS08322	BHS30 - 3200 (RP)				BHS02021	BHS02022	EM046218
OCTA INTERNA									
	RN Ø 4,8	BHS08712	BHS30 - 7100 (RN Ø 4,8)				BHS02011	BHS02012	EM045144
	RN Ø 4,8	BHS08713	BHS30 - 7100 (RN SYNOCTA Ø 4,8)				BHS02013	BHS02014	EM046375
PALTOP COMPATIBLE									
INTERNAL HEX CONNECTION									
	Narrow	Ø 3,25	BHS08951	BHS30-9500 (NARROW)			BHS02041	BHS02042	
	Standard	Ø 3,75 / 4,2 / 5,0	BHS08321	BHS30-3200 (NP)			BHS02021	BHS02022	EM045130
	Wide	Ø 6,0	BHS08322	BHS30-3200 (RP)			BHS02021	BHS02022	EM046218
PCA Implant System (Paltop Conical Active)									
	Narrow	Ø 3,25	BHS08122	BHS30 - 1200 (RP Ø 3.5 /4.0)			BHS02025	BHS02026	EM046371
	Standard	Ø 3,75 / 4,2 / 5,0	BHS08122	BHS30 - 1200 (RP Ø 3.5 /4.0)			BHS02025	BHS02026	EM046371
MULTI UNIT									
	Ø 5,0	BHS08271	BHS30-2700 (MU)				BHS02031	BHS02032	
SINGLE UNIT									
	Ø 4,5	BHS08251	BHS30-2500 (SINGLE)				BHS02031	BHS02032	

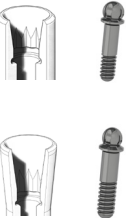1.1 CAD/CAM DIRECTO A IMPLANTE

	PLATAFORMA Ø	SCANBODY	LIBRERÍA (PLATAFORMA)		BASE CrCo	BASE Ti	TORNILLO CLÍNICA	TORNILLO LAB	RÉPLICA IMPLANTE
PHIBO COMPATIBLE									
TSH									
	S2 Ø 3,3	BHS08741	BHS30 - 7400 (S2)				BHS02035	BHS02036	EM048022
	S3 / S4 Ø 4,1	BHS08742	BHS30 - 7400 (S3 y S4)				BHS02001	BHS02002	EM045098
AUREA EVO									
	NP Ø 3,5						BHS02041	BHS02042	
	RP Ø 4,3						BHS02021	BHS02022	
RADHEX IMPLANTS COMPATIBLE									
PHE / PHEA									
	NP Ø 3,5	BHS08211	BHS30 - 2100 (NP)				BHS02005	BHS02006	EM045222
	RP Ø 4,1	BHS08212	BHS30 - 2100 (RP)				BHS02001	BHS02002	EM045098
PHI / PHIA									
	NP Ø3,5	BHS08321	BHS30-3200 (NP)				BHS02021	BHS02022	EM045130
	RP Ø4,5	BHS08322	BHS30-3200 (RP)				BHS02021	BHS02022	EM046218
PCI									
	280	BHS08122	BHS30 - 1200 (RP Ø 3.5 /4.0)				BHS02025	BHS02026	EM046371
	350	BHS08123	BHS30 - 1200 (WP Ø 4.5 /5.0)				BHS02009	BHS02010	EM046370
SGS COMPATIBLE									
P1 / P7									
	RP Ø 3,75	BHS08321	BHS30 - 3200 (NP)				BHS02021	BHS02022	EM045130


1.1 CAD/CAM DIRECTO A IMPLANTE

	PLATAFORMA Ø	SCANBODY	LIBRERÍA (PLATAFORMA)		BASE CrCo	BASE Ti	TORNILLO CLÍNICA	TORNILLO LAB	RÉPLICA IMPLANTE
SIGNO VINCES COMPATIBLE									
DUO / INTEGRA									
	RP Ø 4,1	BHS08212	BHS30-2100 (RP)				BHS02001	BHS02002	EM045098
DUOCON / CM									
	WP_4.5 / 5.0	BHS08123	BHS30-1200 (WP Ø 4.5 / 5.0)				BHS02009	BHS02010	EM046370
STRAUMANN COMPATIBLE									
OCTA INTERN									
	RN Ø 4,8	BHS08712	BHS30 - 7100 (RN Ø 4,8)				BHS02011	BHS02012	EM045144
	SYN_RN Ø 4,8	BHS08713	BHS30 - 7100 (RN SYNOCTA Ø 4,8)				BHS02013	BHS02014	EM046375
BONE LEVEL									
	NC Ø 3,3	BHS08811	BHS30 - 8100 (NC)				BHS02015	BHS02016	EM048048
	RC Ø 4,1/ Ø 4,8	BHS08812	BHS30 - 8100 (RC)				BHS02015	BHS02016	EM046904
BL MULTIBASE									
	RC Ø 4,8						BHS02017	BHS02018	EM047780

1.1 CAD/CAM DIRECTO A IMPLANTE

	PLATAFORMA Ø	SCANBODY	LIBRERÍA (PLATAFORMA)		BASE CrCo	BASE Ti	TORNILLO CLÍNICA	TORNILLO LAB	RÉPLICA IMPLANTE
SWEDEN & MARTINA COMPATIBLE									
PREMIUM KOHNO									
	NP Ø 3,3	BHS08961	BHS30 - 9600 (NP Ø 3,3)				BHS02021	BHS02022	
	RP Ø 3,8	BHS08962	BHS30 - 9600 (RP Ø 3,8)				BHS02021	BHS02022	
	WP Ø 4,25	BHS08963	BHS30 - 9600 (WP Ø 4,25)				BHS02011	BHS02012	
SYRA (EH)									
	Ø 4,10 / 4,25	BHS08612	BHS30 - 6100 (RP)				BHS02001	BHS02002	EM045098
	Ø 5,0	BHS08613	BHS30 - 6100 (WP)				BHS02001	BHS02002	EM045082
SYRA Short (EH)									
	Ø 4,10	BHS08612	BHS30 - 6100 (RP)				BHS02001	BHS02002	EM045098
	Ø 5,0	BHS08613	BHS30 - 6100 (WP)				BHS02001	BHS02002	EM045082
TRI DENTAL IMPLANTS COMPATIBLE									
TRI - VENT									
	Ø 3,75 / 4,1 / 4,7	BHS08321	BHS30 - 3200 (NP)				BHS02021	BHS02022	EM045130
TRINON COMPATIBLE									
TRINON - Q2									
	RP Ø 4,1	BHS08212	BHS30 - 2100 (RP)				BHS02001	BHS02002	EM045098
TRINON - QK									
	RN Ø 4,8	BHS08712	BHS30 - 7100 (RN Ø 4,8)				BHS02011	BHS02012	EM045144
	RN Ø 4,8	BHS08713	BHS30 - 7100 (RN SYNOCTA Ø 4,8)				BHS02013	BHS02014	EM046375

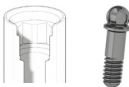1.1 CAD/CAM DIRECTO A IMPLANTE

	PLATAFORMA Ø	SCANBODY	LIBRERÍA (PLATAFORMA)		BASE CrCo	BASE Ti	TORNILLO CLÍNICA	TORNILLO LAB	RÉPLICA IMPLANTE
ZIACOM COMPATIBLE									
ZINIC - IH									
	NP Ø 3,2	BHS08951	BHS30-9500 (NARROW)				BHS02041	BHS02042	
	RP Ø 3,5	BHS08321	BHS30 - 3200 (NP)				BHS02021	BHS02022	EM045130
	WP Ø 4,5	BHS08322	BHS30 - 3200 (RP)				BHS02021	BHS02022	EM046218
OEX - EH									
	NP Ø 3,3	BHS08741	BHS30 - 7400 (S2)				BHS02035	BHS02036	EM048022
	RP Ø 4,1	BHS08212	BHS30 - 2100 (RP)				BHS02001	BHS02002	EM045098
OIN - IH (M2)									
	RP Ø 4,0	BHS08321	BHS30-3200 (NP)				BHS02011	BHS02012	
	WP Ø 5,0	BHS08322	BHS30-3200 (RP)				BHS02011	BHS02012	
XDrive (Multi-unit)									
	RP Ø 4,8	BHS08411	BHS30 - 4100 (RP)				BHS02003	BHS02004	EM045169
ZIMMER COMPATIBLE									
INTERNAL HEX									
	NP Ø 3,5	BHS08321	BHS30 - 3200 (NP)				BHS02021	BHS02022	EM045130
	RP Ø 4,5	BHS08322	BHS30 - 3200 (RP)				BHS02021	BHS02022	EM046218
	WP Ø 5,7	BHS08323	BHS30 - 3200 (WP)				BHS02021	BHS02022	
SWISS - PLUS									
	RP Ø 4,8	BHS08712	BHS30 - 7100 (RN Ø 4,8)				BHS02011	BHS02012	EM045144
	RP Ø 4,8	BHS08713	BHS30 - 7100 (RN SYNOCTA Ø 4,8)				BHS02013	BHS02014	EM046375

1.2 CAD/CAM SOLDADURA BASE CrCo



ESTRUCTURAS ASEQUIBLES CON ASIENTO MECANIZADO PERFECTO

Base CrCo:

Altura óptima que permite una angulación de 30° para el destornillador BHS.

Diseño cónico para múltiples restauraciones y pared plana de enganche para las individuales.

Scanbody:

Amplia pared plana para un óptimo ajuste óptimo (posición y orientación).

Fabricado en titanio grado 5 con tolerancias que no exceden $\pm 5 \mu\text{m}$.

Acabado de superficie óptimo para un escaneo confiable.

Conexiones exactas para todos los principales sistemas de implantes.

No hay necesidad de spray.

1.2 CAD/CAM SOLDADURA BASE CrCo

	PLATAFORMA Ø	SCANBODY	LIBRERÍA (PLATAFORMA)	 	BASE CrCo	BASE Ti	TORNILLO CLÍNICA	TORNILLO LAB	RÉPLICA IMPLANTE
AB IMPLANTS COMPATIBLE									
I SERIES INTERNAL HEX									
	Narrow Ø 3 - Ø 3,75	BHS08951	BHS30-9500 (NARROW)	 	BHS03200 BHS03201		BHS02041	BHS02042	
	STD Ø 3,5 - 6,0	BHS08321	BHS30-3200 (NP)	 	BHS03050 BHS03051		BHS02021	BHS02022	EM045130
I 10C CONUS									
	RP Ø 4,2	BHS08312	BHS30 - 3100 (RP)	 	BHS03046 BHS03047		BHS02023	BHS02024	EM048149
ACE COMPATIBLE									
INFINITY EXTERNAL HEX									
	NP Ø 3,3 / 3,75	BHS08611	BHS30 - 6100 (NP)				BHS02005	BHS02006	EM045222
	RP Ø 4,0	BHS08612	BHS30 - 6100 (RP)	 	BHS03003 BHS03004		BHS02001	BHS02002	EM045098
	WP Ø 5,0	BHS08613	BHS30 - 6100 (WP)				BHS02001	BHS02002	EM045082
INFINITY TRI - CAM									
	NP Ø 3,5	BHS08111	BHS30 - 1100 (NP)				BHS02027	BHS02028	EM046291
	RP Ø 4,3	BHS08112	BHS30 - 1100 (RP)				BHS02009	BHS02010	EM046292
	WP Ø 5,0	BHS08113	BHS30 - 1100 (WP)				BHS02009	BHS02010	EM046293
INFINITY INTERNAL HEX									
	NP Ø 3,7 / 4,1	BHS08321	BHS30 - 3200 (NP)	 	BHS03050 BHS03051		BHS02021	BHS02022	EM045130
	RP Ø 4,7 / 5,1	BHS08322	BHS30 - 3200 (RP)	 	BHS03033 BHS03034		BHS02021	BHS02022	EM046218
ADIN COMPATIBLE									
SWELL									
	Ø 3,5 - 6	BHS08321	BHS30 - 3200 (NP)	 	BHS03050 BHS03051		BHS02021	BHS02022	EM045130
TOUAREG S / OS									
	Ø 3,5 - 6	BHS08321	BHS30 - 3200 (NP)	 	BHS03050 BHS03051		BHS02021	BHS02022	EM045130

1.2 CAD/CAM SOLDADURA BASE CrCo

	PLATAFORMA Ø	SCANBODY	LIBRERÍA (PLATAFORMA)	 	BASE CrCo	BASE Ti	TORNILLO CLÍNICA	TORNILLO LAB	RÉPLICA IMPLANTE
TOUAREG CLOSEFIT									
  	RP Ø 3,5	BHS08311	BHS30 - 3100 (NP)	 	BHS03058 BHS03059		BHS02025	BHS02026	EM048148
	WP Ø 4,3 / 5	BHS08312	BHS30 - 3100 (RP)	 	BHS03046 BHS03047		BHS02023	BHS02024	EM048149
ALPHABIO COMPATIBLE									
EXTERNAL ALPHABIO									
  	NP Ø 3,5	BHS08211	BHS30 - 2100 (NP)				BHS02005	BHS02006	EM045222
	RP Ø 4,1	BHS08212	BHS30 - 2100 (RP)	 	BHS03003 BHS03004		BHS02001	BHS02002	EM045098
	WP Ø 5,1	BHS08213	BHS30 - 2100 (WP)				BHS02039	BHS02040	EM045070
INTERNAL ALPHABIO									
  	Ø 3,3 - 6	BHS08321	BHS30 - 3200 (NP)	 	BHS03050 BHS03051		BHS02021	BHS02022	EM045130
ALPHA DENT COMPATIBLE									
ACTIVE									
  	Ø 3,75 / 4,2 / 5,0	BHS08321	BHS30 - 3200 (NP)	 	BHS03050 BHS03051		BHS02021	BHS02022	EM045130
ACTIVE PLUS									
  	Ø 4,2 / 5,0	BHS08321	BHS30 - 3200 (NP)	 	BHS03050 BHS03051		BHS02021	BHS02022	EM045130
CLASSIC									
  	Ø 3,3 / 3,75 / 4,2 / 5,0	BHS08321	BHS30 - 3200 (NP)	 	BHS03050 BHS03051		BHS02021	BHS02022	EM045130
ANCLADEN COMPATIBLE									
ANCLALOCK									
  	Ø 3,75 - 5	BHS08321	BHS30 - 3200 (NP)	 	BHS03050 BHS03051		BHS02021	BHS02022	EM045130

1.2 CAD/CAM SOLDADURA BASE CrCo

	PLATAFORMA Ø	SCANBODY	LIBRERÍA (PLATAFORMA)	 	BASE CrCo	BASE Ti	TORNILLO CLÍNICA	TORNILLO LAB	REPÚBLICA IMPLANTE
ANTHOGRYR COMPATIBLE									
ANTHOFIT EH									
  	RP Ø 4,1	BHS08612	BHS30 - 6100 (RP)	 	BHS03003 BHS03004		BHS02001	BHS02002	EM045098
	WP Ø 5,0	BHS08613	BHS30 - 6100 (WP)				BHS02001	BHS02002	EM045082
OSSFIT									
  	RP Ø 4,8	BHS08712	BHS30 - 7100 (RN Ø 4,8)				BHS02011	BHS02012	EM045144
	SYN_RP Ø 4,8	BHS08713	BHS30 - 7100 (RN SYNOCTA Ø 4,8)				BHS02013	BHS02014	EM046375
ARDS COMPATIBLE									
SMART									
  	Ø 3,75 - 4,5	BHS08321	BHS30 - 3200 (NP)	 	BHS03050 BHS03051		BHS02021	BHS02022	EM045130
CLASSIC									
  	Ø 3,3 - 6	BHS08321	BHS30 - 3200 (NP)	 	BHS03050 BHS03051		BHS02021	BHS02022	EM045130
PREMIUM									
  	Ø 3,3 - 6	BHS08321	BHS30 - 3200 (NP)	 	BHS03050 BHS03051		BHS02021	BHS02022	EM045130
ASTRA COMPATIBLE									
AQUA									
  	RP_3.5 / 4.0	BHS08122	BHS30 - 1200 (RP Ø 3.5 / 4.0)	 	BHS03070 BHS03071		BHS02025	BHS02026	EM046371
LILAC									
 	WP_4.5 / 5.0	BHS08123	BHS30 - 1200 (WP Ø 4.5 / 5.0)				BHS02009	BHS02010	EM046370
CONE 20°									
 	Ø 3,5	BHS08124	BHS30 - 1200 (20°)				BHS02003	BHS02004	EM045638

1.2 CAD/CAM SOLDADURA BASE CrCo

	PLATAFORMA Ø	SCANBODY	LIBRERÍA (PLATAFORMA)	 	BASE CrCo	BASE Ti	TORNILLO CLÍNICA	TORNILLO LAB	RÉPLICA IMPLANTE
CONE 45°									
 	Ø 3,5	BHS08125	BHS30 - 1200 (45°)				BHS02003	BHS02004	EM047786
EV									
 	Ø3,6	BHS08152	BHS30 - 1500 (Ø3,6)	 	BHS03154 BHS03155		BHS02053	BHS02054	
	Ø4,2	BHS08153	BHS30 - 1500 (Ø4,2)	 	BHS03158 BHS03159		BHS02055	BHS02056	
AVINENT COMPATIBLE									
EH									
  	NP Ø 3,5	BHS08211	BHS30 - 2100 (NP)				BHS02031	BHS02032	EM045222
	RP Ø 4,1	BHS08212	BHS30 - 2100 (RP)	 	BHS03003 BHS03004		BHS02001	BHS02002	EM045098
	WP Ø 5,1	BHS08213	BHS30 - 2100 (WP)				BHS02039	BHS02040	EM045070
IH									
  	Ø 3,5 / 4,1	BHS08321	BHS30 - 3200 (NP)	 	BHS03050 BHS03051		BHS02021	BHS02022	EM045130
MULTUNIT									
  	RP Ø 4,8	BHS08411	BHS30 - 4100 (RP)		BHS03008		BHS02003	BHS02004	EM045169
OCEAN CONICAL (C.C.)									
  	Ø 3,5 (Implant Ø 3,5/Ø 4,0)	BHS08311	BHS30 - 3100 (NP)	 	BHS03058 BHS03059		BHS02025	BHS02026	EM048148
  	Ø 4,1 (Implant Ø 4,5/Ø 5,0)	BHS08312	BHS30 - 3100 (RP)	 	BHS03046 BHS03047		BHS02023	BHS02024	EM048149
BEGO COMPATIBLE									
EH									
 	NP_Ø 2,7 / 3,1	BHS08421	BHS30 - 4200 (NP)				BHS02013	BHS02014	EM047957


1.2 CAD/CAM SOLDADURA BASE CrCo

	PLATAFORMA Ø	SCANBODY	LIBRERÍA (PLATAFORMA)	 	BASE CrCo	BASE Ti	TORNILLO CLÍNICA	TORNILLO LAB	REPÚBLICA IMPLANTE
IH									
  	Ø 3,75 / 4,1	BHS08321	BHS30 - 3200 (NP)	 	BHS03050 BHS03051		BHS02021	BHS02022	EM045130
BIOGENESIS COMPATIBLE									
3ICON									
  	NP Ø 3,5	BHS08611	BHS30 - 6100 (NP)				BHS02001	BHS02002	EM045468
	RP Ø 4,1	BHS08612	BHS30 - 6100 (RP)	 	BHS03003 BHS03004		BHS02001	BHS02002	EM045098
	WP Ø 5,0	BHS08613	BHS30 - 6100 (WP)				BHS02001	BHS02002	EM045082
ITICON									
 	RP Ø 4,8	BHS08712	BHS30 - 7100 (RN Ø 4,8)				BHS02011	BHS02012	EM045144
 	RP Ø 4,8	BHS08713	BHS30 - 7100 (RN SYNOCTA Ø 4,8)				BHS02013	BHS02014	EM046375
ATICON									
  	RP Ø 3,5 / 4,0	BHS08122	BHS30 - 1200 (RP Ø 3,5 / 4,0)	 	BHS03070 BHS03071		BHS02025	BHS02026	EM046371
	WP Ø 4,5 / 5,0	BHS08123	BHS30 - 1200 (WP Ø 4,5 / 5,0)				BHS02009	BHS02010	EM046370
KISSES									
  	RP Ø 3,5 / 4,0	BHS08122	BHS30 - 1200 (RP Ø 3,5 / 4,0)	 	BHS03070 BHS03071		BHS02025	BHS02026	EM046371
	WP Ø 4,5 / 5,0 / 5,5	BHS08123	BHS30 - 1200 (WP Ø 4,5 / 5,0)				BHS02009	BHS02010	EM046370
CONE 20°									
 	RP / WP	BHS08124	BHS30 - 1200 (20°)				BHS02003	BHS02004	EM045638
CONE 45°									
 	RP / WP	BHS08125	BHS30 - 1200 (45°)				BHS02003	BHS02004	EM047786

1.2 CAD/CAM SOLDADURA BASE CrCo

	PLATAFORMA Ø	SCANBODY	LIBRERÍA (PLATAFORMA)	 	BASE CrCo	BASE Ti	TORNILLO CLÍNICA	TORNILLO LAB	RÉPLICA IMPLANTE
BIOHORIZONS COMPATIBLE									
INTERNAL									
	NP Ø 3,5	BHS08321	BHS30 - 3200 (NP)	 	BHS03050 BHS03051		BHS02021	BHS02022	EM045130
	RP Ø 4,5	BHS08322	BHS30 - 3200 (RP)	 	BHS03033 BHS03034		BHS02021	BHS02022	EM046218
	WP Ø 5,7	BHS08323	BHS30 - 3200 (WP)				BHS02021	BHS02022	
BIOMET 3i COMPATIBLE									
EH OSSEOTITE									
	NP Ø 3,5	BHS08611	BHS30 - 6100 (NP)				BHS02001	BHS02002	EM045468
	RP Ø 4,1	BHS08612	BHS30 - 6100 (RP)	 	BHS03003 BHS03004		BHS02001	BHS02002	EM045098
	WP Ø 5,0	BHS08613	BHS30 - 6100 (WP)				BHS02001	BHS02002	EM045082
CERTAIN									
	NP Ø 3,4	BHS08511	BHS30 - 5100 (NP)				BHS02007	BHS02008	EM045166
	RP Ø 4,1	BHS08512	BHS30 - 5100 (RP)				BHS02007	BHS02008	EM045165
	WP Ø 5,0	BHS08513	BHS30 - 5100 (WP)				BHS02007	BHS02008	EM045161
BIONER COMPATIBLE									
IKELT / BIKELT									
	RP Ø 4,1	BHS08212	BHS30 - 2100 (RP)	 	BHS03003 BHS03004		BHS02001	BHS02002	EM045098
	WP Ø 5,0	BHS08613	BHS30 - 6100 (WP)				BHS02001	BHS02002	EM045082
	WP Ø 5,1	BHS08213	BHS30 - 2100 (WP)				BHS02039	BHS02040	EM045070
HIKELT									
	NP Ø 3,8	BHS08321	BHS30 - 3200 (NP)	 	BHS03050 BHS03051		BHS02021	BHS02022	EM045130
	RP Ø 4,7	BHS08322	BHS30 - 3200 (RP)	 	BHS03033 BHS03034		BHS02021	BHS02022	EM046218

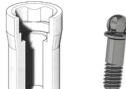1.2 CAD/CAM SOLDADURA BASE CrCo

	PLATAFORMA Ø	SCANBODY	LIBRERÍA (PLATAFORMA)	 	BASE CrCo	BASE Ti	TORNILLO CLÍNICA	TORNILLO LAB	RÉPLICA IMPLANTE
TOP DM									
	Ø 3,5 / 4,0 / 5,0	BHS08311	BHS30 - 3100 (NP)	 	BHS03058 BHS03059		BHS02025	BHS02026	EM048148
MULTIUNIT									
	RP Ø 4,8	BHS08411	BHS30 - 4100 (RP)		BHS03008		BHS02003	BHS02004	EM045169
BTI COMPATIBLE									
EH									
	NP Tiny Ø 3,5	BHS08421	BHS30 - 4200 (NP)				BHS02013	BHS02014	EM047957
	RP Ø 4,1	BHS08422	BHS30 - 4200 (RP)	 	BHS03003 BHS03004		BHS02001	BHS02002	EM045098
	WP Ø 5,5	BHS08423	BHS30 - 4200 (WP)				BHS02013	BHS02014	EM047967
CUATRILOBULAR									
	RP Ø 4,1	BHS08231	BHS30 - 2300 (RP)				BHS02021	BHS02022	EM047743
	WP Ø 5,5	BHS08232	BHS30 - 2300 (WP)				BHS02021	BHS02022	
BTK COMPATIBLE									
8NECK INT									
	SR Ø 4,8	BHS08712	BHS30 - 7100 (RN Ø 4,8)				BHS02011	BHS02012	EM045144
EVO DL EXT									
	NP Ø 3,4 / 3,7	BHS08611	BHS30 - 6100 (NP)				BHS02035	BHS02036	
	RP Ø 4,1 / 4,6	BHS08612	BHS30 - 6100 (RP)	 	BHS03003 BHS03004		BHS02001	BHS02002	EM045098
	WP Ø 5,0 / 5,6	BHS08613	BHS30 - 6100 (WP)				BHS02001	BHS02002	EM045082
EVO DL INT									
	Ø 3,5 / 3,7 / 4,6 / 5,0 / 5,6	BHS08321	BHS30 - 3200 (NP)	 	BHS03050 BHS03051		BHS02021	BHS02022	EM045130

1.2 CAD/CAM SOLDADURA BASE CrCo

	PLATAFORMA Ø	SCANBODY	LIBRERÍA (PLATAFORMA)	 	BASE CrCo	BASE Ti	TORNILLO CLÍNICA	TORNILLO LAB	RÉPLICA IMPLANTE
KLASSIC EXT									
	NP Ø 3,4	BHS08611	BHS30 - 6100 (NP)				BHS02035	BHS02036	
	RP Ø 4,1	BHS08612	BHS30 - 6100 (RP)	 	BHS03003 BHS03004		BHS02001	BHS02002	EM045098
	WP Ø 5,0	BHS08613	BHS30 - 6100 (WP)				BHS02001	BHS02002	EM045082
KLASSIC INT									
	Ø 3,5/ 4,5 / 5,0	BHS08321	BHS30 - 3200 (NP)	 	BHS03050 BHS03051		BHS02021	BHS02022	EM045130
KONIK EXT									
	NP Ø 3,4	BHS08611	BHS30 - 6100 (NP)				BHS02035	BHS02036	
	RP Ø 4,1	BHS08612	BHS30 - 6100 (RP)	 	BHS03003 BHS03004		BHS02001	BHS02002	EM045098
	WP Ø 5,0	BHS08613	BHS30 - 6100 (WP)				BHS02001	BHS02002	EM045082
KONIC INT									
	Ø 3,5/ 5,0	BHS08321	BHS30 - 3200 (NP)	 	BHS03050 BHS03051		BHS02021	BHS02022	EM045130
SAFETL INT									
	SR Ø 4,8	BHS08712	BHS30 - 7100 (RN Ø 4,8)				BHS02011	BHS02012	EM045144
B&W COMPATIBLE									
HEXAGONO EXT									
	NP Ø 3,3	BHS08741	BHS30 - 7400 (S2)				BHS02035	BHS02036	EM048022
	RP Ø 4,1	BHS08742	BHS30 - 7400 (S3 y S4)	 	BHS03003 BHS03004		BHS02001	BHS02002	EM045098
	WP Ø 5,0	BHS08613	BHS30 - 6100 (WP)				BHS02001	BHS02002	EM045082

1.2 CAD/CAM SOLDADURA BASE CrCo

	PLATAFORMA Ø	SCANBODY	LIBRERÍA (PLATAFORMA)	 	BASE CrCo	BASE Ti	TORNILLO CLÍNICA	TORNILLO LAB	RÉPLICA IMPLANTE
HEXAGONO INT									
	NP Ø 3,3	BHS08321	BHS30 - 3200 (NP)	 	BHS03050 BHS03051		BHS02021	BHS02022	EM045130
	RP Ø 4,0	BHS08321	BHS30 - 3200 (NP)	 	BHS03050 BHS03051		BHS02021	BHS02022	EM045130
	WP Ø 5,0	BHS08321	BHS30 - 3200 (NP)	 	BHS03050 BHS03051		BHS02021	BHS02022	EM045130
CAMLOG COMPATIBLE									
CAMLOG									
	Ø 3,3	BHS08721	BHS30-7200 (Ø3,3)	 	BHS03130 BHS03131		BHS02049	BHS02050	
	Ø 3,8	BHS08722	BHS30-7200 (Ø3,8)	 	BHS03134 BHS03135		BHS02049	BHS02050	
	Ø 4,3	BHS08723	BHS30-7200 (Ø4,3)	 	BHS03138 BHS03139		BHS02049	BHS02050	
	Ø 5,0	BHS08724	BHS30-7200 (Ø5,0)	 	BHS03142 BHS03143		BHS02051	BHS02052	
CONEXÃO SIST. PROTESE COMPATIBLE									
MORSE INDEXADO									
	Ø 3,5 / 3,75 / 4,0 / 5,0	BHS08311	BHS30 - 3100 (NP)	 	BHS03058 BHS03059		BHS02025	BHS02026	EM048148
HEXAGONO EXT									
	Ø 3,3	BHS08741	BHS30 - 7400 (S2)				BHS02035	BHS02036	EM048022
	Ø 3,75 / 4,0	BHS08742	BHS30 - 7400 (S3 y S4)	 	BHS03003 BHS03004		BHS02001	BHS02002	EM045098
	Ø 5,0	BHS08613	BHS30 - 6100 (WP)				BHS02001	BHS02002	EM045082
HEXAGONO INT									
	Ø 3,75 / 4,0 / 5,0	BHS08322	BHS30 - 3200 (RP)	 	BHS03033 BHS03034		BHS02021	BHS02022	EM046218

1.2 CAD/CAM SOLDADURA BASE CrCo

	PLATAFORMA Ø	SCANBODY	LIBRERÍA (PLATAFORMA)	 	BASE CrCo	BASE Ti	TORNILLO CLÍNICA	TORNILLO LAB	RÉPLICA IMPLANTE
CORTEX COMPATIBLE									
DYNAMIX									
  	Ø 3,3 / 3,8 / 4,2 / 5	BHS08321	BHS30 - 3200 (NP)	 	BHS03050 BHS03051		BHS02021	BHS02022	EM045130
CLASSIX									
  	Ø 3,3 / 3,8 / 4,2 / 5	BHS08321	BHS30 - 3200 (NP)	 	BHS03050 BHS03051		BHS02021	BHS02022	EM045130
SATURN									
  	Ø 3,8 / 4,2	BHS08321	BHS30 - 3200 (NP)	 	BHS03050 BHS03051		BHS02021	BHS02022	EM045130
COWELLMEDI COMPATIBLE									
EXTERNAL									
  	RP Ø 4,1	BHS08212	BHS30 - 2600 (RP)	 	BHS03003 BHS03004		BHS02001	BHS02002	EM045098
	WP Ø 5,1	BHS08213	BHS30 - 2600 (WP)				BHS02039	BHS02040	EM045070
INTERNAL									
 	RN Ø 4,8	BHS08712	BHS30 - 7600 (RN Ø 4,8)				BHS02011	BHS02012	EM045144
SUBMERGED (INT)									
  	Ø 3,5 / 4 / 4,5 / 5 / 6	BHS08432	BHS30 - 4600 (4.0)	 	BHS03102 BHS03103		BHS02009	BHS02010	
DENTALTECH COMPATIBLE									
IMPLAGIC GII									
  	RP Ø 4,5	BHS08322	BHS30 - 3200 (RP)	 	BHS03033 BHS03034		BHS02021	BHS02022	EM046218
IMPLASSIC HX2									
  	RP Ø 4,1	BHS08212	BHS30 - 2100 (RP)	 	BHS03003 BHS03004		BHS02001	BHS02002	EM045098

1.2 CAD/CAM SOLDADURA BASE CrCo

	PLATAFORMA Ø	SCANBODY	LIBRERÍA (PLATAFORMA)	 	BASE CrCo	BASE Ti	TORNILLO CLÍNICA	TORNILLO LAB	RÉPLICA IMPLANTE
DENTIS COMPATIBLE									
S-CLEAN									
  	RP Ø 3,4	BHS08432	BHS30 - 4600 (4.0)	 	BHS03102 BHS03103		BHS02009	BHS02010	
I-CLEAN									
 	RP Ø 4,8	BHS08712	BHS30 - 7100 (RN Ø 4,8)				BHS02011	BHS02012	EM045144
DENTIUM COMPATIBLE									
SIMPLE LINE II									
 	RN Ø 4,8	BHS08712	BHS30 - 7600 (RN Ø 4,8)				BHS02011	BHS02012	EM045144
IMPLANTUM									
  	Ø 3,6 / 4 / 4,4 / 4,9 / 6 / 7	BHS08432	BHS30 - 4600 (4.0)	 	BHS03102 BHS03103		BHS02009	BHS02010	
SUPER LINE									
  	Ø 3,6 / 4 / 4,5 / 5 / 6	BHS08432	BHS30 - 4600 (4.0)	 	BHS03102 BHS03103		BHS02009	BHS02010	
DENTSPLY SIRONA COMPATIBLE									
XIVE S									
	D 3.4	BHS08221	BHS30-2200 (D3.4)	 	BHS03118 BHS03119		BHS02047	BHS02048	
	D 3.8	BHS08222	BHS30-2200 (D3.8)	 	BHS03122 BHS03123		BHS02047	BHS02048	
	D 4.5	BHS08223	BHS30-2200 (D4.5)	 	BHS03126 BHS03127		BHS02047	BHS02048	

1.2 CAD/CAM SOLDADURA BASE CrCo

	PLATAFORMA Ø	SCANBODY	LIBRERÍA (PLATAFORMA)	 	BASE CrCo	BASE Ti	TORNILLO CLÍNICA	TORNILLO LAB	RÉPLICA IMPLANTE
DIO IMPLANTS COMPATIBLE									
EXTERNAL									
  	NP Ø 3,5	BHS08211	BHS30 - 2100 (NP)				BHS02005	BHS02006	EM045222
	RP Ø 4,1	BHS08212	BHS30 - 2100 (RP)	 	BHS03003 BHS03004		BHS02001	BHS02002	EM045098
	WP Ø 5,1	BHS08213	BHS30 - 2100 (WP)				BHS02039	BHS02040	EM045070
UF II									
  	Ø 3,8 / 4 / 4,5 / 5 / 5,5	BHS08432	BHS30 - 4600 (4.0)	 	BHS03102 BHS03103		BHS02009	BHS02010	
EDISON MEDICAL COMPATIBLE									
LAMINA (IH)									
  	Ø 3,3 / 3,75 / 4,2 / 5,0 / 6,0	BHS08321	BHS30 - 3200 (NP)	 	BHS03050 BHS03051		BHS02021	BHS02022	EM045130
FORTIS (IH)									
  	Ø 3,3 / 3,75 / 4,2 / 5,0 / 6,0	BHS08321	BHS30 - 3200 (NP)	 	BHS03050 BHS03051		BHS02021	BHS02022	EM045130
ELITE MEDICA COMPATIBLE									
EXTERNAL CONNECT									
  	NP Ø 3,5	BHS08211	BHS30 - 2100 (NP)				BHS02005	BHS02006	EM045222
	RP Ø 4,1	BHS08212	BHS30 - 2100 (RP)	 	BHS03003 BHS03004		BHS02001	BHS02002	EM045098
	WP Ø 5,1	BHS08213	BHS30 - 2100 (WP)				BHS02039	BHS02040	EM045070
EUROTEKNIKA COMPATIBLE									
UNEVA									
  	Ø 3,6 / 4,1 / 4,8	BHS08212	BH30 - 2100 (RP)	 	BHS03003 BHS03004		BHS02001	BHS02002	EM045098
NATURACTIS									
  	Ø 3,5 / 4 / 4,5 / 5	BHS08122	BH30 - 1200 (RP Ø 3.5 / 4.0)	 	BHS03070 BHS03071		BHS02025	BHS02026	EM046371


1.2 CAD/CAM SOLDADURA BASE CrCo

	PLATAFORMA Ø	SCANBODY	LIBRERÍA (PLATAFORMA)	 	BASE CrCo	BASE Ti	TORNILLO CLÍNICA	TORNILLO LAB	REPÚBLICA IMPLANTE
NATURALL +									
  	Ø 3,5 / 4 / 4,5 / 5	BHS08122	BHS30 - 1200 (RP Ø 3.5 / 4.0)	 	BHS03070 BHS03071		BHS02025	BHS02026	EM046371
NATEA									
  	NP Ø 3,6 / 4,1	BHS08122	BHS30 - 1200 (RP Ø 3.5 / 4.0)	 	BHS03070 BHS03071		BHS02025	BHS02026	EM046371
	RP Ø 4,8 / 6	BHS08122	BHS30 - 1200 (RP Ø 3.5 / 4.0)	 	BHS03070 BHS03071		BHS02025	BHS02026	EM046371
AESTHETICA									
 	Ø 3,6 / 4,1 / 4,8	BHS08712	BHS30 - 7100 (RN Ø 4,8)				BHS02011	BHS02012	EM045144
GALIMPLANT COMPATIBLE									
IPXE - EXTERNA									
  	RP Ø 3,5 / 4 / 5	BHS08212	BHS30 - 2100 (RP)	 	BHS03003 BHS03004		BHS02001	BHS02002	EM045098
ICI - INTERNA									
  	RP Ø 3,2 / 3,5 / 4 / 5	BHS08122	BHS30 - 1200 (RP Ø 3.5 / 4.0)	 	BHS03070 BHS03071		BHS02025	BHS02026	EM046371
IPX - INTERNA									
  	RP Ø 3,5 / 4 / 4,5 / 5	BHS08122	BHS30 - 1200 (RP Ø 3.5 / 4.0)	 	BHS03070 BHS03071		BHS02025	BHS02026	EM046371
GMI COMPATIBLE									
FRONTIER (IH)									
  	RP Standard Ø 3,3	BHS08321	BHS30 - 3200 (NP)	 	BHS03050 BHS03051		BHS02021	BHS02022	EM045130
	WP Wide Ø 4,3	BHS08322	BHS30 - 3200 (RP)	 	BHS03033 BHS03034		BHS02021	BHS02022	EM046218
FRONTIER multi-aesthetic									
  	RP Ø 4,8	BHS08411	BHS30 - 4100 (RP)		BHS03008		BHS02003	BHS02004	EM045169

1.2 CAD/CAM SOLDADURA BASE CrCo

	PLATAFORMA Ø	SCANBODY	LIBRERÍA (PLATAFORMA)	 	BASE CrCo	BASE Ti	TORNILLO CLÍNICA	TORNILLO LAB	RÉPLICA IMPLANTE
PHOENIX (EH)									
	Standard Ø 4,1	BHS08212	BHS30 - 2100 (RP)	 	BHS03003 BHS03004		BHS02001	BHS02002	EM045098
	Wide (Hex. 2,7) Ø 5,1	BHS08613	BHS30 - 6100 (WP)				BHS02001	BHS02002	EM045082
	Wide (Hex. 3,4) Ø 5,1	BHS08213	BHS30 - 2100 (WP)				BHS02039	BHS02040	EM045070
PHOENIX multi-aesthetic									
	RP Ø 4,8	BHS08411	BHS30 - 4100 (RP)	 	BHS03008		BHS02003	BHS02004	EM045169
GT MEDICAL COMPATIBLE									
BEST FIT HXE									
	NP Ø 3,5	BHS08211	BHS30 - 2100 (NP)				BHS02005	BHS02006	EM045222
	RP Ø 4,1	BHS08212	BHS30 - 2100 (RP)	 	BHS03003 BHS03004		BHS02001	BHS02002	EM045098
	WP Ø 5,1	BHS08213	BHS30 - 2100 (WP)				BHS02039	BHS02040	EM045070
BEST FIT HXI									
	WP 4,5 / 5,0	BHS08123	BHS30 - 1200 (WP Ø 4.5 / 5.0)				BHS02009	BHS02010	EM046370
BEST FIT 002									
	NP Ø 3,5	BHS08321	BHS30 - 3200 (NP)	 	BHS03050 BHS03051		BHS02021	BHS02022	EM045130
BEST FIT OCT									
	RN Ø 4,8	BHS08712	BHS30 - 7100 (RN Ø 4,8)				BHS02011	BHS02012	EM045144
	SYN_RN Ø 4,8	BHS08713	BHS30 - 7100 (RN SYNOCTA Ø 4,8)				BHS02013	BHS02014	EM046375
HI TECH COMPATIBLE									
SELF THREAD									
	SLT Ø 3,3 / 3,75	BHS08321	BHS30 - 3200 (NP)	 	BHS03050 BHS03051		BHS02021	BHS02022	EM045130
	GTI Ø 4,2 / 5	BHS08322	BHS30 - 3200 (RP)	 	BHS03033 BHS03034		BHS02021	BHS02022	EM046218

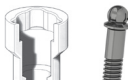1.2 CAD/CAM SOLDADURA BASE CrCo

	PLATAFORMA Ø	SCANBODY	LIBRERÍA (PLATAFORMA)	 	BASE CrCo	BASE Ti	TORNILLO CLÍNICA	TORNILLO LAB	RÉPLICA IMPLANTE
LGI PLUS									
	Ø 3,5 / 4,3 / 5 / 6	BHS08321	BHS30 - 3200 (NP)	 	BHS03050 BHS03051		BHS02021	BHS02022	EM045130
IMPLANT DIRECT COMPATIBLE									
INTERACTIVE									
	NP Ø 3,5	BHS08311	BHS30 - 3100 (NP)	 	BHS03058 BHS03059		BHS02025	BHS02026	EM048148
	RP Ø 4,3	BHS08312	BHS30 - 3100 (RP)	 	BHS03046 BHS03047		BHS02023	BHS02024	EM048149
	NP Ø 3,5	BHS08321	BHS30 - 3200 (NP)	 	BHS03050 BHS03051		BHS02021	BHS02022	EM045130
	RP Ø 4,5	BHS08322	BHS30 - 3200 (RP)	 	BHS03033 BHS03034		BHS02021	BHS02022	EM046218
	WP Ø 5,7	BHS08323	BHS30 - 3200 (WP)				BHS02021	BHS02022	
REPLUS / REPLANT									
	NP Ø 3,5	BHS08111	BHS30 - 1100 (NP)				BHS02027	BHS02028	EM046291
	RP Ø 4,3	BHS08112	BHS30 - 1100 (RP)				BHS02009	BHS02010	EM046292
	WP Ø 5,0	BHS08113	BHS30 - 1100 (WP)				BHS02009	BHS02010	EM046293
SWISHPLUS / SWISHPLANT									
	RN Ø 4,8	BHS08712	BHS30 - 7100 (RN Ø 4,8)				BHS02011	BHS02012	EM045144
	SYN_RN Ø 4,8	BHS08713	BHS30 - 7100 (RN SYNOCTA Ø 4,8)				BHS02013	BHS02014	EM046375
JDENTALCARE COMPATIBLE									
JDEVOLUTION									
	Ø 3,7 / 4,3 / 5 / 6	BHS08321	BHS30 - 3200 (NP)	 	BHS03050 BHS03051		BHS02021	BHS02022	EM045130


1.2 CAD/CAM SOLDADURA BASE CrCo

	PLATAFORMA Ø	SCANBODY	LIBRERÍA (PLATAFORMA)	 BASE CrCo	BASE Ti	TORNILLO CLÍNICA	TORNILLO LAB	RÉPLICA IMPLANTE
KEYSTONE DENTAL COMPATIBLE								
RESTORE								
	NP Ø 3,3	BHS08741	BHS30 - 7400 (S2)			BHS02035	BHS02036	EM048022
	RP Ø 4,1	BHS08742	BHS30 - 7400 (S3 y S4)	 BHS03003  BHS03004		BHS02001	BHS02002	EM045098
OCT-XT								
	RN Ø 4,8	BHS08712	BHS30 - 7100 (RN Ø 4,8)			BHS02011	BHS02012	EM045144
	SYN_RN Ø 4,8	BHS08713	BHS30 - 7100 (RN SYNOCTA Ø 4,8)			BHS02013	BHS02014	EM046375
RENOVA								
	NP Ø 3,75	BHS08321	BHS30 - 3200 (NP)	 BHS03050  BHS03051		BHS02021	BHS02022	EM045130
	RP Ø 4,5 / 4,75	BHS08322	BHS30 - 3200 (RP)	 BHS03033  BHS03034		BHS02021	BHS02022	EM046218
KLOCKNER COMPATIBLE								
SK2 (EH)								
	RP Ø 4,2	BHS08521	BHS30 - 5200 (RP)			BHS02031	BHS02032	EM046747
KL (EH)								
	NP Ø 3,5	BHS08211	BHS30 - 2100 (NP)			BHS02005	BHS02006	EM045222
	RP Ø 4,1	BHS08212	BHS30 - 2100 (RP)	 BHS03003  BHS03004		BHS02001	BHS02002	EM045098
	WP Ø 5,1	BHS08213	BHS30 - 2100 (WP)			BHS02039	BHS02040	EM045070

1.2 CAD/CAM SOLDADURA BASE CrCo

	PLATAFORMA Ø	SCANBODY	LIBRERÍA (PLATAFORMA)	 	BASE CrCo	BASE Ti	TORNILLO CLÍNICA	TORNILLO LAB	RÉPLICA IMPLANTE
LEADER COMPATIBLE									
TIXOS INTERNAL HEX									
	NP Ø 3,5 / 4,0	BHS08321	BHS30 - 3200 (NP)	 	BHS03050 BHS03051		BHS02021	BHS02022	EM045130
TIXOS EXTERNAL HEX									
	RP Ø 4,1	BHS08612	BHS30 - 6100 (RP)	 	BHS03003 BHS03004		BHS02001	BHS02002	EM045098
	WP Ø 5,0	BHS08613	BHS30 - 6100 (WP)				BHS02001	BHS02002	EM045082
MEDENTIS COMPATIBLE									
ICX									
	Ø 3,45 / 3,7 - 4,1 / 4,8	BHS08751	BHS30-7700 (Ø 3,45 / 3,7 - 4,1 / 4,8)	 	BHS03180 BHS03181		BHS02015	BHS02016	
MEGAGEN COMPATIBLE									
ANYONE INTERNAL									
	NP	BHS08432	BHS30 - 4600 (4.0)	 	BHS03102 BHS03103		BHS02009	BHS02010	
	RP	BHS08432	BHS30 - 4600 (4.0)	 	BHS03102 BHS03103		BHS02009	BHS02010	
	WP	BHS08432	BHS30 - 4600 (4.0)	 	BHS03102 BHS03103		BHS02009	BHS02010	
ANYONE EXTERNAL									
	NP	BHS08211	BHS30 - 2100 (NP)				BHS02005	BHS02006	EM045222
	RP	BHS08212	BHS30 - 2100 (RP)	 	BHS03003 BHS03004		BHS02001	BHS02002	EM045098
	WP	BHS08613	BHS30 - 6100 (WP)				BHS02001	BHS02002	EM045082

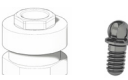1.2 CAD/CAM SOLDADURA BASE CrCo

	PLATAFORMA Ø	SCANBODY	LIBRERÍA (PLATAFORMA)	 	BASE CrCo	BASE Ti	TORNILLO CLÍNICA	TORNILLO LAB	RÉPLICA IMPLANTE
ANYRIDGE									
	Small	Ø3,5	BHS08991	BHS30-9900 (4,5/5,0)	 	BHS03166 BHS03167	BHS02027	BHS02028	
	Regular	Ø4,0/4,5	BHS08991	BHS30-9900 (4,5/5,0)	 	BHS03166 BHS03167	BHS02027	BHS02028	
	Wide	Ø5,0/5,5	BHS08991	BHS30-9900 (4,5/5,0)	 	BHS03166 BHS03167	BHS02027	BHS02028	
OCTA Abutment									
	SYN_RN	Ø4,8	BHS08713	BHS30-7100 (RN SYNOCTA Ø4,8)			BHS02013	BHS02014	EM046375
MICRODENT COMPATIBLE									
EKTOS (IH)									
	NP	Ø 3,5	BHS08321	BHS30 - 3200 (NP)	 	BHS03050 BHS03051	BHS02021	BHS02022	EM045130
	RP	Ø 4,5	BHS08322	BHS30 - 3200 (RP)	 	BHS03033 BHS03034	BHS02021	BHS02022	EM046218
	WP	Ø 5,7	BHS08323	BHS30 - 3200 (WP)			BHS02021	BHS02022	
MINI (EH)									
	NP	Ø 3,5	BHS08611	BHS30 - 6100 (NP)			BHS02031	BHS02032	
SUV (EH)									
	SUV	Ø 4,1	BHS08612	BHS30 - 6100 (RP)	 	BHS03003 BHS03004	BHS02001	BHS02002	EM045098
	SUV	Ø 5,1	BHS08613	BHS30 - 6100 (WP)			BHS02001	BHS02002	EM045082
SYSTEM (EH)									
	MST	Ø 3,5	BHS08611	BHS30 - 6100 (NP)			BHS02031	BHS02032	
	MS	Ø 3,5	BHS08611	BHS30 - 6100 (NP)			BHS02031	BHS02032	


1.2 CAD/CAM SOLDADURA BASE CrCo

	PLATAFORMA Ø	SCANBODY	LIBRERÍA (PLATAFORMA)	 	BASE CrCo	BASE Ti	TORNILLO CLÍNICA	TORNILLO LAB	RÉPLICA IMPLANTE
UNIVERSAL (EH)									
	MST Ø 3,5	BHS08611	BHS30 - 6100 (NP)				BHS02031	BHS02032	
	MS Ø 3,5	BHS08611	BHS30 - 6100 (NP)				BHS02031	BHS02032	
	SU Ø 4,1	BHS08612	BHS30 - 6100 (RP)	 	BHS03003 BHS03004		BHS02001	BHS02002	EM045098
	SU Ø 5,1	BHS08613	BHS30 - 6100 (WP)				BHS02001	BHS02002	EM045082
MIS COMPATIBLE									
LANCE									
	STD Ø 4,1	BHS08612	BHS30 - 6100 (RP)	 	BHS03003 BHS03004		BHS02001	BHS02002	EM045098
	WP Ø 5,0	BHS08613	BHS30 - 6100 (WP)				BHS02001	BHS02002	EM045082
SEVEN / M4									
	Narrow Ø 3,30	BHS08951	BHS30-9500 (NARROW)	 	BHS03200 BHS03201		BHS02041	BHS02042	
	Standard Ø 3,75 / 4,2	BHS08321	BHS30 - 3200 (NP)	 	BHS03050 BHS03051		BHS02021	BHS02022	EM045130
	Wide Ø 5,0 / 6,0	BHS08322	BHS30 - 3200 (RP)	 	BHS03033		BHS02021	BHS02022	EM046218
MULTIUNIT MIS									
	RP Ø 4,8	BHS08411	BHS30 - 4100 (RP)		BHS03008		BHS02037	BHS02038	
MOZO GRAU COMPATIBLE									
INHEX									
	RP Ø 3,75 / 4,25	BHS08122	BHS30 - 1200 (RP Ø 3.5 / 4.0)	 	BHS03070 BHS03071		BHS02025	BHS02026	EM046371
	WP Ø 5,0	BHS08123	BHS30 - 1200 (WP Ø 4.5 / 5.0)				BHS02009	BHS02010	EM046370
	CONO 20	BHS08124	BHS30 - 1200 (20°)				BHS02003	BHS02004	EM045638
	CONO 45	BHS08125	BHS30 - 1200 (45°)				BHS02003	BHS02004	EM047786

1.2 CAD/CAM SOLDADURA BASE CrCo

	PLATAFORMA Ø	SCANBODY	LIBRERÍA (PLATAFORMA)	BASE CrCo	BASE Ti	TORNILLO CLÍNICA	TORNILLO LAB	RÉPLICA IMPLANTE
OSSEUS								
	NP Ø 3,4	BHS08611	BHS30 - 6100 (NP)			BHS02001	BHS02002	EM045468
	RP Ø 4,1	BHS08612	BHS30 - 6100 (RP)	○ BHS03003 ○ BHS03004		BHS02001	BHS02002	EM045098
	WP Ø 5,0	BHS08213	BHS30 - 2100 (WP)			BHS02039	BHS02040	EM045070
MPI COMPATIBLE								
EXTERNA EH								
	NP Ø 3,5	BHS08421	BHS30 - 4200 (NP)			BHS02001	BHS02002	EM047957
	RP Ø 4,1	BHS08612	BHS30 - 6100 (RP)	○ BHS03003 ○ BHS03004		BHS02001	BHS02002	EM045098
	WP Ø 5,0	BHS08613	BHS30 - 6100 (WP)			BHS02001	BHS02002	EM045082
INTERNA CM								
	RP Ø 4,0	BHS08122	BHS30 - 1200 (RP Ø 3.5 / 4.0)	○ BHS03070 ○ BHS03071		BHS02025	BHS02026	EM046371
	WP Ø 5,0	BHS08123	BHS30 - 1200 (WP Ø 4.5 / 5.0)			BHS02009	BHS02010	EM046370
NEOBIOTECH COMPATIBLE								
EB EXTERNAL SYSTEM								
	NP Ø 3,5	BHS08211	BHS30 - 2100 (NP)			BHS02005	BHS02006	EM045222
	RP Ø 4,1	BHS08212	BHS30 - 2100 (RP)	○ BHS03003 ○ BHS03004		BHS02001	BHS02002	EM045098
	WP Ø 5,1	BHS08213	BHS30 - 2100 (WP)			BHS02039	BHS02040	EM045070
IS INTERNAL SYSTEM								
	Ø 3,5 / 4 / 4,5 / 5	BHS08432	BHS30 - 4600 (4.0)	○ BHS03102 ○ BHS03103		BHS02009	BHS02010	

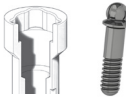1.2 CAD/CAM SOLDADURA BASE CrCo

	PLATAFORMA Ø	SCANBODY	LIBRERÍA (PLATAFORMA)	 	BASE CrCo	BASE Ti	TORNILLO CLÍNICA	TORNILLO LAB	RÉPLICA IMPLANTE
NEODENT COMPATIBLE									
TITAMAX HE SMART									
	RP Ø 4,1	BHS08612	BHS30 - 6100 (RP)	 	BHS03003 BHS03004		BHS02001	BHS02002	EM045098
	WP Ø 5,0	BHS08613	BHS30 - 6100 (WP)				BHS02001	BHS02002	EM045082
MINI PILAR CM									
	RP Ø 4,8	BHS08411	BHS30 - 4100 (RP)		BHS03008		BHS02003	BHS02004	EM045169
NOBEL COMPATIBLE									
BRÄNEMARK									
	NP Ø 3,5	BHS08211	BHS30 - 2100 (NP)				BHS02005	BHS02006	EM045222
	RP Ø 4,1	BHS08212	BHS30 - 2100 (RP)	 	BHS03003 BHS03004		BHS02001	BHS02002	EM045098
	WP Ø 5,1	BHS08213	BHS30 - 2100 (WP)				BHS02039	BHS02040	EM045070
REPLACE									
	NP Ø 3,5	BHS08111	BHS30 - 1100 (NP)				BHS02027	BHS02028	EM046291
	RP Ø 4,3	BHS08112	BHS30 - 1100 (RP)				BHS02009	BHS02010	EM046292
	WP Ø 5,0	BHS08113	BHS30 - 1100 (WP)				BHS02009	BHS02010	EM046293
ACTIVE									
	NP Ø 3,5	BHS08311	BHS30 - 3100 (NP)	 	BHS03058 BHS03059		BHS02025	BHS02026	EM048148
	RP Ø 4,3 / Ø 5,0	BHS08312	BHS30 - 3100 (RP)	 	BHS03046 BHS03047		BHS02023	BHS02024	EM048149
MULTIUNIT									
	RP Ø 4,8	BHS08411	BHS30 - 4100 (RP)		BHS03008		BHS02003	BHS02004	EM045169

1.2 CAD/CAM SOLDADURA BASE CrCo

	PLATAFORMA Ø	SCANBODY	LIBRERÍA (PLATAFORMA)		BASE CrCo	BASE Ti	TORNILLO CLÍNICA	TORNILLO LAB	RÉPLICA IMPLANTE
NT TRADING COMPATIBLE									
2-CONnect									
	M1,4	Ø5,0	BHS08771	BHS30-7700 (M1,4)	○ BHS03177		BHS02063	BHS02064	
	M1,6	Ø5,0	BHS08771	BHS30-7700 (M1,6)	○ BHS03177		BHS02065	BHS02066	
	M1,8	Ø5,0	BHS08771	BHS30-7700 (M1,8)	○ BHS03177		BHS02067	BHS02068	
OSSTEM IMPLANT COMPATIBLE									
OSSTEM TS									
	Ø 4 / 4,5 / 5 / 6	BHS08432	BHS30 - 4600 (4.0)				BHS02009	BHS02010	
OSSTEM US									
	MINI Ø 3,5	BHS08211	BHS30 - 2100 (NP)				BHS02005	BHS02006	EM045222
	RP Ø 4,1	BHS08212	BHS30 - 2100 (RP)				BHS02001	BHS02002	EM045098
	WP Ø 5,1	BHS08213	BHS30 - 2100 (WP)				BHS02039	BHS02040	EM045070
OSTEOPLUS COMPATIBLE									
ARGENTIUM									
	RP Ø 4,2	BHS08521	BHS30 - 5200 (RP)				BHS02031	BHS02032	EM046747
OSTEOPLUS - SHe									
	RP Ø 4,1	BHS08612	BHS30 - 6100 (RP)				BHS02001	BHS02002	EM045098
	WP Ø 5,0	BHS08613	BHS30 - 6100 (WP)				BHS02001	BHS02002	EM045082
OSTEOPLUS - SHi									
	RP Ø 3,5	BHS08321	BHS30 - 3200 (NP)				BHS02021	BHS02022	EM045130
	WP Ø 4,5	BHS08322	BHS30 - 3200 (RP)				BHS02021	BHS02022	EM046218

1.2 CAD/CAM SOLDADURA BASE CrCo

	PLATAFORMA Ø	SCANBODY	LIBRERÍA (PLATAFORMA)	 	BASE CrCo	BASE Ti	TORNILLO CLÍNICA	TORNILLO LAB	REPÚBLICA IMPLANTE
OXTEIN COMPATIBLE									
HEX EXTERNA									
	MINI Ø 3,3	BHS08741	BHS30 - 7400 (S2)				BHS02035	BHS02036	EM048022
	RP Ø 4,1	BHS08742	BHS30 - 7400 (S3 y S4)	 	BHS03003 BHS03004		BHS02001	BHS02002	EM045098
	WP Ø 5,0	BHS08613	BHS30 - 6100 (WP)				BHS02001	BHS02002	EM045082
HEX INTERNA									
	NP Ø 3,5	BHS08321	BHS30 - 3200 (NP)	 	BHS03050 BHS03051		BHS02021	BHS02022	EM045130
	RP Ø 4,5	BHS08322	BHS30 - 3200 (RP)	 	BHS03033 BHS03034		BHS02021	BHS02022	EM046218
OCTA INTERNA									
	RN Ø 4,8	BHS08712	BHS30 - 7100 (RN Ø 4,8)				BHS02011	BHS02012	EM045144
	RN Ø 4,8	BHS08713	BHS30 - 7100 (RN SYNOCTA Ø 4,8)				BHS02013	BHS02014	EM046375
PALTOP COMPATIBLE									
INTERNAL HEX CONNECTION									
	Narrow Ø 3,25	BHS08951	BHS30-9500 (NARROW)	 	BHS03200 BHS03201		BHS02041	BHS02042	
	Standard Ø 3,75 / 4,2 / 5,0	BHS08321	BHS30-3200 (NP)	 	BHS03050 BHS03051		BHS02021	BHS02022	EM045130
	Wide Ø 6,0	BHS08322	BHS30-3200 (RP)	 	BHS03033 BHS03034		BHS02021	BHS02022	EM046218
PCA Implant System (Paltop Conical Active)									
	Narrow Ø 3,25	BHS08122	BHS30 - 1200 (RP Ø 3.5 / 4.0)	 	BHS03070 BHS03071		BHS02025	BHS02026	EM046371
	Standard Ø 3,75 / 4,2 / 5,0	BHS08122	BHS30 - 1200 (RP Ø 3.5 / 4.0)	 	BHS03070 BHS03071		BHS02025	BHS02026	EM046371
MULTI UNIT									
	Ø 5,0	BHS08271	BHS30-2700 (MU)				BHS02031	BHS02032	
SINGLE UNIT									
	Ø 4,5	BHS08251	BHS30-2500 (SINGLE)				BHS02031	BHS02032	

1.2 CAD/CAM SOLDADURA BASE CrCo

	PLATAFORMA Ø	SCANBODY	LIBRERÍA (PLATAFORMA)	 	BASE CrCo	BASE Ti	TORNILLO CLÍNICA	TORNILLO LAB	RÉPLICA IMPLANTE
PHIBO COMPATIBLE									
TSH									
	S2 Ø 3,3	BHS08741	BHS30 - 7400 (S2)				BHS02035	BHS02036	EM048022
	S3 / S4 Ø 4,1	BHS08742	BHS30 - 7400 (S3 y S4)	 	BHS03003 BHS03004		BHS02001	BHS02002	EM045098
AUREA EVO									
	NP Ø 3,5			 	BHS03106 BHS03107		BHS02041	BHS02042	
	RP Ø 4,3			 	BHS03110 BHS03111		BHS02021	BHS02022	
RADHEX IMPLANTS COMPATIBLE									
PHE / PHEA									
	NP Ø 3,5	BHS08211	BHS30 - 2100 (NP)				BHS02005	BHS02006	EM045222
	RP Ø 4,1	BHS08212	BHS30 - 2100 (RP)	 	BHS03003 BHS03004		BHS02001	BHS02002	EM045098
PHI / PHIA									
	NP Ø3,5	BHS08321	BHS30-3200 (NP)	 	BHS03050 BHS03051		BHS02021	BHS02022	EM045130
	RP Ø4,5	BHS08322	BHS30-3200 (RP)	 	BHS03033 BHS03034		BHS02021	BHS02022	EM046218
PCI									
	280	BHS08122	BHS30 - 1200 (RP Ø 3.5 / 4.0)	 	BHS03070 BHS03071		BHS02025	BHS02026	EM046371
	350	BHS08123	BHS30 - 1200 (WP Ø 4.5 / 5.0)				BHS02009	BHS02010	EM046370
SGS COMPATIBLE									
P1 / P7									
	RP Ø 3,75	BHS08321	BHS30 - 3200 (NP)	 	BHS03050 BHS03051		BHS02021	BHS02022	EM045130

1.2 CAD/CAM SOLDADURA BASE CrCo

	PLATAFORMA Ø	SCANBODY	LIBRERÍA (PLATAFORMA)	 	BASE CrCo	BASE Ti	TORNILLO CLÍNICA	TORNILLO LAB	RÉPLICA IMPLANTE
SIGNO VINCES COMPATIBLE									
DUO / INTEGRA									
	RP Ø 4,1	BHS08212	BHS30-2100 (RP)	 BHS03003  BHS03004			BHS02001	BHS02002	EM045098
DUOCON / CM									
	WP_4.5 / 5.0	BHS08123	BHS30-1200 (WP Ø 4.5 / 5.0)				BHS02009	BHS02010	EM046370
STRAUMANN COMPATIBLE									
OCTA INTERN									
	RN Ø 4,8	BHS08712	BHS30 - 7100 (RN Ø 4,8)				BHS02011	BHS02012	EM045144
	SYN_RN Ø 4,8	BHS08713	BHS30 - 7100 (RN SYNOCTA Ø 4,8)				BHS02013	BHS02014	EM046375
BONE LEVEL									
	NC Ø 3,3	BHS08811	BHS30 - 8100 (NC)				BHS02015	BHS02016	EM048048
	RC Ø 4,1/ Ø 4,8	BHS08812	BHS30 - 8100 (RC)				BHS02015	BHS02016	EM046904
BL MULTIBASE									
	RC Ø 4,8						BHS02017	BHS02018	EM047780

1.2 CAD/CAM SOLDADURA BASE CrCo

	PLATAFORMA Ø	SCANBODY	LIBRERÍA (PLATAFORMA)		BASE CrCo	BASE Ti	TORNILLO CLÍNICA	TORNILLO LAB	RÉPLICA IMPLANTE
SWEDEN & MARTINA COMPATIBLE									
PREMIUM KOHNO									
	NP Ø 3,3	BHS08961	BHS30 - 9600 (NP Ø 3,3)				BHS02021	BHS02022	
	RP Ø 3,8	BHS08962	BHS30 - 9600 (RP Ø 3,8)				BHS02021	BHS02022	
	WP Ø 4,25	BHS08963	BHS30 - 9600 (WP Ø 4,25)				BHS02011	BHS02012	
SYRA (EH)									
	Ø 4,10 / 4,25	BHS08612	BHS30 - 6100 (RP)		BHS03003 BHS03004		BHS02001	BHS02002	EM045098
	Ø 5,0	BHS08613	BHS30 - 6100 (WP)				BHS02001	BHS02002	EM045082
SYRA Short (EH)									
	Ø 4,10	BHS08612	BHS30 - 6100 (RP)		BHS03003 BHS03004		BHS02001	BHS02002	EM045098
	Ø 5,0	BHS08613	BHS30 - 6100 (WP)				BHS02001	BHS02002	EM045082
TRI DENTAL IMPLANTS COMPATIBLE									
TRI - VENT									
	Ø 3,75 / 4,1 / 4,7	BHS08321	BHS30 - 3200 (NP)		BHS03050 BHS03051		BHS02021	BHS02022	EM045130
TRINON COMPATIBLE									
TRINON - Q2									
	RP Ø 4,1	BHS08212	BHS30 - 2100 (RP)		BHS03003 BHS03004		BHS02001	BHS02002	EM045098
TRINON - QK									
	RN Ø 4,8	BHS08712	BHS30 - 7100 (RN Ø 4,8)				BHS02011	BHS02012	EM045144
	RN Ø 4,8	BHS08713	BHS30 - 7100 (RN SYNOCTA Ø 4,8)				BHS02013	BHS02014	EM046375

1.2 CAD/CAM SOLDADURA BASE CrCo

	PLATAFORMA Ø	SCANBODY	LIBRERÍA (PLATAFORMA)	 	BASE CrCo	BASE Ti	TORNILLO CLÍNICA	TORNILLO LAB	REPÚBLICA IMPLANTE
ZIACOM COMPATIBLE									
ZINIC - IH									
	NP Ø 3,2	BHS08951	BHS30-9500 (NARROW)	 	BHS03200 BHS03201		BHS02041	BHS02042	
	RP Ø 3,5	BHS08321	BHS30 - 3200 (NP)	 	BHS03050 BHS03051		BHS02021	BHS02022	EM045130
	WP Ø 4,5	BHS08322	BHS30 - 3200 (RP)	 	BHS03033 BHS03034		BHS02021	BHS02022	EM046218
OEX - EH									
	NP Ø 3,3	BHS08741	BHS30 - 7400 (S2)				BHS02035	BHS02036	EM048022
	RP Ø 4,1	BHS08212	BHS30 - 2100 (RP)	 	BHS03003 BHS03004		BHS02001	BHS02002	EM045098
OIN - IH (M2)									
	RP Ø 4,0	BHS08321	BHS30-3200 (NP)	 	BHS03050 BHS03051		BHS02011	BHS02012	
	WP Ø 5,0	BHS08322	BHS30-3200 (RP)	 	BHS03033 BHS03034		BHS02011	BHS02012	
XDrive (Multi-unit)									
	RP Ø 4,8	BHS08411	BHS30 - 4100 (RP)		BHS03008		BHS02003	BHS02004	EM045169
ZIMMER COMPATIBLE									
INTERNAL HEX									
	NP Ø 3,5	BHS08321	BHS30 - 3200 (NP)	 	BHS03050 BHS03051		BHS02021	BHS02022	EM045130
	RP Ø 4,5	BHS08322	BHS30 - 3200 (RP)	 	BHS03033 BHS03034		BHS02021	BHS02022	EM046218
	WP Ø 5,7	BHS08323	BHS30 - 3200 (WP)				BHS02021	BHS02022	
SWISS - PLUS									
	RP Ø 4,8	BHS08712	BHS30 - 7100 (RN Ø 4,8)				BHS02011	BHS02012	EM045144
	RP Ø 4,8	BHS08713	BHS30 - 7100 (RN SYNOCTA Ø 4,8)				BHS02013	BHS02014	EM046375

1.3 CAD/CAM CEMENTADO BASE Ti



PROPORCIONANDO ESTÉTICA Y FUNCIONALIDAD

Base Ti:

Corte en forma de U para un acceso angular del destornillador hasta 30° y para proporcionar una altura vestibular óptima para una cementación segura.

Diseño de cuerpo dentado para mejorar la retención axial.

Perfil de emergencia óptimo para el cuidado de los tejidos blandos.

Scanbody:

Amplia pared plana para un óptimo ajuste óptimo (posición y orientación).

Fabricado en titanio grado 5 con tolerancias que no exceden $\pm 5 \mu\text{m}$.

Acabado de superficie óptimo para un escaneo confiable.

Conexiones exactas para todos los principales sistemas de implantes.

No hay necesidad de spray.

1.3 CAD/CAM CEMENTADO BASE Ti

	PLATAFORMA Ø	SCANBODY	LIBRERÍA (PLATAFORMA)	 	BASE CrCo	BASE Ti	TORNILLO CLÍNICA	TORNILLO LAB	RÉPLICA IMPLANTE
AB IMPLANTS COMPATIBLE									
I SERIES INTERNAL HEX									
	Narrow Ø 3 - Ø 3,75	BHS08951	BHS30-9500 (NARROW)	 		BHS03198 BHS03199	BHS02041	BHS02042	EM045130
	STD Ø 3,5 - 6,0	BHS08321	BHS30-3200 (NP)	 		BHS03048 BHS03049	BHS02021	BHS02022	
I 10C CONUS									
	RP Ø 4,2	BHS08312	BHS30 - 3100 (RP)	 		BHS03044 BHS03045	BHS02023	BHS02024	EM048149
ACE COMPATIBLE									
INFINITY EXTERNAL HEX									
	NP Ø 3,3 / 3,75	BHS08611	BHS30 - 6100 (NP)	 		BHS03010 BHS03011	BHS02005	BHS02006	EM045222
	RP Ø 4,0	BHS08612	BHS30 - 6100 (RP)	 		BHS03005 BHS03006	BHS02001	BHS02002	EM045098
	WP Ø 5,0	BHS08613	BHS30 - 6100 (WP)				BHS02001	BHS02002	EM045082
INFINITY TRI - CAM									
	NP Ø 3,5	BHS08111	BHS30 - 1100 (NP)	 		BHS03060 BHS03061	BHS02027	BHS02028	EM046291
	RP Ø 4,3	BHS08112	BHS30 - 1100 (RP)	 		BHS03012 BHS03013	BHS02009	BHS02010	EM046292
	WP Ø 5,0	BHS08113	BHS30 - 1100 (WP)				BHS02009	BHS02010	EM046293
INFINITY INTERNAL HEX									
	NP Ø 3,7 / 4,1	BHS08321	BHS30 - 3200 (NP)	 		BHS03048 BHS03049	BHS02021	BHS02022	EM045130
	RP Ø 4,7 / 5,1	BHS08322	BHS30 - 3200 (RP)	 		BHS03020 BHS03021	BHS02021	BHS02022	EM046218
ADIN COMPATIBLE									
SWELL									
	Ø 3,5 - 6	BHS08321	BHS30 - 3200 (NP)	 		BHS03048 BHS03049	BHS02021	BHS02022	EM045130
TOUAREG S / OS									
	Ø 3,5 - 6	BHS08321	BHS30 - 3200 (NP)	 		BHS03048 BHS03049	BHS02021	BHS02022	EM045130


1.3 CAD/CAM CEMENTADO BASE Ti

	PLATAFORMA Ø	SCANBODY	LIBRERÍA (PLATAFORMA)	 	BASE CrCo	BASE Ti	TORNILLO CLÍNICA	TORNILLO LAB	RÉPLICA IMPLANTE
TOUAREG CLOSEFIT									
  	RP Ø 3,5	BHS08311	BHS30 - 3100 (NP)	 		BHS03056 BHS03057	BHS02025	BHS02026	EM048148
	WP Ø 4,3 / 5	BHS08312	BHS30 - 3100 (RP)			BHS03044 BHS03045	BHS02023	BHS02024	EM048149
ALPHABIO COMPATIBLE									
EXTERNAL ALPHABIO									
  	NP Ø 3,5	BHS08211	BHS30 - 2100 (NP)	 		BHS03010 BHS03011	BHS02005	BHS02006	EM045222
	RP Ø 4,1	BHS08212	BHS30 - 2100 (RP)	 		BHS03005 BHS03006	BHS02001	BHS02002	EM045098
	WP Ø 5,1	BHS08213	BHS30 - 2100 (WP)				BHS02039	BHS02040	EM045070
INTERNAL ALPHABIO									
  	Ø 3,3 - 6	BHS08321	BHS30 - 3200 (NP)	 		BHS03048 BHS03049	BHS02021	BHS02022	EM045130
ALPHA DENT COMPATIBLE									
ACTIVE									
  	Ø 3,75 / 4,2 / 5,0	BHS08321	BHS30 - 3200 (NP)	 		BHS03048 BHS03049	BHS02021	BHS02022	EM045130
ACTIVE PLUS									
  	Ø 4,2 / 5,0	BHS08321	BHS30 - 3200 (NP)	 		BHS03048 BHS03049	BHS02021	BHS02022	EM045130
CLASSIC									
  	Ø 3,3 / 3,75 / 4,2 / 5,0	BHS08321	BHS30 - 3200 (NP)	 		BHS03048 BHS03049	BHS02021	BHS02022	EM045130
ANCLADEN COMPATIBLE									
ANCLALOCK									
  	Ø 3,75 - 5	BHS08321	BHS30 - 3200 (NP)	 		BHS03048 BHS03049	BHS02021	BHS02022	EM045130

1.3 CAD/CAM CEMENTADO BASE Ti

	PLATAFORMA Ø	SCANBODY	LIBRERÍA (PLATAFORMA)	 	BASE CrCo	BASE Ti	TORNILLO CLÍNICA	TORNILLO LAB	RÉPLICA IMPLANTE
ANTHOGRYR COMPATIBLE									
ANTHOFIT EH									
  	RP Ø 4,1	BHS08612	BHS30 - 6100 (RP)	 		BHS03005 BHS03006	BHS02001	BHS02002	EM045098
	WP Ø 5,0	BHS08613	BHS30 - 6100 (WP)				BHS02001	BHS02002	EM045082
OSSFIT									
  	RP Ø 4,8	BHS08712	BHS30 - 7100 (RN Ø 4,8)	 		BHS03016 BHS03017	BHS02011	BHS02012	EM045144
	SYN_RP Ø 4,8	BHS08713	BHS30 - 7100 (RN SYNOC TA Ø 4,8)	 		BHS03019	BHS02013	BHS02014	EM046375
  									
ARDS COMPATIBLE									
SMART									
  	Ø 3,75 - 4,5	BHS08321	BHS30 - 3200 (NP)	 		BHS03048 BHS03049	BHS02021	BHS02022	EM045130
CLASSIC									
  	Ø 3,3 - 6	BHS08321	BHS30 - 3200 (NP)	 		BHS03048 BHS03049	BHS02021	BHS02022	EM045130
PREMIUM									
  	Ø 3,3 - 6	BHS08321	BHS30 - 3200 (NP)	 		BHS03048 BHS03049	BHS02021	BHS02022	EM045130
ASTRA COMPATIBLE									
AQUA									
  	RP_3.5 / 4.0	BHS08122	BHS30 - 1200 (RP Ø 3.5 / 4.0)	 		BHS03068 BHS03069	BHS02025	BHS02026	EM046371
LILAC									
  	WP_4.5 / 5.0	BHS08123	BHS30 - 1200 (WP Ø 4.5 / 5.0)				BHS02009	BHS02010	EM046370
CONE 20°									
  	Ø 3,5	BHS08124	BHS30 - 1200 (20°)			BHS03072	BHS02003	BHS02004	EM045638

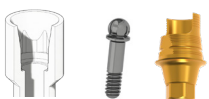1.3 CAD/CAM CEMENTADO BASE Ti

	PLATAFORMA Ø	SCANBODY	LIBRERÍA (PLATAFORMA)		BASE CrCo	BASE Ti	TORNILLO CLÍNICA	TORNILLO LAB	RÉPLICA IMPLANTE
CONE 45°									
	Ø 3,5	BHS08125	BHS30 - 1200 (45°)			BHS03074	BHS02003	BHS02004	EM047786
EV									
	Ø3,6	BHS08152	BHS30 - 1500 (Ø3,6)			BHS03152 BHS03153	BHS02053	BHS02054	
	Ø4,2	BHS08153	BHS30 - 1500 (Ø4,2)			BHS03156 BHS03157	BHS02055	BHS02056	
AVINENT COMPATIBLE									
EH									
	NP Ø 3,5	BHS08211	BHS30 - 2100 (NP)			BHS03010 BHS03011	BHS02031	BHS02032	EM045222
	RP Ø 4,1	BHS08212	BHS30 - 2100 (RP)			BHS03005 BHS03006	BHS02001	BHS02002	EM045098
	WP Ø 5,1	BHS08213	BHS30 - 2100 (WP)				BHS02039	BHS02040	EM045070
IH									
	Ø 3,5 / 4,1	BHS08321	BHS30 - 3200 (NP)			BHS03048 BHS03049	BHS02021	BHS02022	EM045130
MULTIUNIT									
	RP Ø 4,8	BHS08411	BHS30 - 4100 (RP)			BHS03009	BHS02003	BHS02004	EM045169
OCEAN CONICAL (C.C.)									
	Ø 3,5 (Implant Ø 3,5/Ø 4,0)	BHS08311	BHS30 - 3100 (NP)			BHS03056 BHS03057	BHS02025	BHS02026	EM048148
	Ø 4,1 (Implant Ø 4,5/Ø 5,0)	BHS08312	BHS30 - 3100 (RP)			BHS03044 BHS03045	BHS02023	BHS02024	EM048149
BEGO COMPATIBLE									
EH									
	NP_Ø 2,7 / 3,1	BHS08421	BHS30 - 4200 (NP)				BHS02013	BHS02014	EM047957

1.3 CAD/CAM CEMENTADO BASE Ti

	PLATAFORMA Ø	SCANBODY	LIBRERÍA (PLATAFORMA)		BASE CrCo	BASE Ti	TORNILLO CLÍNICA	TORNILLO LAB	RÉPLICA IMPLANTE
IH		Ø 3,75 / 4,1	BHS08321	BHS30 - 3200 (NP)		BHS03048 BHS03049	BHS02021	BHS02022	EM045130
BIOGENESIS COMPATIBLE									
3ICON		NP Ø 3,5	BHS08611	BHS30 - 6100 (NP)			BHS02001	BHS02002	EM045468
		RP Ø 4,1	BHS08612	BHS30 - 6100 (RP)		BHS03005 BHS03006	BHS02001	BHS02002	EM045098
		WP Ø 5,0	BHS08613	BHS30 - 6100 (WP)			BHS02001	BHS02002	EM045082
ITICON	 	RP Ø 4,8	BHS08712	BHS30 - 7100 (RN Ø 4,8)		BHS03016 BHS03017	BHS02011	BHS02012	EM045144
		RP Ø 4,8	BHS08713	BHS30 - 7100 (RN SYNOCTA Ø 4,8)		BHS03019	BHS02013	BHS02014	EM046375
ATICON		RP Ø 3,5 / 4,0	BHS08122	BHS30 - 1200 (RP Ø 3.5 / 4.0)		BHS03068 BHS03069	BHS02025	BHS02026	EM046371
		WP Ø 4,5 / 5,0	BHS08123	BHS30 - 1200 (WP Ø 4.5 / 5.0)			BHS02009	BHS02010	EM046370
KISSES		RP Ø 3,5 / 4,0	BHS08122	BHS30 - 1200 (RP Ø 3.5 / 4.0)		BHS03068 BHS03069	BHS02025	BHS02026	EM046371
		WP Ø 4,5 / 5,0 / 5,5	BHS08123	BHS30 - 1200 (WP Ø 4.5 / 5.0)			BHS02009	BHS02010	EM046370
CONE 20°		RP / WP	BHS08124	BHS30 - 1200 (20°)		BHS03072	BHS02003	BHS02004	EM045638
CONE 45°		RP / WP	BHS08125	BHS30 - 1200 (45°)		BHS03074	BHS02003	BHS02004	EM047786

1.3 CAD/CAM CEMENTADO BASE Ti

	PLATAFORMA Ø	SCANBODY	LIBRERÍA (PLATAFORMA)	○ ○	BASE CrCo	BASE Ti	TORNILLO CLÍNICA	TORNILLO LAB	RÉPLICA IMPLANTE
BIOHORIZONS COMPATIBLE									
INTERNAL									
	NP Ø 3,5	BHS08321	BHS30 - 3200 (NP)	○ ○		BHS03048 BHS03049	BHS02021	BHS02022	EM045130
	RP Ø 4,5	BHS08322	BHS30 - 3200 (RP)	○ ○		BHS03020 BHS03021	BHS02021	BHS02022	EM046218
	WP Ø 5,7	BHS08323	BHS30 - 3200 (WP)				BHS02021	BHS02022	
BIOMET 3i COMPATIBLE									
EH OSSEOTITE									
	NP Ø 3,5	BHS08611	BHS30 - 6100 (NP)				BHS02001	BHS02002	EM045468
	RP Ø 4,1	BHS08612	BHS30 - 6100 (RP)	○ ○		BHS03005 BHS03006	BHS02001	BHS02002	EM045098
	WP Ø 5,0	BHS08613	BHS30 - 6100 (WP)				BHS02001	BHS02002	EM045082
CERTAIN									
	NP Ø 3,4	BHS08511	BHS30 - 5100 (NP)				BHS02007	BHS02008	EM045166
	RP Ø 4,1	BHS08512	BHS30 - 5100 (RP)				BHS02007	BHS02008	EM045165
	WP Ø 5,0	BHS08513	BHS30 - 5100 (WP)				BHS02007	BHS02008	EM045161
BIONER COMPATIBLE									
IKELT / BIKELT									
	RP Ø 4,1	BHS08212	BHS30 - 2100 (RP)	○ ○		BHS03005 BHS03006	BHS02001	BHS02002	EM045098
	WP Ø 5,0	BHS08613	BHS30 - 6100 (WP)				BHS02001	BHS02002	EM045082
	WP Ø 5,1	BHS08213	BHS30 - 2100 (WP)				BHS02039	BHS02040	EM045070
HIKELT									
	NP Ø 3,8	BHS08321	BHS30 - 3200 (NP)	○ ○		BHS03048 BHS03049	BHS02021	BHS02022	EM045130
	RP Ø 4,7	BHS08322	BHS30 - 3200 (RP)	○ ○		BHS03020 BHS03021	BHS02021	BHS02022	EM046218

1.3 CAD/CAM CEMENTADO BASE Ti

	PLATAFORMA Ø	SCANBODY	LIBRERÍA (PLATAFORMA)	BASE CrCo	BASE Ti	TORNILLO CLÍNICA	TORNILLO LAB	RÉPLICA IMPLANTE
TOP DM								
  	Ø 3,5 / 4,0 / 5,0	BHS08311	BHS30 - 3100 (NP)	 	BHS03056 BHS03057	BHS02025	BHS02026	EM048148
MULTIUNIT								
  	RP Ø 4,8	BHS08411	BHS30 - 4100 (RP)		BHS03009	BHS02003	BHS02004	EM045169
BTI COMPATIBLE								
EH								
  	NP Tiny Ø 3,5	BHS08421	BHS30 - 4200 (NP)			BHS02013	BHS02014	EM047957
	RP Ø 4,1	BHS08422	BHS30 - 4200 (RP)	 	BHS03005 BHS03006	BHS02001	BHS02002	EM045098
	WP Ø 5,5	BHS08423	BHS30 - 4200 (WP)			BHS02013	BHS02014	EM047967
CUATRILOBULAR								
 	RP Ø 4,1	BHS08231	BHS30 - 2300 (RP)			BHS02021	BHS02022	EM047743
	WP Ø 5,5	BHS08232	BHS30 - 2300 (WP)			BHS02021	BHS02022	
BTK COMPATIBLE								
8NECK INT								
  	SR Ø 4,8	BHS08712	BHS30 - 7100 (RN Ø 4,8)	 	BHS03016 BHS03017	BHS02011	BHS02012	EM045144
EVO DL EXT								
  	NP Ø 3,4 / 3,7	BHS08611	BHS30 - 6100 (NP)			BHS02035	BHS02036	
	RP Ø 4,1 / 4,6	BHS08612	BHS30 - 6100 (RP)	 	BHS03005 BHS03006	BHS02001	BHS02002	EM045098
	WP Ø 5,0 / 5,6	BHS08613	BHS30 - 6100 (WP)			BHS02001	BHS02002	EM045082
EVO DL INT								
  	Ø 3,5 / 3,7 / 4,6 / 5,0 / 5,6	BHS08321	BHS30 - 3200 (NP)	 	BHS03048 BHS03049	BHS02021	BHS02022	EM045130

1.3 CAD/CAM CEMENTADO BASE Ti

	PLATAFORMA Ø	SCANBODY	LIBRERÍA (PLATAFORMA)	 	BASE CrCo	BASE Ti	TORNILLO CLÍNICA	TORNILLO LAB	REPÚBLICA IMPLANTE
KLASSIC EXT									
  	NP Ø 3,4	BHS08611	BHS30 - 6100 (NP)				BHS02035	BHS02036	
	RP Ø 4,1	BHS08612	BHS30 - 6100 (RP)	 		BHS03005 BHS03006	BHS02001	BHS02002	EM045098
	WP Ø 5,0	BHS08613	BHS30 - 6100 (WP)				BHS02001	BHS02002	EM045082
KLASSIC INT									
  	Ø 3,5/ 4,5 / 5,0	BHS08321	BHS30 - 3200 (NP)	 		BHS03048 BHS03049	BHS02021	BHS02022	EM045130
KONIK EXT									
  	NP Ø 3,4	BHS08611	BHS30 - 6100 (NP)				BHS02035	BHS02036	
	RP Ø 4,1	BHS08612	BHS30 - 6100 (RP)	 		BHS03005 BHS03006	BHS02001	BHS02002	EM045098
	WP Ø 5,0	BHS08613	BHS30 - 6100 (WP)				BHS02001	BHS02002	EM045082
KONIC INT									
  	Ø 3,5/ 5,0	BHS08321	BHS30 - 3200 (NP)	 		BHS03048 BHS03049	BHS02021	BHS02022	EM045130
SAFETL INT									
  	SR Ø 4,8	BHS08712	BHS30 - 7100 (RN Ø 4,8)	 		BHS03016 BHS03017	BHS02011	BHS02012	EM045144
B&W COMPATIBLE									
HEXAGONO EXT									
  	NP Ø 3,3	BHS08741	BHS30 - 7400 (S2)				BHS02035	BHS02036	EM048022
	RP Ø 4,1	BHS08742	BHS30 - 7400 (S3 y S4)	 		BHS03005 BHS03006	BHS02001	BHS02002	EM045098
	WP Ø 5,0	BHS08613	BHS30 - 6100 (WP)				BHS02001	BHS02002	EM045082

1.3 CAD/CAM CEMENTADO BASE Ti

	PLATAFORMA Ø	SCANBODY	LIBRERÍA (PLATAFORMA)	 	BASE CrCo	BASE Ti	TORNILLO CLÍNICA	TORNILLO LAB	RÉPLICA IMPLANTE
HEXAGONO INT									
	NP Ø 3,3	BHS08321	BHS30 - 3200 (NP)	 		BHS03048 BHS03049	BHS02021	BHS02022	EM045130
	RP Ø 4,0	BHS08321	BHS30 - 3200 (NP)	 		BHS03048 BHS03049	BHS02021	BHS02022	EM045130
	WP Ø 5,0	BHS08321	BHS30 - 3200 (NP)	 		BHS03048 BHS03049	BHS02021	BHS02022	EM045130
CAMLOG COMPATIBLE									
CAMLOG									
	Ø 3,3	BHS08721	BHS30-7200 (Ø3,3)	 		BHS03128 BHS03129	BHS02049	BHS02050	
	Ø 3,8	BHS08722	BHS30-7200 (Ø3,8)	 		BHS03132 BHS03133	BHS02049	BHS02050	
	Ø 4,3	BHS08723	BHS30-7200 (Ø4,3)	 		BHS03136 BHS03137	BHS02049	BHS02050	
	Ø 5,0	BHS08724	BHS30-7200 (Ø5,0)	 		BHS03140 BHS03141	BHS02051	BHS02052	
CONEXÃO SIST. PROTESE COMPATIBLE									
MORSE INDEXADO									
	Ø 3,5 / 3,75 / 4,0 / 5,0	BHS08311	BHS30 - 3100 (NP)	 		BHS03056 BHS03057	BHS02025	BHS02026	EM048148
HEXAGONO EXT									
	Ø 3,3	BHS08741	BHS30 - 7400 (S2)				BHS02035	BHS02036	EM048022
	Ø 3,75 / 4,0	BHS08742	BHS30 - 7400 (S3 y S4)	 		BHS03005 BHS03006	BHS02001	BHS02002	EM045098
	Ø 5,0	BHS08613	BHS30 - 6100 (WP)				BHS02001	BHS02002	EM045082
HEXAGONO INT									
	Ø 3,75 / 4,0 / 5,0	BHS08322	BHS30 - 3200 (RP)	 		BHS03020 BHS03021	BHS02021	BHS02022	EM046218

1.3 CAD/CAM CEMENTADO BASE Ti

	PLATAFORMA Ø	SCANBODY	LIBRERÍA (PLATAFORMA)	○ ○	BASE CrCo	BASE Ti	TORNILLO CLÍNICA	TORNILLO LAB	RÉPLICA IMPLANTE
CORTEX COMPATIBLE									
DYNAMIX									
  	Ø 3,3 / 3,8 / 4,2 / 5	BHS08321	BHS30 - 3200 (NP)	○ ○		BHS03048 BHS03049	BHS02021	BHS02022	EM045130
CLASSIX									
  	Ø 3,3 / 3,8 / 4,2 / 5	BHS08321	BHS30 - 3200 (NP)	○ ○		BHS03048 BHS03049	BHS02021	BHS02022	EM045130
SATURN									
  	Ø 3,8 / 4,2	BHS08321	BHS30 - 3200 (NP)	○ ○		BHS03048 BHS03049	BHS02021	BHS02022	EM045130
COWELLMEDI COMPATIBLE									
EXTERNAL									
  	RP Ø 4,1	BHS08212	BHS30 - 2600 (RP)	○ ○		BHS03005 BHS03006	BHS02001	BHS02002	EM045098
	WP Ø 5,1	BHS08213	BHS30 - 2600 (WP)				BHS02039	BHS02040	EM045070
INTERNAL									
  	RN Ø 4,8	BHS08712	BHS30 - 7600 (RN Ø 4,8)	○ ○		BHS03016 BHS03017	BHS02011	BHS02012	EM045144
SUBMERGED (INT)									
  	Ø 3,5 / 4 / 4,5 / 5 / 6	BHS08432	BHS30 - 4600 (4.0)	○ ○		BHS03100	BHS02009	BHS02010	
DENTALTECH COMPATIBLE									
IMPLIC GII									
  	RP Ø 4,5	BHS08322	BHS30 - 3200 (RP)	○ ○		BHS03020 BHS03021	BHS02021	BHS02022	EM046218
IMPLASSIC HX2									
  	RP Ø 4,1	BHS08212	BHS30 - 2100 (RP)	○ ○		BHS03005 BHS03006	BHS02001	BHS02002	EM045098

1.3 CAD/CAM CEMENTADO BASE Ti

	PLATAFORMA Ø	SCANBODY	LIBRERÍA (PLATAFORMA)	 	BASE CrCo	BASE Ti	TORNILLO CLÍNICA	TORNILLO LAB	RÉPLICA IMPLANTE
DENTIS COMPATIBLE									
S-CLEAN									
  	RP Ø 3,4	BHS08432	BHS30 - 4600 (4.0)	 		BHS03100	BHS02009	BHS02010	
I-CLEAN									
  	RP Ø 4,8	BHS08712	BHS30 - 7100 (RN Ø 4,8)	 		BHS03016 BHS03017	BHS02011	BHS02012	EM045144
DENTIUM COMPATIBLE									
SIMPLE LINE II									
  	RN Ø 4,8	BHS08712	BHS30 - 7600 (RN Ø 4,8)	 		BHS03016 BHS03017	BHS02011	BHS02012	EM045144
IMPLANTUM									
  	Ø 3,6 / 4 / 4,4 / 4,9 / 6 / 7	BHS08432	BHS30 - 4600 (4.0)	 		BHS03100	BHS02009	BHS02010	
SUPER LINE									
  	Ø 3,6 / 4 / 4,5 / 5 / 6	BHS08432	BHS30 - 4600 (4.0)	 		BHS03100	BHS02009	BHS02010	
DENTSPLY SIRONA COMPATIBLE									
XIVE S									
	D 3.4	BHS08221	BHS30-2200 (D3.4)	 		BHS03116 BHS03117	BHS02047	BHS02048	
	D 3.8	BHS08222	BHS30-2200 (D3.8)	 		BHS03120 BHS03121	BHS02047	BHS02048	
	D 4.5	BHS08223	BHS30-2200 (D4.5)	 		BHS03124 BHS03125	BHS02047	BHS02048	

1.3 CAD/CAM CEMENTADO BASE Ti

	PLATAFORMA Ø	SCANBODY	LIBRERÍA (PLATAFORMA)	 	BASE CrCo	BASE Ti	TORNILLO CLÍNICA	TORNILLO LAB	RÉPLICA IMPLANTE
DIO IMPLANTS COMPATIBLE									
EXTERNAL									
	NP Ø 3,5	BHS08211	BHS30 - 2100 (NP)	 		BHS03010 BHS03011	BHS02005	BHS02006	EM045222
	RP Ø 4,1	BHS08212	BHS30 - 2100 (RP)	 		BHS03005 BHS03006	BHS02001	BHS02002	EM045098
	WP Ø 5,1	BHS08213	BHS30 - 2100 (WP)				BHS02039	BHS02040	EM045070
UF II									
	Ø 3,8 / 4 / 4,5 / 5 / 5,5	BHS08432	BHS30 - 4600 (4.0)			BHS03100	BHS02009	BHS02010	
EDISON MEDICAL COMPATIBLE									
LAMINA (IH)									
	Ø 3,3 / 3,75 / 4,2 / 5,0 / 6,0	BHS08321	BHS30 - 3200 (NP)	 		BHS03048 BHS03049	BHS02021	BHS02022	EM045130
FORTIS (IH)									
	Ø 3,3 / 3,75 / 4,2 / 5,0 / 6,0	BHS08321	BHS30 - 3200 (NP)	 		BHS03048 BHS03049	BHS02021	BHS02022	EM045130
ELITE MEDICA COMPATIBLE									
EXTERNAL CONNECT									
	NP Ø 3,5	BHS08211	BHS30 - 2100 (NP)	 		BHS03010 BHS03011	BHS02005	BHS02006	EM045222
	RP Ø 4,1	BHS08212	BHS30 - 2100 (RP)	 		BHS03005 BHS03006	BHS02001	BHS02002	EM045098
	WP Ø 5,1	BHS08213	BHS30 - 2100 (WP)				BHS02039	BHS02040	EM045070
EUROTEKNIKA COMPATIBLE									
UNEVA									
	Ø 3,6 / 4,1 / 4,8	BHS08212	BH30 - 2100 (RP)	 		BHS03005 BHS03006	BHS02001	BHS02002	EM045098
NATURACTIS									
	Ø 3,5 / 4 / 4,5 / 5	BHS08122	BH30 - 1200 (RP Ø 3.5 / 4.0)	 		BHS03068 BHS03069	BHS02025	BHS02026	EM046371

1.3 CAD/CAM CEMENTADO BASE Ti

	PLATAFORMA Ø	SCANBODY	LIBRERÍA (PLATAFORMA)	○ ○	BASE CrCo	BASE Ti	TORNILLO CLÍNICA	TORNILLO LAB	RÉPLICA IMPLANTE
NATURALL +									
	Ø 3,5 / 4 / 4,5 / 5	BHS08122	BHS30 - 1200 (RP Ø 3.5 / 4.0)	○ ○		BHS03068 BHS03069	BHS02025	BHS02026	EM046371
NATEA									
	NP Ø 3,6 / 4,1	BHS08122	BHS30 - 1200 (RP Ø 3.5 / 4.0)	○ ○		BHS03068 BHS03069	BHS02025	BHS02026	EM046371
	RP Ø 4,8 / 6	BHS08122	BHS30 - 1200 (RP Ø 3.5 / 4.0)	○ ○		BHS03068 BHS03069	BHS02025	BHS02026	EM046371
AESTHETICA									
	Ø 3,6 / 4,1 / 4,8	BHS08712	BHS30 - 7100 (RN Ø 4,8)	○ ○		BHS03016 BHS03017	BHS02011	BHS02012	EM045144
GALIMPLANT COMPATIBLE									
IPXE - EXTERNA									
	RP Ø 3,5 / 4 / 5	BHS08212	BHS30 - 2100 (RP)	○ ○		BHS03005 BHS03006	BHS02001	BHS02002	EM045098
ICI - INTERNA									
	RP Ø 3,2 / 3,5 / 4 / 5	BHS08122	BHS30 - 1200 (RP Ø 3.5 / 4.0)	○ ○		BHS03068 BHS03069	BHS02025	BHS02026	EM046371
IPX - INTERNA									
	RP Ø 3,5 / 4 / 4,5 / 5	BHS08122	BHS30 - 1200 (RP Ø 3.5 / 4.0)	○ ○		BHS03068 BHS03069	BHS02025	BHS02026	EM046371
GMI COMPATIBLE									
FRONTIER (IH)									
	RP Standard Ø 3,3	BHS08321	BHS30 - 3200 (NP)	○ ○		BHS03048 BHS03049	BHS02021	BHS02022	EM045130
	WP Wide Ø 4,3	BHS08322	BHS30 - 3200 (RP)	○ ○		BHS03020 BHS03021	BHS02021	BHS02022	EM046218
FRONTIER multi-aesthetic									
	RP Ø 4,8	BHS08411	BHS30 - 4100 (RP)	○ ○		BHS03009	BHS02003	BHS02004	EM045169

1.3 CAD/CAM CEMENTADO BASE Ti

	PLATAFORMA Ø	SCANBODY	LIBRERÍA (PLATAFORMA)		BASE CrCo	BASE Ti	TORNILLO CLÍNICA	TORNILLO LAB	RÉPLICA IMPLANTE
PHOENIX (EH)									
	Standard Ø 4,1	BHS08212	BHS30 - 2100 (RP)			BHS03005 BHS03006	BHS02001	BHS02002	EM045098
	Wide (Hex. 2,7) Ø 5,1	BHS08613	BHS30 - 6100 (WP)				BHS02001	BHS02002	EM045082
	Wide (Hex. 3,4) Ø 5,1	BHS08213	BHS30 - 2100 (WP)				BHS02039	BHS02040	EM045070
PHOENIX multi-aesthetic									
	RP Ø 4,8	BHS08411	BHS30 - 4100 (RP)			BHS03009	BHS02003	BHS02004	EM045169
GT MEDICAL COMPATIBLE									
BEST FIT HXE									
	NP Ø 3,5	BHS08211	BHS30 - 2100 (NP)			BHS03010 BHS03011	BHS02005	BHS02006	EM045222
	RP Ø 4,1	BHS08212	BHS30 - 2100 (RP)			BHS03005 BHS03006	BHS02001	BHS02002	EM045098
	WP Ø 5,1	BHS08213	BHS30 - 2100 (WP)				BHS02039	BHS02040	EM045070
BEST FIT HXI									
	WP 4,5 / 5,0	BHS08123	BHS30 - 1200 (WP Ø 4.5 / 5.0)				BHS02009	BHS02010	EM046370
BEST FIT 002									
	NP Ø 3,5	BHS08321	BHS30 - 3200 (NP)			BHS03048 BHS03049	BHS02021	BHS02022	EM045130
BEST FIT OCT									
	RN Ø 4,8	BHS08712	BHS30 - 7100 (RN Ø 4,8)			BHS03016 BHS03017	BHS02011	BHS02012	EM045144
	SYN_RN Ø 4,8	BHS08713	BHS30 - 7100 (RN SYNOCTA Ø 4,8)				BHS02013	BHS02014	EM046375
						BHS03019			
HI TECH COMPATIBLE									
SELF THREAD									
	SLT Ø 3,3 / 3,75	BHS08321	BHS30 - 3200 (NP)			BHS03048 BHS03049	BHS02021	BHS02022	EM045130
	GTI Ø 4,2 / 5	BHS08322	BHS30 - 3200 (RP)			BHS03020 BHS03021	BHS02021	BHS02022	EM046218

1.3 CAD/CAM CEMENTADO BASE Ti

	PLATAFORMA Ø	SCANBODY	LIBRERÍA (PLATAFORMA)	 	BASE CrCo	BASE Ti	TORNILLO CLÍNICA	TORNILLO LAB	RÉPLICA IMPLANTE
LGI PLUS									
  	Ø 3,5 / 4,3 / 5 / 6	BHS08321	BHS30 - 3200 (NP)	 		BHS03048 BHS03049	BHS02021	BHS02022	EM045130
IMPLANT DIRECT COMPATIBLE									
INTERACTIVE									
  	NP Ø 3,5	BHS08311	BHS30 - 3100 (NP)	 		BHS03056 BHS03057	BHS02025	BHS02026	EM048148
	RP Ø 4,3	BHS08312	BHS30 - 3100 (RP)	 		BHS03044 BHS03045	BHS02023	BHS02024	EM048149
LEGACY									
  	NP Ø 3,5	BHS08321	BHS30 - 3200 (NP)	 		BHS03048 BHS03049	BHS02021	BHS02022	EM045130
	RP Ø 4,5	BHS08322	BHS30 - 3200 (RP)	 		BHS03020 BHS03021	BHS02021	BHS02022	EM046218
	WP Ø 5,7	BHS08323	BHS30 - 3200 (WP)				BHS02021	BHS02022	
REPLUS / REPLANT									
  	NP Ø 3,5	BHS08111	BHS30 - 1100 (NP)	 		BHS03060 BHS03061	BHS02027	BHS02028	EM046291
	RP Ø 4,3	BHS08112	BHS30 - 1100 (RP)	 		BHS03012 BHS03013	BHS02009	BHS02010	EM046292
	WP Ø 5,0	BHS08113	BHS30 - 1100 (WP)				BHS02009	BHS02010	EM046293
SWISHPLUS / SWISHPLANT									
  	RN Ø 4,8	BHS08712	BHS30 - 7100 (RN Ø 4,8)	 		BHS03016 BHS03017	BHS02011	BHS02012	EM045144
  	SYN_RN Ø 4,8	BHS08713	BHS30 - 7100 (RN SYNOCTA Ø 4,8)	 		BHS03019	BHS02013	BHS02014	EM046375
JDENTALCARE COMPATIBLE									
JDEVOLUTION									
  	Ø 3,7 / 4,3 / 5 / 6	BHS08321	BHS30 - 3200 (NP)	 		BHS03048 BHS03049	BHS02021	BHS02022	EM045130


1.3 CAD/CAM CEMENTADO BASE Ti

	PLATAFORMA Ø	SCANBODY	LIBRERÍA (PLATAFORMA)	 	BASE CrCo	BASE Ti	TORNILLO CLÍNICA	TORNILLO LAB	REPÚBLICA IMPLANTE
KEYSTONE DENTAL COMPATIBLE									
RESTORE									
	NP Ø 3,3	BHS08741	BHS30 - 7400 (S2)				BHS02035	BHS02036	EM048022
	RP Ø 4,1	BHS08742	BHS30 - 7400 (S3 y S4)	 		BHS03005 BHS03006	BHS02001	BHS02002	EM045098
OCT-XT									
	RN Ø 4,8	BHS08712	BHS30 - 7100 (RN Ø 4,8)	 		BHS03016 BHS03017	BHS02011	BHS02012	EM045144
	SYN_RN Ø 4,8	BHS08713	BHS30 - 7100 (RN SYNOCTA Ø 4,8)	 		BHS03019	BHS02013	BHS02014	EM046375
RENOVA									
	NP Ø 3,75	BHS08321	BHS30 - 3200 (NP)	 		BHS03048 BHS03049	BHS02021	BHS02022	EM045130
	RP Ø 4,5 / 4,75	BHS08322	BHS30 - 3200 (RP)	 		BHS03020 BHS03021	BHS02021	BHS02022	EM046218
KLOCKNER COMPATIBLE									
SK2 (EH)									
	RP Ø 4,2	BHS08521	BHS30 - 5200 (RP)	 			BHS02031	BHS02032	EM046747
KL (EH)									
	NP Ø 3,5	BHS08211	BHS30 - 2100 (NP)	 		BHS03010 BHS03011	BHS02005	BHS02006	EM045222
	RP Ø 4,1	BHS08212	BHS30 - 2100 (RP)	 		BHS03005 BHS03006	BHS02001	BHS02002	EM045098
	WP Ø 5,1	BHS08213	BHS30 - 2100 (WP)				BHS02039	BHS02040	EM045070

1.3 CAD/CAM CEMENTADO BASE Ti

	PLATAFORMA Ø	SCANBODY	LIBRERÍA (PLATAFORMA)	 	BASE CrCo	BASE Ti	TORNILLO CLÍNICA	TORNILLO LAB	RÉPLICA IMPLANTE
LEADER COMPATIBLE									
TIXOS INTERNAL HEX									
  	NP Ø 3,5 / 4,0	BHS08321	BHS30 - 3200 (NP)	 		BHS03048 BHS02021 BHS03049	BHS02022		EM045130
TIXOS EXTERNAL HEX									
  	RP Ø 4,1	BHS08612	BHS30 - 6100 (RP)	 		BHS03005 BHS02001 BHS03006	BHS02002		EM045098
	WP Ø 5,0	BHS08613	BHS30 - 6100 (WP)			BHS02001	BHS02002		EM045082
MEDENTIS COMPATIBLE									
ICX									
  	Ø 3,45 / 3,7 - 4,1 / 4,8	BHS08751	BHS30-7700 (Ø 3,45 / 3,7 - 4,1 / 4,8)	 		BHS03178 BHS02015 BHS03179	BHS02016		
MEGAGEN COMPATIBLE									
ANYONE INTERNAL									
  	NP	BHS08432	BHS30 - 4600 (4.0)			BHS03100 BHS02009	BHS02010		
	RP	BHS08432	BHS30 - 4600 (4.0)			BHS03100 BHS02009	BHS02010		
	WP	BHS08432	BHS30 - 4600 (4.0)			BHS03100 BHS02009	BHS02010		
ANYONE EXTERNAL									
  	NP	BHS08211	BHS30 - 2100 (NP)	 		BHS03010 BHS03011	BHS02005	BHS02006	EM045222
	RP	BHS08212	BHS30 - 2100 (RP)	 		BHS03005 BHS03006	BHS02001	BHS02002	EM045098
	WP	BHS08613	BHS30 - 6100 (WP)			BHS02001	BHS02002		EM045082

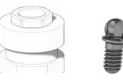1.3 CAD/CAM CEMENTADO BASE Ti

	PLATAFORMA Ø	SCANBODY	LIBRERÍA (PLATAFORMA)		BASE CrCo	BASE Ti	TORNILLO CLÍNICA	TORNILLO LAB	RÉPLICA IMPLANTE
ANYRIDGE									
	Small	Ø3,5	BHS08991	BHS30-9900 (4,5/5,0)		BHS03164	BHS02027	BHS02028	
	Regular	Ø4,0/4,5	BHS08991	BHS30-9900 (4,5/5,0)		BHS03164	BHS02027	BHS02028	
	Wide	Ø5,0/5,5	BHS08991	BHS30-9900 (4,5/5,0)		BHS03164	BHS02027	BHS02028	
OCTA Abutment									
	SYN_RN	Ø4,8	BHS08713	BHS30-7100 (RN SYNOCTA Ø4,8)		BHS03019	BHS02013	BHS02014	EM046375
MICRODENT COMPATIBLE									
EKTOS (IH)									
	NP	Ø 3,5	BHS08321	BHS30 - 3200 (NP)		BHS03048	BHS02021	BHS02022	EM045130
	RP	Ø 4,5	BHS08322	BHS30 - 3200 (RP)		BHS03020	BHS02021	BHS02022	EM046218
	WP	Ø 5,7	BHS08323	BHS30 - 3200 (WP)			BHS02021	BHS02022	
MINI (EH)									
	NP	Ø 3,5	BHS08611	BHS30 - 6100 (NP)			BHS02031	BHS02032	
SUV (EH)									
	SUV	Ø 4,1	BHS08612	BHS30 - 6100 (RP)		BHS03005	BHS02001	BHS02002	EM045098
	SUV	Ø 5,1	BHS08613	BHS30 - 6100 (WP)			BHS02001	BHS02002	EM045082
SYSTEM (EH)									
	MST	Ø 3,5	BHS08611	BHS30 - 6100 (NP)			BHS02031	BHS02032	
	MS	Ø 3,5	BHS08611	BHS30 - 6100 (NP)			BHS02031	BHS02032	

1.3 CAD/CAM CEMENTADO BASE Ti

	PLATAFORMA Ø	SCANBODY	LIBRERÍA (PLATAFORMA)	 	BASE CrCo	BASE Ti	TORNILLO CLÍNICA	TORNILLO LAB	RÉPLICA IMPLANTE
UNIVERSAL (EH)									
	MST Ø 3,5	BHS08611	BHS30 - 6100 (NP)				BHS02031	BHS02032	
	MS Ø 3,5	BHS08611	BHS30 - 6100 (NP)				BHS02031	BHS02032	
	SU Ø 4,1	BHS08612	BHS30 - 6100 (RP)	 		BHS03005 BHS03006	BHS02001	BHS02002	EM045098
	SU Ø 5,1	BHS08613	BHS30 - 6100 (WP)				BHS02001	BHS02002	EM045082
MIS COMPATIBLE									
LANCE									
	STD Ø 4,1	BHS08612	BHS30 - 6100 (RP)	 		BHS03005 BHS03006	BHS02001	BHS02002	EM045098
	WP Ø 5,0	BHS08613	BHS30 - 6100 (WP)				BHS02001	BHS02002	EM045082
SEVEN / M4									
	Narrow Ø 3,30	BHS08951	BHS30-9500 (NARROW)	 		BHS03198 BHS03199	BHS02041	BHS02042	
	Standard Ø 3,75 / 4,2	BHS08321	BHS30 - 3200 (NP)	 		BHS03048 BHS03049	BHS02021	BHS02022	EM045130
	Wide Ø 5,0 / 6,0	BHS08322	BHS30 - 3200 (RP)	 		BHS03020 BHS03021	BHS02021	BHS02022	EM046218
MULTIUNIT MIS									
	RP Ø 4,8	BHS08411	BHS30 - 4100 (RP)			BHS03009	BHS02037	BHS02038	
MOZO GRAU COMPATIBLE									
INHEX									
	RP Ø 3,75 / 4,25	BHS08122	BHS30 - 1200 (RP Ø 3.5 / 4.0)	 		BHS03068 BHS03069	BHS02025	BHS02026	EM046371
	WP Ø 5,0	BHS08123	BHS30 - 1200 (WP Ø 4.5 / 5.0)				BHS02009	BHS02010	EM046370
	CONO 20	BHS08124	BHS30 - 1200 (20°)			BHS03072	BHS02003	BHS02004	EM045638
	CONO 45	BHS08125	BHS30 - 1200 (45°)			BHS03074	BHS02003	BHS02004	EM047786

1.3 CAD/CAM CEMENTADO BASE Ti

	PLATAFORMA Ø	SCANBODY	LIBRERÍA (PLATAFORMA)	 	BASE CrCo	BASE Ti	TORNILLO CLÍNICA	TORNILLO LAB	RÉPLICA IMPLANTE
OSSEUS									
	NP Ø 3,4	BHS08611	BHS30 - 6100 (NP)				BHS02001	BHS02002	EM045468
	RP Ø 4,1	BHS08612	BHS30 - 6100 (RP)	 		BHS03005 BHS03006	BHS02001	BHS02002	EM045098
	WP Ø 5,0	BHS08213	BHS30 - 2100 (WP)				BHS02039	BHS02040	EM045070
MPI COMPATIBLE									
EXTERNA EH									
	NP Ø 3,5	BHS08421	BHS30 - 4200 (NP)				BHS02001	BHS02002	EM047957
	RP Ø 4,1	BHS08612	BHS30 - 6100 (RP)	 		BHS03005 BHS03006	BHS02001	BHS02002	EM045098
	WP Ø 5,0	BHS08613	BHS30 - 6100 (WP)				BHS02001	BHS02002	EM045082
INTERNA CM									
	RP Ø 4,0	BHS08122	BHS30 - 1200 (RP Ø 3.5 / 4.0)	 		BHS03068 BHS03069	BHS02025	BHS02026	EM046371
	WP Ø 5,0	BHS08123	BHS30 - 1200 (WP Ø 4.5 / 5.0)				BHS02009	BHS02010	EM046370
NEOBIOTECH COMPATIBLE									
EB EXTERNAL SYSTEM									
	NP Ø 3,5	BHS08211	BHS30 - 2100 (NP)	 		BHS03010 BHS03011	BHS02005	BHS02006	EM045222
	RP Ø 4,1	BHS08212	BHS30 - 2100 (RP)	 		BHS03005 BHS03006	BHS02001	BHS02002	EM045098
	WP Ø 5,1	BHS08213	BHS30 - 2100 (WP)				BHS02039	BHS02040	EM045070
IS INTERNAL SYSTEM									
	Ø 3,5 / 4 / 4,5 / 5	BHS08432	BHS30 - 4600 (4.0)			BHS03100	BHS02009	BHS02010	

1.3 CAD/CAM CEMENTADO BASE Ti

	PLATAFORMA Ø	SCANBODY	LIBRERÍA (PLATAFORMA)	○	BASE CrCo	BASE Ti	TORNILLO CLÍNICA	TORNILLO LAB	REPÚBLICA IMPLANTE
NEODENT COMPATIBLE									
TITAMAX HE SMART									
	RP Ø 4,1	BHS08612	BHS30 - 6100 (RP)	○		BHS03005 BHS03006	BHS02001	BHS02002	EM045098
	WP Ø 5,0	BHS08613	BHS30 - 6100 (WP)				BHS02001	BHS02002	EM045082
MINI PILAR CM									
	RP Ø 4,8	BHS08411	BHS30 - 4100 (RP)	○		BHS03009	BHS02003	BHS02004	EM045169
NOBEL COMPATIBLE									
BRÄNEMARK									
	NP Ø 3,5	BHS08211	BHS30 - 2100 (NP)	○		BHS03010 BHS03011	BHS02005	BHS02006	EM045222
	RP Ø 4,1	BHS08212	BHS30 - 2100 (RP)	○		BHS03005 BHS03006	BHS02001	BHS02002	EM045098
	WP Ø 5,1	BHS08213	BHS30 - 2100 (WP)				BHS02039	BHS02040	EM045070
REPLACE									
	NP Ø 3,5	BHS08111	BHS30 - 1100 (NP)	○		BHS03060 BHS03061	BHS02027	BHS02028	EM046291
	RP Ø 4,3	BHS08112	BHS30 - 1100 (RP)	○		BHS03012 BHS03013	BHS02009	BHS02010	EM046292
	WP Ø 5,0	BHS08113	BHS30 - 1100 (WP)				BHS02009	BHS02010	EM046293
ACTIVE									
	NP Ø 3,5	BHS08311	BHS30 - 3100 (NP)	○		BHS03056 BHS03057	BHS02025	BHS02026	EM048148
	RP Ø 4,3 / Ø 5,0	BHS08312	BHS30 - 3100 (RP)	○		BHS03044 BHS03045	BHS02023	BHS02024	EM048149
MULTIUNIT									
	RP Ø 4,8	BHS08411	BHS30 - 4100 (RP)	○		BHS03009	BHS02003	BHS02004	EM045169

1.3 CAD/CAM CEMENTADO BASE Ti

	PLATAFORMA Ø	SCANBODY	LIBRERÍA (PLATAFORMA)	○	BASE CrCo	BASE Ti	TORNILLO CLÍNICA	TORNILLO LAB	RÉPLICA IMPLANTE
NT TRADING COMPATIBLE									
2-CONnect									
	M1,4	Ø5,0	BHS08771	BHS30-7700 (M1,4)	○	BHS03176	BHS02063	BHS02064	
	M1,6	Ø5,0	BHS08771	BHS30-7700 (M1,6)	○	BHS03176	BHS02065	BHS02066	
	M1,8	Ø5,0	BHS08771	BHS30-7700 (M1,8)	○	BHS03176	BHS02067	BHS02068	
OSSTEM IMPLANT COMPATIBLE									
OSSTEM TS									
	Ø 4 / 4,5 / 5 / 6	BHS08432	BHS30 - 4600 (4.0)	○		BHS03100	BHS02009	BHS02010	
OSSTEM US									
	MINI Ø 3,5	BHS08211	BHS30 - 2100 (NP)	○		BHS03010 BHS03011	BHS02005	BHS02006	EM045222
	RP Ø 4,1	BHS08212	BHS30 - 2100 (RP)	○		BHS03005 BHS03006	BHS02001	BHS02002	EM045098
	WP Ø 5,1	BHS08213	BHS30 - 2100 (WP)				BHS02039	BHS02040	EM045070
OSTEOPLUS COMPATIBLE									
ARGENTUM									
	RP Ø 4,2	BHS08521	BHS30 - 5200 (RP)				BHS02031	BHS02032	EM046747
OSTEOPLUS - SHe									
	RP Ø 4,1	BHS08612	BHS30 - 6100 (RP)	○		BHS03005 BHS03006	BHS02001	BHS02002	EM045098
	WP Ø 5,0	BHS08613	BHS30 - 6100 (WP)				BHS02001	BHS02002	EM045082
OSTEOPLUS - SHi									
	RP Ø 3,5	BHS08321	BHS30 - 3200 (NP)	○		BHS03048 BHS03049	BHS02021	BHS02022	EM045130
	WP Ø 4,5	BHS08322	BHS30 - 3200 (RP)	○		BHS03020 BHS03021	BHS02021	BHS02022	EM046218

1.3 CAD/CAM CEMENTADO BASE Ti

	PLATAFORMA Ø	SCANBODY	LIBRERÍA (PLATAFORMA)	 	BASE CrCo	BASE Ti	TORNILLO CLÍNICA	TORNILLO LAB	REPÚBLICA IMPLANTE
OXTEIN COMPATIBLE									
HEX EXTERNA									
	MINI Ø 3,3	BHS08741	BHS30 - 7400 (S2)				BHS02035	BHS02036	EM048022
	RP Ø 4,1	BHS08742	BHS30 - 7400 (S3 y S4)	 		BHS03005 BHS03006	BHS02001	BHS02002	EM045098
	WP Ø 5,0	BHS08613	BHS30 - 6100 (WP)				BHS02001	BHS02002	EM045082
HEX INTERNA									
	NP Ø 3,5	BHS08321	BHS30 - 3200 (NP)	 		BHS03048 BHS03049	BHS02021	BHS02022	EM045130
	RP Ø 4,5	BHS08322	BHS30 - 3200 (RP)	 		BHS03020 BHS03021	BHS02021	BHS02022	EM046218
OCTA INTERNA									
	RN Ø 4,8	BHS08712	BHS30 - 7100 (RN Ø 4,8)	 		BHS03016 BHS03017	BHS02011	BHS02012	EM045144
	RN Ø 4,8	BHS08713	BHS30 - 7100 (RN SYNOCTA Ø 4,8)	 		BHS03019	BHS02013	BHS02014	EM046375
PALTOP COMPATIBLE									
INTERNAL HEX CONNECTION									
	Narrow Ø 3,25	BHS08951	BHS30-9500 (NARROW)	 		BHS03198 BHS03199	BHS02041	BHS02042	
	Standard Ø 3,75 / 4,2 / 5,0	BHS08321	BHS30-3200 (NP)	 		BHS03048 BHS03049	BHS02021	BHS02022	EM045130
	Wide Ø 6,0	BHS08322	BHS30-3200 (RP)	 		BHS03020 BHS03021	BHS02021	BHS02022	EM046218
PCA Implant System (Paltop Conical Active)									
	Narrow Ø 3,25	BHS08122	BHS30 - 1200 (RP Ø 3.5 /4.0)	 		BHS03068 BHS03069	BHS02025	BHS02026	EM046371
	Standard Ø 3,75 / 4,2 / 5,0	BHS08122	BHS30 - 1200 (RP Ø 3.5 /4.0)	 		BHS03068 BHS03069	BHS02025	BHS02026	EM046371
MULTI UNIT									
	Ø 5,0	BHS08271	BHS30-2700 (MU)	 		BHS03194	BHS02031	BHS02032	
SINGLE UNIT									
	Ø 4,5	BHS08251	BHS30-2500 (SINGLE)	 		BHS03196	BHS02031	BHS02032	

1.3 CAD/CAM CEMENTADO BASE Ti

	PLATAFORMA Ø	SCANBODY	LIBRERÍA (PLATAFORMA)	 	BASE CrCo	BASE Ti	TORNILLO CLÍNICA	TORNILLO LAB	RÉPLICA IMPLANTE
PHIBO COMPATIBLE									
TSH									
	S2 Ø 3,3	BHS08741	BHS30 - 7400 (S2)				BHS02035	BHS02036	EM048022
	S3 / S4 Ø 4,1	BHS08742	BHS30 - 7400 (S3 y S4)	 		BHS03005 BHS03006	BHS02001	BHS02002	EM045098
AUREA EVO									
	NP Ø 3,5						BHS02041	BHS02042	
	RP Ø 4,3						BHS02021	BHS02022	
RADHEX IMPLANTS COMPATIBLE									
PHE / PHEA									
	NP Ø 3,5	BHS08211	BHS30 - 2100 (NP)	 		BHS03010 BHS03011	BHS02005	BHS02006	EM045222
	RP Ø 4,1	BHS08212	BHS30 - 2100 (RP)	 		BHS03005 BHS03006	BHS02001	BHS02002	EM045098
PHI / PHIA									
	NP Ø3,5	BHS08321	BHS30-3200 (NP)	 		BHS03048 BHS03049	BHS02021	BHS02022	EM045130
	RP Ø4,5	BHS08322	BHS30-3200 (RP)	 		BHS03020 BHS03021	BHS02021	BHS02022	EM046218
PCI									
	280	BHS08122	BHS30 - 1200 (RP Ø 3.5 / 4.0)	 		BHS03068 BHS03069	BHS02025	BHS02026	EM046371
	350	BHS08123	BHS30 - 1200 (WP Ø 4.5 / 5.0)				BHS02009	BHS02010	EM046370
SGS COMPATIBLE									
P1 / P7									
	RP Ø 3,75	BHS08321	BHS30 - 3200 (NP)	 		BHS03048 BHS03049	BHS02021	BHS02022	EM045130

1.3 CAD/CAM CEMENTADO BASE Ti

	PLATAFORMA Ø	SCANBODY	LIBRERÍA (PLATAFORMA)	 BASE CrCo	BASE Ti	TORNILLO CLÍNICA	TORNILLO LAB	RÉPLICA IMPLANTE
SIGNO VINCES COMPATIBLE								
DUO / INTEGRA								
	RP Ø 4,1	BHS08212	BHS30-2100 (RP)	 	BHS03005 BHS03006	BHS02001	BHS02002	EM045098
DUOCON / CM								
	WP_4.5 / 5.0	BHS08123	BHS30-1200 (WP Ø 4.5 / 5.0)			BHS02009	BHS02010	EM046370
STRAUMANN COMPATIBLE								
OCTA INTERN								
	RN Ø 4,8	BHS08712	BHS30 - 7100 (RN Ø 4,8)	 	BHS03016 BHS03017	BHS02011	BHS02012	EM045144
	SYN_RN Ø 4,8	BHS08713	BHS30 - 7100 (RN SYNOCTA Ø 4,8)		BHS03019	BHS02013	BHS02014	EM046375
BONE LEVEL								
	NC Ø 3,3	BHS08811	BHS30 - 8100 (NC)	 	BHS03064 BHS03065	BHS02015	BHS02016	EM048048
	RC Ø 4,1/ Ø 4,8	BHS08812	BHS30 - 8100 (RC)	 	BHS03036 BHS03037	BHS02015	BHS02016	EM046904
BL MULTIBASE								
	RC Ø 4,8					BHS02017	BHS02018	EM047780

1.3 CAD/CAM CEMENTADO BASE Ti

	PLATAFORMA Ø	SCANBODY	LIBRERÍA (PLATAFORMA)	 	BASE CrCo	BASE Ti	TORNILLO CLÍNICA	TORNILLO LAB	RÉPLICA IMPLANTE
SWEDEN & MARTINA COMPATIBLE									
PREMIUM KOHNO									
 	NP Ø 3,3	BHS08961	BHS30 - 9600 (NP Ø 3,3)				BHS02021	BHS02022	
	RP Ø 3,8	BHS08962	BHS30 - 9600 (RP Ø 3,8)				BHS02021	BHS02022	
	WP Ø 4,25	BHS08963	BHS30 - 9600 (WP Ø 4,25)				BHS02011	BHS02012	
SYRA (EH)									
  	Ø 4,10 / 4,25	BHS08612	BHS30 - 6100 (RP)	 		BHS03005 BHS03006	BHS02001	BHS02002	EM045098
	Ø 5,0	BHS08613	BHS30 - 6100 (WP)				BHS02001	BHS02002	EM045082
SYRA Short (EH)									
  	Ø 4,10	BHS08612	BHS30 - 6100 (RP)	 		BHS03005 BHS03006	BHS02001	BHS02002	EM045098
	Ø 5,0	BHS08613	BHS30 - 6100 (WP)				BHS02001	BHS02002	EM045082
TRI DENTAL IMPLANTS COMPATIBLE									
TRI - VENT									
  	Ø 3,75 / 4,1 / 4,7	BHS08321	BHS30 - 3200 (NP)	 		BHS03048 BHS03049	BHS02021	BHS02022	EM045130
TRINON COMPATIBLE									
TRINON - Q2									
  	RP Ø 4,1	BHS08212	BHS30 - 2100 (RP)	 		BHS03005 BHS03006	BHS02001	BHS02002	EM045098
TRINON - QK									
  	RN Ø 4,8	BHS08712	BHS30 - 7100 (RN Ø 4,8)	 		BHS03016 BHS03017	BHS02011	BHS02012	EM045144
	RN Ø 4,8	BHS08713	BHS30 - 7100 (RN SYNOCTA Ø 4,8)	 		BHS03019	BHS02013	BHS02014	EM046375

1.3 CAD/CAM CEMENTADO BASE Ti

	PLATAFORMA Ø	SCANBODY	LIBRERÍA (PLATAFORMA)		BASE CrCo	BASE Ti	TORNILLO CLÍNICA	TORNILLO LAB	REPÚBLICA IMPLANTE
ZIACOM COMPATIBLE									
ZINIC - IH									
	NP Ø 3,2	BHS08951	BHS30-9500 (NARROW)			BHS03198 BHS03199	BHS02041	BHS02042	
	RP Ø 3,5	BHS08321	BHS30 - 3200 (NP)			BHS03048 BHS03049	BHS02021	BHS02022	EM045130
	WP Ø 4,5	BHS08322	BHS30 - 3200 (RP)			BHS03020 BHS03021	BHS02021	BHS02022	EM046218
OEX - EH									
	NP Ø 3,3	BHS08741	BHS30 - 7400 (S2)				BHS02035	BHS02036	EM048022
	RP Ø 4,1	BHS08212	BHS30 - 2100 (RP)			BHS03005 BHS03006	BHS02001	BHS02002	EM045098
OIN - IH (M2)									
	RP Ø 4,0	BHS08321	BHS30-3200 (NP)			BHS03048 BHS03049	BHS02011	BHS02012	
	WP Ø 5,0	BHS08322	BHS30-3200 (RP)			BHS03020 BHS03021	BHS02011	BHS02012	
XDrive (Multi-unit)									
	RP Ø 4,8	BHS08411	BHS30 - 4100 (RP)			BHS03009	BHS02003	BHS02004	EM045169
ZIMMER COMPATIBLE									
INTERNAL HEX									
	NP Ø 3,5	BHS08321	BHS30 - 3200 (NP)			BHS03048 BHS03049	BHS02021	BHS02022	EM045130
	RP Ø 4,5	BHS08322	BHS30 - 3200 (RP)			BHS03020 BHS03021	BHS02021	BHS02022	EM046218
	WP Ø 5,7	BHS08323	BHS30 - 3200 (WP)				BHS02021	BHS02022	
SWISS - PLUS									
	RP Ø 4,8	BHS08712	BHS30 - 7100 (RN Ø 4,8)			BHS03016 BHS03017	BHS02011	BHS02012	EM045144
	RP Ø 4,8	BHS08713	BHS30 - 7100 (RN SYNOCTA Ø 4,8)			BHS03019	BHS02013	BHS02014	EM046375

2.0 DESTONILLADOR BHS30



EXCELENTES PROPIEDADES MECÁNICAS Y PROTECCIÓN DE LA CABEZA DE TORNILLO

Conexión compatible con contraángulo universal (ISO1797).

Acero endurecido que ofrece una excelente resistencia a la torsión (90 N-cm).

Acoplamiento óptimo que garantiza la integridad de la cabeza del tornillo.

Recubrimiento de Ti: tratamiento superficial que aumenta la vida útil del conductor.

Diseñado para corregir desviaciones de ángulo de 30° con una transmisión de torque 100% eficiente.

DESTORNILLADOR BHS



BHS01001 - L25mm
BHS01004 - L20mm
BHS01005 - L32mm

MANGO DESTORNILLADOR



BHS01110 - Nob Ø 8mm / CA
BHS01111 - Str Ø 7mm / CA

3.0 PROTOCOLOS

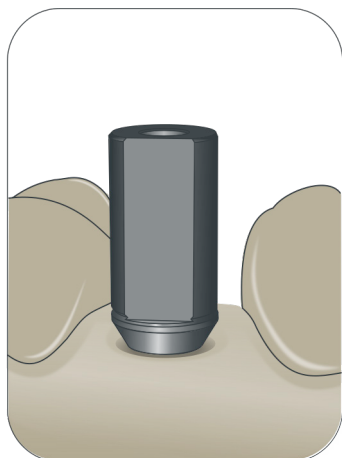
CAD/CAM DIRECTO A IMPLANTE

Productos requeridos:


Tornillo BHS30
Destornillador BHS30
Scanbody BHS30 y su librería asociada BHS30 Cad-Cam
T-Tool BHS30

Materiales:


Metal sinterizado o fresado.



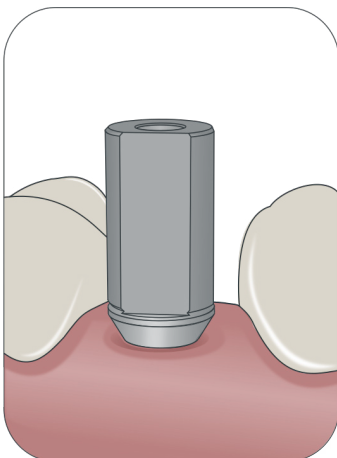
1.
CLINICA_ Montaje del BHS30 IO Scanbody en los implantes del paciente (cara plana alineada a vestibular) y escaneo intraoral. Entrega del archivo .stl resultante al laboratorio.



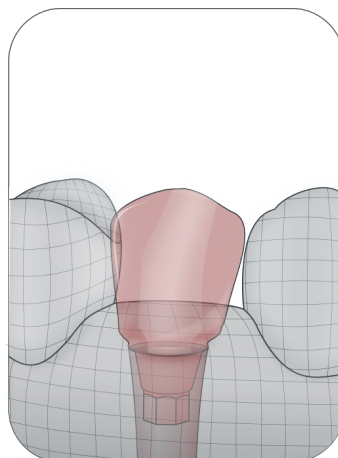
2.
LABORATORIO_ Montaje del BHS EO Scanbody en los análogos del implante (cara plana alineada a vestibular) y escaneo del modelo de acuerdo con los protocolos de software para obtener el archivo .stl.



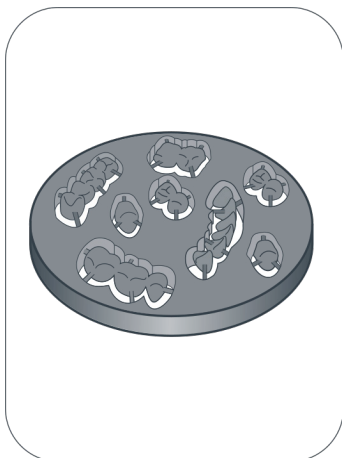
3.
LABORATORIO_ CAD: diseño de la estructura de nivel de implante a partir del archivo .stl con la biblioteca BHS30 Cad correspondiente y selección de la angulación deseada -Angulación libre- para los canales de acceso de tornillo BHS, de acuerdo con la emergencia no deseada en la restauración.



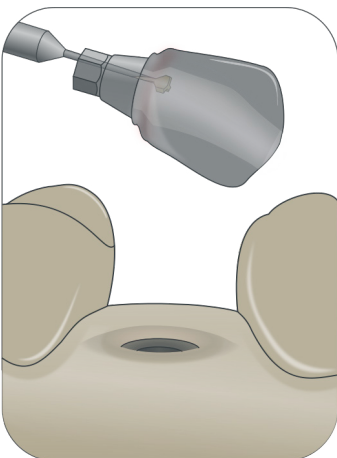4.
LABORATORIO_ CAM: Producción de la estructura según los protocolos de software. Para un ajuste perfecto y un acabado preciso de la plataforma de asiento de tornillo BHS30, se recomienda el uso de la herramienta BHS30 T-Tool. Consulte nuestro servicio de soporte de fresado para verificar el software y las compatibilidades de T-Tool.



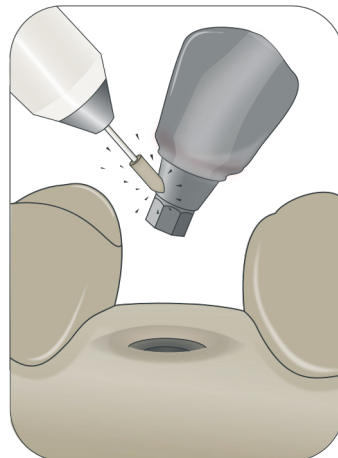
5.
LABORATORIO_ Ajuste de la estructura en los análogos hasta obtener un ajuste pasivo en el modelo.




6.
LABORATORIO_ Ajuste de la estructura en los análogos hasta obtener un ajuste pasivo en el modelo.

3.0 PROTOCOLOS

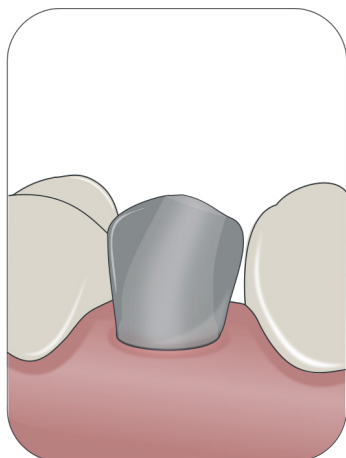
CAD/CAM DIRECTO A IMPLANTE



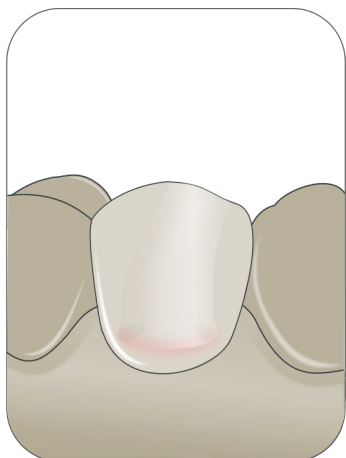7.
CLÍNICA_ Prueba de metal, especialmente en el caso de estructuras múltiples, para confirmar el ajuste de los implantes del paciente y su posición en la boca.



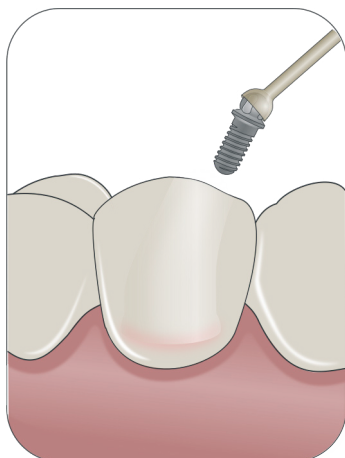8.
LABORATORIO_ Ajustes finales en la estructura, en su caso, restauración estética, pulido y acabado.



9.
CLÍNICA_ Colocación de la prótesis al paciente.

3.0 PROTOCOLOS

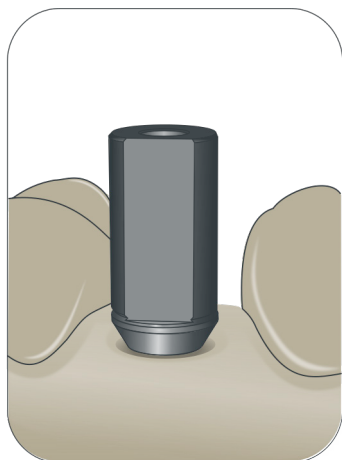
CAD/CAM SOLDADURA BASE CrCo

Productos requeridos:


Tornillo BHS30
Destornillador BHS30
Scanbody BHS30 y librería asociada BHS30 Cad-Cam
Base CrCo BHS30

Materials:


CrCo Sinterizado o Fresado



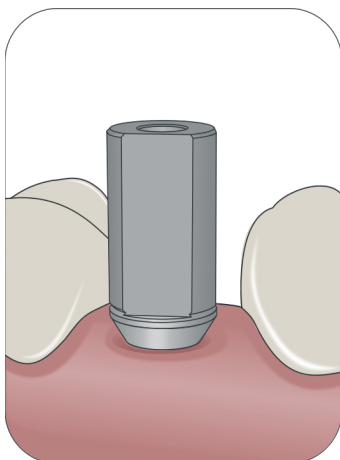
1.
CLÍNICA_ Montaje del BHS30 IO Scanbody en los implantes del paciente (cara plana alineada a vestibular) y escaneo intraoral. Entrega del archivo .stl resultante al laboratorio.



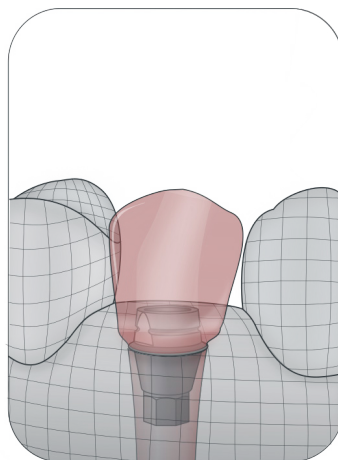
2.
LABORATORIO_ Montaje del BHS EO Scanbody en los análogos del implante (cara plana alineada a vestibular) y escaneo del modelo de acuerdo con los protocolos de software para obtener el archivo .stl.



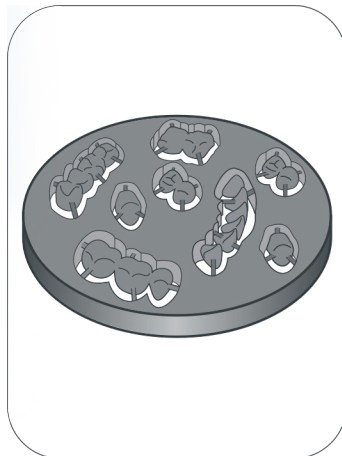
3.
LABORATORIO_ CAD: Diseño de la estructura en base BHS30 CrCo a partir del archivo .stl con la Biblioteca BHS30 Cad correspondiente y selección de la Angulación deseada - Angulación Predefinida - para los canales de acceso de Tornillo BHS30, de acuerdo con la emergencia no deseada en la restauración.



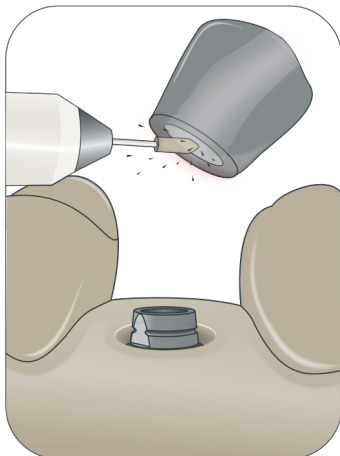4.
LABORATORIO_ CAM: Producción de la estructura en BHS30 CrCo Base según los protocolos de software.
Consulte nuestro servicio de soporte de fresado para verificar las compatibilidades de software.



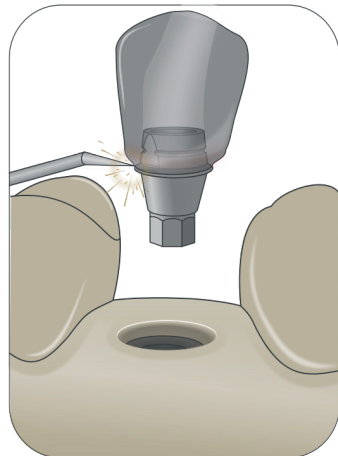
5.
LABORATORIO_ Ajuste de la estructura de fundición de metal en la base BHS30 CrCo hasta obtener un ajuste pasivo en el modelo y la soldadura perimetral con láser de ambas partes.




6.
LABORATORIO_ Ajuste de la estructura de metal fundido en la Base BHS30 CrCo hasta obtener un ajuste pasivo en el modelo y enviar la base y la estructura a la Clínica por separado para pruebas de metal de acuerdo con la relación real en la boca.

3.0 PROTOCOLOS

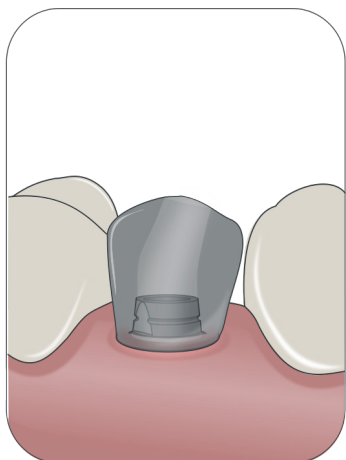
CAD/CAM SOLDADURA BASE CrCo



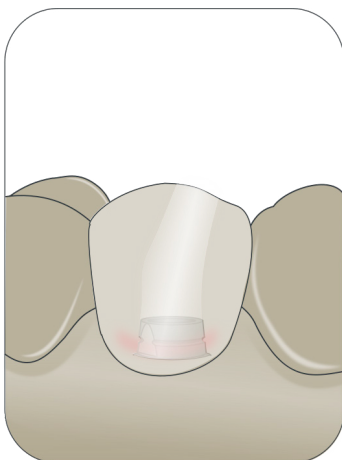7.
CLÍNICA_ Prueba de metal, especialmente en el caso de estructuras múltiples, para confirmar el ajuste de los implantes del paciente y su posición en la boca. Fijación provisional con ajuste pasivo en la boca y entrega al laboratorio.



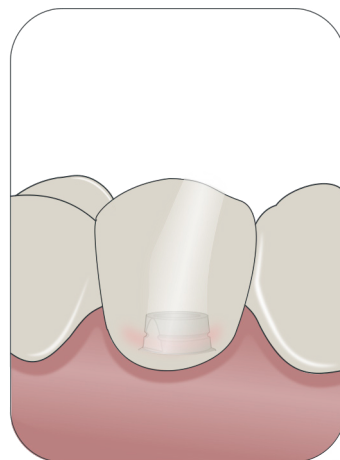8.
LABORATORIO_ Ajustes finales en la estructura, en su caso, restauración estética, pulido y acabado. Reensamblaje de las réplicas de acuerdo con la relación real en la boca y la soldadura perimetral con láser de ambas partes. Restauración estética, pulido y acabado.



9.
CLÍNICA_ Colocación de la prótesis al paciente.

3.0 PROTOCOLOS

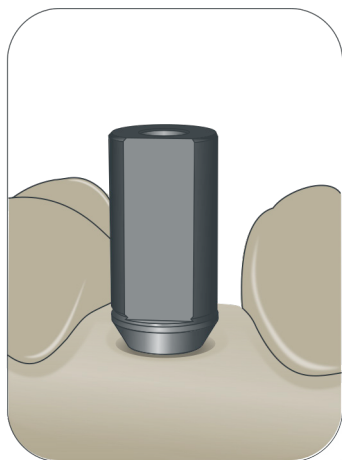
CAD/CAM CEMENTADO BASE Ti

Productos requeridos:


Tornillo BHS30
Destornillador BHS30
Scanbody BHS30 y librería asociada BHS30 Cad-Cam
Base CrCo

Materials:


Metal Sinterizado o Fresado



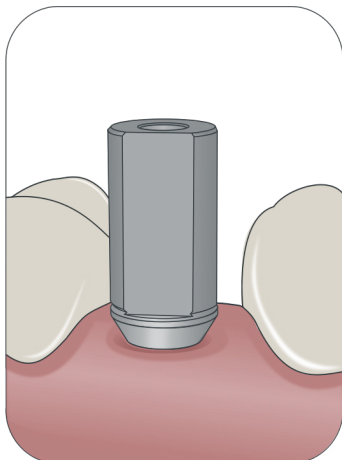
1.
CLÍNICA_ Montaje del BHS30 IO Scanbody en los implantes del paciente (cara plana alineada a vestibular) y escaneo intraoral. Entrega del archivo .stl resultante al laboratorio.



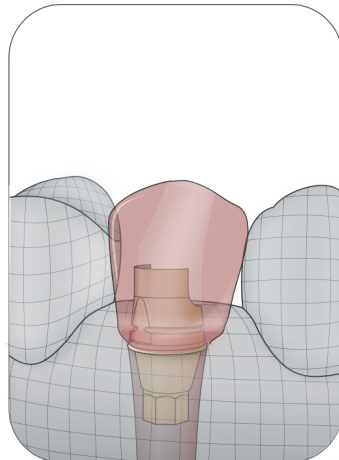
2.
LABORATORIO_ Montaje del BHS EO Scanbody en los análogos del implante (cara plana alineada a vestibular) y escaneo del modelo de acuerdo con los protocolos de software para obtener el archivo .stl.



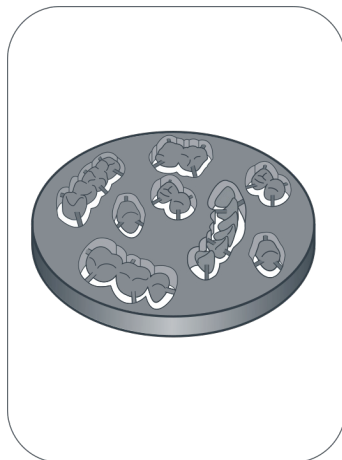
3.
LABORATORIO_ CAD: Diseño de la estructura sobre la base BHS30 Ti a partir del archivo .stl con la biblioteca BHS30 Cad correspondiente y selección de la angulación deseada - Angulación predefinida - para los canales de acceso de tornillo BHS30, de acuerdo con la emergencia no deseada en la restauración.



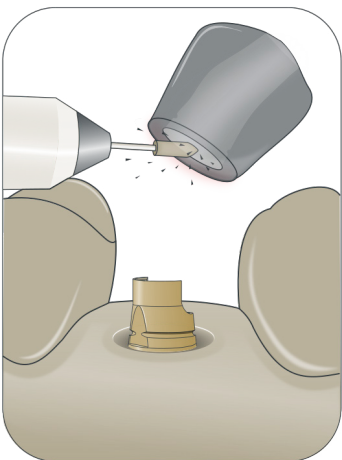4.
LABORATORIO_ CAM: Producción de la estructura en BHS30 CrCo Base según los protocolos de software.
Consulte nuestro servicio de soporte de fresado para verificar las compatibilidades de software.



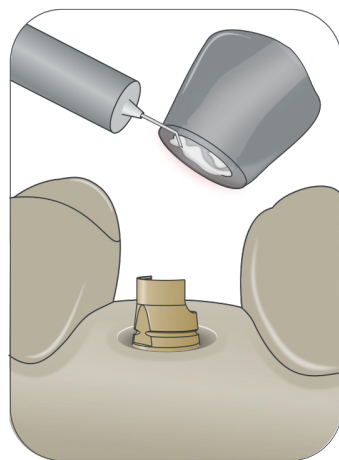
5.
LABORATORIO_ Ajuste de la estructura de metal fundido en la base BHS30 Ti hasta obtener un ajuste pasivo en el modelo y cementar ambas partes.




6.
LABORATORIO_ Ajuste de la estructura de metal fundido en la Base BHS30 CrCo hasta obtener un ajuste pasivo en el modelo y enviar la Base y la estructura a la Clínica por separado para pruebas de metal de acuerdo con la relación real en la boca.

3.0 PROTOCOLOS

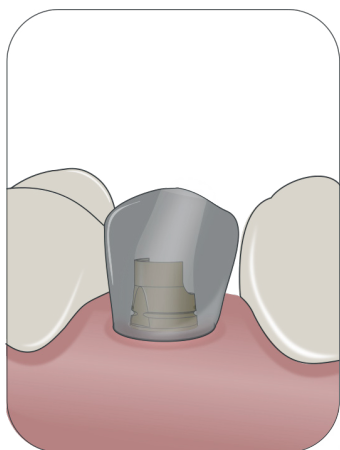
CAD/CAM CEMENTADO BASE Ti



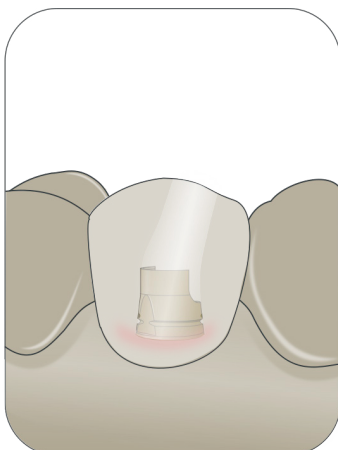7.
CLÍNICA_ Prueba de restauración, especialmente en el caso de estructuras múltiples, para confirmar el ajuste de los implantes del paciente y su posición en la boca. Fijación provisional con ajuste pasivo en la boca y entrega al laboratorio.



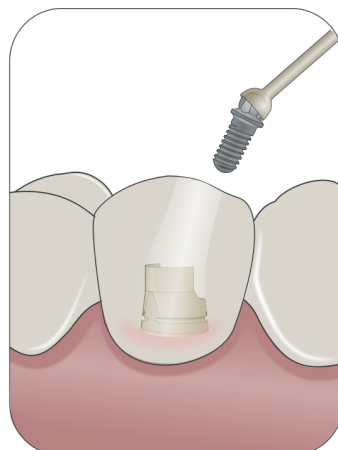8.
LABORATORIO_ Ajustes finales en la estructura, en su caso, restauración estética, pulido y acabado. Reensamblaje de las réplicas según la relación real en boca y cementación de ambas partes. Restauración estética, pulido y acabado.



9.
CLÍNICA_ Colocación de la prótesis al paciente.

4.0 TABLA DE COMPATIBILIDADES

MARCA	PÁGINAS			MARCA	PÁGINAS		
	CAD/CAM DIRECTO IMPLANTE	CAD/CAM SOLDADURA BASE CrCo	CAD/CAM CEMENTADO BASE Ti		CAD/CAM DIRECTO IMPLANTE	CAD/CAM SOLDADURA BASE CrCo	CAD/CAM CEMENTADO BASE Ti
AB IMPLANTS	6	34	62	IMPLANT DIRECT	20	48	76
ACE	6	34	62	JDENTAL CARE	20	48	76
ADIN	6	34	62	KEYSTONE DENTAL	21	49	77
ALPHABIO	7	35	63	KLOCKNER	21	49	77
ALPHADENT	7	35	63	LEADER	22	50	78
ANCLADEN	7	35	63	MEDENTIS	22	50	78
ANTHOGYR	8	36	64	MEGAGEN	22	50	78
ARDS	8	36	64	MICRODENT	23	51	79
ASTRA	8	36	64	MIS	24	52	80
AVINENT	9	37	65	MOZO GRAU	24	52	80
BEGO	9	37	65	MPI	25	53	81
BIOGENESIS	10	38	66	NEOBIOTECH	25	53	81
BIOHORIZONS	11	39	67	NEODENT	26	54	82
BIOMET 3i	11	39	67	NOBEL	26	54	82
BIONER	11	39	67	NT TRADING	27	55	83
BTI	12	40	68	OSSTEM IMPLANT	27	55	83
BTK	12	40	68	OSTEOPLUS	27	55	83
B&W	13	41	69	OXTEIN	28	56	84
CAMLOG	14	42	70	PALTOP	28	56	84
CON. SISTEMA PROTESE	14	42	70	PHIBO	29	57	85
CORTEX	15	43	71	RADHEX IMPLANTS	29	57	85
COWELLMEDI	15	43	71	SGS	29	57	85
DENTALTECH	15	43	71	SIGNO VINCES	30	58	86
DENTIS	16	44	72	STRAUMANN	30	58	86
DENTIUM	16	44	72	SWEDEN & MARTINA	31	59	87
DENTSPLY SIRONA	16	44	72	TRI DENTAL IMPLANTS	31	59	87
DIO IMPLANTS	17	45	73	TRINON	31	59	87
EDISON MEDICAL	17	45	73	ZIACOM (OSSEOLIFE)	32	60	88
ELITE MEDICA	17	45	73	ZIMMER	32	60	88
EUROTEKNIKA	17	45	73				
GALIMPLANT	18	46	74				
GMI	18	46	74				
GT MEDICAL	19	47	75				
HI TECH	19	47	75				



www.ballheadtechnology.com

(+34) 973 831 391 · info@ballheadtechnology.com