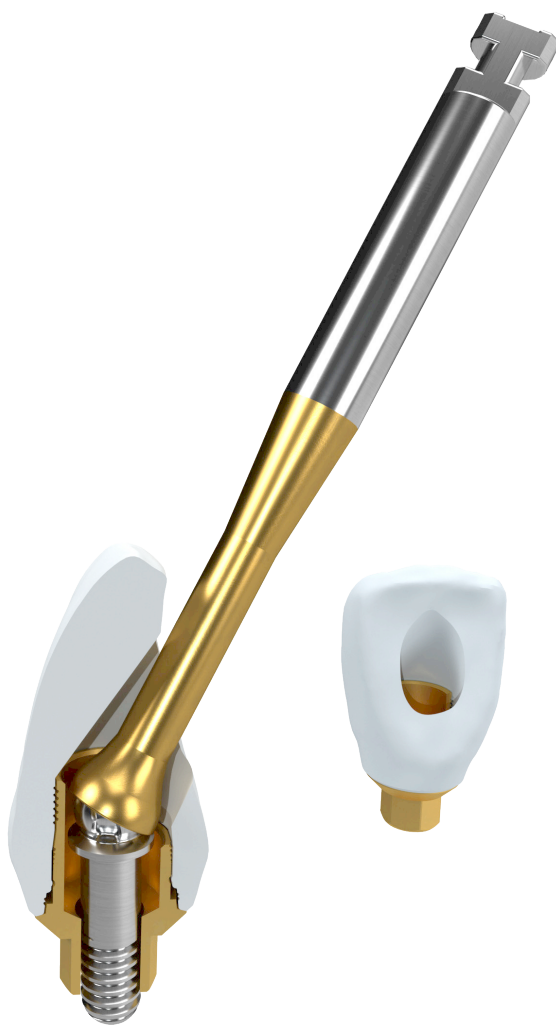


Ball Head Technology®

Pioneers in Angulation



CATÁLOGO DE PRODUCTO
PRÓTESIS CONVENCIONAL



30° DE LIBERTAD



La evolución hacia la personalización en el diseño de prótesis dentales requiere cada vez más el uso de pilares angulados para proporcionar versatilidad, simplicidad y facilidad de uso. Nuestras soluciones son pioneras en cubrir estas necesidades.



Nuestro objetivo principal es lograr la excelencia para generar seguridad, confiabilidad y comodidad al usar nuestros productos, tanto para el laboratorio dental como para los profesionales clínicos, responsables del tratamiento del paciente.



Desde nuestra primera patente en 2008, hemos desarrollado las soluciones angulares más eficientes e innovadoras basadas en la visión y experiencia de los profesionales de restauración y cirugía oral más calificados.

ÍNDICE

1.0 PRÓTESIS CONVENCIONAL	5/88
1.1 COLADO DIRECTO	5/35
1.2 SOBRECOLADO A BASE CrCo	36/60
1.3 CEMENTADO A BASE Ti	61/88
 2.0 DESTORNILLADOR BHS30	 89
 3.0 PROTOCOLOS	 90/97
 4.0 TABLA DE COMPATIBILIDADES	 98

Av. de Les Garrigues 17
25001 Lleida · Spain
(+34) 973 831 391
info@ballheadtechnology.com
www.ballheadtechnology.com

All names and trademarks used in this catalogue have been registered and are property of their respective companies.
Images published are merely intended for commercial purposes and have no contractual nature.
The information contained in this catalogue is aimed exclusively to professionals in the dental sector.
Ball Head Technology® reserves the right to make changes to this document without prior notice.
The guarantee conditions of Ball Head Technology® will apply as long as the instructions for each reference are respected.



1.1 COLADO DIRECTO



SIMPLICIDAD ES EFICIENCIA

Rotatorio y no-rotatorio para todos los principales sistemas de implantes.

Superficie continua para un fácil encerado y fundición.

Diseño de canal de tornillo optimizado.

Corrección de ángulo de 10, 20 y 30°.


Perfil de emergencia óptimo.

Cuidado de tejidos blandos.

1.1 COLADO DIRECTO

	PLATAFORMA	Ø	∠	CALCINABLE		TORNILLO CLÍNICA	TORNILLO LAB	RÉPLICA IMPLANTE
AB IMPLANTS COMPATIBLE								
I SERIES INTERNAL HEX								
	NARROW	Ø 3 - 3,75	30°	BHS07230	BHS07231	BHS02041	BHS02042	EM045130
			20°	BHS07232	BHS07233			
			10°	BHS07234	BHS07235			
	STANDARD	Ø 3,5 - 6,0	30°	BHS07073	BHS07074	BHS02021	BHS02022	
			20°	BHS07075	BHS07076			
			10°	BHS07077	BHS07078			
I 10C CONUS								
	RP	Ø 4,2	30°	BHS07067	BHS07068	BHS02023	BHS02024	EM048149
			20°	BHS07069	BHS07070			
			10°	BHS07071	BHS07072			
			ACE COMPATIBLE					
INFINITY EXTERNAL HEX								
	NP	Ø 3,3 / 3,75	30°	BHS07010	BHS07011	BHS02005	BHS02006	EM045222
			20°	BHS07012	BHS07013			
			10°	BHS07014	BHS07015			
	RP	Ø 4,0	30°	BHS07001	BHS07002	BHS02001	BHS02002	EM045098
			20°	BHS07004	BHS07005			
			10°	BHS07007	BHS07008			
	WP	Ø 5,0	30°	BHS07061	BHS07062	BHS02001	BHS02002	EM045082
			20°	BHS07063	BHS07064			
			10°	BHS07065	BHS07066			
INFINITY TRI-CAM								
	NP	Ø 3,5	30°	BHS07091	BHS07092	BHS02027	BHS02028	EM046291
			20°	BHS07093	BHS07094			
			10°	BHS07095	BHS07096			
	RP	Ø 4,3	30°	BHS07016	BHS07017	BHS02009	BHS02010	EM046292
			20°	BHS07031	BHS07032			
			10°	BHS07046	BHS07047			
	WP	Ø 5,0	30°	BHS07115	BHS07116	BHS02009	BHS02010	EM046293
			20°	BHS07117	BHS07118			
			10°	BHS07119	BHS07120			
INFINITY INTERNAL HEX								
	NP	Ø 3,7 / 4,1	30°	BHS07073	BHS07074	BHS02021	BHS02022	EM045130
			20°	BHS07075	BHS07076			
			10°	BHS07077	BHS07078			
	RP	Ø 4,7 / 5,1	30°	BHS07024	BHS07025	BHS02021	BHS02022	EM046218
			20°	BHS07039	BHS07040			
			10°	BHS07054	BHS07055			
ADIN COMPATIBLE								
SWELL								
		Ø 3,5 - 6	30°	BHS07073	BHS07074	BHS02021	BHS02022	EM045130
			20°	BHS07075	BHS07076			
			10°	BHS07077	BHS07078			

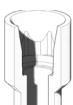1.1 COLADO DIRECTO

	PLATAFORMA	Ø	∠	CALCINABLE 	TORNILLO CLÍNICA	TORNILLO LAB	RÉPLICA IMPLANTE	
TOUAREG S/OS								
  		Ø 3,5 - 6	30° 20° 10°	BHS07073 BHS07075 BHS07077	BHS07074 BHS07076 BHS07078	BHS02021	BHS02022	EM045130
TOUAREG CLOSEFIT								
  	RP	Ø 3,5	30° 20° 10°	BHS07079 BHS07081 BHS07083	BHS07080 BHS07082 BHS07084	BHS02025	BHS02026	EM048148
	WP	Ø 4,3 / 5	30°	BHS07067	BHS07068	BHS02023	BHS02024	EM048149
			20°	BHS07069	BHS07070			
			10°	BHS07071	BHS07072			
	ALPHABIO COMPATIBLE							
EXTERNAL ALPHABIO								
  	NP	Ø 3,5	30° 20° 10°	BHS07010 BHS07012 BHS07014	BHS07011 BHS07013 BHS07015	BHS02005	BHS02006	EM045222
	RP	Ø 4,1	30°	BHS07001	BHS07002	BHS02001	BHS02002	EM045098
			20°	BHS07004	BHS07005			
			10°	BHS07007	BHS07008			
	WP	Ø 5,1	30°	BHS07218	BHS07219	BHS02039	BHS02040	EM045070
			20°	BHS07220	BHS07221			
			10°	BHS07222	BHS07223			
	INTERNAL ALPHABIO							
  		Ø 3,3 - 6	30° 20° 10°	BHS07073 BHS07075 BHS07077	BHS07074 BHS07076 BHS07078	BHS02021	BHS02022	EM045130
ALPHA DENT COMPATIBLE								
ACTIVE								
		Ø 3,75 / 4,2 / 5,0	30° 20° 10°	BHS07073 BHS07075 BHS07077	BHS07074 BHS07076 BHS07078	BHS02021	BHS02022	EM045130
ACTIVE PLUS								
  		Ø 4,2 / 5,0	30° 20° 10°	BHS07073 BHS07075 BHS07077	BHS07074 BHS07076 BHS07078	BHS02021	BHS02022	EM045130
CLASSIC								
		Ø 3,3 / 3,75 / 4,2 / 5,0	30° 20° 10°	BHS07073 BHS07075 BHS07077	BHS07074 BHS07076 BHS07078	BHS02021	BHS02022	EM045130

1.1 COLADO DIRECTO

	PLATAFORMA	Ø	∠	CALCINABLE ○	TORNILLO CLÍNICA	TORNILLO LAB	RÉPLICA IMPLANTE	
ANCLADEN COMPATIBLE								
ANCLALOCK								
  		Ø 3,75 - 5	30° 20° 10°	BHS07073 BHS07075 BHS07077	BHS07074 BHS07076 BHS07078	BHS02021	BHS02022	EM045130
ANTHOGYR COMPATIBLE								
ANTHOFIT HE								
  	RP	Ø 4,1	30° 20° 10°	BHS07001 BHS07004 BHS07007	BHS07002 BHS07005 BHS07008	BHS02001	BHS02002	EM045098
	WP	Ø 5,0	30° 20° 10°	BHS07061 BHS07063 BHS07065	BHS07062 BHS07064 BHS07066	BHS02001	BHS02002	EM045082
OSSFIT								
  	RP	Ø 4,8	30° 20° 10°	BHS07020 BHS07035 BHS07050	BHS07021 BHS07036 BHS07051	BHS02011	BHS02012	EM045144
	SYN_RP	Ø 4,8	30° 20° 10°	BHS07022 BHS07037 BHS07052	BHS07023 BHS07038 BHS07053	BHS02013	BHS02014	EM046375
ARDS COMPATIBLE								
SMART								
  		Ø 3,75 - 4,5	30° 20° 10°	BHS07073 BHS07075 BHS07077	BHS07074 BHS07076 BHS07078	BHS02021	BHS02022	EM045130
CLASSIC								
  		Ø 3,3 - 6	30° 20° 10°	BHS07073 BHS07075 BHS07077	BHS07074 BHS07076 BHS07078	BHS02021	BHS02022	EM045130
PREMIUM								
  		Ø 3,3 - 6	30° 20° 10°	BHS07073 BHS07075 BHS07077	BHS07074 BHS07076 BHS07078	BHS02021	BHS02022	EM045130

1.1 COLADO DIRECTO

	PLATAFORMA	Ø	∠	CALCINABLE		TORNILLO CLÍNICA	TORNILLO LAB	RÉPLICA IMPLANTE
ASTRA COMPATIBLE								
AQUA								
	RP_3,5 / 4,0		30°	BHS07097	BHS07098	BHS02025	BHS02026	EM046371
			20°	BHS07099	BHS07100			
			10°	BHS07101	BHS07102			
LILAC								
	WP_4,5 / 5,0		30°	BHS07130	BHS07131	BHS02009	BHS02010	EM046370
			20°	BHS07132	BHS07133			
			10°	BHS07134	BHS07135			
CONO 20°								
	Ø 3,5		30°		BHS07103	BHS02003	BHS02004	EM045638
			20°		BHS07104			
			10°		BHS07105			
CONO 45°								
	Ø 3,5		30°		BHS07106	BHS02003	BHS02004	EM047786
			20°		BHS07107			
			10°		BHS07108			
EV								
	Ø 3,6		30°	BHS07269	BHS07270	BHS02053	BHS02054	
			20°	BHS07271	BHS07272			
			10°	BHS07273	BHS07274			
	Ø 4,2		30°	BHS07263	BHS07264	BHS02055	BHS02056	
			20°	BHS07265	BHS07266			
			10°	BHS07267	BHS07268			
AVINENT COMPATIBLE								
EH								
	NP	Ø 3,5	30°	BHS07010	BHS07011	BHS02031	BHS02032	EM045222
			20°	BHS07012	BHS07013			
			10°	BHS07014	BHS07015			
	RP	Ø 4,1	30°	BHS07001	BHS07002	BHS02001	BHS02002	EM045098
			20°	BHS07004	BHS07005			
			10°	BHS07007	BHS07008			
	WP	Ø 5,1	30°	BHS07218	BHS07219	BHS02039	BHS02040	EM045070
			20°	BHS07220	BHS07221			
			10°	BHS07222	BHS07223			



1.1 COLADO DIRECTO

	PLATAFORMA	Ø	∠	CALCINABLE 	TORNILLO CLÍNICA	TORNILLO LAB	RÉPLICA IMPLANTE	
IH	  	Ø 3,5 / 4,1	30° 20° 10°	BHS07073 BHS07075 BHS07077	BHS07074 BHS07076 BHS07078	BHS02021	BHS02022	EM045130
MULTIUNIT	  	RP Ø 4,8	30° 20° 10°		BHS07003 BHS07006 BHS07009	BHS02003	BHS02004	EM045169
OCEAN CONICAL (C.C)	  	Ø 3,5 (Implant Ø 3,5/ Ø 4,0)	30° 20° 10°	BHS07079 BHS07081 BHS07083	BHS07080 BHS07082 BHS07084	BHS02025	BHS02026	EM048148
		Ø 4,1 (Implant Ø 4,5/ Ø 5,0)	30° 20° 10°	BHS07067 BHS07069 BHS07071	BHS07068 BHS07070 BHS07072	BHS02023	BHS02024	EM048149
BEGO COMPATIBLE								
EH	  	NP_Ø 2,7 / 3,1	30° 20° 10°	BHS07148 BHS07150 BHS07152	BHS07149 BHS07151 BHS07153	BHS02013	BHS02014	EM047957
IH	  	Ø 3,75 / Ø 4,1	30° 20° 10°	BHS07073 BHS07075 BHS07077	BHS07074 BHS07076 BHS07078	BHS02021	BHS02022	EM045130
BIOGENESIS COMPATIBLE								
3ICON	  	NP Ø 3,5	30° 20° 10°	BHS07194 BHS07196 BHS07198	BHS07195 BHS07197 BHS07199	BHS02001	BHS02002	EM045468
		RP Ø 4,1	30° 20° 10°	BHS07001 BHS07004 BHS07007	BHS07002 BHS07005 BHS07008	BHS02001	BHS02002	EM045098
		WP Ø 5,0	30° 20° 10°	BHS07061 BHS07063 BHS07065	BHS07062 BHS07064 BHS07066	BHS02001	BHS02002	EM045082

1.1 COLADO DIRECTO

	PLATAFORMA	Ø	∠	CALCINABLE		TORNILLO CLÍNICA	TORNILLO LAB	RÉPLICA IMPLANTE
ITICON								
  	RP	Ø 4,8	30° 20° 10°	BHS07020 BHS07035 BHS07050	BHS07021 BHS07036 BHS07051	BHS02011	BHS02012	EM045144
	RP	Ø 4,8	30° 20° 10°	BHS07022 BHS07037 BHS07052	BHS07023 BHS07038 BHS07053	BHS02013	BHS02014	EM046375
ATICON								
  	RP	Ø 3,5 / 4,0	30° 20° 10°	BHS07097 BHS07099 BHS07101	BHS07098 BHS07100 BHS07102	BHS02025	BHS02026	EM046371
	WP	Ø 4.5 / 5.0	30° 20° 10°	BHS07130 BHS07132 BHS07134	BHS07131 BHS07133 BHS07135	BHS02009	BHS02010	EM046370
KISSES								
  	RP	Ø 3,5 / 4,0	30° 20° 10°	BHS07097 BHS07099 BHS07101	BHS07098 BHS07100 BHS07102	BHS02025	BHS02026	EM046371
	WP	Ø 4.5 / 5.0 / 5,5	30° 20° 10°	BHS07130 BHS07132 BHS07134	BHS07131 BHS07133 BHS07135	BHS02009	BHS02010	EM046370
CONO 20°								
 	RP / WP		30° 20° 10°		BHS07103 BHS07104 BHS07105	BHS02003	BHS02004	EM045638
CONO 45°								
 	RP / WP		30° 20° 10°		BHS07106 BHS07107 BHS07108	BHS02003	BHS02004	EM047786
BIOHORIZONS COMPATIBLE								
EXTERNAL								
 	NP	Ø 3,7	30° 20° 10°	BHS07236 BHS07238 BHS07240	BHS07237 BHS07239 BHS07241	BHS02031	BHS02032	
INTERNAL								
 	NP	Ø 3,5	30° 20° 10°	BHS07073 BHS07075 BHS07077	BHS07074 BHS07076 BHS07078	BHS02021	BHS02022	EM045130
	RP	Ø 4,5	30° 20° 10°	BHS07024 BHS07039 BHS07054	BHS07025 BHS07040 BHS07055	BHS02021	BHS02022	EM046218
	WP	Ø 5,7	30° 20° 10°	BHS07166 BHS07168 BHS07170	BHS07167 BHS07169 BHS07171	BHS02021	BHS02022	

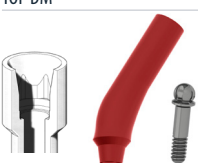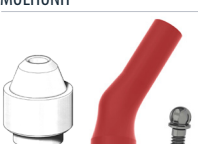1.1 COLADO DIRECTO

	PLATAFORMA	Ø	∠	 CALCINABLE		TORNILLO CLÍNICA	TORNILLO LAB	RÉPLICA IMPLANTE
BIOMET 3i COMPATIBLE								
EH OSSEOTITE								
	NP	Ø 3,5	30° 20° 10°	BHS07194 BHS07196 BHS07198	BHS07195 BHS07197 BHS07199	BHS02001	BHS02002	EM045468
	RP	Ø 4,1	30° 20° 10°	BHS07001 BHS07004 BHS07007	BHS07002 BHS07005 BHS07008	BHS02001	BHS02002	EM045098
	WP	Ø 5,0	30° 20° 10°	BHS07061 BHS07063 BHS07065	BHS07062 BHS07064 BHS07066	BHS02001	BHS02002	EM045082
CERTAIN								
	NP	Ø 3,4	30° 20° 10°	BHS07029 BHS07044 BHS07059	BHS07030 BHS07045 BHS07060	BHS02007	BHS02008	EM045166
	RP	Ø 4,1	30° 20° 10°	BHS07018 BHS07033 BHS07048	BHS07019 BHS07034 BHS07049	BHS02007	BHS02008	EM045165
	WP	Ø 5,0	30° 20° 10°	BHS07121 BHS07123 BHS07125	BHS07122 BHS07124 BHS07126	BHS02007	BHS02008	EM045161
BIONER COMPATIBLE								
IKELT / BIKELT								
	RP	Ø 4,1	30° 20° 10°	BHS07001 BHS07004 BHS07007	BHS07002 BHS07005 BHS07008	BHS02001	BHS02002	EM045098
	WP	Ø 5,0	30° 20° 10°	BHS07061 BHS07063 BHS07065	BHS07062 BHS07064 BHS07066	BHS02001	BHS02002	EM045082
	WP	Ø 5,1	30° 20° 10°	BHS07218 BHS07220 BHS07222	BHS07219 BHS07221 BHS07223	BHS02039	BHS02040	EM045070
HIKELT								
	NP	Ø 3,8	30° 20° 10°	BHS07073 BHS07075 BHS07077	BHS07074 BHS07076 BHS07078	BHS02021	BHS02022	EM045130
	RP	Ø 4,7	30° 20° 10°	BHS07024 BHS07039 BHS07054	BHS07025 BHS07040 BHS07055	BHS02021	BHS02022	EM046218
TOP DM								
		Ø 3,5 / 4,0 / 5,0	30° 20° 10°	BHS07079 BHS07081 BHS07083	BHS07080 BHS07082 BHS07084	BHS02025	BHS02026	EM048148
MULTUNIT								
	RP	Ø 4,8	30° 20° 10°		BHS07003 BHS07006 BHS07009	BHS02003	BHS02004	EM045169

1.1 COLADO DIRECTO

	PLATAFORMA	Ø	∠	HEX	CALCINABLE	○	TORNILLO CLÍNICA	TORNILLO LAB	RÉPLICA IMPLANTE
BTI COMPATIBLE									
EH									
	NP Tiny	Ø 3,5	30° 20° 10°	BHS07148 BHS07150 BHS07152	BHS07149 BHS07151 BHS07153		BHS02013	BHS02014	EM047957
	RP	Ø 4,1	30° 20° 10°	BHS07001 BHS07004 BHS07007	BHS07002 BHS07005 BHS07008		BHS02001	BHS02002	EM045098
	WP	Ø 5,5	30° 20° 10°	BHS07154 BHS07156 BHS07158	BHS07155 BHS07157 BHS07159		BHS02013	BHS02014	EM047967
CUATRILOBULAR									
	RP	Ø 4,1	30° 20° 10°	BHS07160 BHS07162 BHS07164	BHS07161 BHS07163 BHS07165		BHS02021	BHS02022	EM047743
BTK COMPATIBLE									
8NECK INT									
	SR	Ø 4,8	30° 20° 10°	BHS07020 BHS07035 BHS07050	BHS07021 BHS07036 BHS07051		BHS02011	BHS02012	EM045144
EVO DL EXT									
	NP	Ø 3,4/ Ø3,7	30° 20° 10°	BHS07194 BHS07196 BHS07198	BHS07195 BHS07197 BHS07199		BHS02035	BHS02036	
	RP	Ø 4,1/ Ø4,6	30° 20° 10°	BHS07001 BHS07004 BHS07007	BHS07002 BHS07005 BHS07008		BHS02001	BHS02002	EM045098
	WP	Ø 5,0/ Ø5,6	30° 20° 10°	BHS07061 BHS07063 BHS07065	BHS07062 BHS07064 BHS07066		BHS02001	BHS02002	EM045082
EVO DL INT									
		Ø3,5 / Ø3,7 / Ø4,6 / Ø5,0 / Ø5,6	30° 20° 10°	BHS07073 BHS07075 BHS07077	BHS07074 BHS07076 BHS07078		BHS02021	BHS02022	EM045130
KLASSIC EXT									
	NP	Ø 3,4	30° 20° 10°	BHS07194 BHS07196 BHS07198	BHS07195 BHS07197 BHS07199		BHS02035	BHS02036	
	RP	Ø 4,1	30° 20° 10°	BHS07001 BHS07004 BHS07007	BHS07002 BHS07005 BHS07008		BHS02001	BHS02002	EM045098
	WP	Ø 5,0	30° 20° 10°	BHS07061 BHS07063 BHS07065	BHS07062 BHS07064 BHS07066		BHS02001	BHS02002	EM045082

1.1 COLADO DIRECTO

	PLATAFORMA	Ø	∠	CALCINABLE		TORNILLO CLÍNICA	TORNILLO LAB	RÉPLICA IMPLANTE
KLASSIC INT								
		Ø3,5 / Ø4,5 / Ø5,0	30°	BHS07073	BHS07074	BHS02021	BHS02022	EM045130
			20°	BHS07075	BHS07076			
			10°	BHS07077	BHS07078			
KONIC EXT								
	NP	Ø 3,4	30°	BHS07194	BHS07195	BHS02035	BHS02036	
			20°	BHS07196	BHS07197			
			10°	BHS07198	BHS07199			
	RP	Ø 4,1	30°	BHS07001	BHS07002	BHS02001	BHS02002	EM045098
			20°	BHS07004	BHS07005			
			10°	BHS07007	BHS07008			
	WP	Ø 5,0	30°	BHS07061	BHS07062	BHS02001	BHS02002	EM045082
			20°	BHS07063	BHS07064			
			10°	BHS07065	BHS07066			
KONIC INT								
		Ø3,5 / Ø5,0	30°	BHS07073	BHS07074	BHS02021	BHS02022	EM045130
			20°	BHS07075	BHS07076			
			10°	BHS07077	BHS07078			
SAFE TL INT								
	SR	Ø 4,8	30°	BHS07020	BHS07021	BHS02011	BHS02012	EM045144
			20°	BHS07035	BHS07036			
			10°	BHS07050	BHS07051			
B&W COMPATIBLE								
HEXAGONO EXT								
	NP	Ø 3,3	30°	BHS07136	BHS07137	BHS02035	BHS02036	EM048022
			20°	BHS07138	BHS07139			
			10°	BHS07140	BHS07141			
	RP	Ø 4,1	30°	BHS07001	BHS07002	BHS02001	BHS02002	EM045098
			20°	BHS07004	BHS07005			
			10°	BHS07007	BHS07008			
	WP	Ø 5,0	30°	BHS07061	BHS07062	BHS02001	BHS02002	EM045082
			20°	BHS07063	BHS07064			
			10°	BHS07065	BHS07066			
HEXAGONO INT								
	NP	Ø 3,3	30°	BHS07073	BHS07074	BHS02021	BHS02022	EM045130
			20°	BHS07075	BHS07076			
			10°	BHS07077	BHS07078			
	RP	Ø 4,0	30°	BHS07073	BHS07074	BHS02021	BHS02022	EM045130
			20°	BHS07075	BHS07076			
			10°	BHS07077	BHS07078			
	WP	Ø 5,0	30°	BHS07073	BHS07074	BHS02021	BHS02022	EM045130
			20°	BHS07075	BHS07076			
			10°	BHS07077	BHS07078			

1.1 COLADO DIRECTO

	PLATAFORMA	Ø	∠	CALCINABLE		TORNILLO CLÍNICA	TORNILLO LAB	RÉPLICA IMPLANTE	
CAMLOG COMPATIBLE									
CAMLOG									
		Ø 3,3	30°	BHS07275	BHS07276	BHS02049	BHS02050		
			20°	BHS07277	BHS07278				
			10°	BHS07279	BHS07280				
		Ø 3,8	30°	BHS07281	BHS07282	BHS02049	BHS02050		
			20°	BHS07283	BHS07284				
			10°	BHS07285	BHS07286				
		Ø 4,3	30°	BHS07287	BHS07288	BHS02049	BHS02050		
			20°	BHS07289	BHS07290				
			10°	BHS07291	BHS07292				
		Ø 5,0	30°	BHS07293	BHS07294	BHS02051	BHS02052		
			20°	BHS07295	BHS07296				
			10°	BHS07297	BHS07298				
CONEXÃO SIST. PROTESE COMPATIBLE									
MORSE INDEXADO									
		Ø 3,5 / 3,75 / 4,0 / 5,0	30°	BHS07079	BHS07080	BHS02025	BHS02026	EM048148	
			20°	BHS07081	BHS07082				
			10°	BHS07083	BHS07084				
HEXAGONO EXT									
		Ø 3,3	30°	BHS07136	BHS07137	BHS02035	BHS02036	EM048022	
			20°	BHS07138	BHS07139				
			10°	BHS07140	BHS07141				
		Ø 3,75 / 4,0	30°	BHS07001	BHS07002	BHS02001	BHS02002		EM045098
			20°	BHS07004	BHS07005				
			10°	BHS07007	BHS07008				
		Ø 5,0	30°	BHS07061	BHS07062	BHS02001	BHS02002		EM045082
			20°	BHS07063	BHS07064				
			10°	BHS07065	BHS07066				
			30°	BHS07024	BHS07025	BHS02021	BHS02022		EM046218
			20°	BHS07039	BHS07040				
			10°	BHS07054	BHS07055				
HEXAGONO INT									
		Ø 3,75 / 4,0 / 5,0	30°	BHS07024	BHS07025	BHS02021	BHS02022	EM046218	
			20°	BHS07039	BHS07040				
			10°	BHS07054	BHS07055				

1.1 COLADO DIRECTO

	PLATAFORMA	Ø	∠	CALCINABLE ○	TORNILLO CLÍNICA	TORNILLO LAB	RÉPLICA IMPLANTE				
CORTEX COMPATIBLE											
DYNAMIX											
	Ø 3,3 / 3,8 / 4,2 / 5	30°	BHS07073	BHS07074	BHS02021	BHS02022	EM045130				
		20°	BHS07075	BHS07076							
		10°	BHS07077	BHS07078							
CLASSIX											
	Ø 3,3 / 3,8 / 4,2 / 5	30°	BHS07073	BHS07074	BHS02021	BHS02022	EM045130				
		20°	BHS07075	BHS07076							
		10°	BHS07077	BHS07078							
SATURN											
	Ø 3,8 / 4,2	30°	BHS07073	BHS07074	BHS02021	BHS02022	EM045130				
		20°	BHS07075	BHS07076							
		10°	BHS07077	BHS07078							
COWELLMEDI COMPATIBLE											
EXTERNAL											
	RP	Ø 4,1	30°	BHS07001	BHS07002	BHS02001	BHS02002	EM045098			
			20°	BHS07004	BHS07005						
			10°	BHS07007	BHS07008						
	WP	Ø 5,1	30°	BHS07218	BHS07219	BHS02039	BHS02040	EM045070			
			20°	BHS07220	BHS07221						
			10°	BHS07222	BHS07223						
INTERNAL											
	RN	Ø 4,8	30°	BHS07020	BHS07021	BHS02011	BHS02012	EM045144			
			20°	BHS07035	BHS07036						
			10°	BHS07050	BHS07051						
SUBMERGED (INT)											
	Ø 3,5 / 4 / 4,5 / 5 / 6	30°	BHS07142	BHS07143	BHS02009	BHS02010					
		20°	BHS07144	BHS07145							
		10°	BHS07146	BHS07147							




1.1 COLADO DIRECTO

	PLATAFORMA	Ø	∠	CALCINABLE		TORNILLO CLÍNICA	TORNILLO LAB	RÉPLICA IMPLANTE
DENTALTECH COMPATIBLE								
IMPLICLOG GII								
	RP	Ø 4,5	30° 20° 10°	BHS07024 BHS07039 BHS07054	BHS07025 BHS07040 BHS07055	BHS02021	BHS02022	EM046218
IMPLASSIC HX2								
	RP	Ø 4,1	30° 20° 10°	BHS07001 BHS07004 BHS07007	BHS07002 BHS07005 BHS07008	BHS02001	BHS02002	EM045098
DENTIS COMPATIBLE								
S-CLEAN								
	RP	Ø 3,4	30° 20° 10°	BHS07142 BHS07144 BHS07146	BHS07143 BHS07145 BHS07147	BHS02009	BHS02010	
I-CLEAN								
	RP	Ø 4,8	30° 20° 10°	BHS07020 BHS07035 BHS07050	BHS07021 BHS07036 BHS07051	BHS02011	BHS02012	EM045144
DENTIUM COMPATIBLE								
SIMPLE LINE II								
	RN	Ø 4,8	30° 20° 10°	BHS07020 BHS07035 BHS07050	BHS07021 BHS07036 BHS07051	BHS02011	BHS02012	EM045144
IMPLANTUM								
		Ø 3,6 / 4 / 4,4 / 4,9 / 6 / 7	30° 20° 10°	BHS07142 BHS07144 BHS07146	BHS07143 BHS07145 BHS07147	BHS02009	BHS02010	
SUPER LINE								
		Ø 3,6 / 4 / 4,5 / 5 / 6	30° 20° 10°	BHS07142 BHS07144 BHS07146	BHS07143 BHS07145 BHS07147	BHS02009	BHS02010	

1.1 COLADO DIRECTO

	PLATAFORMA	Ø	∠	CALCINABLE		TORNILLO CLÍNICA	TORNILLO LAB	RÉPLICA IMPLANTE
DENTSPLY SIRONA COMPATIBLE								
XIVES								
	D	3.4	30°	BHS07308	BHS07309	BHS02047	BHS02048	
			20°	BHS07310	BHS07311			
			10°	BHS07312	BHS07313			
		3.8	30°	BHS07314	BHS07315	BHS02047	BHS02048	
			20°	BHS07316	BHS07317			
			10°	BHS07318	BHS07319			
		4.5	30°	BHS07320	BHS07321	BHS02047	BHS02048	
			20°	BHS07322	BHS07323			
			10°	BHS07324	BHS07325			
DIO IMPLANTS COMPATIBLE								
EXTERNAL								
	NP	Ø 3,5	30°	BHS07010	BHS07011	BHS02005	BHS02006	EM045222
			20°	BHS07012	BHS07013			
			10°	BHS07014	BHS07015			
	RP	Ø 4,1	30°	BHS07001	BHS07002	BHS02001	BHS02002	EM045098
			20°	BHS07004	BHS07005			
			10°	BHS07007	BHS07008			
	WP	Ø 5,1	30°	BHS07218	BHS07219	BHS02039	BHS02040	EM045070
			20°	BHS07220	BHS07221			
			10°	BHS07222	BHS07223			
UF II								
	Ø 3,8 / 4 / 4,5 / 5 / 5,5	30°	BHS07142	BHS07143	BHS02009	BHS02010		
		20°	BHS07144	BHS07145				
		10°	BHS07146	BHS07147				
EDISON MEDICAL COMPATIBLE								
LAMINA (IH)								
	Ø 3,3/3,75/4,2/5,0/6,0	30°	BHS07073	BHS07074	BHS02021	BHS02022	EM045130	
		20°	BHS07075	BHS07076				
		10°	BHS07077	BHS07078				
FORTIS (IH)								
	Ø 3,3/3,75/4,2/5,0/6,0	30°	BHS07073	BHS07074	BHS02021	BHS02022	EM045130	
		20°	BHS07075	BHS07076				
		10°	BHS07077	BHS07078				

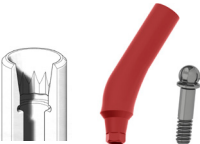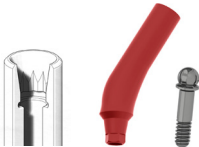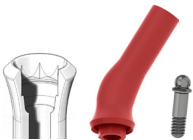
1.1 COLADO DIRECTO

	PLATAFORMA	Ø	∠	CALCINABLE		TORNILLO CLÍNICA	TORNILLO LAB	RÉPLICA IMPLANTE
ELITE MEDICA COMPATIBLE								
EXTERNAL CONNECT								
	NP	Ø 3,5	30°	BHS07010	BHS07011	BHS02005	BHS02006	EM045222
			20°	BHS07012	BHS07013			
			10°	BHS07014	BHS07015			
	RP	Ø 4,1	30°	BHS07001	BHS07002	BHS02001	BHS02002	EM045098
			20°	BHS07004	BHS07005			
			10°	BHS07007	BHS07008			
	WP	Ø 5,1	30°	BHS07218	BHS07219	BHS02039	BHS02040	EM045070
			20°	BHS07220	BHS07221			
			10°	BHS07222	BHS07223			
EUROTEKNIKA COMPATIBLE								
UNEVA								
	Ø 3,6 / 4,1 / 4,8	30°	BHS07001	BHS07002	BHS02001	BHS02002	EM045098	
		20°	BHS07004	BHS07005				
		10°	BHS07007	BHS07008				
NATURACTICS								
	Ø 3,5 / 4 / 4,5 / 5	30°	BHS07097	BHS07098	BHS02025	BHS02026	EM046371	
		20°	BHS07099	BHS07100				
		10°	BHS07101	BHS07102				
NATURALL+								
	Ø 3,5 / 4 / 4,5 / 5	30°	BHS07097	BHS07098	BHS02025	BHS02026	EM046371	
		20°	BHS07099	BHS07100				
		10°	BHS07101	BHS07102				
NATEA								
	NP	Ø 3,6 / 4,1	30°	BHS07097	BHS07098	BHS02025	BHS02026	EM046371
			20°	BHS07099	BHS07100			
			10°	BHS07101	BHS07102			
	RP	Ø 4,8 / 6	30°	BHS07097	BHS07098	BHS02025	BHS02026	EM046371
			20°	BHS07099	BHS07100			
			10°	BHS07101	BHS07102			
AESTHETICA								
	Ø 3,6 / 4,1 / 4,8	30°	BHS07020	BHS07021	BHS02011	BHS02012	EM045144	
		20°	BHS07035	BHS07036				
		10°	BHS07050	BHS07051				




1.1 COLADO DIRECTO

	PLATAFORMA	Ø	∠	CALCINABLE		TORNILLO CLÍNICA	TORNILLO LAB	RÉPLICA IMPLANTE
GALIMPLANT COMPATIBLE								
IPXE - EXTERNA								
	RP	Ø 3,5 / 4 / 5	30°	BHS07001	BHS07002	BHS02001	BHS02002	EM045098
			20°	BHS07004	BHS07005			
			10°	BHS07007	BHS07008			
ICI - INTERNA								
	RP	Ø 3,2 / 3,5 / 4 / 5	30°	BHS07097	BHS07098	BHS02025	BHS02026	EM046371
			20°	BHS07099	BHS07100			
			10°	BHS07101	BHS07102			
IPX - INTERNA								
	RP	Ø 3,5 / 4 / 4,5 / 5	30°	BHS07097	BHS07098	BHS02025	BHS02026	EM046371
			20°	BHS07099	BHS07100			
			10°	BHS07101	BHS07102			
GMI COMPATIBLE								
FRONTIER (IH)								
	RP Standard	Ø 3,3	30°	BHS07073	BHS07074	BHS02021	BHS02022	EM045130
			20°	BHS07075	BHS07076			
			10°	BHS07077	BHS07078			
	WP Wide	Ø 4,3	30°	BHS07024	BHS07025	BHS02021	BHS02022	EM046218
			20°	BHS07039	BHS07040			
			10°	BHS07054	BHS07055			
FRONTIER multi-aesthetic								
	RP	Ø 4,8	30°		BHS07003	BHS02003	BHS02004	EM045169
			20°		BHS07006			
			10°		BHS07009			
	WP	Ø 6,0	30°		BHS07248	BHS02031	BHS02032	
			20°		BHS07249			
			10°		BHS07250			
PHOENIX (EH)								
	Narrow	Ø 3,3	30°	BHS07236	BHS07237	BHS02031	BHS02032	
			20°	BHS07238	BHS07239			
			10°	BHS07240	BHS07241			
	Standard	Ø 4,1	30°	BHS07001	BHS07002	BHS02001	BHS02002	EM045098
			20°	BHS07004	BHS07005			
			10°	BHS07007	BHS07008			
	Wide (Hex. 2,7)	Ø 5,1	30°	BHS07061	BHS07062	BHS02001	BHS02002	EM045082
			20°	BHS07063	BHS07064			
			10°	BHS07065	BHS07066			


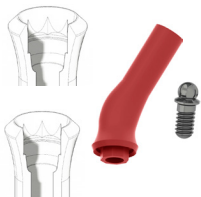
1.1 COLADO DIRECTO

	PLATAFORMA	Ø	∠	CALCINABLE		TORNILLO CLÍNICA	TORNILLO LAB	RÉPLICA IMPLANTE
PHOENIX (EH)								
	Wide (Hex. 3,4)	Ø 5,1	30º	BHS07218	BHS07219	BHS02039	BHS02040	EM045070
			20º	BHS07220	BHS07221			
			10º	BHS07222	BHS07223			
	Extra-Wide	Ø 6,0	30º	BHS07242	BHS07243	BHS02039	BHS02040	
			20º	BHS07244	BHS07245			
			10º	BHS07246	BHS07247			
PHOENIX multi-aesthetic								
	RP	Ø 4,8	30º		BHS07003	BHS02003	BHS02004	EM045169
			20º		BHS07006			
			10º		BHS07009			
	WP	Ø 6,0	30º		BHS07248	BHS02031	BHS02032	
			20º		BHS07249			
			10º		BHS07250			
GT MEDICAL COMPATIBLE								
BEST FIT HXE								
	NP	Ø 3,5	30º	BHS07010	BHS07011	BHS02005	BHS02006	EM045222
			20º	BHS07012	BHS07013			
			10º	BHS07014	BHS07015			
	RP	Ø 4,1	30º	BHS07001	BHS07002	BHS02001	BHS02002	EM045098
			20º	BHS07004	BHS07005			
			10º	BHS07007	BHS07008			
	WP	Ø 5,1	30º	BHS07218	BHS07219	BHS02039	BHS02040	EM045070
			20º	BHS07220	BHS07221			
			10º	BHS07222	BHS07223			
BEST FIT HXI								
	WP	Ø 4,5 / 5,0	30º	BHS07130	BHS07131	BHS02009	BHS02010	EM046370
			20º	BHS07132	BHS07133			
			10º	BHS07134	BHS07135			
BEST FIT 002								
	NP	Ø 3,5	30º	BHS07073	BHS07074	BHS02021	BHS02022	EM045130
			20º	BHS07075	BHS07076			
			10º	BHS07077	BHS07078			
BEST FIT OCT								
	RN	Ø 4,8	30º	BHS07020	BHS07021	BHS02011	BHS02012	EM045144
			20º	BHS07035	BHS07036			
			10º	BHS07050	BHS07051			
	SYN_RN	Ø 4,8	30º	BHS07022	BHS07023	BHS02013	BHS02014	EM046375
			20º	BHS07037	BHS07038			
			10º	BHS07052	BHS07053			

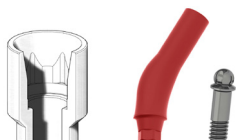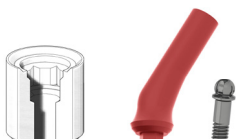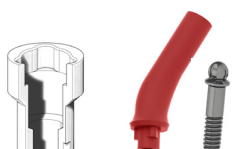
1.1 COLADO DIRECTO

	PLATAFORMA	Ø	∠	CALCINABLE	TORNILLO CLÍNICA	TORNILLO LAB	RÉPLICA IMPLANTE		
HI TECH COMPATIBLE									
SELF THREAD									
	SLT	Ø 3,3 / 3,75	30° 20° 10°	BHS07073 BHS07075 BHS07077	BHS07074 BHS07076 BHS07078	BHS02021	BHS02022	EM045130	
	GTI	Ø 4,2 / 5	30° 20° 10°	BHS07024 BHS07039 BHS07054	BHS07025 BHS07040 BHS07055	BHS02021	BHS02022	EM046218	
	LGI PLUS								
			Ø 3,5 / 4,3 / 5 / 6	30° 20° 10°	BHS07073 BHS07075 BHS07077	BHS07074 BHS07076 BHS07078	BHS02021	BHS02022	EM045130
		IMPLANT DIRECT COMPATIBLE							
		INTERACTIVE							
	NP	Ø 3,5	30° 20° 10°	BHS07079 BHS07081 BHS07083	BHS07080 BHS07082 BHS07084	BHS02025	BHS02026	EM048148	
	RP	Ø 4,3	30° 20° 10°	BHS07067 BHS07069 BHS07071	BHS07068 BHS07070 BHS07072	BHS02023	BHS02024	EM048149	
	LEGACY								
		NP	Ø 3,5	30° 20° 10°	BHS07073 BHS07075 BHS07077	BHS07074 BHS07076 BHS07078	BHS02021	BHS02022	EM045130
		RP	Ø 4,5	30° 20° 10°	BHS07024 BHS07039 BHS07054	BHS07025 BHS07040 BHS07055	BHS02021	BHS02022	EM046218
		WP	Ø 5,7	30° 20° 10°	BHS07166 BHS07168 BHS07170	BHS07167 BHS07169 BHS07171	BHS02021	BHS02022	
REPLUS / REPLANT									
		NP	Ø 3,5	30° 20° 10°	BHS07091 BHS07093 BHS07095	BHS07092 BHS07094 BHS07096	BHS02027	BHS02028	EM046291
		RP	Ø 4,3	30° 20° 10°	BHS07016 BHS07031 BHS07046	BHS07017 BHS07032 BHS07047	BHS02009	BHS02010	EM046292
		WP	Ø 5,0	30° 20° 10°	BHS07115 BHS07117 BHS07119	BHS07116 BHS07118 BHS07120	BHS02009	BHS02010	EM046293

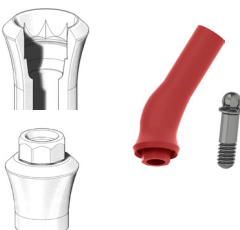
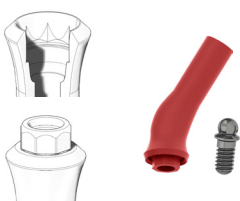
1.1 COLADO DIRECTO

	PLATAFORMA	Ø	∠	CALCINABLE		TORNILLO CLÍNICA	TORNILLO LAB	RÉPLICA IMPLANTE
SWISHPLUS / SWISHPLANT								
	RN	Ø 4,8	30°	BHS07020	BHS07021	BHS02011	BHS02012	EM045144
			20°	BHS07035	BHS07036			
			10°	BHS07050	BHS07051			
	SYN_RN	Ø 4,8	30°	BHS07022	BHS07023	BHS02013	BHS02014	EM046375
			20°	BHS07037	BHS07038			
			10°	BHS07052	BHS07053			
JDENTALCARE COMPATIBLE								
JDEVOLUTION								
		Ø 3,7 / 4,3 / 5 / 6	30°	BHS07073	BHS07074	BHS02021	BHS02022	EM045130
			20°	BHS07075	BHS07076			
			10°	BHS07077	BHS07078			
KEYSTONE DENTAL COMPATIBLE								
RESTORE								
	NP	Ø 3,3	30°	BHS07136	BHS07137	BHS02035	BHS02036	EM048022
			20°	BHS07138	BHS07139			
			10°	BHS07140	BHS07141			
	RP	Ø 4,1	30°	BHS07001	BHS07002	BHS02001	BHS02002	EM045098
			20°	BHS07004	BHS07005			
			10°	BHS07007	BHS07008			
OCT-XT								
	RN	Ø 4,8	30°	BHS07020	BHS07021	BHS02011	BHS02012	EM045144
			20°	BHS07035	BHS07036			
			10°	BHS07050	BHS07051			
	SYN_RN	Ø 4,8	30°	BHS07022	BHS07023	BHS02013	BHS02014	EM046375
			20°	BHS07037	BHS07038			
			10°	BHS07052	BHS07053			
RENOVA								
	NP	Ø 3,75	30°	BHS07073	BHS07074	BHS02021	BHS02022	EM045130
			20°	BHS07075	BHS07076			
			10°	BHS07077	BHS07078			
	RP	Ø 4,5 / 4,75	30°	BHS07024	BHS07025	BHS02021	BHS02022	EM046218
			20°	BHS07039	BHS07040			
			10°	BHS07054	BHS07055			


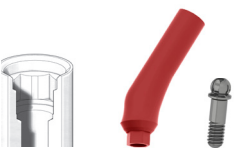
1.1 COLADO DIRECTO

	PLATAFORMA	Ø	∠	CALCINABLE	TORNILLO CLÍNICA	TORNILLO LAB	RÉPLICA IMPLANTE		
KLOCKNER COMPATIBLE									
SK2 (EH)									
	RP	Ø 4,2	30° 20° 10°	BHS07109 BHS07111 BHS07113	BHS07110 BHS07112 BHS07114	BHS02031 BHS02032	EM046747		
KL (EH)									
	NP	Ø 3,5	30° 20° 10°	BHS07010 BHS07012 BHS07014	BHS07011 BHS07013 BHS07015	BHS02005 BHS02006	EM045222		
	RP	Ø 4,1	30° 20° 10°	BHS07001 BHS07004 BHS07007	BHS07002 BHS07005 BHS07008	BHS02001 BHS02002	EM045098		
	WP	Ø 5,1	30° 20° 10°	BHS07218 BHS07220 BHS07222	BHS07219 BHS07221 BHS07223	BHS02039 BHS02040	EM045070		
	LEADER COMPATIBLE								
	TIXOS INTERNAL HEX								
		NP	Ø 3,5 / 4,0	30° 20° 10°	BHS07073 BHS07075 BHS07077	BHS07074 BHS07076 BHS07078	BHS02021 BHS02022	EM045130	
		TIXOS EXTERNAL HEX							
			RP	Ø 4,1	30° 20° 10°	BHS07001 BHS07004 BHS07007	BHS07002 BHS07005 BHS07008	BHS02001 BHS02002	EM045098
	WP		Ø 5,0	30° 20° 10°	BHS07061 BHS07063 BHS07065	BHS07062 BHS07064 BHS07066	BHS02001 BHS02002	EM045082	
MEDENTIS COMPATIBLE									
ICX									
			Ø 3,45 / 3,7 - 4,1 / 4,8	30° 20° 10°	BHS07257 BHS07259 BHS07261	BHS07258 BHS07260 BHS07262	BHS02015 BHS02016		

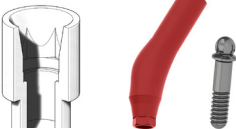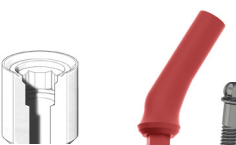
1.1 COLADO DIRECTO

	PLATAFORMA	Ø	∠	CALCINABLE		TORNILLO CLÍNICA	TORNILLO LAB	RÉPLICA IMPLANTE
MEGAGEN COMPATIBLE								
ANYONE INTERNAL								
	NP		30°	BHS07142	BHS07143	BHS02009	BHS02010	
			20°	BHS07144	BHS07145			
			10°	BHS07146	BHS07147			
	RP		30°	BHS07142	BHS07143	BHS02009	BHS02010	
			20°	BHS07144	BHS07145			
			10°	BHS07146	BHS07147			
	WP		30°	BHS07142	BHS07143	BHS02009	BHS02010	
			20°	BHS07144	BHS07145			
			10°	BHS07146	BHS07147			
ANYONE EXTERNAL								
	NP		30°	BHS07010	BHS07011	BHS02005	BHS02006	EM045222
			20°	BHS07012	BHS07013			
			10°	BHS07014	BHS07015			
	RP		30°	BHS07001	BHS07002	BHS02001	BHS02002	EM045098
			20°	BHS07004	BHS07005			
			10°	BHS07007	BHS07008			
	WP		30°	BHS07061	BHS07062	BHS02001	BHS02002	EM045082
			20°	BHS07063	BHS07064			
			10°	BHS07065	BHS07066			
OCTA Abutment								
	SYN_RN	Ø4,8	30°	BHS07022	BHS07023	BHS02013	BHS02014	EM046375
			20°	BHS07037	BHS07038			
			10°	BHS07052	BHS07053			
			MICRODENT COMPATIBLE					
EKTOS (IH)								
	NP	Ø 3,5	30°	BHS07073	BHS07074	BHS02021	BHS02022	EM045130
			20°	BHS07075	BHS07076			
			10°	BHS07077	BHS07078			
	RP	Ø 4,5	30°	BHS07024	BHS07025	BHS02021	BHS02022	EM046218
			20°	BHS07039	BHS07040			
			10°	BHS07054	BHS07055			
	WP	Ø 5,7	30°	BHS07166	BHS07167	BHS02021	BHS02022	
			20°	BHS07168	BHS07169			
			10°	BHS07170	BHS07171			
MINI (EH)								
	NP	Ø 3,5	30°	BHS07194	BHS07195	BHS02031	BHS02032	
			20°	BHS07196	BHS07197			
			10°	BHS07198	BHS07199			
			SUV (EH)					
	SUV	Ø 4,1	30°	BHS07001	BHS07002	BHS02001	BHS02002	EM045098
			20°	BHS07004	BHS07005			
			10°	BHS07007	BHS07008			
	SUV	Ø 5,1	30°	BHS07061	BHS07062	BHS02001	BHS02002	EM045082
			20°	BHS07063	BHS07064			
			10°	BHS07065	BHS07066			

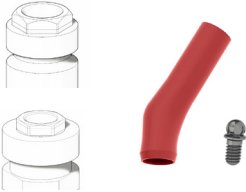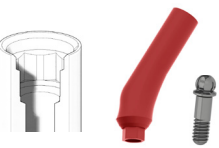
1.1 COLADO DIRECTO

	PLATAFORMA	Ø	∠	 CALCINABLE 	TORNILLO CLÍNICA	TORNILLO LAB	RÉPLICA IMPLANTE
SYSTEM (EH)							
	MST	Ø 3,5	30° 20° 10°	BHS07194 BHS07196 BHS07198	BHS07195 BHS07197 BHS07199	BHS02031	BHS02032
	MS	Ø 3,5	30° 20° 10°	BHS07194 BHS07196 BHS07198	BHS07195 BHS07197 BHS07199	BHS02031	BHS02032
	M / MV	Ø 4,2	30° 20° 10°	BHS07332 BHS07334 BHS07336	BHS07333 BHS07335 BHS07337	BHS02013	BHS02014
	MK	Ø 5,6	30° 20° 10°	BHS07242 BHS07244 BHS07246	BHS07243 BHS07245 BHS07247	BHS02039	BHS02040
UNIVERSAL (EH)							
	MST	Ø 3,5	30° 20° 10°	BHS07194 BHS07196 BHS07198	BHS07195 BHS07197 BHS07199	BHS02031	BHS02032
	MS	Ø 3,5	30° 20° 10°	BHS07194 BHS07196 BHS07198	BHS07195 BHS07197 BHS07199	BHS02031	BHS02032
	SU	Ø 4,1	30° 20° 10°	BHS07001 BHS07004 BHS07007	BHS07002 BHS07005 BHS07008	BHS02001	BHS02002
	SU	Ø 5,1	30° 20° 10°	BHS07061 BHS07063 BHS07065	BHS07062 BHS07064 BHS07066	BHS02001	BHS02002
	MK	Ø 5,6	30° 20° 10°	BHS07242 BHS07244 BHS07246	BHS07243 BHS07245 BHS07247	BHS02039	BHS02040
MIS COMPATIBLE							
LANCE							
	STD	Ø 4,1	30° 20° 10°	BHS07001 BHS07004 BHS07007	BHS07002 BHS07005 BHS07008	BHS02001	BHS02002
	WP	Ø 5,0	30° 20° 10°	BHS07061 BHS07063 BHS07065	BHS07062 BHS07064 BHS07066	BHS02001	BHS02002
SEVEN / M4							
	NARROW	Ø 3,30	30° 20° 10°	BHS07230 BHS07232 BHS07234	BHS07231 BHS07233 BHS07235	BHS02041	BHS02042
	STANDARD	Ø 3,75 / 4,2	30° 20° 10°	BHS07073 BHS07075 BHS07077	BHS07074 BHS07076 BHS07078	BHS02021	BHS02022
	WIDE	Ø 5,0 / 6,0	30° 20° 10°	BHS07024 BHS07039 BHS07054	BHS07025 BHS07040 BHS07055	BHS02021	BHS02022
MULTIUNIT MIS							
	RP	Ø 4,8	30° 20° 10°		BHS07127 BHS07128 BHS07129	BHS02037	BHS02038

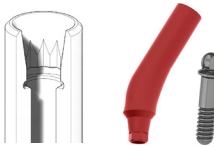1.1 COLADO DIRECTO

	PLATAFORMA	Ø	∠	CALCINABLE		TORNILLO CLÍNICA	TORNILLO LAB	RÉPLICA IMPLANTE
MOZO GRAU COMPATIBLE								
INHEX								
	RP	Ø 3,75 / 4,25	30° 20° 10°	BHS07097 BHS07099 BHS07101	BHS07098 BHS07100 BHS07102	BHS02025	BHS02026	EM046371
	WP	Ø 5,0	30° 20° 10°	BHS07130 BHS07132 BHS07134	BHS07131 BHS07133 BHS07135	BHS02009	BHS02010	EM046370
	CONO20		30° 20° 10°		BHS07103 BHS07104 BHS07105	BHS02003	BHS02004	EM045638
	CONO45		30° 20° 10°		BHS07106 BHS07107 BHS07108	BHS02003	BHS02004	EM047786
OSSEUS								
	NP	Ø 3,4	30° 20° 10°	BHS07194 BHS07196 BHS07198	BHS07195 BHS07197 BHS07199	BHS02001	BHS02002	EM045468
	RP	Ø 4,1	30° 20° 10°	BHS07001 BHS07004 BHS07007	BHS07002 BHS07005 BHS07008	BHS02001	BHS02002	EM045098
	WP	Ø 5,0	30° 20° 10°	BHS07218 BHS07220 BHS07222	BHS07219 BHS07221 BHS07223	BHS02039	BHS02040	EM045070
MPI COMPATIBLE								
EXTERNA EH								
	NP	Ø 3,5	30° 20° 10°	BHS07148 BHS07150 BHS07152	BHS07149 BHS07151 BHS07153	BHS02001	BHS02002	EM047957
	RP	Ø 4,1	30° 20° 10°	BHS07001 BHS07004 BHS07007	BHS07002 BHS07005 BHS07008	BHS02001	BHS02002	EM045098
	WP	Ø 5,0	30° 20° 10°	BHS07061 BHS07063 BHS07065	BHS07062 BHS07064 BHS07066	BHS02001	BHS02002	EM045082
INTERNA CM								
	RP	Ø 4,0	30° 20° 10°	BHS07097 BHS07099 BHS07101	BHS07098 BHS07100 BHS07102	BHS02025	BHS02026	EM046371
	WP	Ø 5,0	30° 20° 10°	BHS07130 BHS07132 BHS07134	BHS07131 BHS07133 BHS07135	BHS02009	BHS02010	EM046370

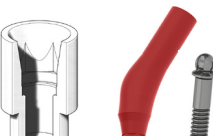
1.1 COLADO DIRECTO

	PLATAFORMA	Ø	∠	CALCINABLE	TORNILLO CLÍNICA	TORNILLO LAB	RÉPLICA IMPLANTE	
NEOBIOTECH COMPATIBLE								
EB EXTERNAL SYSTEM								
	NP	Ø 3,5	30°	BHS07010	BHS07011	BHS02005	BHS02006	EM045222
			20°	BHS07012	BHS07013			
			10°	BHS07014	BHS07015			
	RP	Ø 4,1	30°	BHS07001	BHS07002	BHS02001	BHS02002	EM045098
			20°	BHS07004	BHS07005			
			10°	BHS07007	BHS07008			
	WP	Ø 5,1	30°	BHS07218	BHS07219	BHS02039	BHS02040	EM045070
			20°	BHS07220	BHS07221			
			10°	BHS07222	BHS07223			
IS INTERNAL SYSTEM								
		Ø 3,5 / 4 / 4,5 / 5	30°	BHS07142	BHS07143	BHS02009	BHS02010	
			20°	BHS07144	BHS07145			
			10°	BHS07146	BHS07147			
NEODENT COMPATIBLE								
TITAMAX HE SMART								
	RP	Ø 4,1	30°	BHS07001	BHS07002	BHS02001	BHS02002	EM045098
			20°	BHS07004	BHS07005			
			10°	BHS07007	BHS07008			
	WP	Ø 5,0	30°	BHS07061	BHS07062	BHS02001	BHS02002	EM045082
			20°	BHS07063	BHS07064			
			10°	BHS07065	BHS07066			
MINI PILAR CM								
	RP	Ø 4,8	30°		BHS07003	BHS02003	BHS02004	EM045169
			20°		BHS07006			
			10°		BHS07009			
NOBEL COMPATIBLE								
BRÄNEMARK								
	NP	Ø 3,5	30°	BHS07010	BHS07011	BHS02005	BHS02006	EM045222
			20°	BHS07012	BHS07013			
			10°	BHS07014	BHS07015			
	RP	Ø 4,1	30°	BHS07001	BHS07002	BHS02001	BHS02002	EM045098
			20°	BHS07004	BHS07005			
			10°	BHS07007	BHS07008			
	WP	Ø 5,1	30°	BHS07218	BHS07219	BHS02039	BHS02040	EM045070
			20°	BHS07220	BHS07221			
			10°	BHS07222	BHS07223			



1.1 COLADO DIRECTO

	PLATAFORMA	Ø	∠	CALCINABLE		TORNILLO CLÍNICA	TORNILLO LAB	RÉPLICA IMPLANTE		
REPLACE										
  	NP	Ø 3,5	30° 20° 10°	BHS07091 BHS07093 BHS07095	BHS07092 BHS07094 BHS07096	BHS02027	BHS02028	EM046291		
	RP	Ø 4,3	30° 20° 10°	BHS07016 BHS07031 BHS07046	BHS07017 BHS07032 BHS07047	BHS02009	BHS02010	EM046292		
	WP	Ø 5,0	30° 20° 10°	BHS07115 BHS07117 BHS07119	BHS07116 BHS07118 BHS07120	BHS02009	BHS02010	EM046293		
	ACTIVE									
	  	NP	Ø 3,5	30° 20° 10°	BHS07079 BHS07081 BHS07083	BHS07080 BHS07082 BHS07084	BHS02025	BHS02026	EM048148	
		RP	Ø4,3 / Ø5,0	30° 20° 10°	BHS07067 BHS07069 BHS07071	BHS07068 BHS07070 BHS07072	BHS02023	BHS02024	EM048149	
		MULTIUNIT								
		RP	Ø 4,8	30° 20° 10°		BHS07003 BHS07006 BHS07009	BHS02003	BHS02004	EM045169	
		NT TRADING COMPATIBLE								
2-CONnect										
 	M1,4	Ø 5,0	30° 20° 10°		BHS07305 BHS07306 BHS07307	BHS02063	BHS02064			
	M1,6	Ø 5,0	30° 20° 10°		BHS07305 BHS07306 BHS07307	BHS02065	BHS02066			
	M1,8	Ø 5,0	30° 20° 10°		BHS07305 BHS07306 BHS07307	BHS02067	BHS02068			
	OSSTEM IMPLANT COMPATIBLE									
	OSSTEM TS									
	  		Ø 4,0 / 4,5 / 5,0 / 6,0	30° 20° 10°	BHS07142 BHS07144 BHS07146	BHS07143 BHS07145 BHS07147	BHS02009	BHS02010		

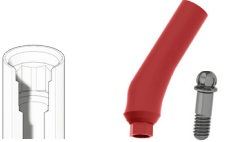1.1 COLADO DIRECTO

	PLATAFORMA	Ø	∠	 CALCINABLE		TORNILLO CLÍNICA	TORNILLO LAB	RÉPLICA IMPLANTE	
OSSTEM US									
	MINI	Ø 3,5	30° 20° 10°	BHS07010 BHS07012 BHS07014	BHS07011 BHS07013 BHS07015	BHS02005	BHS02006	EM045222	
	RP	Ø 4,1	30° 20° 10°	BHS07001 BHS07004 BHS07007	BHS07002 BHS07005 BHS07008	BHS02001	BHS02002	EM045098	
	WP	Ø 5,1	30° 20° 10°	BHS07218 BHS07220 BHS07222	BHS07219 BHS07221 BHS07223	BHS02039	BHS02040	EM045070	
	OSTEOPLUS COMPATIBLE								
	ARGENTUM								
		RP	Ø 4,2	30° 20° 10°	BHS07109 BHS07111 BHS07113	BHS07110 BHS07112 BHS07114	BHS02031	BHS02032	EM046747
		OSTEOPLUS - SHe							
			RP	Ø 4,1	30° 20° 10°	BHS07001 BHS07004 BHS07007	BHS07002 BHS07005 BHS07008	BHS02001	BHS02002
	WP		Ø 5,0	30° 20° 10°	BHS07061 BHS07063 BHS07065	BHS07062 BHS07064 BHS07066	BHS02001	BHS02002	EM045082
OSTEOPLUS - SHi									
	RP		Ø 3,5	30° 20° 10°	BHS07073 BHS07075 BHS07077	BHS07074 BHS07076 BHS07078	BHS02021	BHS02022	EM045130
	WP		Ø 4,5	30° 20° 10°	BHS07024 BHS07039 BHS07054	BHS07025 BHS07040 BHS07055	BHS02021	BHS02022	EM046218
	OXTEIN COMPATIBLE								
	HEX EXTERNA								
		MINI	Ø 3,3	30° 20° 10°	BHS07136 BHS07138 BHS07140	BHS07137 BHS07139 BHS07141	BHS02035	BHS02036	EM048022
		RP	Ø 4,1	30° 20° 10°	BHS07001 BHS07004 BHS07007	BHS07002 BHS07005 BHS07008	BHS02001	BHS02002	EM045098
WP		Ø 5,0	30° 20° 10°	BHS07061 BHS07063 BHS07065	BHS07062 BHS07064 BHS07066	BHS02001	BHS02002	EM045082	
HEX INTERNA									
		NP	Ø 3,5	30° 20° 10°	BHS07073 BHS07075 BHS07077	BHS07074 BHS07076 BHS07078	BHS02021	BHS02022	EM045130
		RP	Ø 4,5	30° 20° 10°	BHS07024 BHS07039 BHS07054	BHS07025 BHS07040 BHS07055	BHS02021	BHS02022	EM046218

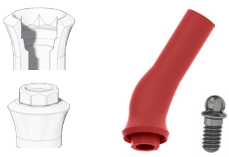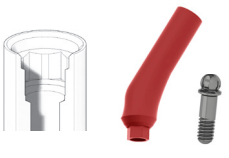
1.1 COLADO DIRECTO

	PLATAFORMA	Ø	∠	 CALCINABLE		TORNILLO CLÍNICA	TORNILLO LAB	RÉPLICA IMPLANTE	
OCTA INTERNA									
	RN	Ø 4,8	30° 20° 10°	BHS07020 BHS07035 BHS07050	BHS07021 BHS07036 BHS07051	BHS02011	BHS02012	EM045144	
	RN	Ø 4,8	30° 20° 10°	BHS07022 BHS07037 BHS07052	BHS07023 BHS07038 BHS07053	BHS02013	BHS02014	EM046375	
	PALTOP COMPATIBLE								
	INTERNAL HEX CONNECTION								
		NARROW	Ø 3,25	30° 20° 10°	BHS07230 BHS07232 BHS07234	BHS07231 BHS07233 BHS07235	BHS02041	BHS02042	
		STANDARD	Ø 3,75 / 4,2 / 5,0	30° 20° 10°	BHS07073 BHS07075 BHS07077	BHS07074 BHS07076 BHS07078	BHS02021	BHS02022	
WIDE		6,0	30° 20° 10°	BHS07024 BHS07039 BHS07054	BHS07025 BHS07040 BHS07055	BHS02021	BHS02022	EM046218	
PCA Implant System (Paltop Conical Active)									
		NARROW	Ø 3,25	30° 20° 10°	BHS07097 BHS07099 BHS07101	BHS07098 BHS07100 BHS07102	BHS02025	BHS02026	EM046371
		STANDARD	Ø 3,75 / 4,2 / 5,0	30° 20° 10°	BHS07097 BHS07099 BHS07101	BHS07098 BHS07100 BHS07102	BHS02025	BHS02026	EM046371
		MULTI UNIT							
			Ø 5,0	30° 20° 10°		BHS07326 BHS07327 BHS07328	BHS02031	BHS02032	
		SINGLE UNIT							
				Ø 4,5	30° 20° 10°	BHS07329 BHS07330 BHS07331		BHS02031	BHS02032
PHIBO COMPATIBLE									
TSH									
	S2	Ø 3,3	30° 20° 10°	BHS07136 BHS07138 BHS07140	BHS07137 BHS07139 BHS07141	BHS02035	BHS02036	EM048022	
	S3 / S4	Ø 4,1	30° 20° 10°	BHS07001 BHS07004 BHS07007	BHS07002 BHS07005 BHS07008	BHS02001	BHS02002	EM045098	

1.1 COLADO DIRECTO

	PLATAFORMA	Ø	∠	CALCINABLE		TORNILLO CLÍNICA	TORNILLO LAB	RÉPLICA IMPLANTE
AUREA EVO								
  	NP	Ø 3,5	30°	BHS07178	BHS07179	BHS02041	BHS02042	
			20°	BHS07180	BHS07181			
			10°	BHS07182	BHS07183			
	RP	Ø 4,3	30°	BHS07186	BHS07187	BHS02021	BHS02022	
			20°	BHS07188	BHS07189			
			10°	BHS07190	BHS07191			
RADHEX IMPLANTS COMPATIBLE								
PHE / PHEA								
  	NP	Ø 3,5	30°	BHS07010	BHS07011	BHS02005	BHS02006	EM045222
			20°	BHS07012	BHS07013			
			10°	BHS07014	BHS07015			
	RP	Ø 4,1	30°	BHS07001	BHS07002	BHS02001	BHS02002	EM045098
			20°	BHS07004	BHS07005			
			10°	BHS07007	BHS07008			
PHI / PHIA								
  	NP	Ø 3,5	30°	BHS07073	BHS07074	BHS02021	BHS02022	EM045130
			20°	BHS07075	BHS07076			
			10°	BHS07077	BHS07078			
	RP	Ø 4,5	30°	BHS07024	BHS07025	BHS02021	BHS02022	EM046218
			20°	BHS07039	BHS07040			
			10°	BHS07054	BHS07055			
PCI								
  		280	30°	BHS07097	BHS07098	BHS02025	BHS02026	EM046371
			20°	BHS07099	BHS07100			
			10°	BHS07101	BHS07102			
		350	30°	BHS07130	BHS07131	BHS02009	BHS02010	EM046370
			20°	BHS07132	BHS07133			
			10°	BHS07134	BHS07135			
SGS COMPATIBLE								
P1 / P7								
  	RP	Ø 3,75	30°	BHS07073	BHS07074	BHS02021	BHS02022	EM045130
			20°	BHS07075	BHS07076			
			10°	BHS07077	BHS07078			
SIGNO VINCES COMPATIBLE								
DUO / INTEGRA								
  	RP	Ø 4,1	30°	BHS07001	BHS07002	BHS02001	BHS02002	EM045098
			20°	BHS07004	BHS07005			
			10°	BHS07007	BHS07008			

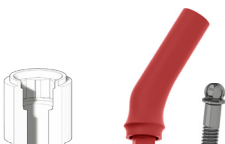1.1 COLADO DIRECTO

	PLATAFORMA	Ø	∠	CALCINABLE		TORNILLO CLÍNICA	TORNILLO LAB	RÉPLICA IMPLANTE
DUOCON / CM								
	WP_4.5 / 5.0		30°	BHS07130	BHS07131	BHS02009	BHS02010	EM046370
			20°	BHS07132	BHS07133			
			10°	BHS07134	BHS07135			
STRAUMANN COMPATIBLE								
OCTA INTERN								
	RN	Ø 4,8	30°	BHS07020	BHS07021	BHS02011	BHS02012	EM045144
	SYN_RN	Ø 4,8	20°	BHS07035	BHS07036			
			10°	BHS07050	BHS07051			
30°			BHS07022	BHS07023	BHS02013	BHS02014	EM046375	
20°			BHS07037	BHS07038				
10°	BHS07052	BHS07053						
BONE LEVEL								
	NC	Ø 3,3	30°	BHS07085	BHS07086	BHS02015	BHS02016	EM048048
	RC	Ø 4,1 / 4,8	20°	BHS07087	BHS07088			
			10°	BHS07089	BHS07090			
30°			BHS07027	BHS07028	BHS02015	BHS02016	EM046904	
20°			BHS07042	BHS07043				
10°	BHS07057	BHS07058						
BL MULTI BASE								
	RC	Ø 4,8	30°		BHS07026	BHS02017	BHS02018	
		20°		BHS07041				
		10°		BHS07056				
SWEDEN & MARTINA COMPATIBLE								
PREMIUM KOHNO								
	NP	Ø 3,3	30°	BHS07200	BHS07201	BHS02021	BHS02022	
	RP	Ø 3,8	20°	BHS07202	BHS07203			
			10°	BHS07204	BHS07205			
30°			BHS07206	BHS07207	BHS02021	BHS02022		
20°			BHS07208	BHS07209				
10°	BHS07210	BHS07211						
	WP	Ø 4,25	30°	BHS07212	BHS07213	BHS02011	BHS02012	
		20°	BHS07214	BHS07215				
		10°	BHS07216	BHS07217				
SYRA (EH)								
		Ø4,10 / 4,25	30°	BHS07001	BHS07002	BHS02001	BHS02002	EM045098
			20°	BHS07004	BHS07005			
			10°	BHS07007	BHS07008			
		Ø 5,0	30°	BHS07061	BHS07062	BHS02001	BHS02002	EM045082
			20°	BHS07063	BHS07064			
			10°	BHS07065	BHS07066			

1.1 COLADO DIRECTO

	PLATAFORMA	Ø	∠	CALCINABLE		TORNILLO CLÍNICA	TORNILLO LAB	RÉPLICA IMPLANTE
SYRA SHORT (EH)								
		Ø4,10	30°	BHS07001	BHS07002	BHS02001	BHS02002	EM045098
			20°	BHS07004	BHS07005			
			10°	BHS07007	BHS07008			
		Ø 5,0	30°	BHS07061	BHS07062	BHS02001	BHS02002	EM045082
			20°	BHS07063	BHS07064			
			10°	BHS07065	BHS07066			
TRI DENTAL IMPLANTS COMPATIBLE								
TRI-VENT								
		Ø 3,75 / 4,1 / 4,7	30°	BHS07073	BHS07074	BHS02021	BHS02022	EM045130
			20°	BHS07075	BHS07076			
			10°	BHS07077	BHS07078			
TRINON COMPATIBLE								
TRINON - Q2								
	RP	Ø 4,1	30°	BHS07001	BHS07002	BHS02001	BHS02002	EM045098
			20°	BHS07004	BHS07005			
			10°	BHS07007	BHS07008			
TRINON - QK								
	RN	Ø 4,8	30°	BHS07020	BHS07021	BHS02011	BHS02012	EM045144
			20°	BHS07035	BHS07036			
			10°	BHS07050	BHS07051			
	RN	Ø 4,8	30°	BHS07022	BHS07023	BHS02013	BHS02014	EM046375
			20°	BHS07037	BHS07038			
			10°	BHS07052	BHS07053			
ZIACOM COMPATIBLE								
ZINIC - IH								
	NP	Ø 3,2	30°	BHS07230	BHS07231	BHS02041	BHS02042	
			20°	BHS07232	BHS07233			
			10°	BHS07234	BHS07235			
	RP	Ø 3,5	30°	BHS07073	BHS07074	BHS02021	BHS02022	EM045130
			20°	BHS07075	BHS07076			
			10°	BHS07077	BHS07078			
	WP	Ø 4,5	30°	BHS07024	BHS07025	BHS02021	BHS02022	EM046218
			20°	BHS07039	BHS07040			
			10°	BHS07054	BHS07055			

1.1 COLADO DIRECTO

	PLATAFORMA	Ø	∠	CALCINABLE		TORNILLO CLÍNICA	TORNILLO LAB	RÉPLICA IMPLANTE
OEX - EH								
	NP	Ø 3,3	30° 20° 10°	BHS07136 BHS07138 BHS07140	BHS07137 BHS07139 BHS07141	BHS02035	BHS02036	EM048022
	RP	Ø 4,1	30° 20° 10°	BHS07001 BHS07004 BHS07007	BHS07002 BHS07005 BHS07008	BHS02001	BHS02002	EM045098
	OIN - IH (M2)							
	RP	Ø 4,0	30° 20° 10°	BHS07338 BHS07340 BHS07342	BHS07339 BHS07341 BHS07343	BHS02011	BHS02012	
	WP	Ø 5,0	30° 20° 10°	BHS07338 BHS07340 BHS07342	BHS07339 BHS07341 BHS07343	BHS02011	BHS02012	
	XDrive (Multi-unit)							
	RP	Ø 4,8	30° 20° 10°		BHS07003 BHS07006 BHS07009	BHS02003	BHS02004	EM045169
ZIMMER COMPATIBLE								
INTERNAL HEX								
	NP	Ø 3,5	30° 20° 10°	BHS07073 BHS07075 BHS07077	BHS07074 BHS07076 BHS07078	BHS02021	BHS02022	EM045130
	RP	Ø 4,5	30° 20° 10°	BHS07024 BHS07039 BHS07054	BHS07025 BHS07040 BHS07055	BHS02021	BHS02022	EM046218
	WP	Ø 5,7	30° 20° 10°	BHS07166 BHS07168 BHS07170	BHS07167 BHS07169 BHS07171	BHS02021	BHS02022	
	SWISS-PLUS							
	RP	Ø 4,8	30° 20° 10°	BHS07020 BHS07035 BHS07050	BHS07021 BHS07036 BHS07051	BHS02011	BHS02012	EM45144
	RP	Ø 4,8	30° 20° 10°	BHS07022 BHS07037 BHS07052	BHS07023 BHS07038 BHS07053	BHS02013	BHS02014	EM46375

1.2 SOBRECOLDADO BASE CrCo



PRECISIÓN Y SEGURIDAD PARA SUS RESTAURACIONES

Superficie continua para un fácil encerado, fundición y sobremoldeo.

Diseño cónico para restauraciones múltiples y pared plana atractiva para piezas individuales.

Perfil de emergencia óptimo. Cuidado de tejidos blandos.

Diseño de canal de tornillo de acceso optimizado.

Corrección de ángulo de 10, 20 y 30°.

Altura óptima que permite una angulación de 30° para un destornillador BHS.

Empuñadura de guía para retención axial moldeable BHS y movimiento de rotación libre.

Pasadores de retención y empuñadura de guía que permite la retención axial.

Diseño rotatorio y no rotatorio para restauraciones múltiples y únicas.

1.2 SOBRECOLDADO BASE CrCo

	PLATAFORMA Ø		CALCINABLE CrCo	 BASE CrCo		TORNILLO CLÍNICA	TORNILLO LAB	RÉPLICA IMPLANTE	
AB IMPLANTS COMPATIBLE									
I SERIES INTERNAL HEX									
	NARROW	Ø 3,0 - 3,75	30° 20° 10°	BHS04056 BHS04057 BHS04058	BHS03200	BHS03201	BHS02041	BHS02042	
	STANDARD	Ø 3,5 - 6,0	30° 20° 10°	BHS04056 BHS04057 BHS04058	BHS03050	BHS03051	BHS02021	BHS02022	
								EM045130	
	I 10C CONUS								
		RP	Ø 4,2	30° 20° 10°	BHS04104 BHS04105 BHS04106	BHS03046	BHS03047	BHS02023	BHS02024
									EM048149
ACE COMPATIBLE									
INFINITY EXTERNAL HEX									
	RP	Ø 4,0	30° 20° 10°	BHS04001 BHS04005 BHS04009	BHS03003	BHS03004	BHS02001	BHS02002	
								EM045098	
	INFINITY INTERNAL HEX								
		NP	Ø 3,7 / 4,1	30° 20° 10°	BHS04056 BHS04057 BHS04058	BHS03050	BHS03051	BHS02021	BHS02022
							EM045130		
RP		Ø 4,7 / 5,1	30° 20° 10°	BHS04026 BHS04039 BHS04053	BHS03033	BHS03034	BHS02021	BHS02022	
							EM046218		
ADIN COMPATIBLE									
SWELL									
		Ø 3,5 - 6	30° 20° 10°	BHS04056 BHS04057 BHS04058	BHS03050	BHS03051	BHS02021	BHS02022	
								EM045130	
	TOUAREG S / OS								
			Ø 3,5 - 6	30° 20° 10°	BHS04056 BHS04057 BHS04058	BHS03050	BHS03051	BHS02021	BHS02022
							EM045130		

1.2 SOBRECOLDADO BASE CrCo

	PLATAFORMA Ø		CALCINABLE CrCo	 BASE CrCo		TORNILLO CLÍNICA	TORNILLO LAB	RÉPLICA IMPLANTE
TOUAREG CLOSEFIT								
	RP Ø 3,5	30°	BHS04068	BHS03058	BHS03059	BHS02025	BHS02026	EM048148
		20°	BHS04069					
		10°	BHS04070					
	WP Ø 4,3 / 5	30°	BHS04104	BHS03046	BHS03047	BHS02023	BHS02024	EM048149
		20°	BHS04105					
		10°	BHS04106					
ALPHABIO COMPATIBLE								
EXTERNAL ALPHABIO								
	RP Ø 4,1	30°	BHS04001	BHS03003	BHS03004	BHS02001	BHS02002	EM045098
		20°	BHS04005					
		10°	BHS04009					
INTERNAL ALPHABIO								
	Ø 3,3 - 6	30°	BHS04056	BHS03050	BHS03051	BHS02021	BHS02022	EM045130
		20°	BHS04057					
		10°	BHS04058					
ALPHA DENT COMPATIBLE								
ACTIVE								
	Ø 3,75 / 4,2 / 5,0	30°	BHS04056	BHS03050	BHS03051	BHS02021	BHS02022	EM045130
		20°	BHS04057					
		10°	BHS04058					
ACTIVE PLUS								
	Ø 4,2 / 5,0	30°	BHS04056	BHS03050	BHS03051	BHS02021	BHS02022	EM045130
		20°	BHS04057					
		10°	BHS04058					
CLASSIC								
	Ø 3,3 / 3,75 / 4,2 / 5,0	30°	BHS04056	BHS03050	BHS03051	BHS02021	BHS02022	EM045130
		20°	BHS04057					
		10°	BHS04058					
ANCLADEN COMPATIBLE								
ANCLALOCK								
	Ø 3,75 - 5	30°	BHS04056	BHS03050	BHS03051	BHS02021	BHS02022	EM045130
		20°	BHS04057					
		10°	BHS04058					

1.2 SOBRECOLDADO BASE CrCo

	PLATAFORMA Ø		CALCINABLE CrCo	 BASE CrCo		TORNILLO CLÍNICA	TORNILLO LAB	RÉPLICA IMPLANTE	
ANTHOGR COMPATIBLE									
ANTHOFIT EH									
	RP	Ø 4,1	30°	BHS04001	BHS03003	BHS03004	BHS02001	BHS02002	EM045098
			20°	BHS04005					
			10°	BHS04009					
ARDS COMPATIBLE									
SMART									
	Ø 3,75 - 4,5		30°	BHS04056	BHS03050	BHS03051	BHS02021	BHS02022	EM045130
			20°	BHS04057					
			10°	BHS04058					
CLASSIC									
	Ø 3,3 - 6		30°	BHS04056	BHS03050	BHS03051	BHS02021	BHS02022	EM045130
			20°	BHS04057					
			10°	BHS04058					
PREMIUM									
	Ø 3,3 - 6		30°	BHS04056	BHS03050	BHS03051	BHS02021	BHS02022	EM045130
			20°	BHS04057					
			10°	BHS04058					
ASTRA COMPATIBLE									
AQUA									
	RP_3.5 / 4.0		30°	BHS04086	BHS03070	BHS03071	BHS02025	BHS02026	EM046371
			20°	BHS04087					
			10°	BHS04088					

1.2 SOBRECOLDADO BASE CrCo

		PLATAFORMA Ø	∠	CALCINABLE CrCo	BASE CrCo  	TORNILLO CLÍNICA	TORNILLO LAB	RÉPLICA IMPLANTE	
EV									
		Ø 3,6	30°	BHS04056	BHS03154	BHS03155	BHS02053	BHS02054	
			20°	BHS04057					
			10°	BHS04058					
		Ø 4,2	30°	BHS04056	BHS03158	BHS03159	BHS02055	BHS02056	
			20°	BHS04057					
			10°	BHS04058					
AVINENT COMPATIBLE									
EH									
		RP Ø 4,1	30°	BHS04001	BHS03003	BHS03004	BHS02001	BHS02002	EM045098
			20°	BHS04005					
			10°	BHS04009					
IH									
		Ø 3,5 / 4,1	30°	BHS04056	BHS03050	BHS03051	BHS02021	BHS02022	EM045130
			20°	BHS04057					
			10°	BHS04058					
MULTIUNIT									
		RP Ø 4,8	30°	BHS04002		BHS03008	BHS02003	BHS02004	EM045169
			20°	BHS04006					
			10°	BHS04010					
OCEAN CONICAL (C.C)									
		Ø 3,5 (Implant Ø 3,5 / Ø 4,0)	30°	BHS04068	BHS03058	BHS03059	BHS02025	BHS02026	EM048148
			20°	BHS04069					
			10°	BHS04070					
		Ø 4,1 (Implant Ø 4,5 / Ø 5,0)	30°	BHS04104	BHS03046	BHS03047	BHS02023	BHS02024	EM048149
			20°	BHS04105					
			10°	BHS04106					
BEGO COMPATIBLE									
IH									
		Ø 3,75 / 4,1	30°	BHS04056	BHS03050	BHS03051	BHS02021	BHS02022	EM045130
			20°	BHS04057					
			10°	BHS04058					

1.2 SOBRECOLDADO BASE CrCo

	PLATAFORMA Ø		CALCINABLE CrCo	 BASE CrCo		TORNILLO CLÍNICA	TORNILLO LAB	RÉPLICA IMPLANTE
BIOGENESIS COMPATIBLE								
3ICON								
	RP Ø 4,1	30°	BHS04001	BHS03003	BHS03004	BHS02001	BHS02002	EM045098
		20°	BHS04005					
		10°	BHS04009					
ATICON								
	RP Ø 3,5 / 4,0	30°	BHS04086	BHS03070	BHS03071	BHS02025	BHS02026	EM046371
		20°	BHS04087					
		10°	BHS04088					
KISSES								
	RP Ø 3,5 / 4,0	30°	BHS04086	BHS03070	BHS03071	BHS02025	BHS02026	EM046371
		20°	BHS04087					
		10°	BHS04088					
BIOHORIZONS COMPATIBLE								
INTERNAL								
	NP Ø 3,5	30°	BHS04056	BHS03050	BHS03051	BHS02021	BHS02022	EM045130
		20°	BHS04057					
		10°	BHS04058					
	RP Ø 4,5	30°	BHS04026	BHS03033	BHS03034	BHS02021	BHS02022	EM046218
		20°	BHS04039					
		10°	BHS04053					
BIOMET 3i COMPATIBLE								
EH OSSEOTITE								
	RP Ø 4,1	30°	BHS04001	BHS03003	BHS03004	BHS02001	BHS02002	EM045098
		20°	BHS04005					
		10°	BHS04009					

1.2 SOBRECOLDADO BASE CrCo

	PLATAFORMA Ø		CALCINABLE CrCo	 BASE CrCo		TORNILLO CLÍNICA	TORNILLO LAB	REPÚBLICA IMPLANTE
BIONER COMPATIBLE								
IKELT / BIKELT								
	RP Ø 4,1	30° 20° 10°	BHS04001 BHS04005 BHS04009	BHS03003	BHS03004	BHS02001	BHS02002	EM045098
HIKELT								
	NP Ø 3,8	30° 20° 10°	BHS04056 BHS04057 BHS04058	BHS03050	BHS03051	BHS02021	BHS02022	EM045130
	RP Ø 4,7	30° 20° 10°	BHS04026 BHS04039 BHS04053	BHS03033	BHS03034	BHS02021	BHS02022	EM046218
TOP DM								
	Ø 3,5 / 4,0 / 5,0	30° 20° 10°	BHS04068 BHS04069 BHS04070	BHS03058	BHS03059	BHS02025	BHS02026	EM048148
MULTIUNIT								
	RP Ø 4,8	30° 20° 10°	BHS04002 BHS04006 BHS04010		BHS03008	BHS02003	BHS02004	EM045169
BTI COMPATIBLE								
EH								
	RP Ø 4,1	30° 20° 10°	BHS04001 BHS04005 BHS04009	BHS03003	BHS03004	BHS02001	BHS02002	EM045098
BTK COMPATIBLE								
EVO DL EXT								
	RP Ø 4,1 / 4,6	30° 20° 10°	BHS04001 BHS04005 BHS04009	BHS03003	BHS03004	BHS02001	BHS02002	EM045098

1.2 SOBRECOLDADO BASE CrCo

	PLATAFORMA Ø		CALCINABLE CrCo	 BASE CrCo		TORNILLO CLÍNICA	TORNILLO LAB	REPÚBLICA IMPLANTE
EVO DL INT								
	Ø 3,5 / 3,7 / 4,6 / 5,0 / 5,6	30° 20° 10°	BHS04056 BHS04057 BHS04058	BHS03050	BHS03051	BHS02021	BHS02022	EM045130
KLASSIC EXT								
	RP Ø 4,1	30° 20° 10°	BHS04001 BHS04005 BHS04009	BHS03003	BHS03004	BHS02001	BHS02002	EM045098
KLASSIC INT								
	Ø 3,5 / 4,5 / 5,0	30° 20° 10°	BHS04056 BHS04057 BHS04058	BHS03050	BHS03051	BHS02021	BHS02022	EM045130
KONIC EXT								
	RP Ø 4,1	30° 20° 10°	BHS04001 BHS04005 BHS04009	BHS03003	BHS03004	BHS02001	BHS02002	EM045098
KONIC INT								
	Ø 3,5 / 5,0	30° 20° 10°	BHS04056 BHS04057 BHS04058	BHS03050	BHS03051	BHS02021	BHS02022	EM045130
B&W COMPATIBLE								
HEXAGONO EXT								
	RP Ø 4,1	30° 20° 10°	BHS04001 BHS04005 BHS04009	BHS03003	BHS03004	BHS02001	BHS02002	EM045098
HEXAGONO INT								
	NP Ø 3,3	30°	BHS04056	BHS03050	BHS03051	BHS02021	BHS02022	EM045130
		20°	BHS04057					
		10°	BHS04058					
	RP Ø 4,0	30°	BHS04056	BHS03050	BHS03051	BHS02021	BHS02022	EM045130
		20°	BHS04057					
		10°	BHS04058					
	WP Ø 5,0	30°	BHS04056	BHS03050	BHS03051	BHS02021	BHS02022	EM045130
		20°	BHS04057					
		10°	BHS04058					

1.2 SOBRECOLADO BASE CrCo

	PLATAFORMA Ø		CALCINABLE CrCo	 BASE CrCo		TORNILLO CLÍNICA	TORNILLO LAB	RÉPLICA IMPLANTE	
CAMLOG COMPATIBLE									
CAMLOG									
	Ø3,3	30º	BHS04056	BHS03130	BHS03131	BHS02049	BHS02050		
		20º	BHS04057						
		10º	BHS04058						
	Ø3,8	30º	BHS04056	BHS03134	BHS03135	BHS02049	BHS02050		
		20º	BHS04057						
		10º	BHS04058						
	Ø4,3	30º	BHS04026	BHS03138	BHS03139	BHS02049	BHS02050		
		20º	BHS04039						
		10º	BHS04053						
	Ø5,0	30º	BHS04065	BHS03142	BHS03143	BHS02051	BHS02052		
		20º	BHS04066						
		10º	BHS04067						
CONEXÃO SIST. PROTESE COMPATIBLE									
MORSE INDEXADO									
	Ø 3,5 / 3,75 / 4,0 / 5,0	30º	BHS04068	BHS03058	BHS03059	BHS02025	BHS02026	EM048148	
		20º	BHS04069						
		10º	BHS04070						
HEXAGONO EXT									
	Ø 3,75 / 4,0	30º	BHS04001	BHS03003	BHS03004	BHS02001	BHS02002	EM045098	
		20º	BHS04005						
		10º	BHS04009						
HEXAGONO INT									
	Ø 3,75 / 4,0 / 5,0	30º	BHS04026	BHS03033	BHS03034	BHS02021	BHS02022	EM046218	
		20º	BHS04039						
		10º	BHS04053						

1.2 SOBRECOLDADO BASE CrCo

	PLATAFORMA Ø		CALCINABLE CrCo	 BASE CrCo		TORNILLO CLINICA	TORNILLO LAB	RÉPLICA IMPLANTE
CORTEZ COMPATIBLE								
DYNAMIX								
	Ø 3,3 / 3,8 / 4,2 / 5	30° 20° 10°	BHS04056 BHS04057 BHS04058	BHS03050	BHS03051	BHS02021	BHS02022	EM045130
CLASSIX								
	Ø 3,3 / 3,8 / 4,2 / 5	30° 20° 10°	BHS04056 BHS04057 BHS04058	BHS03050	BHS03051	BHS02021	BHS02022	EM045130
SATURN								
	Ø 3,8 / 4,2	30° 20° 10°	BHS04056 BHS04057 BHS04058	BHS03050	BHS03051	BHS02021	BHS02022	EM045130
COWELLMEDI COMPATIBLE								
EXTERNAL								
	RP Ø 4,1	30° 20° 10°	BHS04001 BHS04005 BHS04009	BHS03003	BHS03004	BHS02001	BHS02002	EM045098
SUBMERGED (INT)								
	Ø 3,5 / 4 / 4,5 / 5 / 6	30° 20° 10°	BHS04056 BHS04057 BHS04058	BHS03102	BHS03103	BHS02009	BHS02010	
DENTALTECH COMPATIBLE								
IMPLAGIC GII								
	RP Ø 4,5	30° 20° 10°	BHS04026 BHS04039 BHS04053	BHS03033	BHS03034	BHS02021	BHS02022	EM046218
IMPLASSIC HX2								
	RP Ø 4,1	30° 20° 10°	BHS04001 BHS04005 BHS04009	BHS03003	BHS03004	BHS02001	BHS02002	EM045098

1.2 SOBRECOLDADO BASE CrCo

	PLATAFORMA Ø		CALCINABLE CrCo	BASE CrCo	TORNILLO CLÍNICA	TORNILLO LAB	RÉPLICA IMPLANTE	
DENTIS COMPATIBLE								
S - CLEAN								
	RP Ø 3,4	30°	BHS04056	BHS03102	BHS03103	BHS02009	BHS02010	
		20°	BHS04057					
		10°	BHS04058					
DENTIUM COMPATIBLE								
IMPLANTUM								
	Ø 3,6 / 4 / 4,4 / 4,9 / 6 / 7	30°	BHS04056	BHS03102	BHS03103	BHS02009	BHS02010	
		20°	BHS04057					
		10°	BHS04058					
SUPER LINE								
		Ø 3,6 / 4 / 4,5 / 5 / 6	30°	BHS04056	BHS03102	BHS03103	BHS02009	BHS02010
	20°		BHS04057					
	10°		BHS04058					
DENTSPLY SIRONA COMPATIBLE								
XIVE S								
	D 3.4	30°	BHS04056	BHS03118	BHS03119	BHS02047	BHS02048	
		20°	BHS04057					
		10°	BHS04058					
	D 3.8	30°	BHS04056	BHS03122	BHS03123	BHS02047	BHS02048	
		20°	BHS04057					
		10°	BHS04058					
	D 4.5	30°	BHS04056	BHS03126	BHS03127	BHS02047	BHS02048	
		20°	BHS04057					
		10°	BHS04058					

1.2 SOBRECOLDADO BASE CrCo

	PLATAFORMA Ø		CALCINABLE CrCo	 BASE CrCo		TORNILLO CLÍNICA	TORNILLO LAB	RÉPLICA IMPLANTE
DIO IMPLANTS COMPATIBLE								
EXTERNAL								
	RP Ø 4,1	30° 20° 10°	BHS04001 BHS04005 BHS04009	BHS03003	BHS03004	BHS02001	BHS02002	EM045098
UF II								
	Ø 3,8 / 4 / 4,5 / 5 / 5,5	30° 20° 10°	BHS04056 BHS04057 BHS04058	BHS03102	BHS03103	BHS02009	BHS02010	
EDISON MEDICAL COMPATIBLE								
LAMINA (IH)								
	Ø 3,3 / 3,75 / 4,2 / 5,0 / 6,0	30° 20° 10°	BHS04056 BHS04057 BHS04058	BHS03050	BHS03051	BHS02021	BHS02022	EM045130
FORTIS (IH)								
	Ø 3,3 / 3,75 / 4,2 / 5,0 / 6,0	30° 20° 10°	BHS04056 BHS04057 BHS04058	BHS03050	BHS03051	BHS02021	BHS02022	EM045130
ELITE MEDICA COMPATIBLE								
EXTERNAL CONNECT								
	RP Ø 4,1	30° 20° 10°	BHS04001 BHS04005 BHS04009	BHS03003	BHS03004	BHS02001	BHS02002	EM045098

1.2 SOBRECOLDADO BASE CrCo

	PLATAFORMA Ø		CALCINABLE CrCo	 BASE CrCo		TORNILLO CLÍNICA	TORNILLO LAB	RÉPLICA IMPLANTE					
EUROTEKNIKA COMPATIBLE													
UNEVA													
	Ø 3,6 / 4,1 / 4,8	30° 20° 10°	BHS04001 BHS04005 BHS04009	BHS03003	BHS03004	BHS02001	BHS02002	EM045098					
NATURACTIS													
	Ø 3,5 / 4 / 4,5 / 5	30° 20° 10°	BHS04086 BHS04087 BHS04088	BHS03070	BHS03071	BHS02025	BHS02026	EM046371					
NATURALL +													
	Ø 3,5 / 4 / 4,5 / 5	30° 20° 10°	BHS04086 BHS04087 BHS04088	BHS03070	BHS03071	BHS02025	BHS02026	EM046371					
NATEA													
	NP Ø 3,6 / 4,1	30°	BHS04086	BHS03070	BHS03071	BHS02025	BHS02026	EM046371					
		20°	BHS04087										
		10°	BHS04088										
	RP Ø 4,8 / 6	30°	BHS04086										
		20°	BHS04087										
		10°	BHS04088										
GALIMPLANT COMPATIBLE													
IPXE- EXTERNA													
	RP Ø 3,5 / 4 / 5	30°	BHS04001	BHS03003	BHS03004	BHS02001	BHS02002	EM045098					
		20°	BHS04005										
		10°	BHS04009										
ICI - INTERNA													
	RP Ø 3,2 / 3,5 / 4 / 5	30°	BHS04086	BHS03070	BHS03071	BHS02025	BHS02026	EM046371					
		20°	BHS04087										
		10°	BHS04088										

1.2 SOBRECOLDADO BASE CrCo

			PLATAFORMA Ø		CALCINABLE CrCo	 BASE CrCo		TORNILLO CLÍNICA	TORNILLO LAB	RÉPLICA IMPLANTE
IPX - INTERNA										
	RP	Ø 3,5 / 4 / 4,5 / 5	30°	BHS04086	BHS03070	BHS03071	BHS02025	BHS02026	EM046371	
			20°	BHS04087						
			10°	BHS04088						
			GMI COMPATIBLE							
FRONTIER (IH)										
	RP Standard	Ø 3,3	30°	BHS04056	BHS03050	BHS03051	BHS02021	BHS02022	EM045130	
			20°	BHS04057						
			10°	BHS04058						
	WP Wide	Ø 4,3	30°	BHS04026	BHS03033	BHS03034	BHS02021	BHS02022	EM046218	
			20°	BHS04039						
			10°	BHS04053						
FRONTIER multi-aesthetic										
	RP	Ø 4,8	30°	BHS04002		BHS03008	BHS02003	BHS02004	EM045169	
			20°	BHS04006						
			10°	BHS04010						
			PHOENIX (EH)							
	Standard	Ø 4,1	30°	BHS04001	BHS03003	BHS03004	BHS02001	BHS02002	EM045098	
			20°	BHS04005						
			10°	BHS04009						
			PHOENIX multi-aesthetic							
	RP	Ø 4,8	30°	BHS04002		BHS03008	BHS02003	BHS02004	EM045169	
			20°	BHS04006						
			10°	BHS04010						
			GT MEDICAL COMPATIBLE							
BEST FIT HXE										
	RP	Ø 4,1	30°	BHS04001	BHS03003	BHS03004	BHS02001	BHS02002	EM045098	
			20°	BHS04005						
			10°	BHS04009						

1.2 SOBRECOLDADO BASE CrCo

	PLATAFORMA Ø	∠	CALCINABLE CrCo	BASE CrCo	TORNILLO CLÍNICA	TORNILLO LAB	RÉPLICA IMPLANTE	
BEST FIT 002								
	NP Ø 3,5	30°	BHS04056	BHS03050	BHS03051	BHS02021	BHS02022	EM045130
		20°	BHS04057					
		10°	BHS04058					
HI TECH COMPATIBLE								
SELF THREAD								
	SLT Ø 3,3 / 3,75	30°	BHS04056	BHS03050	BHS03051	BHS02021	BHS02022	EM045130
		20°	BHS04057					
		10°	BHS04058					
	GTI Ø 4,2 / 5	30°	BHS04026	BHS03033	BHS03034	BHS02021	BHS02022	EM046218
		20°	BHS04039					
		10°	BHS04053					
LGI PLUS								
	Ø 3,5 / 4,3 / 5 / 6	30°	BHS04056	BHS03050	BHS03051	BHS02021	BHS02022	EM045130
		20°	BHS04057					
		10°	BHS04058					
IMPLANT DIRECT COMPATIBLE								
INTERACTIVE								
	NP Ø 3,5	30°	BHS04068	BHS03058	BHS03059	BHS02025	BHS02026	EM048148
		20°	BHS04069					
		10°	BHS04070					
	RP Ø 4,3	30°	BHS04104	BHS03046	BHS03047	BHS02023	BHS02024	EM048149
		20°	BHS04105					
		10°	BHS04106					
LEGACY								
	NP Ø 3,5	30°	BHS04056	BHS03050	BHS03051	BHS02021	BHS02022	EM045130
		20°	BHS04057					
		10°	BHS04058					
	RP Ø 4,5	30°	BHS04026	BHS03033	BHS03034	BHS02021	BHS02022	EM046218
		20°	BHS04039					
		10°	BHS04053					

1.2 SOBRECOLDADO BASE CrCo

	PLATAFORMA Ø	∠	CALCINABLE CrCo	BASE CrCo	TORNILLO CLÍNICA	TORNILLO LAB	RÉPLICA IMPLANTE	
JDEENTALCARE COMPATIBLE								
JDEVOLUTION								
	Ø 3,7 / 4,3 / 5 / 6	30° 20° 10°	BHS04056 BHS04057 BHS04058	BHS03050	BHS03051	BHS02021	BHS02022	EM045130
KEYSTONE DENTAL COMPATIBLE								
RESTORE								
	RP Ø 4,1	30° 20° 10°	BHS04001 BHS04005 BHS04009	BHS03003	BHS03004	BHS02001	BHS02002	EM045098
RENOVA								
	NP Ø 3,75	30° 20° 10°	BHS04056 BHS04057 BHS04058	BHS03050	BHS03051	BHS02021	BHS02022	EM045130
	RP Ø 4,5 / 4,75	30° 20° 10°	BHS04026 BHS04039 BHS04053	BHS03033	BHS03034	BHS02021	BHS02022	EM046218
KLOCKNER COMPATIBLE								
KL (EH)								
	RP Ø 4,1	30° 20° 10°	BHS04001 BHS04005 BHS04009	BHS03003	BHS03004	BHS02001	BHS02002	EM045098
LEADER COMPATIBLE								
TIXOS INTERNAL HEX								
	NP Ø 3,5 / 4,0	30° 20° 10°	BHS04056 BHS04057 BHS04058	BHS03050	BHS03051	BHS02021	BHS02022	EM045130

1.2 SOBRECOLDADO BASE CrCo

	PLATAFORMA Ø		CALCINABLE CrCo	 BASE CrCo		TORNILLO CLÍNICA	TORNILLO LAB	RÉPLICA IMPLANTE		
TIXOS EXTERNAL HEX										
	RP Ø 4,1	30°	BHS04001	BHS03003	BHS03004	BHS02001	BHS02002	EM045098		
		20°	BHS04005							
		10°	BHS04009							
		MEDENTIS COMPATIBLE								
ICX										
		Ø 3,45 / 3,7 - 4,1 / 4,8	30°	BHS04056	BHS03180	BHS03181	BHS02015		BHS02016	
	20°		BHS04057							
	10°		BHS04058							
	MEGAGEN COMPATIBLE									
ANYONE INTERNAL										
	NP		30°	BHS04056	BHS03102	BHS03103	BHS02009	BHS02010		
		20°	BHS04057							
		10°	BHS04058							
	RP	30°	BHS04056	BHS03102	BHS03103	BHS02009	BHS02010			
		20°	BHS04057							
		10°	BHS04058							
	WP	30°	BHS04056	BHS03102	BHS03103	BHS02009	BHS02010			
		20°	BHS04057							
		10°	BHS04058							
ANYONE EXTERNAL										
	RP	30°	BHS04001	BHS03003	BHS03004	BHS02001	BHS02002	EM045098		
		20°	BHS04005							
		10°	BHS04009							
		ANYRIDGE								
		Small Ø3,5	30°	BHS04056	BHS03166	BHS03167	BHS02027		BHS02028	
	20°		BHS04057							
	10°		BHS04058							
	Regular Ø4,0/4,5	30°	BHS04056	BHS03166	BHS03167	BHS02027	BHS02028			
		20°	BHS04057							
		10°	BHS04058							
	Wide Ø5,0/5,5	30°	BHS04056	BHS03166	BHS03167	BHS02027	BHS02028			
		20°	BHS04057							
		10°	BHS04058							

1.2 SOBRECOLDADO BASE CrCo

	PLATAFORMA Ø		CALCINABLE CrCo	 BASE CrCo		TORNILLO CLÍNICA	TORNILLO LAB	RÉPLICA IMPLANTE	
MICRODENT COMPATIBLE									
EKTOS (IH)									
	NP	Ø 3,5	30°	BHS04056	BHS03050	BHS03051	BHS02021	BHS02022	EM045130
			20°	BHS04057					
			10°	BHS04058					
	RP	Ø 4,5	30°	BHS04026	BHS03033	BHS03034	BHS02021	BHS02022	EM046218
			20°	BHS04039					
			10°	BHS04053					
SUV (EH)									
	SUV	Ø 4,1	30°	BHS04001	BHS03003	BHS03004	BHS02001	BHS02002	EM045098
			20°	BHS04005					
			10°	BHS04009					
UNIVERSAL (EH)									
	SU	Ø 4,1	30°	BHS04001	BHS03003	BHS03004	BHS02001	BHS02002	EM045098
			20°	BHS04005					
			10°	BHS04009					
MIS COMPATIBLE									
LANCE									
	STD	Ø 4,1	30°	BHS04001	BHS03003	BHS03004	BHS02001	BHS02002	EM045098
			20°	BHS04005					
			10°	BHS04009					
SEVEN / M4									
	NARROW	Ø 3,3	30°	BHS04056	BHS03200	BHS03201	BHS02041	BHS02042	
			20°	BHS04057					
			10°	BHS04058					
	STANDARD	Ø 3,75 / 4,2	30°	BHS04056	BHS03050	BHS03051	BHS02021	BHS02022	EM045130
			20°	BHS04057					
			10°	BHS04058					
	WIDE	Ø 5,6 / 6,0	30°	BHS04026	BHS03033	BHS03034	BHS02021	BHS02022	EM046218
			20°	BHS04039					
			10°	BHS04053					

1.2 SOBRECOLDADO BASE CrCo

	PLATAFORMA Ø		CALCINABLE CrCo	 BASE CrCo		TORNILLO CLÍNICA	TORNILLO LAB	RÉPLICA IMPLANTE
MOZO GRAU COMPATIBLE								
INHEX								
	RP Ø 3,75 / 4,25	30° 20° 10°	BHS04086 BHS04087 BHS04088	BHS03070	BHS03071	BHS02025	BHS02026	EM046371
OSSEUS								
	RP Ø 4,1	30° 20° 10°	BHS04001 BHS04005 BHS04009	BHS03003	BHS03004	BHS02001	BHS02002	EM045098
MPI COMPATIBLE								
EXTERNA EH								
	RP Ø 4,1	30° 20° 10°	BHS04001 BHS04005 BHS04009	BHS03003	BHS03004	BHS02001	BHS02002	EM045098
INTERNA CM								
	RP Ø 4,0	30° 20° 10°	BHS04086 BHS04087 BHS04088	BHS03070	BHS03071	BHS02025	BHS02026	EM046371
NEOBIOTECH COMPATIBLE								
EB EXTERNAL SYSTEM								
	RP Ø 4,1	30° 20° 10°	BHS04001 BHS04005 BHS04009	BHS03003	BHS03004	BHS02001	BHS02002	EM045098
IS INTERNAL SYSTEM								
	Ø 3,5 / 4 / 4,5 / 5	30° 20° 10°	BHS04056 BHS04057 BHS04058	BHS03102	BHS03103	BHS02009	BHS02010	

1.2 SOBRECOLDADO BASE CrCo

	PLATAFORMA Ø		CALCINABLE CrCo	 BASE CrCo		TORNILLO CLÍNICA	TORNILLO LAB	RÉPLICA IMPLANTE
NEODENT COMPATIBLE								
TITAMAX HE SMART								
	RP Ø 4,1	30° 20° 10°	BHS04001 BHS04005 BHS04009	BHS03003	BHS03004	BHS02001	BHS02002	EM045098
MINI PILAR CM								
	RP Ø 4,8	30° 20° 10°	BHS04002 BHS04006 BHS04010		BHS03008	BHS02003	BHS02004	EM045169
NOBEL COMPATIBLE								
BRÄNEMARK								
	RP Ø 4,1	30° 20° 10°	BHS04001 BHS04005 BHS04009	BHS03003	BHS03004	BHS02001	BHS02002	EM045098
ACTIVE								
	NP Ø 3,5	30° 20° 10°	BHS04068 BHS04069 BHS04070	BHS03058	BHS03059	BHS02025	BHS02026	EM048148
	RP Ø 4,3 / Ø5,0	30° 20° 10°	BHS04104 BHS04105 BHS04106	BHS03046	BHS03047	BHS02023	BHS02024	EM048149
MULTIUNIT								
	RP Ø 4,8	30° 20° 10°	BHS04002 BHS04006 BHS04010		BHS03008	BHS02003	BHS02004	EM045169

1.2 SOBRECILADO BASE CrCo

				PLATAFORMA Ø		CALCINABLE CrCo	 BASE CrCo		TORNILLO CLÍNICA	TORNILLO LAB	RÉPLICA IMPLANTE		
NT TRADING COMPATIBLE													
2-Connect													
	M1,4	Ø5,0	30° 20° 10°	BHS04002 BHS04006 BHS04010			BHS03177	BHS02063	BHS02064				
	M1,6	Ø5,0	30° 20° 10°	BHS04002 BHS04006 BHS04010			BHS03177	BHS02065	BHS02066				
	M1,8	Ø5,0	30° 20° 10°	BHS04002 BHS04006 BHS04010			BHS03177	BHS02067	BHS02068				
	OSSTEM IMPLANT COMPATIBLE												
	OSSTEM TS												
		Ø 4,0 / 4,5 / 5,0 / 6,0		30° 20° 10°	BHS04056 BHS04057 BHS04058	BHS03102	BHS03103	BHS02009	BHS02010				
		OSSTEM US											
			RP	Ø 4,1	30° 20° 10°	BHS04001 BHS04005 BHS04009	BHS03003	BHS03004	BHS02001	BHS02002	EM045098		
			OSTEOPLUS COMPATIBLE										
OSTEOPLUS - SHe													
	RP		Ø 4,1	30° 20° 10°	BHS04001 BHS04005 BHS04009	BHS03003	BHS03004	BHS02001	BHS02002	EM045098			
	OSTEOPLUS - SHi												
		RP	Ø 3,5	30° 20° 10°	BHS04056 BHS04057 BHS04058	BHS03050	BHS03051	BHS02021	BHS02022	EM045130			
		WP	Ø 4,5	30° 20° 10°	BHS04026 BHS04039 BHS04053	BHS03033	BHS03034	BHS02021	BHS02022	EM046218			

1.2 SOBRECOLDADO BASE CrCo

			PLATAFORMA Ø		CALCINABLE CrCo	BASE CrCo  		TORNILLO CLÍNICA	TORNILLO LAB	RÉPLICA IMPLANTE
OXTEIN COMPATIBLE										
HEX EXTERNA										
	RP	Ø 4,1	30°	BHS04001	BHS03003	BHS03004	BHS02001	BHS02002	EM045098	
			20°	BHS04005						
			10°	BHS04009						
			HEX INTERNA							
	NP	Ø 3,5	30°	BHS04056	BHS03050	BHS03051	BHS02021	BHS02022	EM045130	
			20°	BHS04057						
			10°	BHS04058						
		RP	Ø 4,5	30°	BHS04026	BHS03033	BHS03034	BHS02021	BHS02022	EM046218
20°				BHS04039						
10°				BHS04053						
PALTOP COMPATIBLE										
INTERNAL HEX CONNECTION										
	NARROW	Ø 3,25	30°	BHS04056	BHS03200	BHS03201	BHS02041	BHS02042		
			20°	BHS04057						
			10°	BHS04058						
		STANDARD	Ø 3,75 / 4,2 / 5,0	30°	BHS04056	BHS03050	BHS03051	BHS02021	BHS02022	EM045130
20°				BHS04057						
10°				BHS04058						
	WIDE	Ø 6,0	30°	BHS04026	BHS03033	BHS03034	BHS02021	BHS02022	EM046218	
			20°	BHS04039						
			10°	BHS04053						
PCA Implant System (Paltop Conical Active)										
	NARROW	Ø 3,25	30°	BHS04086	BHS03070	BHS03071	BHS02025	BHS02026	EM046371	
			20°	BHS04087						
			10°	BHS04088						
		STANDARD	Ø 3,75 / 4,2 / 5,0	30°	BHS04086	BHS03070	BHS03071	BHS02025	BHS02026	EM046371
20°				BHS04087						
10°				BHS04088						

1.2 SOBRECOLDADO BASE CrCo

	PLATAFORMA Ø		CALCINABLE CrCo	BASE CrCo	TORNILLO CLÍNICA	TORNILLO LAB	RÉPLICA IMPLANTE	
PHIBO COMPATIBLE								
TSH								
	S3 / S4	Ø 4,1	30º 20º 10º BHS04001 BHS04005 BHS04009	BHS03003	BHS03004	BHS02001	BHS02002	EM045098
AUREA EVO								
	NP	Ø 3,5	30º 20º 10º 0º BHS04056 BHS04057 BHS04058 BHS04055	BHS03106	BHS03107	BHS02041	BHS02042	
	RP	Ø 4,3	30º 20º 10º 0º BHS04056 BHS04057 BHS04058 BHS04055	BHS03110	BHS03111	BHS02021	BHS02022	
RADHEX IMPLANTS COMPATIBLE								
PHE / PHEA								
	RP	Ø 4,1	30º 20º 10º BHS04001 BHS04005 BHS04009	BHS03003	BHS03004	BHS02001	BHS02002	EM045098
PHI / PHIA								
	NP	Ø 3,5	30º 20º 10º BHS04056 BHS04057 BHS04058	BHS03050	BHS03051	BHS02021	BHS02022	EM045130
	RP	Ø 4,5	30º 20º 10º BHS04026 BHS04039 BHS04053	BHS03033	BHS03034	BHS02021	BHS02022	EM046218
PCI								
	280		30º 20º 10º BHS04086 BHS04087 BHS04088	BHS03070	BHS03071	BHS02025	BHS02026	EM046371
SGS COMPATIBLE								
P1 / P7								
	RP	Ø 3,75	30º 20º 10º BHS04056 BHS04057 BHS04058	BHS03050	BHS03051	BHS02021	BHS02022	EM045130

1.2 SOBRECOLDADO BASE CrCo

	PLATAFORMA Ø		CALCINABLE CrCo	 BASE CrCo		TORNILLO CLÍNICA	TORNILLO LAB	RÉPLICA IMPLANTE
SIGNO VINCES COMPATIBLE								
DUO / INTEGRA								
	RP Ø 4,1	30° 20° 10°	BHS04001 BHS04005 BHS04009	BHS03003	BHS03004	BHS02001	BHS02002	EM045098
SWEDEN & MARTINA COMPATIBLE								
SYRA (EH)								
	Ø 4,10 / 4,25	30° 20° 10°	BHS04001 BHS04005 BHS04009	BHS03003	BHS03004	BHS02001	BHS02002	EM045098
SYRA Short (EH)								
	Ø 4,10	30° 20° 10°	BHS04001 BHS04005 BHS04009	BHS03003	BHS03004	BHS02001	BHS02002	EM045098
TRI DENTAL IMPLANTS COMPATIBLE								
TRI - VENT								
	Ø 3,75 / 4,1 / 4,7	30° 20° 10°	BHS04056 BHS04057 BHS04058	BHS03050	BHS03051	BHS02021	BHS02022	EM045130
TRINON COMPATIBLE								
TRINON - Q2								
	RP Ø 4,1	30° 20° 10°	BHS04001 BHS04005 BHS04009	BHS03003	BHS03004	BHS02001	BHS02002	EM045098

1.2 SOBRECOLDADO BASE CrCo

	PLATAFORMA Ø		CALCINABLE CrCo	 BASE CrCo		TORNILLO CLÍNICA	TORNILLO LAB	REPÚBLICA IMPLANTE
ZIACOM COMPATIBLE								
ZINC - IH								
	NP Ø 3,2	30°	BHS04056	BHS03200	BHS03201	BHS02041	BHS02042	
		20°	BHS04057					
		10°	BHS04058					
	RP Ø 3,5	30°	BHS04056	BHS03050	BHS03051	BHS02021	BHS02022	EM045130
		20°	BHS04057					
		10°	BHS04058					
	WP Ø4,5	30°	BHS04026	BHS03033	BHS03034	BHS02021	BHS02022	EM046218
		20°	BHS04039					
		10°	BHS04053					
OEX - EH								
	RP Ø 4,1	30°	BHS04001	BHS03003	BHS03004	BHS02001	BHS02002	EM045098
		20°	BHS04005					
		10°	BHS04009					
OIN - IH (M2)								
	RP Ø4,0	30°	BHS04056	BHS03050	BHS03051	BHS02011	BHS02012	
		20°	BHS04057					
		10°	BHS04058					
	WP Ø5,0	30°	BHS04026	BHS03033	BHS03034	BHS02011	BHS02012	
		20°	BHS04039					
		10°	BHS04053					
		30°						
		20°						
		10°						
XDrive (Multi-unit)								
	RP Ø 4,8	30°	BHS04002		BHS03008	BHS02003	BHS02004	EM045169
		20°	BHS04006					
		10°	BHS04010					
ZIMMER COMPATIBLE								
INTERNAL HEX								
	NP Ø 3,5	30°	BHS04056	BHS03050	BHS03051	BHS02021	BHS02022	EM045130
		20°	BHS04057					
		10°	BHS04058					
	RP Ø4,5	30°	BHS04026	BHS03033	BHS03034	BHS02021	BHS02022	EM046218
		20°	BHS04039					
		10°	BHS04053					
		30°						
		20°						
		10°						

1.3 CEMENTADO BASE Ti



AJUSTE 100% PASIVO EN RESTAURACIONES HÍBRIDAS

Superficie continua para facilitar las restauraciones.

Diseño cónico para restauraciones múltiples y pared plana atractiva para piezas individuales.

Perfil de emergencia óptimo. Cuidado de tejidos blandos.

Diseño de canal de tornillo de acceso optimizado.

Corrección de ángulo de 10, 20 y 30°.

Diseño con forma de U, que permite un paso suave para el tornillo y el destornillador hasta 30°, al tiempo que proporciona una altura óptima para la cementación.

Pasadores de retención y empuñadura de guía que permite la retención axial.

Diseño rotativo y no rotativo para restauraciones múltiples y únicas.




1.3 CEMENTADO BASE Ti

				PLATAFORMA Ø		CALCINABLE Ti		BASE Ti		TORNILLO CLÍNICA	TORNILLO LAB	RÉPLICA IMPLANTE
AB IMPLANTS COMPATIBLE												
I SERIES INTERNAL HEX												
	NARROW	Ø 3 - 3,75	30°	BHS04059	BHS03198	BHS03199	BHS02041	BHS02042	EM045130			
			20°	BHS04060								
			10°	BHS04061								
	STD	Ø 3,5 - 6,0	30°	BHS04059	BHS03048	BHS03049	BHS02021	BHS02022				
			20°	BHS04060								
			10°	BHS04061								
I 10C CONUS												
	RP	Ø 4,2	30°	BHS04018	BHS03044	BHS03045	BHS02023	BHS02024	EM048149			
			20°	BHS04019								
			10°	BHS04020								
			ACE COMPATIBLE									
INFINITY EXTERNAL HEX												
	NP	Ø3,3/3,75	30°	BHS04059	BHS03010	BHS03011	BHS02005	BHS02006	EM045222			
			20°	BHS04060								
			10°	BHS04061								
	RP	Ø 4,0	30°	BHS04018	BHS03005	BHS03006	BHS02001	BHS02002				
			20°	BHS04019								
			10°	BHS04020								
INFINITY TRI - CAM												
	NP	Ø 3,5	30°	BHS04059	BHS03060	BHS03061	BHS02027	BHS02028	EM046291			
			20°	BHS04060								
			10°	BHS04061								
	RP	Ø 4,3	30°	BHS04018	BHS03012	BHS03013	BHS02009	BHS02010				
			20°	BHS04019								
			10°	BHS04020								
INFINITY INTERNAL HEX												
	NP	Ø 3,7 / 4,1	30°	BHS04059	BHS03048	BHS03049	BHS02021	BHS02022	EM045130			
			20°	BHS04060								
			10°	BHS04061								
	RP	Ø 4,7 / 5,1	30°	BHS04018	BHS03020	BHS03021	BHS02021	BHS02022				
			20°	BHS04019								
			10°	BHS04020								




1.3 CEMENTADO BASE Ti

	PLATAFORMA Ø		CALCINABLE Ti	 BASE Ti		TORNILLO CLÍNICA	TORNILLO LAB	RÉPLICA IMPLANTE
ADIN COMPATIBLE								
SWELL								
	Ø 3,5 - 6	30°	BHS04059	BHS03048	BHS03049	BHS02021	BHS02022	EM045130
		20°	BHS04060					
		10°	BHS04061					
TOUAREG S / OS								
	Ø 3,5 - 6	30°	BHS04059	BHS03048	BHS03049	BHS02021	BHS02022	EM045130
		20°	BHS04060					
		10°	BHS04061					
TOUAREG CLOSEFIT								
	RP Ø 3,5	30°	BHS04059	BHS03056	BHS03057	BHS02025	BHS02026	EM048148
		20°	BHS04060					
		10°	BHS04061					
	WP Ø 4,3 / 5	30°	BHS04018	BHS03044	BHS03045	BHS02023	BHS02024	EM048149
		20°	BHS04019					
		10°	BHS04020					
ALPHABIO COMPATIBLE								
EXTERNAL ALPHABIO								
	NP Ø 3,5	30°	BHS04059	BHS03010	BHS03011	BHS02005	BHS02006	EM045222
		20°	BHS04060					
		10°	BHS04061					
	RP Ø 4,1	30°	BHS04018	BHS03005	BHS03006	BHS02001	BHS02002	EM045098
		20°	BHS04019					
		10°	BHS04020					
INTERNAL ALPHABIO								
	Ø 3,3 - 6	30°	BHS04059	BHS03048	BHS03049	BHS02021	BHS02022	EM045130
		20°	BHS04060					
		10°	BHS04061					

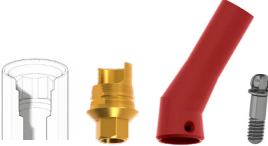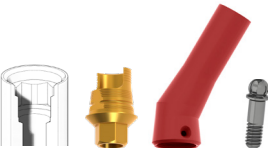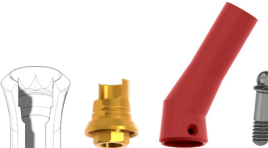
1.3 CEMENTADO BASE Ti

	PLATAFORMA Ø		CALCINABLE Ti		BASE Ti		TORNILLO CLÍNICA	TORNILLO LAB	RÉPLICA IMPLANTE
ALPHA DENT COMPATIBLE									
ACTIVE									
	Ø 3,75 / 4,2 / 5,0	30° 20° 10°	BHS04059 BHS04060 BHS04061	BHS03048	BHS03049	BHS02021	BHS02022	EM045130	
ACTIVE PLUS									
	Ø 4,2 / 5,0	30° 20° 10°	BHS04059 BHS04060 BHS04061	BHS03048	BHS03049	BHS02021	BHS02022	EM045130	
CLASSIC									
	Ø 3,3 / 3,75 / 4,2 / 5,0	30° 20° 10°	BHS04059 BHS04060 BHS04061	BHS03048	BHS03049	BHS02021	BHS02022	EM045130	
ANCLADEN COMPATIBLE									
ANCLALOCK									
	Ø 3,75 - 5	30° 20° 10°	BHS04059 BHS04060 BHS04061	BHS03048	BHS03049	BHS02021	BHS02022	EM045130	
ANTHOGYR COMPATIBLE									
ANTHOFIT EH									
	RP Ø 4,1	30° 20° 10°	BHS04018 BHS04019 BHS04020	BHS03005	BHS03006	BHS02001	BHS02002	EM045098	
OSSFIT									
	RP Ø 4,8	30° 20° 10°	BHS04021 BHS04022 BHS04023	BHS03016	BHS03017	BHS02011	BHS02012	EM045144	
	SYN_RP Ø 4,8	30° 20° 10°	BHS04080 BHS04081 BHS04082		BHS03019	BHS02013	BHS02014	EM046375	





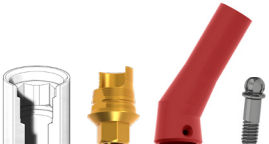
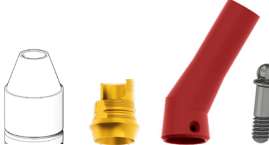
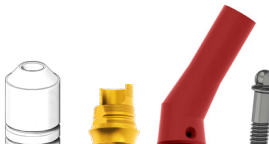
1.3 CEMENTADO BASE Ti

	PLATAFORMA Ø	∠	CALCINABLE Ti	BASE Ti	○	TORNILLO CLÍNICA	TORNILLO LAB	RÉPLICA IMPLANTE
ARDS COMPATIBLE								
SMART								
	Ø 3,75 - 4,5	30° 20° 10°	BHS04059 BHS04060 BHS04061	BHS03048	BHS03049	BHS02021	BHS02022	EM045130
CLASSIC								
	Ø 3,3 - 6	30° 20° 10°	BHS04059 BHS04060 BHS04061	BHS03048	BHS03049	BHS02021	BHS02022	EM045130
PREMIUM								
	Ø 3,3 - 6	30° 20° 10°	BHS04059 BHS04060 BHS04061	BHS03048	BHS03049	BHS02021	BHS02022	EM045130
ASTRA COMPATIBLE								
AQUA								
	RP_3,5 / 4,0	30° 20° 10°	BHS04059 BHS04060 BHS04061	BHS03068	BHS03069	BHS02025	BHS02026	EM046371
CONO 20°								
	Ø3,5	30° 20° 10°	BHS04059 BHS04060 BHS04061		BHS03072	BHS02003	BHS02004	EM045638
CONO 45°								
	Ø3,5	30° 20° 10°	BHS04059 BHS04060 BHS04061		BHS03074	BHS02003	BHS02004	EM047786
EV								
	Ø3,6	30° 20° 10°	BHS04059 BHS04060 BHS04061	BHS03152	BHS03153	BHS02053	BHS02054	
	Ø4,2	30° 20° 10°	BHS04059 BHS04060 BHS04061	BHS03156	BHS03157	BHS02055	BHS02056	

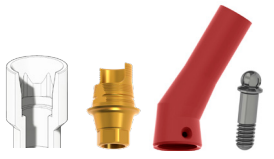
1.3 CEMENTADO BASE Ti

	PLATAFORMA Ø		CALCINABLE Ti	 BASE Ti		TORNILLO CLÍNICA	TORNILLO LAB	REPÚBLICA IMPLANTE	
AVINENT COMPATIBLE									
HE									
	NP Ø 3,5	30°	BHS04059	BHS03010	BHS03011	BHS02031	BHS02032	EM045222	
		20°	BHS04060						
		10°	BHS04061						
	RP Ø 4,1	30°	BHS04018	BHS03005	BHS03006	BHS02001	BHS02002	EM045098	
		20°	BHS04019						
		10°	BHS04020						
IH									
	Ø 3,5 / 4,1	30°	BHS04059	BHS03048	BHS03049	BHS02021	BHS02022	EM045130	
		20°	BHS04060						
		10°	BHS04061						
MULTIUNIT									
	RP Ø 4,8	30°	BHS04004		BHS03009	BHS02003	BHS02004	EM045169	
		20°	BHS04008						
		10°	BHS04012						
OCEAN CONICAL (C.C.)									
	Ø 3,5 (Implant Ø 3,5/ Ø4,0)	30°	BHS04059	BHS03056	BHS03057	BHS02025	BHS02026	EM048148	
		20°	BHS04060						
		10°	BHS04061						
		Ø 4,1 (Implant Ø 4,5/ Ø5,0)	30°	BHS04018	BHS03044	BHS03045	BHS02023	BHS02024	EM048149
			20°	BHS04019					
			10°	BHS04020					
BEGO COMPATIBLE									
IH									
	Ø 3,75 / 4,1	30°	BHS04059	BHS03048	BHS03049	BHS02021	BHS02022	EM045130	
		20°	BHS04060						
		10°	BHS04061						

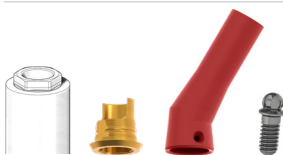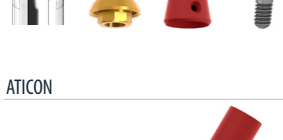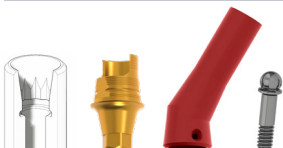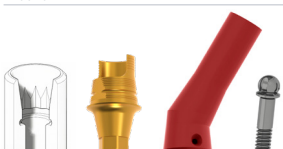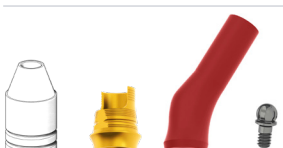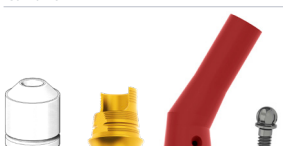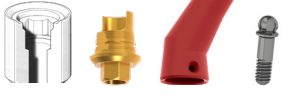1.3 CEMENTADO BASE Ti

	PLATAFORMA Ø		CALCINABLE Ti	 BASE Ti		TORNILLO CLÍNICA	TORNILLO LAB	RÉPLICA IMPLANTE
BIOGENESIS COMPATIBLE								
3ICON								
	RP Ø 4,1	30°	BHS04018	BHS03005	BHS03006	BHS02001	BHS02002	EM045098
		20°	BHS04019					
		10°	BHS04020					
ITICON								
	RP Ø 4,8	30°	BHS04021	BHS03016	BHS03017	BHS02011	BHS02012	EM045144
		20°	BHS04022					
		10°	BHS04023					
	RP Ø 4,8	30°	BHS04080		BHS03019	BHS02013	BHS02014	EM046375
		20°	BHS04081					
		10°	BHS04082					
ATICON								
	RP Ø 3,5 / 4,0	30°	BHS04059	BHS03068	BHS03069	BHS02025	BHS02026	EM046371
		20°	BHS04060					
		10°	BHS04061					
KISSES								
	RP Ø 3,5 / 4,0	30°	BHS04059	BHS03068	BHS03069	BHS02025	BHS02026	EM046371
		20°	BHS04060					
		10°	BHS04061					
CONO 20°								
	RP/WP	30°	BHS04059		BHS03072	BHS02003	BHS02004	EM045638
		20°	BHS04060					
		10°	BHS04061					
CONO 45°								
	RP/WP	30°	BHS04059		BHS03074	BHS02003	BHS02004	EM047786
		20°	BHS04060					
		10°	BHS04061					
BIOHORIZONS COMPATIBLE								
INTERNAL								
	NP Ø 3,5	30°	BHS04059	BHS03048	BHS03049	BHS02021	BHS02022	EM045130
		20°	BHS04060					
		10°	BHS04061					
	RP Ø 4,5	30°	BHS04018	BHS03020	BHS03021	BHS02021	BHS02022	EM046218
		20°	BHS04019					
		10°	BHS04020					

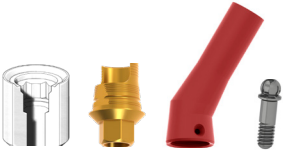
1.3 CEMENTADO BASE Ti

	PLATAFORMA Ø		CALCINABLE Ti	 BASE Ti		TORNILLO CLÍNICA	TORNILLO LAB	REPÚBLICA IMPLANTE
BIOMET 3i COMPATIBLE								
EH OSSEOTITE								
	RP Ø 4,1	30° 20° 10°	BHS04018 BHS04019 BHS04020	BHS03005	BHS03006	BHS02001	BHS02002	EM045098
BIONER COMPATIBLE								
IKELT / BIKELT								
	RP Ø 4,1	30° 20° 10°	BHS04018 BHS04019 BHS04020	BHS03005	BHS03006	BHS02001	BHS02002	EM045098
HIKELT								
	NP Ø 3,8	30° 20° 10°	BHS04059 BHS04060 BHS04061	BHS03048	BHS03049	BHS02021	BHS02022	EM045130
	RP Ø 4,7	30° 20° 10°	BHS04018 BHS04019 BHS04020	BHS03020	BHS03021	BHS02021	BHS02022	EM046218
TOP DM								
	Ø 3,5 / 4,0 / 5,0	30° 20° 10°	BHS04059 BHS04060 BHS04061	BHS03056	BHS03057	BHS02025	BHS02026	EM048148
MULTIUNIT								
	RP Ø 4,8	30° 20° 10°	BHS04004 BHS04008 BHS04012		BHS03009	BHS02003	BHS02004	EM045169
BTI COMPATIBLE								
EH								
	RP Ø 4,1	30° 20° 10°	BHS04018 BHS04019 BHS04020	BHS03005	BHS03006	BHS02001	BHS02002	EM045098



1.3 CEMENTADO BASE Ti

	PLATAFORMA Ø		CALCINABLE Ti	BASE Ti		TORNILLO CLÍNICA	TORNILLO LAB	RÉPLICA IMPLANTE
BTK COMPATIBLE								
8NECK INT								
   	SR Ø 4,8	30° 20° 10°	BHS04021 BHS04022 BHS04023	BHS03016	BHS03017	BHS02011	BHS02012	EM045144
EVO DL EXT								
   	RP Ø 4,1 / 4,6	30° 20° 10°	BHS04018 BHS04019 BHS04020	BHS03005	BHS03006	BHS02001	BHS02002	EM045098
EVO DL INT								
   	Ø 3,5 / 3,7 / 4,6 / 5,0 / 5,6	30° 20° 10°	BHS04059 BHS04060 BHS04061	BHS03048	BHS03049	BHS02021	BHS02022	EM045130
KLASSIC EXT								
   	RP Ø 4,1	30° 20° 10°	BHS04018 BHS04019 BHS04020	BHS03005	BHS03006	BHS02001	BHS02002	EM045098
KLASSIC INT								
   	Ø 3,5 / 4,5 / 5,0	30° 20° 10°	BHS04059 BHS04060 BHS04061	BHS03048	BHS03049	BHS02021	BHS02022	EM045130
KONIC EXT								
   	RP Ø 4,1	30° 20° 10°	BHS04018 BHS04019 BHS04020	BHS03005	BHS03006	BHS02001	BHS02002	EM045098
KONIC INT								
   	Ø 3,5 / 5,0	30° 20° 10°	BHS04059 BHS04060 BHS04061	BHS03048	BHS03049	BHS02021	BHS02022	EM045130
SAFETL INT								
   	SR Ø 4,8	30° 20° 10°	BHS04021 BHS04022 BHS04023	BHS03016	BHS03017	BHS02011	BHS02012	EM045144

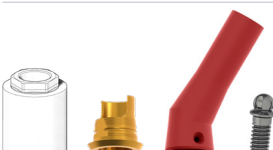1.3 CEMENTADO BASE Ti

	PLATAFORMA Ø	∠	CALCINABLE Ti	BASE Ti	TORNILLO CLÍNICA	TORNILLO LAB	RÉPLICA IMPLANTE	
B&W COMPATIBLE								
HEXAGONO EXT								
	RP Ø 4,1	30°	BHS04018	BHS03005	BHS03006	BHS02001	BHS02002	EM045098
		20°	BHS04019					
		10°	BHS04020					
HEXAGONO INT								
	NP Ø 3,3	30°	BHS04059	BHS03048	BHS03049	BHS02021	BHS02022	EM045130
		20°	BHS04060					
		10°	BHS04061					
	RP Ø 4,0	30°	BHS04059	BHS03048	BHS03049	BHS02021	BHS02022	EM045130
		20°	BHS04060					
		10°	BHS04061					
	WP Ø 5,0	30°	BHS04059	BHS03048	BHS03049	BHS02021	BHS02022	EM045130
		20°	BHS04060					
		10°	BHS04061					
CAMLOG COMPATIBLE								
CAMLOG								
	Ø 3,3	30°	BHS04089	BHS03128	BHS03129	BHS02049	BHS02050	
		20°	BHS04090					
		10°	BHS04091					
	Ø 3,8	30°	BHS04089	BHS03132	BHS03133	BHS02049	BHS02050	
		20°	BHS04090					
		10°	BHS04091					
	Ø 4,3	30°	BHS04095	BHS03136	BHS03137	BHS02049	BHS02050	
		20°	BHS04096					
		10°	BHS04097					
	Ø 5,0	30°	BHS04083	BHS03140	BHS03141	BHS02051	BHS02052	
		20°	BHS04084					
		10°	BHS04085					
CONEXÃO SIST. PROTESE COMPATIBLE								
MORSE INDEXADO								
	Ø 3,5 / 3,75 / 4,0 / 5,0	30°	BHS04059	BHS03056	BHS03057	BHS02025	BHS02026	EM048148
		20°	BHS04060					
		10°	BHS04061					
HEXAGONO EXT								
	Ø 3,75 / 4,0	30°	BHS04018	BHS03005	BHS03006	BHS02001	BHS02002	EM045098
		20°	BHS04019					
		10°	BHS04020					

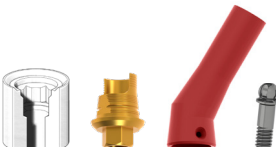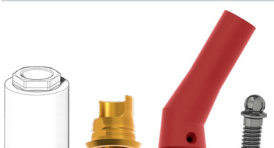1.3 CEMENTADO BASE Ti

	PLATAFORMA Ø		CALCINABLE Ti	 BASE Ti		TORNILLO CLÍNICA	TORNILLO LAB	RÉPLICA IMPLANTE
HEXAGONO INT								
	Ø 3,75 / 4,0 / 5,0	30° 20° 10°	BHS04018 BHS04019 BHS04020	BHS03020	BHS03021	BHS02021	BHS02022	EM046218
CORTEX COMPATIBLE								
DYNAMIX								
	Ø 3,3 / 3,8 / 4,2 / 5	30° 20° 10°	BHS04059 BHS04060 BHS04061	BHS03048	BHS03049	BHS02021	BHS02022	EM045130
CLASSIX								
	Ø 3,3 / 3,8 / 4,2 / 5	30° 20° 10°	BHS04059 BHS04060 BHS04061	BHS03048	BHS03049	BHS02021	BHS02022	EM045130
SATURN								
	Ø 3,8 / 4,2	30° 20° 10°	BHS04059 BHS04060 BHS04061	BHS03048	BHS03049	BHS02021	BHS02022	EM045130
COWELLMEDI COMPATIBLE								
EXTERNAL								
	RP Ø 4,1	30° 20° 10°	BHS04018 BHS04019 BHS04020	BHS03005	BHS03006	BHS02001	BHS02002	EM045098
INTERNAL								
	RN Ø 4,8	30° 20° 10°	BHS04021 BHS04022 BHS04023	BHS03016	BHS03017	BHS02011	BHS02012	EM045144

1.3 CEMENTADO BASE Ti

	PLATAFORMA Ø		CALCINABLE Ti	 BASE Ti		TORNILLO CLÍNICA	TORNILLO LAB	RÉPLICA IMPLANTE
SUBMERGED (INT)								
   	Ø3,5/4/4,5/5/6	30° 20° 10°	BHS04059 BHS04060 BHS04061	BHS03100		BHS02009	BHS02010	
DENTALTECH COMPATIBLE								
IMPLAGIC GII								
   	RP Ø 4,5	30° 20° 10°	BHS04018 BHS04019 BHS04020	BHS03020	BHS03021	BHS02021	BHS02022	EM046218
IMPLASSIC HX2								
   	RP Ø 4,1	30° 20° 10°	BHS04018 BHS04019 BHS04020	BHS03005	BHS03006	BHS02001	BHS02002	EM045098
DENTIS COMPATIBLE								
S-CLEAN								
   	RP Ø 3,4	30° 20° 10°	BHS04059 BHS04060 BHS04061	BHS03100		BHS02009	BHS02010	
I - CLEAN								
   	RP Ø 4,8	30° 20° 10°	BHS04021 BHS04022 BHS04023	BHS03016	BHS03017	BHS02011	BHS02012	EM045144
DENTIUM COMPATIBLE								
SIMPLE LINE II								
   	RN Ø 4,8	30° 20° 10°	BHS04021 BHS04022 BHS04023	BHS03016	BHS03017	BHS02011	BHS02012	EM045144



1.3 CEMENTADO BASE Ti

	PLATAFORMA Ø	∠	CALCINABLE Ti	BASE Ti		TORNILLO CLÍNICA	TORNILLO LAB	RÉPLICA IMPLANTE
IMPLANTUM								
	Ø3,6/4/4,4/4,9/6/7	30° 20° 10°	BHS04059 BHS04060 BHS04061	BHS03100		BHS02009	BHS02010	
SUPER LINE								
	Ø3,6/4/4,5/5/6	30° 20° 10°	BHS04059 BHS04060 BHS04061	BHS03100		BHS02009	BHS02010	
DENTSPLY SIRONA COMPATIBLE								
XIVES								
		D 3.4 30° 20° 10°	BHS04059 BHS04060 BHS04061	BHS03116	BHS03117	BHS02047	BHS02048	
		D 3.8 30° 20° 10°	BHS04059 BHS04060 BHS04061	BHS03120	BHS03121	BHS02047	BHS02048	
		D 4.5 30° 20° 10°	BHS04059 BHS04060 BHS04061	BHS03124	BHS03125	BHS02047	BHS02048	
DIO IMPLANTS COMPATIBLE								
EXTERNAL								
	NP Ø3,5	30° 20° 10°	BHS04059 BHS04060 BHS04061	BHS03010	BHS03011	BHS02005	BHS02006	EM045222
	RP Ø4,1	30° 20° 10°	BHS04018 BHS04019 BHS04020	BHS03005	BHS03006	BHS02001	BHS02002	EM045098
UF II								
	Ø3,8/4/4,5/5/5,5	30° 20° 10°	BHS04059 BHS04060 BHS04061	BHS03100		BHS02009	BHS02010	

1.3 CEMENTADO BASE Ti

	PLATAFORMA Ø		CALCINABLE Ti		BASE Ti		TORNILLO CLÍNICA	TORNILLO LAB	RÉPLICA IMPLANTE
EDISON MEDICAL COMPATIBLE									
LAMINA (IH)									
	Ø 3,3 / 3,75 / 4,2 / 5,0 / 6,0	30° 20° 10°	BHS04059 BHS04060 BHS04061	BHS03048	BHS03049	BHS02021	BHS02022	EM045130	
FORTIS (IH)									
	Ø 3,3 / 3,75 / 4,2 / 5,0 / 6,0	30° 20° 10°	BHS04059 BHS04060 BHS04061	BHS03048	BHS03049	BHS02021	BHS02022	EM045130	
ELITE MEDICA COMPATIBLE									
EXTERNAL CONNECT									
	NP Ø 3,5	30°	BHS04059	BHS03010	BHS03011	BHS02005	BHS02006	EM045222	
		20°	BHS04060						
		10°	BHS04061						
	RP Ø 4,1	30°	BHS04018	BHS03005	BHS03006	BHS02001	BHS02002	EM045098	
		20°	BHS04019						
		10°	BHS04020						
EUROTEKNIKA COMPATIBLE									
UNEVA									
	Ø 3,6 / 4,1 / 4,8	30° 20° 10°	BHS04018 BHS04019 BHS04020	BHS03005	BHS03006	BHS02001	BHS02002	EM045098	
NATURACTIS									
	Ø 3,5 / 4 / 4,5 / 5	30° 20° 10°	BHS04059 BHS04060 BHS04061	BHS03068	BHS03069	BHS02025	BHS02026	EM046371	
NATURALL +									
	Ø 3,5 / 4 / 4,5 / 5	30° 20° 10°	BHS04059 BHS04060 BHS04061	BHS03068	BHS03069	BHS02025	BHS02026	EM046371	

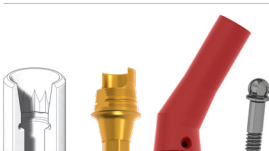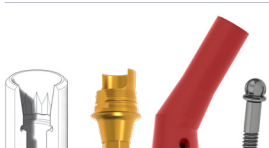1.3 CEMENTADO BASE Ti

	PLATAFORMA Ø		CALCINABLE Ti		BASE Ti		TORNILLO CLÍNICA	TORNILLO LAB	RÉPLICA IMPLANTE
NATEA									
	NP Ø 3,6 / 4,1	30°	BHS04059	BHS03068	BHS03069	BHS02025	BHS02026	EM046371	
		20°	BHS04060						
		10°	BHS04061						
	RP Ø 4,8 / 6	30°	BHS04059	BHS03068	BHS03069	BHS02025	BHS02026	EM046371	
		20°	BHS04060						
		10°	BHS04061						
AESTHETICA									
	Ø 3,6 / 4,1 / 4,8	30°	BHS04021	BHS03016	BHS03017	BHS02011	BHS02012	EM045144	
		20°	BHS04022						
		10°	BHS04023						
GALIMPLANT COMPATIBLE									
IPXE - EXTERNA									
	RP Ø 3,5 / 4 / 5	30°	BHS04018	BHS03005	BHS03006	BHS02001	BHS02002	EM045098	
		20°	BHS04019						
		10°	BHS04020						
ICI - INTERNA									
	RP Ø 3,2 / 3,5 / 4 / 5	30°	BHS04059	BHS03068	BHS03069	BHS02025	BHS02026	EM046371	
		20°	BHS04060						
		10°	BHS04061						
IPX - INTERNA									
	RP Ø 3,5 / 4 / 4,5 / 5	30°	BHS04059	BHS03068	BHS03069	BHS02025	BHS02026	EM046371	
		20°	BHS04060						
		10°	BHS04061						

1.3 CEMENTADO BASE Ti

		PLATAFORMA Ø	△	CALCINABLE Ti	⬡	BASE Ti	○	TORNILLO CLÍNICA	TORNILLO LAB	RÉPLICA IMPLANTE
GMI COMPATIBLE										
FRONTIER (IH)										
	RP Standard	Ø 3,3	30°	BHS04059	BHS03048	BHS03049	BHS02021	BHS02022		EM045130
			20°	BHS04060						
			10°	BHS04061						
	WP Wide	Ø 4,3	30°	BHS04018	BHS03020	BHS03021	BHS02021	BHS02022		EM046218
			20°	BHS04019						
			10°	BHS04020						
FRONTIER multi-aesthetic										
	RP	Ø 4,8	30°	BHS04004		BHS03009	BHS02003	BHS02004		EM045169
			20°	BHS04008						
			10°	BHS04012						
PHOENIX (EH)										
	Standard	Ø 4,1	30°	BHS04018	BHS03005	BHS03006	BHS02001	BHS02002		EM045098
			20°	BHS04019						
			10°	BHS04020						
PHOENIX multi-aesthetic										
	RP	Ø 4,8	30°	BHS04004		BHS03009	BHS02003	BHS02004		EM045169
			20°	BHS04008						
			10°	BHS04012						
GT MEDICAL COMPATIBLE										
BEST FIT HXE										
	NP	Ø 3,5	30°	BHS04059	BHS03010	BHS03011	BHS02005	BHS02006		EM045222
			20°	BHS04060						
			10°	BHS04061						
	RP	Ø 4,1	30°	BHS04018	BHS03005	BHS03006	BHS02001	BHS02002		EM045098
			20°	BHS04019						
			10°	BHS04020						
BEST FIT 002										
	NP	Ø 3,5	30°	BHS04059	BHS03048	BHS03049	BHS02021	BHS02022		EM045130
			20°	BHS04060						
			10°	BHS04061						

1.3 CEMENTADO BASE Ti

	PLATAFORMA Ø		CALCINABLE Ti		BASE Ti		TORNILLO CLÍNICA	TORNILLO LAB	RÉPLICA IMPLANTE	
BEST FIT OCT										
	RN	Ø 4,8	30° 20° 10°	BHS04021 BHS04022 BHS04023	BHS03016	BHS03017	BHS02011	BHS02012	EM045144	
	SYN_RN	Ø4,8	30° 20° 10°	BHS04080 BHS04081 BHS04082		BHS03019	BHS02013	BHS02014	EM046375	
	HI TECH COMPATIBLE									
	SELF THREAD									
		SLT	Ø 3,3 / 3,75	30° 20° 10°	BHS04059 BHS04060 BHS04061	BHS03048	BHS03049	BHS02021	BHS02022	EM045130
		GTI	Ø 4,2 / 5	30° 20° 10°	BHS04018 BHS04019 BHS04020	BHS03020	BHS03021	BHS02021	BHS02022	EM046218
LGI PLUS										
		Ø 3,5 / 4,3 / 5 / 6	30° 20° 10°	BHS04059 BHS04060 BHS04061	BHS03048	BHS03049	BHS02021	BHS02022	EM045130	
IMPLANT DIRECT COMPATIBLE										
INTERACTIVE										
	NP	Ø 3,5	30° 20° 10°	BHS04059 BHS04060 BHS04061	BHS03056	BHS03057	BHS02025	BHS02026	EM048148	
	RP	Ø 4,3	30° 20° 10°	BHS04018 BHS04019 BHS04020	BHS03044	BHS03045	BHS02023	BHS02024	EM048149	
	LEGACY									
	NP	Ø 3,5	30° 20° 10°	BHS04059 BHS04060 BHS04061	BHS03048	BHS03049	BHS02021	BHS02022	EM045130	
	RP	Ø 4,5	30° 20° 10°	BHS04018 BHS04019 BHS04020	BHS03020	BHS03021	BHS02021	BHS02022	EM046218	

1.3 CEMENTADO BASE Ti

	PLATAFORMA Ø		CALCINABLE Ti	 BASE Ti		TORNILLO CLÍNICA	TORNILLO LAB	RÉPLICA IMPLANTE	
REPLUS / REPLANT									
   	NP Ø 3,5	30°	BHS04059	BHS03060	BHS03061	BHS02027	BHS02028	EM046291	
		20°	BHS04060						
		10°	BHS04061						
	RP Ø 4,3	30°	BHS04018	BHS03012	BHS03013	BHS02009	BHS02010	EM046292	
		20°	BHS04019						
		10°	BHS04020						
SWISHPLUS / SWISHPLANT									
   	RN Ø 4,8	30°	BHS04021	BHS03016	BHS03017	BHS02011	BHS02012	EM045144	
		20°	BHS04022						
		10°	BHS04023						
	SYN_RN Ø 4,8	30°	BHS04080		BHS03019	BHS02013	BHS02014	EM046375	
		20°	BHS04081						
		10°	BHS04082						
JDENTALCARE COMPATIBLE									
JDEVOLUTION									
   	Ø 3,7 / 4,3 / 5 / 6	30°	BHS04059	BHS03048	BHS03049	BHS02021	BHS02022	EM045130	
		20°	BHS04060						
		10°	BHS04061						
	KEYSTONE DENTAL COMPATIBLE								
	RESTORE								
	   	RP Ø 4,1	30°	BHS04018	BHS03005	BHS03006	BHS02001	BHS02002	EM045098
20°			BHS04019						
10°			BHS04020						
OCT-XT									
   		RN Ø 4,8	30°	BHS04021	BHS03016	BHS03017	BHS02011	BHS02012	EM045144
			20°	BHS04022					
	10°		BHS04023						
	SYN_RN Ø 4,8	30°	BHS04080		BHS03019	BHS02013	BHS02014	EM046375	
		20°	BHS04081						
		10°	BHS04082						
RENOVA									
   	NP Ø 3,75	30°	BHS04059	BHS03048	BHS03049	BHS02021	BHS02022	EM045130	
		20°	BHS04060						
		10°	BHS04061						
	RP Ø 4,5 / 4,75	30°	BHS04018	BHS03020	BHS03021	BHS02021	BHS02022	EM046218	
		20°	BHS04019						
		10°	BHS04020						

1.3 CEMENTADO BASE Ti

	PLATAFORMA Ø	∠	CALCINABLE Ti	⬡ BASE Ti	○	TORNILLO CLÍNICA	TORNILLO LAB	RÉPLICA IMPLANTE	
KLOCKNER COMPATIBLE									
KL (EH)									
	NP	Ø3,5	30°	BHS04059	BHS03010	BHS03011	BHS02005	BHS02006	EM045222
			20°	BHS04060					
			10°	BHS04061					
	RP	Ø 4,1	30°	BHS04018	BHS03005	BHS03006	BHS02001	BHS02002	EM045098
			20°	BHS04019					
			10°	BHS04020					
LEADER COMPATIBLE									
TIXOS INTERNAL HEX									
	NP	Ø 3,5 / 4,0	30°	BHS04059	BHS03048	BHS03049	BHS02021	BHS02022	EM045130
			20°	BHS04060					
			10°	BHS04061					
TIXOS EXTERNAL HEX									
	RP	Ø 4,1	30°	BHS04018	BHS03005	BHS03006	BHS02001	BHS02002	EM045098
			20°	BHS04019					
			10°	BHS04020					
MEDENTIS COMPATIBLE									
ICX									
	Ø 3,45 / 3,7 - 4,1 / 4,8	30°	BHS04059	BHS03178	BHS03179	BHS02015	BHS02016		
		20°	BHS04060						
		10°	BHS04061						

1.3 CEMENTADO BASE Ti

	PLATAFORMA Ø		CALCINABLE Ti		BASE Ti		TORNILLO CLÍNICA	TORNILLO LAB	REPÚBLICA IMPLANTE
MEGAGEN COMPATIBLE									
ANYONE INTERNAL									
	NP	30°	BHS04059	BHS03100			BHS02009	BHS02010	
		20°	BHS04060						
		10°	BHS04061						
	RP	30°	BHS04059	BHS03100			BHS02009	BHS02010	
		20°	BHS04060						
		10°	BHS04061						
	WP	30°	BHS04059	BHS03100			BHS02009	BHS02010	
		20°	BHS04060						
		10°	BHS04061						
ANYONE EXTERNAL									
	NP	30°	BHS04059	BHS03010	BHS03011	BHS02005	BHS02006	EM045222	
		20°	BHS04060						
		10°	BHS04061						
	RP	30°	BHS04018	BHS03005	BHS03006	BHS02001	BHS02002	EM045098	
		20°	BHS04019						
		10°	BHS04020						
ANYRIDGE									
	Small	Ø3,5	30°	BHS04059	BHS03164	BHS03165	BHS02027	BHS02028	
			20°	BHS04060					
			10°	BHS04061					
	Regular	Ø4,0/4,5	30°	BHS04059	BHS03164	BHS03165	BHS02027	BHS02028	
			20°	BHS04060					
			10°	BHS04061					
	Wide	Ø5,0/5,5	30°	BHS04059	BHS03164	BHS03165	BHS02027	BHS02028	
			20°	BHS04060					
			10°	BHS04061					
OCTA Abutment									
	SYN_RN	Ø4,8	30°	BHS04080		BHS03019	BHS02013	BHS02014	EM046375
			20°	BHS04081					
			10°	BHS04082					
MICRODENT COMPATIBLE									
EKTOS (IH)									
	NP	Ø 3,5	30°	BHS04059	BHS03048	BHS03049	BHS02021	BHS02022	EM045130
			20°	BHS04060					
			10°	BHS04061					
	RP	Ø 4,5	30°	BHS04018	BHS03020	BHS03021	BHS02021	BHS02022	EM046218
			20°	BHS04019					
			10°	BHS04020					


1.3 CEMENTADO BASE Ti

	PLATAFORMA Ø		CALCINABLE Ti	 BASE Ti		TORNILLO CLÍNICA	TORNILLO LAB	REPÚBLICA IMPLANTE			
SUV (EH) & UNIVERSAL (EH)											
	SUV & SU	Ø 4,1	30° 20° 10°	BHS04018 BHS04019 BHS04020	BHS03005	BHS03006	BHS02001	BHS02002	EM045098		
MIS COMPATIBLE											
LANCE											
	STD	Ø 4,1	30° 20° 10°	BHS04018 BHS04019 BHS04020	BHS03005	BHS03006	BHS02001	BHS02002	EM045098		
SEVEN / M4											
	Narrow	Ø 3,30	30° 20° 10°	BHS04059 BHS04060 BHS04061	BHS03198	BHS03199	BHS02041	BHS02042	EM045130		
	Standard	Ø 3,75 / 4,2	30° 20° 10°	BHS04059 BHS04060 BHS04061	BHS03048	BHS03049	BHS02021	BHS02022			
	Wide	Ø 5,0 / 6,0	30° 20° 10°	BHS04018 BHS04019 BHS04020	BHS03020	BHS03021	BHS02021	BHS02022		EM046218	
	MOZO GRAU COMPATIBLE										
	INHEX										
		RP	Ø 3,75 / 4,25	30° 20° 10°	BHS04059 BHS04060 BHS04061	BHS03068	BHS03069	BHS02025		BHS02026	EM046371
		CONO20		30° 20° 10°	BHS04059 BHS04060 BHS04061		BHS03072	BHS02003		BHS02004	EM045638
		CONO45		30° 20° 10°	BHS04059 BHS04060 BHS04061		BHS03074	BHS02003		BHS02004	EM047786
		OSSEUS									
		RP	Ø 4,1	30° 20° 10°	BHS04018 BHS04019 BHS04020	BHS03005	BHS03006	BHS02001		BHS02002	EM045098


1.3 CEMENTADO BASE Ti

	PLATAFORMA Ø		CALCINABLE Ti	 BASE Ti		TORNILLO CLÍNICA	TORNILLO LAB	RÉPLICA IMPLANTE
MPI COMPATIBLE								
EXTERNA EH								
	RP Ø 4,1	30° 20° 10°	BHS04018 BHS04019 BHS04020	BHS03005	BHS03006	BHS02001	BHS02002	EM045098
INTERNA CM								
	RP Ø 4,0	30° 20° 10°	BHS04059 BHS04060 BHS04061	BHS03068	BHS03069	BHS02025	BHS02026	EM046371
NEOBIOTECH COMPATIBLE								
EB EXTERNAL SYSTEM								
	NP Ø 3,5	30° 20° 10°	BHS04059 BHS04060 BHS04061	BHS03010	BHS03011	BHS02005	BHS02006	EM045222
	RP Ø 4,1	30° 20° 10°	BHS04018 BHS04019 BHS04020	BHS03005	BHS03006	BHS02001	BHS02002	EM045098
IS INTERNAL SYSTEM								
	Ø3,5/4/4,5/5	30° 20° 10°	BHS04059 BHS04060 BHS04061	BHS03100		BHS02009	BHS02010	
NEODENT COMPATIBLE								
TITAMAX EH SMART								
	RP Ø 4,1	30° 20° 10°	BHS04018 BHS04019 BHS04020	BHS03005	BHS03006	BHS02001	BHS02002	EM045098
MINI PILAR CM								
	RP Ø 4,8	30° 20° 10°	BHS04004 BHS04008 BHS04012		BHS03009	BHS02003	BHS02004	EM045169

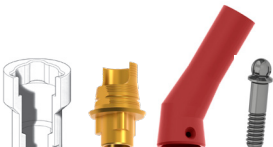
1.3 CEMENTADO BASE Ti

	PLATAFORMA Ø		CALCINABLE Ti	 BASE Ti		TORNILLO CLÍNICA	TORNILLO LAB	REPLICA IMPLANTE
NOBEL COMPATIBLE								
BRÅNEMARK								
	NP Ø 3,5	30°	BHS04059	BHS03010	BHS03011	BHS02005	BHS02006	EM045222
		20°	BHS04060					
		10°	BHS04061					
	RP Ø 4,1	30°	BHS04018	BHS03005	BHS03006	BHS02001	BHS02002	EM045098
		20°	BHS04019					
		10°	BHS04020					
REPLACE								
	NP Ø 3,5	30°	BHS04059	BHS03060	BHS03061	BHS02027	BHS02028	EM046291
		20°	BHS04060					
		10°	BHS04061					
	RP Ø 4,3	30°	BHS04018	BHS03012	BHS03013	BHS02009	BHS02010	EM046292
		20°	BHS04019					
		10°	BHS04020					
ACTIVE								
	NP Ø 3,5	30°	BHS04059	BHS03056	BHS03057	BHS02025	BHS02026	EM048148
		20°	BHS04060					
		10°	BHS04061					
	RP Ø4,3 / Ø5,0	30°	BHS04018	BHS03044	BHS03045	BHS02023	BHS02024	EM048149
		20°	BHS04019					
		10°	BHS04020					
MULTIUNIT								
	RP Ø 4,8	30°	BHS04004		BHS03009	BHS02003	BHS02004	EM045169
		20°	BHS04008					
		10°	BHS04012					
NT TRADING COMPATIBLE								
2-CONnect								
	M1,4 Ø5,0	30°	BHS04004		BHS03176	BHS02063	BHS02064	
		20°	BHS04008					
		10°	BHS04012					
	M1,6 Ø5,0	30°	BHS04004		BHS03176	BHS02065	BHS02066	
		20°	BHS04008					
		10°	BHS04012					
	M1,8 Ø5,0	30°	BHS04004		BHS03176	BHS02067	BHS02068	
		20°	BHS04008					
		10°	BHS04012					
		30°						
		20°						
		10°						

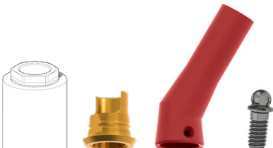
1.3 CEMENTADO BASE Ti

	PLATAFORMA Ø		CALCINABLE Ti	BASE Ti		TORNILLO CLÍNICA	TORNILLO LAB	RÉPLICA IMPLANTE
OSSTEM IMPLANT COMPATIBLE								
OSSTEM TS								
	Ø 4,0/4,5/5,0/6,0	30° 20° 10°	BHS04059 BHS04060 BHS04061	BHS03100		BHS02009	BHS02010	
OSSTEM US								
	MINI Ø 3,5	30° 20° 10°	BHS04059 BHS04060 BHS04061	BHS03010	BHS03011	BHS02005	BHS02006	EM045222
	RP Ø 4,1	30° 20° 10°	BHS04018 BHS04019 BHS04020	BHS03005	BHS03006	BHS02001	BHS02002	EM045098
OSTEOPLUS COMPATIBLE								
OSTEOPLUS - SHe								
	RP Ø 4,1	30° 20° 10°	BHS04018 BHS04019 BHS04020	BHS03005	BHS03006	BHS02001	BHS02002	EM045098
OSTEOPLUS - SHi								
	RP Ø 3,5	30° 20° 10°	BHS04059 BHS04060 BHS04061	BHS03048	BHS03049	BHS02021	BHS02022	EM045130
	WP Ø 4,5	30° 20° 10°	BHS04018 BHS04019 BHS04020	BHS03020	BHS03021	BHS02021	BHS02022	EM046218
OXTEIN COMPATIBLE								
HEX EXTERNA								
	RP Ø 4,1	30° 20° 10°	BHS04018 BHS04019 BHS04020	BHS03005	BHS03006	BHS02001	BHS02002	EM045098
HEX INTERNA								
	NP Ø 3,5	30° 20° 10°	BHS04059 BHS04060 BHS04061	BHS03048	BHS03049	BHS02021	BHS02022	EM045130
	RP Ø 4,5	30° 20° 10°	BHS04018 BHS04019 BHS04020	BHS03020	BHS03021	BHS02021	BHS02022	EM046218

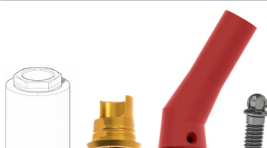1.3 CEMENTADO BASE Ti

	PLATAFORMA Ø		CALCINABLE Ti	 BASE Ti		TORNILLO CLÍNICA	TORNILLO LAB	RÉPLICA IMPLANTE	
OCTA INTERNA									
	RN Ø 4,8	30°	BHS04021	BHS03016	BHS03017	BHS02011	BHS02012	EM045144	
		20°	BHS04022						
		10°	BHS04023						
	RN Ø 4,8	30°	BHS04080		BHS03019	BHS02013	BHS02014	EM046375	
		20°	BHS04081						
		10°	BHS04082						
PALTOP COMPATIBLE									
INTERNAL HEX CONNECTION									
	NARROW Ø 3,25	30°	BHS04059	BHS03198	BHS03199	BHS02041	BHS02042		
		20°	BHS04060						
		10°	BHS04061						
	STANDARD Ø 3,75 / 4,2 / 5,0	30°	BHS04059	BHS03048	BHS03049	BHS02021	BHS02022	EM045130	
		20°	BHS04060						
		10°	BHS04061						
	WIDE Ø 6,0	30°	BHS04018	BHS03020	BHS03021	BHS02021	BHS02022	EM046218	
		20°	BHS04019						
		10°	BHS04020						
	PCA Implant System (Paltop Conical Active)								
		NARROW Ø 3,25	30°	BHS04059	BHS03068	BHS03069	BHS02025	BHS02026	EM046371
			20°	BHS04060					
10°			BHS04061						
STANDARD Ø 3,75 / 4,2 / 5,0		30°	BHS04059	BHS03068	BHS03069	BHS02025	BHS02026	EM046371	
		20°	BHS04060						
		10°	BHS04061						
MULTI UNIT									
	Ø 5,00	30°	BHS04004		BHS03194	BHS02031	BHS02032		
		20°	BHS04008						
		10°	BHS04012						
SINGLE UNIT									
	Ø 4,50	30°	BHS04018	BHS03196		BHS02031	BHS02032		
		20°	BHS04019						
		10°	BHS04020						
PHIBO COMPATIBLE									
TSH									
	S3 / S4 Ø 4,1	30°	BHS04018	BHS03005	BHS03006	BHS02001	BHS02002	EM045098	
		20°	BHS04019						
		10°	BHS04020						




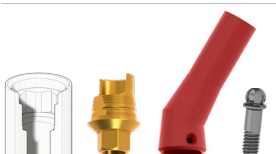
1.3 CEMENTADO BASE Ti

	PLATAFORMA Ø		CALCINABLE Ti	 BASE Ti		TORNILLO CLÍNICA	TORNILLO LAB	RÉPLICA IMPLANTE						
RADHEX IMPLANTS COMPATIBLE														
PHE / PHEA														
	NP	Ø 3,5	30°	BHS04059	BHS03010	BHS03011	BHS02005	BHS02006	EM045222					
			20°	BHS04060										
			10°	BHS04061										
	RP	Ø 4,1	30°	BHS04018	BHS03005	BHS03006	BHS02001	BHS02002	EM045098					
			20°	BHS04019										
			10°	BHS04020										
PHI / PHIA														
	NP	Ø 3,5	30°	BHS04059	BHS03048	BHS03049	BHS02021	BHS02022	EM045130					
			20°	BHS04060										
			10°	BHS04061										
	RP	Ø 4,5	30°	BHS04018	BHS03020	BHS03021	BHS02021	BHS02022	EM046218					
			20°	BHS04019										
			10°	BHS04020										
PCI														
	280		30°	BHS04059	BHS03068	BHS03069	BHS02025	BHS02026	EM046371					
			20°	BHS04060										
			10°	BHS04061										
SGS COMPATIBLE														
P1 / P7														
	RP	Ø 3,75	30°	BHS04059	BHS03048	BHS03049	BHS02021	BHS02022	EM045130					
			20°	BHS04060										
			10°	BHS04061										
SIGNO VINCES COMPATIBLE														
DUO / INTEGRA														
	RP	Ø 4,1	30°	BHS04018	BHS03005	BHS03006	BHS02001	BHS02002	EM045098					
			20°	BHS04019										
			10°	BHS04020										
STRAUMANN COMPATIBLE														
OCTA INTERN														
	RN	Ø 4,8	30°	BHS04021	BHS03016	BHS03017	BHS02011	BHS02012	EM045144					
			20°	BHS04022										
			10°	BHS04023										
	SYN_RN	Ø 4,8	30°	BHS04080		BHS03019	BHS02013	BHS02014	EM046375					
			20°	BHS04081										
			10°	BHS04082										

1.3 CEMENTADO BASE Ti

	PLATAFORMA Ø		CALCINABLE Ti	 BASE Ti		TORNILLO CLÍNICA	TORNILLO LAB	RÉPLICA IMPLANTE	
BONE LEVEL									
	NC	Ø 3,3	30°	BHS04025	BHS03064	BHS03065	BHS02015	BHS02016	EM048048
			20°	BHS04060					
			10°	BHS04061					
	RC	Ø 4,1 / 4,8	30°	BHS04025	BHS03036	BHS03037	BHS02015	BHS02016	EM046904
			20°	BHS04060					
			10°	BHS04061					
SWEDEN & MARTINA COMPATIBLE									
SYRA (EH)									
	Ø 4,1 / 4,25		30°	BHS04018	BHS03005	BHS03006	BHS02001	BHS02002	EM045098
			20°	BHS04019					
			10°	BHS04020					
SYRA Short (EH)									
	Ø 4,1		30°	BHS04018	BHS03005	BHS03006	BHS02001	BHS02002	EM045098
			20°	BHS04019					
			10°	BHS04020					
TRI DENTAL IMPLANTS COMPATIBLE									
TRI - VENT									
	Ø 3,75 / 4,1 / 4,7		30°	BHS04059	BHS03048	BHS03049	BHS02021	BHS02022	EM045130
			20°	BHS04060					
			10°	BHS04061					
TRINON COMPATIBLE									
TRINON - Q2									
	RP	Ø 4,1	30°	BHS04018	BHS03005	BHS03006	BHS02001	BHS02002	EM045098
			20°	BHS04019					
			10°	BHS04020					
TRINON - QK									
	RN	Ø 4,8	30°	BHS04021	BHS03016	BHS03017	BHS02011	BHS02012	EM045144
			20°	BHS04022					
			10°	BHS04023					
	RN	Ø 4,8	30°	BHS04080		BHS03019	BHS02013	BHS02014	EM046375
			20°	BHS04081					
			10°	BHS04082					

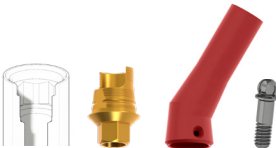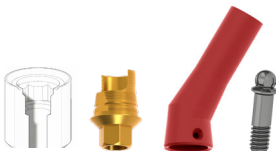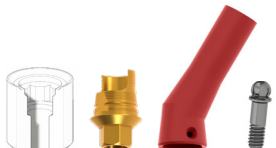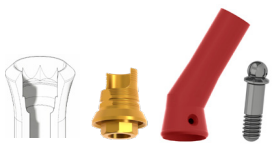1.3 CEMENTADO BASE Ti

	PLATAFORMA Ø		CALCINABLE Ti	 BASE Ti		TORNILLO CLÍNICA	TORNILLO LAB	RÉPLICA IMPLANTE
ZIACOM COMPATIBLE								
ZINIC - IH								
	NP Ø 3,2	30°	BHS04059	BHS03198	BHS03199	BHS02041	BHS02042	
		20°	BHS04060					
		10°	BHS04061					
	RP Ø 3,5	30°	BHS04059	BHS03048	BHS03049	BHS02021	BHS02022	EM045130
		20°	BHS04060					
		10°	BHS04061					
	WP Ø4,5	30°	BHS04018	BHS03020	BHS03021	BHS02021	BHS02022	EM046218
		20°	BHS04019					
		10°	BHS04020					
OEX - EH								
	RP Ø 4,1	30°	BHS04018	BHS03005	BHS03006	BHS02001	BHS02002	EM045098
		20°	BHS04019					
		10°	BHS04020					
OIN - HI (M2)								
	RP Ø 4,0	30°	BHS04059	BHS03048	BHS03049	BHS02011	BHS02012	
		20°	BHS04060					
		10°	BHS04061					
	WP Ø 5,0	30°	BHS04018	BHS03020	BHS03021	BHS02011	BHS02012	
		20°	BHS04019					
		10°	BHS04020					
XDrive (Multi-unit)								
	RP Ø 4,8	30°	BHS04004		BHS03009	BHS02003	BHS02004	EM045169
		20°	BHS04008					
		10°	BHS04012					
ZIMMER COMPATIBLE								
INTERNAL HEX								
	NP Ø 3,5	30°	BHS04059	BHS03048	BHS03049	BHS02021	BHS02022	EM045130
		20°	BHS04060					
		10°	BHS04061					
	RP Ø 4,5	30°	BHS04018	BHS03020	BHS03021	BHS02021	BHS02022	EM046218
		20°	BHS04019					
		10°	BHS04020					
SWISS - PLUS								
	RP Ø 4,8	30°	BHS04021	BHS03016	BHS03017	BHS02011	BHS02012	EM045144
		20°	BHS04022					
		10°	BHS04023					
	RP Ø 4,8	30°	BHS04080		BHS03019	BHS02013	BHS02014	EM046375
		20°	BHS04081					
		10°	BHS04082					

2.0 DESTONILLADOR BHS30



EXCELENTES PROPIEDADES MECÁNICAS Y PROTECCIÓN DE LA CABEZA DE TORNILLO

Conexión compatible con contraángulo universal (ISO1797).

Acero endurecido que ofrece una excelente resistencia a la torsión (90 N-cm).

Acoplamiento óptimo que garantiza la integridad de la cabeza del tornillo.

Recubrimiento de Ti: tratamiento superficial que aumenta la vida útil del conductor.

Diseñado para corregir desviaciones de ángulo de 30° con una transmisión de torque 100% eficiente.

DESTORNILLADOR BHS



BHS01001 - L25mm
BHS01004 - L20mm
BHS01005 - L32mm

MANGO DESTORNILLADOR



BHS01110 - Nob Ø 8mm / CA
BHS01111 - Str Ø 7mm / CA

3.0 PROTOCOLOS


COLADO DIRECTO

Productos Requeridos:


Tornillo BHS30
Destornillador BHS30
Cilindro Calcinable Angulado 10|20|30°

Materiales:

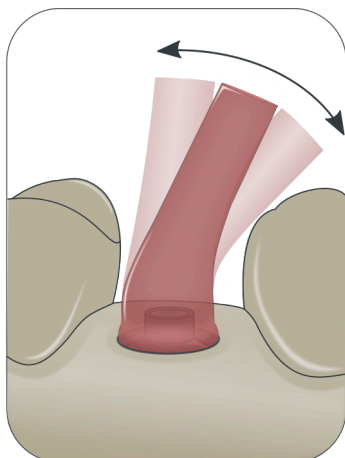
Colado en CrCo, CrNi, Ti, Pd, Au,...



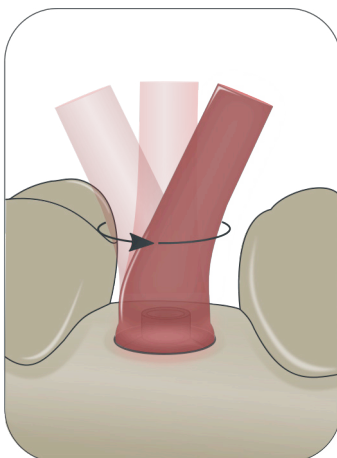
1.
LABORATORIO_ Verifique la posición análoga del implante y la selección del Cilindro Fundible Angulado apropiado de acuerdo con la emergencia no deseada en la restauración.



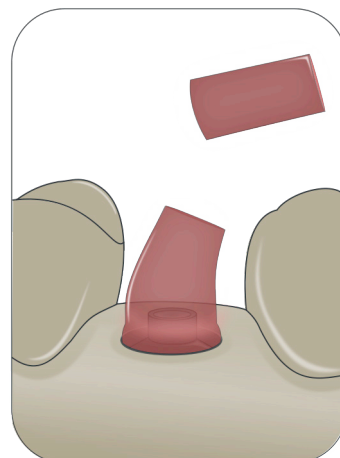
2.
LABORATORIO_ Inserción y orientación del Cilindro Fundible Angulado en el análogo para obtener un canal de acceso en ángulo con un diseño y perfil de emergencia óptimos. Fijación del pilar con tornillo BHS30.



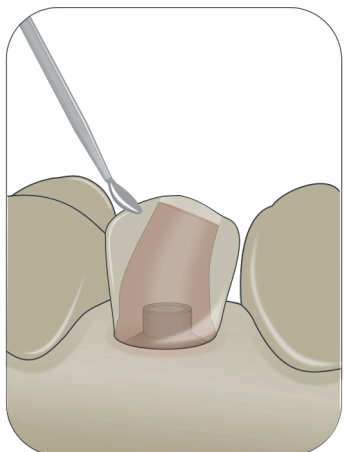
3.
LABORATORIO_ Corte y ajuste del Cilindro Fundible Angulado de acuerdo con la anatomía de la prótesis y su antagonista.



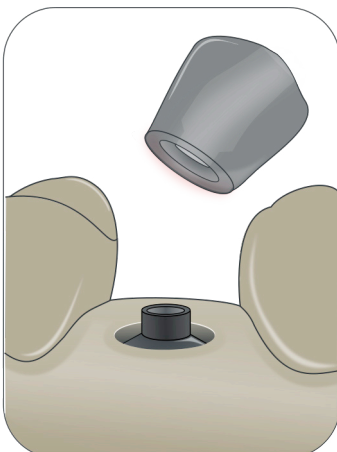4.
LABORATORIO_ Encerado y modelado de la estructura en el Cilindro Fundible Angulado.



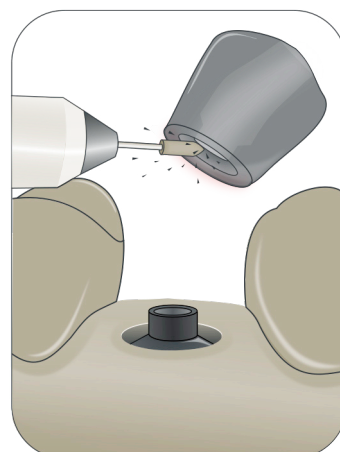
5.
LABORATORIO_ Encerado y modelado de la estructura en el Cilindro Fundible Angulado.




6.
LABORATORIO_ Fundición de metal de la estructura y acabado manual de la conexión del implante para mejorar el ajuste del análogo del implante.

3.0 PROTOCOLOS

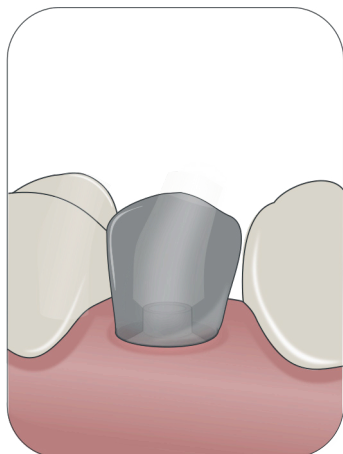
COLADO DIRECTO



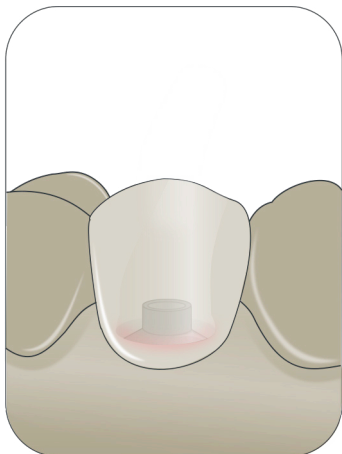7.
CLÍNICA_ Prueba de metal, especialmente en el caso de estructuras múltiples, para confirmar el ajuste de los implantes del paciente y su posición en la boca.



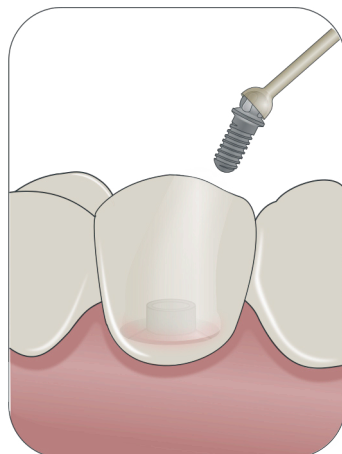8.
LABORATORIO_ Ajustes finales en la estructura, en su caso, restauración estética, pulido y acabado.



9.
CLÍNICA_ Colocación de la prótesis al paciente.

3.0 PROTOCOLOS


SOBRECOLIDADO A BASE CrCo

Productos Requeridos:


Tornillo BHS30
Destornillador BHS30
Base CrCo BHS30
Chimenea Calcinable Angulada 10|20|30°

Materiales:

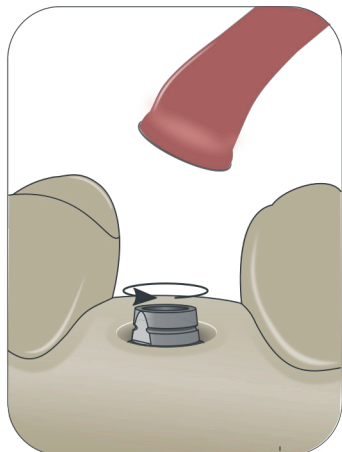
Sobrecolidado en CrCo



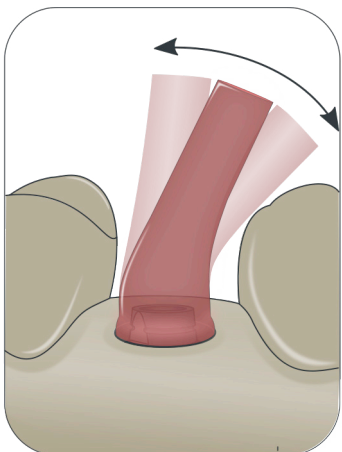
1.
LABORATORIO_ Verifique la posición análoga del implante y la selección del Cilindro Calcinable Angulado apropiado de acuerdo con la emergencia no deseada en la restauración. Acoplamiento de la chimenea a la guía de retención axial en la base BHS30 CrCo.



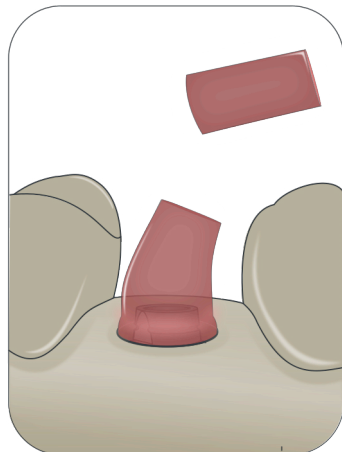
2.
LABORATORIO_ Inserción de la Base BHS30 CrCo + Chimney en el análogo del implante para obtener un canal de acceso en ángulo con un diseño óptimo. Atornillado de la base BHS30 CrCo y ajuste final de la orientación de la chimenea según la posición deseada para el acceso del tornillo.



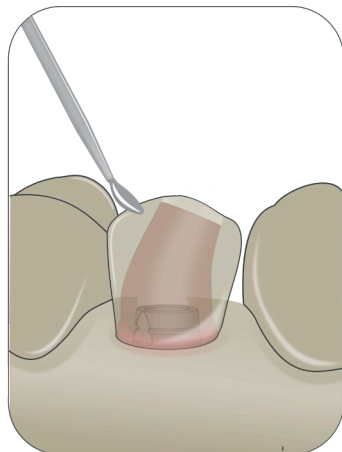
3.
LABORATORIO_ Corte y ajuste de la chimenea angular angulada de acuerdo con la anatomía de la prótesis y su antagonista.



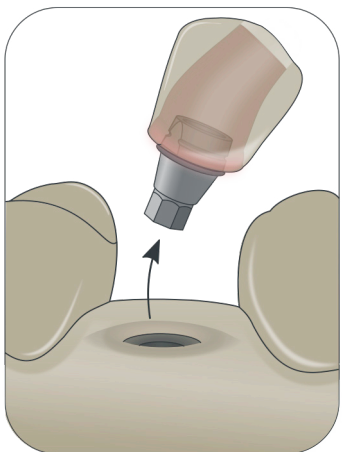4.
LABORATORIO_ Encerado y modelado de la estructura en la chimenea BHS30 CrCo BASE + Chimenea Calcinable Angulada.



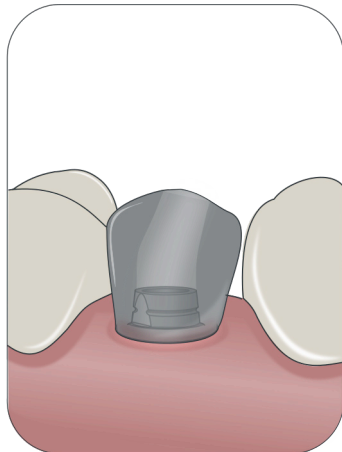
5.
LABORATORIO_ Revestimiento metálico de la estructura.




6.
CLÍNICA_ Prueba de metal, especialmente en el caso de estructuras múltiples, para confirmar el ajuste de los implantes del paciente y su posición en la boca.

3.0 PROTOCOLOS

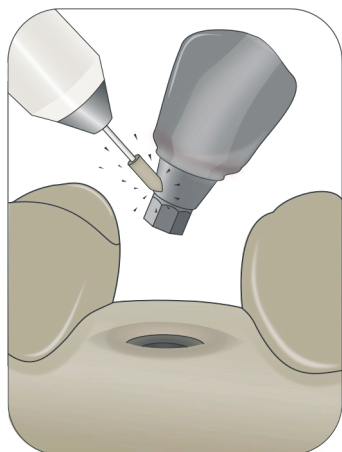
SOBRECOLADO A BASE CrCo



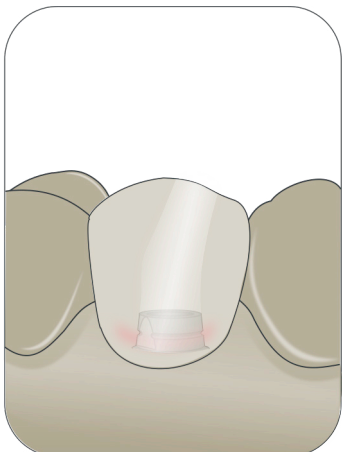7.
LABORATORIO_ Ajustes finales en la estructura, en su caso, restauración estética, pulido y acabado.



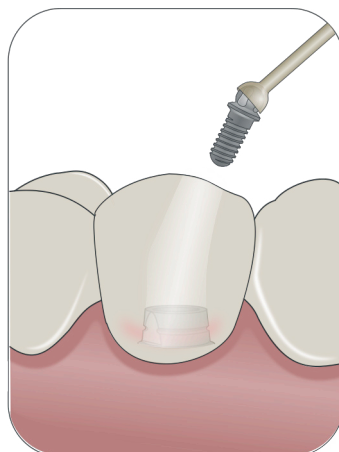8.
LABORATORIO_ Ajustes finales en la estructura, en su caso, restauración estética, pulido y acabado.



9.
CLÍNICA_ Colocación de la prótesis al paciente.

3.0 PROTOCOLOS


COLADO Y SOLDADURA A BASE CrCo

Productos Requeridos:


Tornillo BHS30 Screw
Destornillador BHS30 Screwdriver
Base CrCo BHS30
Chimenea Calcinable Angulada 10|20|30°

Materials:

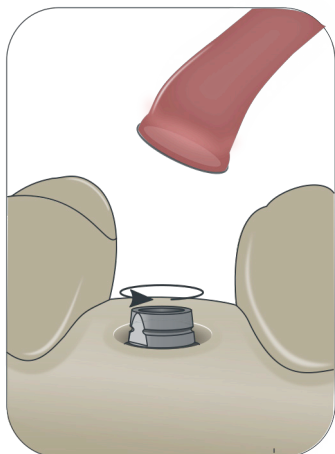
Colado en CrCo



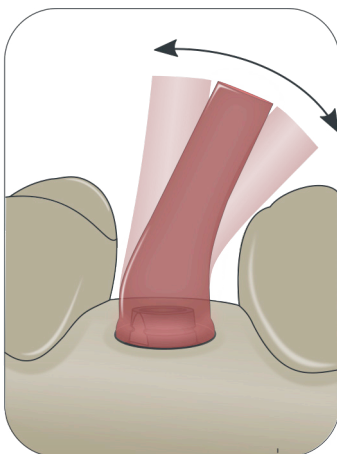
1.
LABORATORIO_ Verificación de la posición analógica del implante y la selección del Cilindro Fundible Angulado apropiado de acuerdo con la emergencia no deseada en la restauración. Acomplamiento de la chimenea a la guía de retención axial en la base BHS30 CrCo.



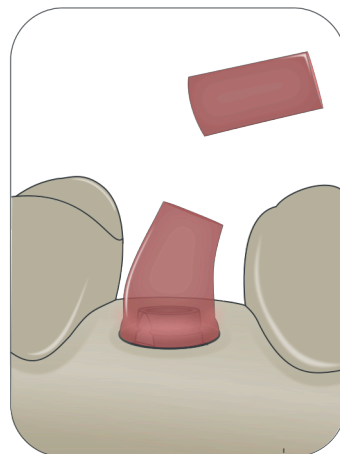
2.
LABORATORIO_ Inserción de la Base BHS30 CrCo + Chimney en el análogo del implante para obtener un canal de acceso en ángulo con un diseño óptimo. Atornillado de la base BHS30 CrCo y ajuste final de la orientación de la chimenea según la posición deseada para el acceso del tornillo.



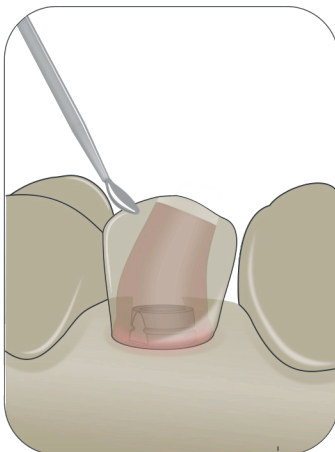
3.
LABORATORIO_ Corte y ajuste de la chimenea angular angulada de acuerdo con la anatomía de la prótesis y su antagonista.



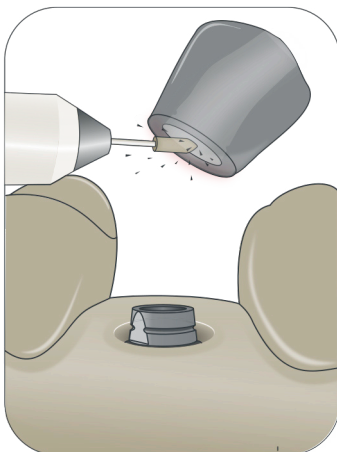4.
LABORATORIO_ Encerado y modelado de la estructura en la chimenea angular angulada.



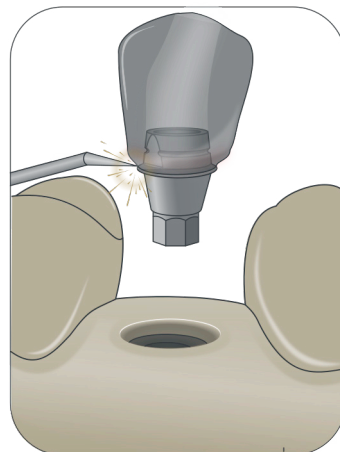
5.
LABORATORIO_ Retirada de la chimenea angular en ángulo con el modelado de la estructura para fundición de metal, dejando la base BHS30 CrCo atornillada al modelo.




6.
LABORATORIO_ Ajuste de la estructura de metal fundido en la Base BHS30 CrCo hasta obtener un ajuste pasivo en el modelo y la soldadura láser perimetral de ambas partes y enviar la Base y la estructura a la Clínica por separado para pruebas de metal de acuerdo con la relación real en la boca.

3.0 PROTOCOLOS

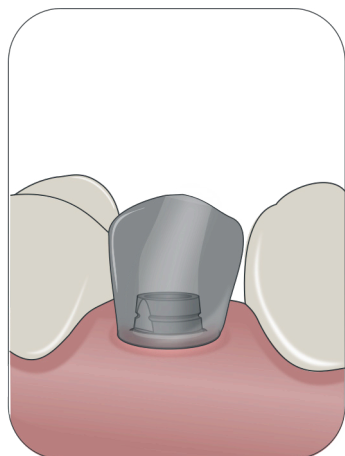
COLADO Y SOLDADURA A BASE CrCo



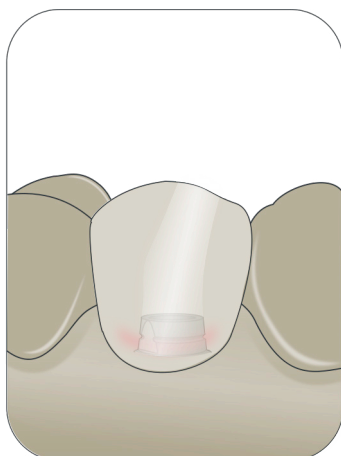7.
CLÍNICA_ Prueba de metal, especialmente en el caso de estructuras múltiples, para confirmar el ajuste de los implantes del paciente y su posición en la boca.
Fijación provisional con ajuste pasivo en la boca y entrega al laboratorio.



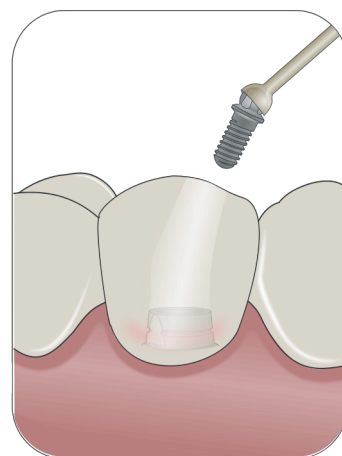8.
LABORATORIO_ Ajustes finales en la estructura, en su caso, restauración estética, pulido y acabado. Reensamblaje de las réplicas de acuerdo con la relación real en la boca y la soldadura perimetral con láser de ambas partes. Restauración estética, pulido y acabado.



9.
CLÍNICA_ Colocación de la prótesis al paciente.

3.0 PROTOCOLOS


COLADO + CEMENTADO EN BASE BHS30 Ti

Productos Requeridos:


Tornillo BHS30
Destornillador BHS30
Base BHS30 Ti
Chimenea Calcinable Calcinada 10|20|30°

Materials:

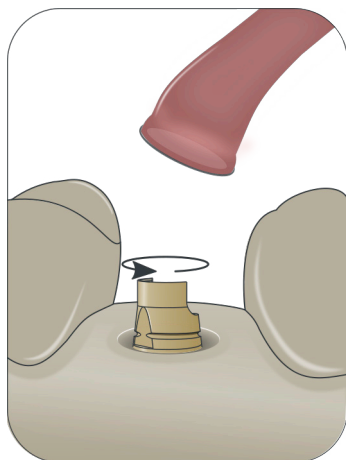
Colado en metal (Ti, CrCo, CrNi, noble...)



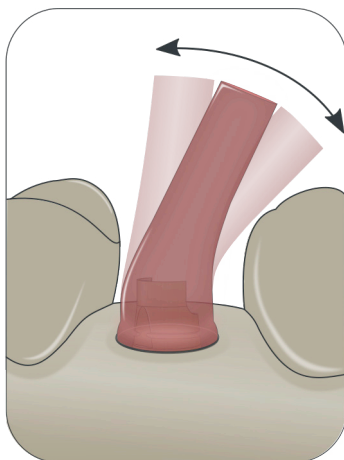
1.
LABORATORIO_ Verifique la posición analógica del implante y la selección del Cilindro Fundible Angulado apropiado de acuerdo con la emergencia no deseada en la restauración. Acoplamiento de la chimenea a la guía de retención axial en la base BHS30 Ti.



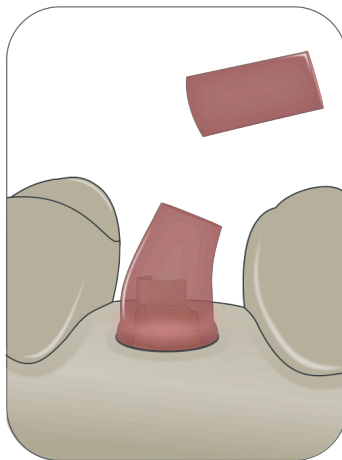
2.
LABORATORIO_ Inserción y orientación de la BHS30 Ti Base + Chimney en el análogo del implante para obtener un canal de acceso en ángulo con un diseño y perfil de emergencia óptimos. Atornillado de la base BHS30 Ti.



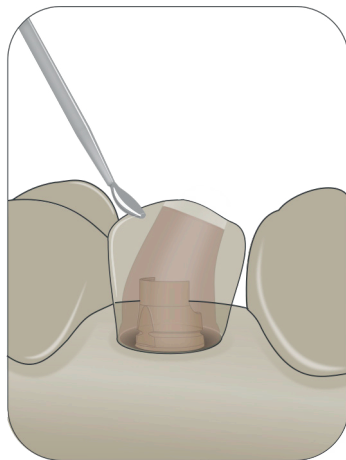
3.
LABORATORIO_ Corte y ajuste de la chimenea angular angulada según la anatomía de la prótesis y su antagonista.



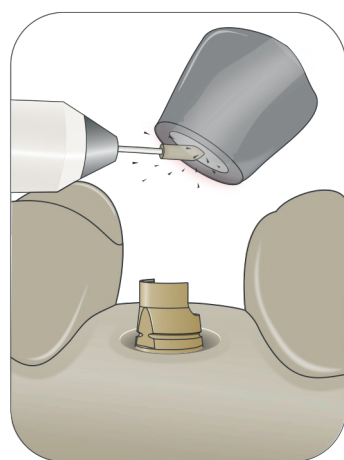4.
LABORATORIO_ Encerado y modelado de la estructura en la chimenea angular angulada.



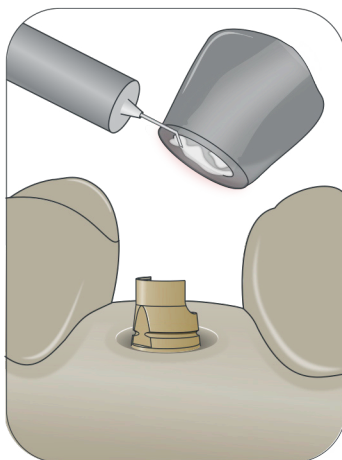
5.
LABORATORIO_ Retirada de la chimenea angular en ángulo con el modelado de la estructura para fundición de metal, dejando la base BHS30 Ti atornillada al modelo.




6.
LABORATORIO_ Ajuste de la estructura de fundición de metal en la base BHS30 Ti hasta obtener un ajuste pasivo en el modelo y cementar ambas partes, expulsando el exceso de cemento a través de los agujeros de revestimiento en la chimenea y enviando la base y la estructura a la clínica por separado para obtener metal prueba de acuerdo con la relación real en la boca.

3.0 PROTOCOLOS

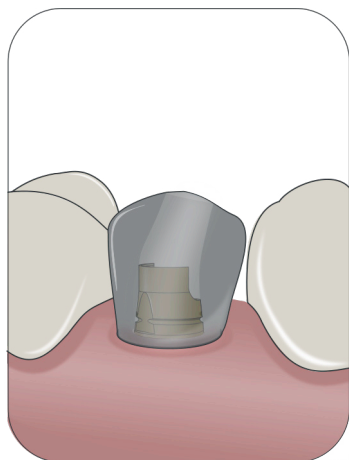
COLADO + CEMENTADO EN BASE BHS30 Ti



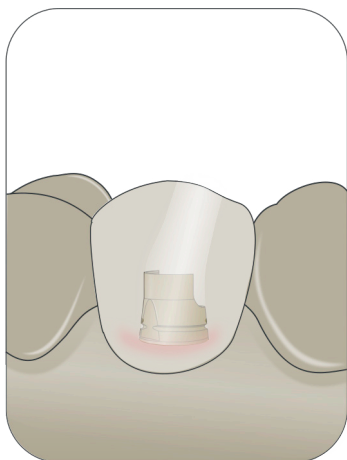7.
CLÍNICA_ Prueba de metal, especialmente en el caso de estructuras múltiples, para confirmar el ajuste de los implantes del paciente y su posición en la boca.
Fijación provisional con ajuste pasivo en la boca y entrega al laboratorio.



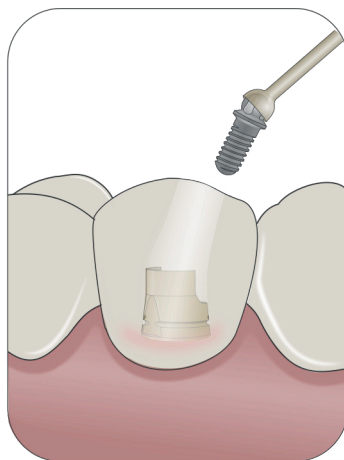8.
LABORATORIO_ Ajustes finales en la estructura, en su caso, restauración estética, pulido y acabado. El reensamblaje de las réplicas de acuerdo con la relación real en la boca y la cementación de ambas partes, expulsando el exceso de cemento a través de los orificios de revestimiento en la chimenea. Restauración estética, pulido y acabado.



9.
CLÍNICA_ Colocación de la prótesis al paciente.

4.0 TABLA DE COMPATIBILIDADES

MARCA	PÁGINAS			MARCA	PÁGINAS		
	COLADO DIRECTO	SOBRECOLDADO BASE CrCo	CEMENTADO BASE Ti		DIRECTO IMPLANTE	SOBRECOLDADO BASE CrCo	CEMENTADO BASE Ti
AB IMPLANTS	6	37	62	IMPLANT DIRECT	22	50	77
ACE	6	37	62	JDENTAL CARE	23	51	78
ADIN	6	37	63	KEYSTONE DENTAL	23	51	78
ALPHABIO	7	38	63	KLOCKNER	24	51	79
ALPHADENT	7	38	64	LEADER	24	51	79
ANCLADEN	8	38	64	MEDENTIS	24	52	70
ANTHOGRYR	8	39	64	MEGAGEN	25	52	80
ARDS	8	39	65	MICRODENT	25	53	80
ASTRA	9	39	65	MIS	26	53	81
AVINENT	9	40	66	MOZO GRAU	27	54	81
BEGO	10	40	66	MPI	27	54	82
BIOGENESIS	10	41	67	NEOBIOTECH	28	54	82
BIOHORIZONS	11	41	67	NEODENT	28	55	82
BIOMET 3i	12	41	68	NOBEL	28	55	83
BIONER	12	42	68	NT TRADING	29	56	83
BTI	13	42	68	OSSTEM IMPLANT	29	56	84
BTK	13	42	69	OSTEOPLUS	30	56	84
B&W	14	43	70	OXTEIN	30	57	84
CAMLOG	15	44	70	PALTOP	31	57	85
CON. SISTEMA PROTESE	15	44	70	PHIBO	31	58	85
CORTEX	16	45	71	RADHEX IMPLANTS	32	58	86
COWELLMEDI	16	45	71	SGS	32	58	86
DENTALTECH	17	45	72	SIGNO VINCES	32	59	86
DENTIS	17	46	72	STRAUMANN	33		86
DENTIUM	17	46	72	SWEDEN & MARTINA	33	59	87
DENTSPLY SIRONA	18	46	73	TRI DENTAL IMPLANTS	34	59	87
DIO IMPLANTS	18	47	73	TRINON	34	59	87
EDISON MEDICAL	18	47	74	ZIACOM	34	60	88
ELITE MEDICA	19	47	74	ZIMMER	35	60	88
EUROTEKNIKA	19	48	74				
GALIMPLANT	20	48	75				
GMI	20	49	76				
GT MEDICAL	21	49	76				
HI TECH	22	50	77				



www.ballheadtechnology.com

(+34) 973 831 391 · info@ballheadtechnology.com